

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj ELEGANTE pro tlakovou terapii nohou+ stehna



Dovozce:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025



Skenován
í pro
různé
jazyky



Přístroj pro tlakovou terapii chodidel a lýtek Mirusens je jednoduchý přístroj pro zlepšení krevního oběhu a odstranění otoků, který se používá doma a v malých rehabilitačních, fyzioterapeutických a wellness ordinacích.

Výhody: - je možné používat pouze v případě, že se jedná o pacienta, který je v kontaktu s pokožkou:

Sada Mirusens se 2 manžetami na nohy stimuluje krevní oběh a tok lymfy v dolních končetinách.

- Odstraňuje otoky různého původu,
- bojuje proti syndromu těžkých nohou,
- ideální pro prevenci křečových žil,
- podporuje hubnutí a boj proti celulitidě,
- odstraňuje bolest způsobenou tzv. "bolestivostí".



Kompresní masáž (tlaková terapie) má na tělo pacienta blahodárný účinek.

- Usnadňuje odtok žilní krve.
- stimulaci oběhového a lymfatického systému, což má za následek zvýšený přísun kyslíku a živin do orgánů.
- zvýšení rychlosti odstraňování produktů rozkladu z těla, odstranění příznaků přetížení, vstřebávání otoků.
- snížení odporu krve v tepnách, čímž se usnadňuje činnost srdce.
- rozšíření krevních a lymfatických cév, čímž se zvyšuje rychlost krevního oběhu.


Díky těmto vlastnostem našla pneumatická kompresní masáž široké uplatnění při léčbě a rehabilitaci. Presoterapii lze provádět denně. Jedno sezení by mělo trvat přibližně 10-20 minut. Již po prvním ošetření lze pocítit lehkost.

Technické údaje:

- Příkon: 220-240 V / 50-60 HZ
- Certifikát: Vlhký proud: 220-250 V: CE ROHS FDA
- Masážní oblast: + lýtko
- 6 programů, 3 stupně intenzity, nízká a vysoká teplota.
- Tři tlačítka pro snadné ovládání tohoto masážního přístroje s ručním ovladačem.
- Široká nastavitelná manžeta na nohy pro snadné nastavení.
- Malý ovladač s několika programy.

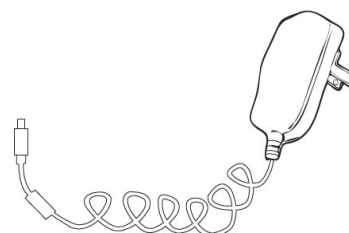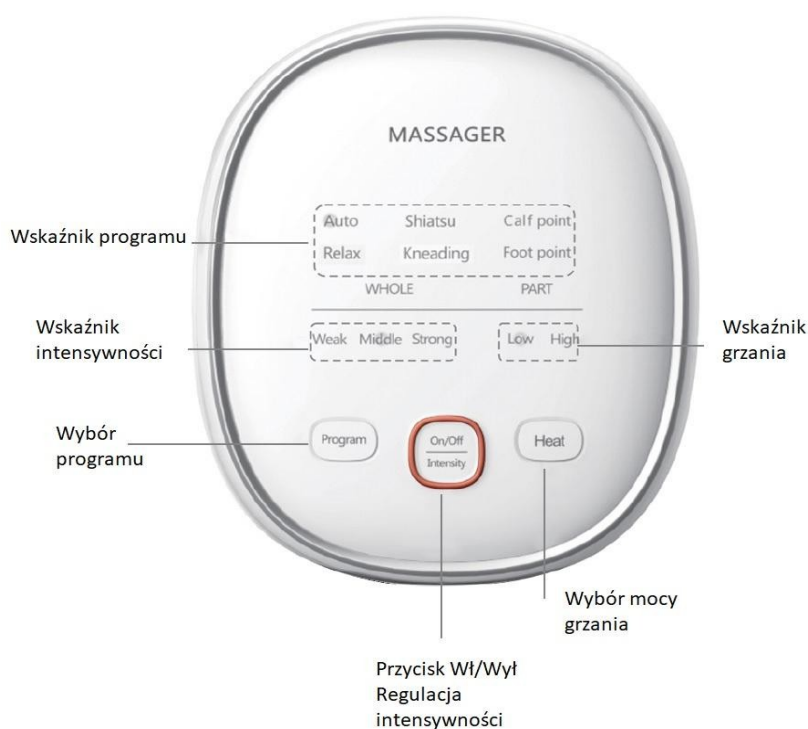

Adaptér/napájení

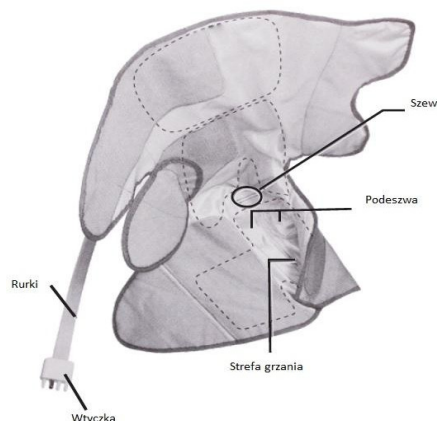



Stiskněte tlačítko , pro zapnutí/vypnutí přístroje(Po zapnutí přístroj automaticky nastaví ohřev na NÍZKÝ a intenzitu na Slabý.

Po dalším stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka změny intenzity: Slabá - Weak , Střední - Medium, Silná - Strong, Vypnuto.

Vyhřívání se zapne po 5 sekundách. Poté lze nastavit libovolnou hodnotu.

Tlačítko Program mění typ a polohu masáže: Auto, Relax, Shiatsu, Kneading, Leg point, Foot point.

Tlačítko Heat - program mění sílu ohřevu - Low (slabý), High (silný).

Programy				Ošetřované oblasti	
AUTO	Hnětení	Shiatsu	Relax	Lýtka	Chodidlo
Zahrnuje všechny programy. Masáž používá stlačování vzduchu.	Hnětení od prstů na nohou až po lýtko. Používá Kompresi vzduchu.	Kompresní masáž z použití komprese vzduchu	Jemná masáž s pomocí kompresní vzduchu	Masáž lýtek pomocí kompresní masáže a hnětení.	Masáž chodidel kompresní masáž a hnětení.

Pozor

Vyhnete se přímému kontaktu výrobku s pokožkou, je lepší jej používat s vysokými ponožkami, aby se předešlo ošetření pokožky, abyste uvolnili lýtkové svaly.


Návod k použití

Dobře si omotejte prsty, kotník a lýtko a pevně přilepte suchý zip.

Připojte zástrčku k zařízení

Suchý zip se může během léčby mírně pohybovat.

Čím silnější je ponožka nebo kamaše, tím slabší je pocit z léčby.

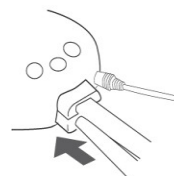

Masáž

Doba masáže: 10- 20 min. jednou denně (nadměrná stimulace svalů a nervů bude mít při delším používání opačný účinek).

Skladování: V případě, že je masážní pomůcka v pořádku, je nutné ji skladovat:

1 Udržování: Odstraňte adaptér z kontaktu, z přístroje a ze zástrčky vzduchové hadice.

2 Připevněte suchý zip podle obrázku a po mírném ohnutí vzduchovou hadici zasuňte.

Upozornění:

Při vytahování zástrčky netahejte silně za vzduchovou hadičku.



Během skladování neohýbejte kabel od ovládacího panelu a od napájecí jednotky.

Vzduchový a napájecí kabel se nesmí zalomit. Přístroj neumísťujte na místo přístupné dětem.

Neumisťujte jej na místo s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním zářením. Nepokládejte nic na ovládací panel a nebalte jej například do fólie (jinak by mohlo dojít ke vzniku stop nebo změně barvy).

K čištění nepoužívejte ředidla, těkavé oleje ani alkohol (Mohou způsobit poškození nebo změnu barvy.) .

Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení.

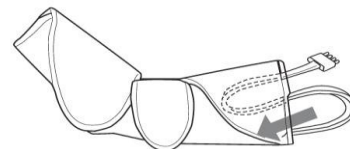
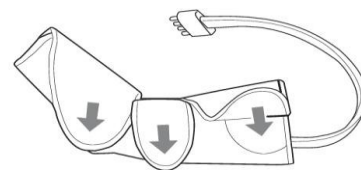


Když je suchý zip znečištěný, vyčistěte jej jemně párátkem apod. Do vzduchového kanálu nekládejte žádné předměty.

Přístroj nepoužívejte, když je tělesná teplota zvýšená, je slabá a během těhotenství a po, porodu.



Velikost chodidla: přibližně 20 cm - 27,94 cm Velikost nohy: přibližně 20 cm - 48 cm.

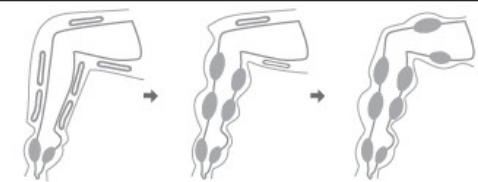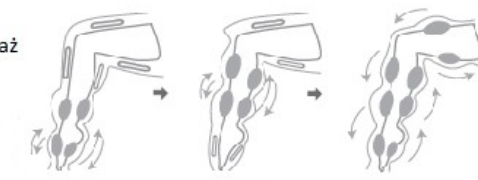	Program	Schemat masáže
Ogólne zmęczenie mięśni	Ugniatanie	Schemat działania masażu 
Rozluźnienie mięśni	Masaż	Mocny masaż 
Pierwsze użycie, Przed spaniem, po ćwiczeniach lub długim spacerze.	Relaks	Delikatny masaż 

POZNÁMKA!

Lidé, kteří se léčí nebo mají následující příznaky, by se měli před použitím zařízení poradit s lékařem.

1. Lidé s kardiostimulátory, kteří jsou například náchylní k elektrickému rušení.
2. Osoby se zhoubnými nádory.
3. Osoby s poruchami krevního oběhu v nohou a chodidlech.
4. Osoby s onemocněním srdce.
5. Těhotné ženy a ženy po porodu.
7. Lidé se smyslovým postižením v důsledku poruch periferního krevního oběhu, jako je cukrovka.
8. Osoby s osteoporózou.
9. Osoby zraněné v oblasti masáže.
10. Osoby s tělesnou teplotou 38° C nebo vyšší (s horečkou).
11. Pacienti s trombózou, závažnými aneurysmaty, akutními žilními nádory, různými kožními záněty nebo kožními infekcemi, včetně těch, kteří trpí celulitidou, může dojít ke zhoršení příznaků.

Před použitím zkontrolujte, zda není tkanina poškozena. * V opačném případě hrozí možnost poranění, úrazu elektrickým proudem nebo popálení nízkým napětím a teplotou. *

Ujistěte se, že používáte síťový zdroj 100~ 240V. Pokud zařízení nereaguje nebo pociťujete nepříjemné pocity během ošetření, přestaňte jej používat a okamžitě odpojte napájení. Zkontrolujte zástrčku napájecího zdroje a ujistěte se, že je zapojena do zásuvky. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Při používání funkce ohřevu se přístroje nedotýkejte delší dobu, jinak může dojít k popálení nízkou teplotou. U následujících osob může po použití dojít k zarudnutí. Pokud zarudnutí neustoupí po 1 hodině, vyhledejte lékaře.

Vodiče a kabely napájecího zdroje neobrábějte, nadměrně neohýbejte, netahejte za ně ani je nekrúťte. Nepokládejte na něj těžké předměty.

Zařízení nepoužívejte v následujících situacích: * Napájecí jednotka nebo zástrčka vzduchového vedení je poškozená.

* Zástrčka napájecího zdroje je uvolněná. * Když je zástrčka vzduchové hadice zasunuta do hlavní jednotky, může být uvolněná, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem, požár nebo poruchu v důsledku zkratu.

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky mokřima rukama. Kontrolujte dobu masírování.

Při vytahování napájecího zdroje netahejte za kabel a vytáhněte tělo adaptéru. Netahejte za vzduchovou hadici

při odpojování vzduchové hadice. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Během používání nestůjte ani nechod'te, jinak může dojít k pádu. Spotřebič používejte v poloze, která je pro uživatele pohodlná. V opačném případě může dojít k poruše nebo úrazu elektrickým proudem. Zástrčku kabelu nezasouvejte ani nevyjímejte z masážního přístroje mokřýma rukama, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Během masáže nevytahujte napájecí zdroj ani neodpojujte vzduchovou šňůru, jinak může dojít k jejímu způsobit zkrat. Při skladování neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní jednotky ani neomotávejte vzduchovou trubicí kolem pásu.

Nepoužívejte přístroj na místě s vysokou vlhkostí, například v koupelně. Nevystavujte hlavní jednotku ani pásek vodě, což může způsobit poškození jednotky nebo úraz elektrickým proudem. Při vyjmutí napájecího adaptéru jej odpojte, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej, w V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Provoz přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem, aby se předešlo nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávat mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

musí být použité elektrické spotřebiče shromažďovány odděleně a odváženy do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.