

QUICK START GUIDE

Review full instruction book prior to first use.

1 FIRST USE


1. Remove reservoir.
2. To remove battery door, twist, and pull.
3. Insert 3AA batteries. Included.



4. To replace battery door, line-up arrows, push and twist.



5. Insert tip firmly until it clicks into place.

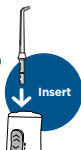

6. Fill reservoir with warm water.



2 START WATER FLOSSING

TO AVOID MESS: PLACE THE TIP IN YOUR MOUTH BEFORE TURNING UNIT ON

Slide power switch to low(I) or high(II) position. Start with lowest setting and increase to your liking.



3 LEAN OVER SINK

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.



4 TECHNIQUE

Aim water just above the gumline at a 90 degree angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.



5 HOW TO VIDEO

Visit waterpik.com/vid02

Register your product and receive over \$50 in savings.
waterpik.com/registration

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

Revise el manual de instrucciones por completo antes del primer uso.

1 PRIMER USO

1. Quite el depósito de agua.
2. Para quitar la puerta de la batería, gírela y jale.
3. Introduzca 3 pilas AA (incluidas).



4. Para volver a colocar la tapa de las pilas, alinee las flechas, empuje y gire.
5. Inserte el cabezal con firmeza hasta que encaje en su lugar.



2 INICIE EL IRRIGADOR BUCAL


**EVITE DERRAMES:
COLOQUE EL CABEZAL EN
LA BOCA ANTES DE
ENCENDER LA UNIDAD**

Deslice el interruptor de encendido hacia la posición baja(I) o alta(II). Inicie con el ajuste más bajo e increméntelo según su preferencia.




3 INCLÍNESE SOBRE EL LAVABO

Cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.

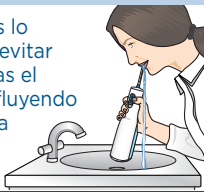

4 TÉCNICA

Apunte el agua justo por encima de las encías en un ángulo de 90 grados. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.

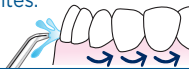

5 CÓMO VER VIDEOS

Visite waterpik.com/vid02

Registre su producto y reciba más de USD 50 en descuentos.
waterpik.com/registration