

## Manuals+

[Q & A](#) | [Deep Search](#) | [Upload](#)

manuals.plus /

› [Celestron](#) /

› [Celestron LCD Digital Microscope II User Manual](#)

## Celestron 44341

# Celestron LCD Digital Microscope II User Manual

Model: 44341

Brand: Celestron

[Overview](#)

[Features](#)

[Setup](#)

[Operation](#)

[Maintenance](#)

[Troubleshooting](#)

[Specifications](#)

[Warranty &  
Support](#)

## 1. PRODUCT OVERVIEW

The Celestron LCD Digital Microscope II is a versatile biological microscope designed for educational, laboratory, and hobbyist use. It features a 3.5-inch full-color LCD screen that rotates 180 degrees, allowing for comfortable viewing and collaborative learning. Equipped with a 5MP digital camera, it can capture high-resolution still images and 30 fps video, saving directly to an included SD card. The microscope offers magnification from 40x to 1600x, utilizing 4x, 10x, and 40x objective lenses with a 10x digital eyepiece and an additional 4x digital zoom on the LCD. Its adjustable mechanical stage, dual LED illumination, and 6-position filter wheel provide precise control and enhanced specimen viewing. It can be powered by an AC adapter or 4 AA batteries for portability.



Figure 1: Celestron LCD Digital Microscope II.

## 2. KEY FEATURES

---

- **3.5" LCD Screen with 180° Rotation:** Allows for comfortable, eyepiece-free viewing and easy sharing of observations.
- **5MP Digital Camera with Video Recording:** Captures high-resolution still images and smooth 30 fps video directly to an SD card.
- **Magnification up to 1600x:** Features 4x, 10x, and 40x objective lenses, a 10x digital eyepiece, and 4x digital zoom on the LCD.
- **Adjustable Mechanical Stage with Dual Illumination:** Provides precise slide positioning and bright, adjustable top and bottom LED lighting for optimal viewing of various specimens.
- **2 GB SD Card and TV Output:** Enables saving images/videos and displaying them on a TV or monitor via AV output.
- **Dual Power Options:** Operates on 4 AA batteries (not included) for field use or via the included international AC adapter.
- **Included Accessories:** Comes with 5 prepared slides, a dust cover, and a rugged canvas carrying case.

## 3. SETUP GUIDE

---

### 3.1 Unboxing and Contents

Carefully remove all components from the packaging. The microscope comes securely packed in a canvas carrying case with a strap, protected by foam cushioning. Verify that all listed accessories are present.



Figure 2: Included accessories: microscope, carrying case, power adapter, USB cable, AV cable, dust cover, prepared slides, and SD card.

### 3.2 Powering the Microscope

The microscope can be powered using the included AC adapter or 4 AA batteries (not included). For continuous use, connect the AC adapter to the power input port on the microscope and plug it into a wall outlet. If using batteries, ensure they are correctly inserted into the battery compartment.

### 3.3 Initial Power On

Once powered, press the power button located on the back of the LCD screen to turn on the display. The screen will illuminate, and you should see the Celestron logo followed by the live view. Ensure the bottom light switch is also turned on for proper illumination of specimens.

Your browser does not support the video tag.

## **4. OPERATING INSTRUCTIONS**

---

### **4.1 Placing a Specimen Slide**

Place a prepared slide onto the mechanical stage. Use the stage adjustment knobs (located on the side) to center the specimen directly under the objective lens and above the bottom LED light. The mechanical stage allows for precise movement in X and Y directions.



Figure 3: Specimen slide placed on the mechanical stage.

## 4.2 Adjusting Magnification

Rotate the objective turret to select the desired magnification (4x, 10x, or 40x). For higher magnification, use the digital zoom buttons on the LCD screen. Adjust the coarse and fine focus knobs (located on the main body) to bring the specimen into sharp focus on the LCD screen.





Figure 4: Objective lenses and focus controls.

### 4.3 Capturing Images and Video

Insert the included 2GB SD card into the SD card slot on the side of the LCD unit. To capture a still image, press the dedicated capture button. To record video, press the video record button. The captured media will be saved directly to the SD card.



Figure 5: SD card slot and connectivity ports.

### 4.4 Connecting to External Displays

The microscope features AV and USB 2.0 output ports. Use the provided AV cable to connect the microscope to a television or monitor for large-scale viewing. Use the USB cable to connect to a computer for image transfer or live viewing (software may be required, refer to the full user manual PDF for details).

## 5. CARE AND MAINTENANCE

Proper care ensures the longevity and performance of your Celestron microscope. Always handle the instrument with care, as it is a precision optical device.

- After use, remove any specimens from the stage.
- Turn off the illuminator switch and the LCD monitor. Unplug the power cord if using AC power.
- Always place the plastic bag or dust cover over the microscope when not in use or when being stored.
- Store the microscope in a dry and clean place.
- Avoid direct sunlight exposure to prevent damage.
- When moving, carry the microscope by the "arm" with one hand and support the base with the other.
- Clean outside surfaces (metal and plastics) with a moist cloth. Always unplug any cords before cleaning.
- Never clean optical surfaces with cloth or paper towels as they can scratch easily. Use a camel's hair brush or an air blower for dust.
- For fingerprints on optical surfaces, use a lens cleaning agent and tissue available at most photo outlets. Do not rub in circles; use gentle strokes.
- Never disassemble or clean internal optical surfaces. This should only be done by qualified technicians.
- Handle glass specimen slides with care as edges can be sharp.

### CARE, MAINTENANCE, AND WARRANTY

Your Celestron microscope is a precision optical instrument and should be treated with care at all times. Follow these care and maintenance suggestions and your microscope will need very little maintenance throughout its lifetime.

- When you are done using your microscope, remove any specimens left on the stage.
- Turn off the illuminator switch.
- Turn off the LCD monitor.
- Unplug the power cord.
- Always place the plastic bag or dust cover over the microscope when not in use or when being stored.
- Store the microscope in a dry and clean place.
- Be very careful if using your microscope in direct sunlight to prevent damage to the microscope or your eyes.
- When moving your microscope, carry it by the "arm" with one hand and not by the focuser knob, LCD monitor, etc. Then, put your other hand under the base for support.
- Clean the outside surfaces (metal and plastics) with a moist cloth.
- Always unplug any cords before cleaning.
- Never clean optical surfaces with cloth or paper towels as they can scratch optical surfaces easily.
- Blow off dust with a camel's hair brush or an air blower from optical surfaces.
- To clean fingerprints off of optical surfaces, use a lens cleaning agent and lens tissue available at most photo outlets. When cleaning, do not rub in circles, as this may cause streaks and scratches to occur.
- Never disassemble or clean internal optical surfaces. This should be done by qualified technicians at the factory or other authorized repair facilities.
- When handling glass specimen slides, use care as the edges can be sharp.

Figure 6: Detailed care and maintenance guidelines.

## 6. TROUBLESHOOTING

- **No image on LCD screen:**
  - Ensure the microscope is properly powered (AC adapter or fresh AA batteries).
  - Check that the LCD screen's power button (on the back) is pressed.
  - Verify that the bottom illuminator switch is turned on.
  - Adjust focus knobs to bring the image into view.
  - Ensure a specimen slide is correctly positioned on the stage.

- **Image is blurry or out of focus:**
  - Use the coarse and fine focus knobs to adjust clarity.
  - Ensure the objective lens is correctly rotated into position.
  - Check if the specimen slide is clean and free of smudges.
- **"Low Battery" message appears:**
  - Replace the 4 AA batteries with new ones, or connect the AC adapter.
- **Cannot capture images/video:**
  - Ensure an SD card is inserted into the slot.
  - Check if the SD card has sufficient free space.
  - Verify the SD card is not locked (read-only).
- **No image on external TV/monitor:**
  - Ensure the AV cable is securely connected to both the microscope and the TV/monitor.
  - Select the correct input source (e.g., AV1, Video) on your TV/monitor.

## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Imaging Sensor	5MP CMOS, 10x magnification in lieu of eyepiece
AC Adapter	Input universal 100 to 240 volt, 50/60 Hz, 4 plug multi-country
USB Connection	2.0, 1.5 m cable included
Magnification (low power)	40x
Magnification (high power)	400x (1600 with digital zoom)
Continuous Video (VGA)	Yes, 30 fps
Included Accessories	1 GB SD memory card, Canvas Carrying Case, Dust Cover, 5 Prepared Slides, 4-Plug AC Adapter
Objective Nosepiece	3 position with click stop
Objective Lens Diameter	3 achromatic - 4x, 10x, 40x
Condenser Lens	+HEADER+ 0.65
Illumination	Upper and lower, built-in adjustable LEDs
Stage	Fully mechanical with metal clips, 88mm x 88mm (3.5" x 3.5")

Dimensions	170mm x 140mm x 330mm (6.7" x 5.5" x 13")
Weight	56 oz (1600 g) / 6.5 pounds
LCD Screen	High definition, 320 x 240 pixels resolution, 90mm (3.5") with 4x digital zoom, 262K colors
Filter Wheel	6 position - red, blue, green, 1mm, 3mm, 6mm aperture
Course Focuser	Yes - smooth, single motion
Batteries	4 AA (User supplied - up to 3 hours of use)

Specifications	
Imaging Sensor	5MP CMOS 1/5", 10x magnification in lieu of eyepiece
AC Adapter	Input universal 100 to 240 volt, 50/60 Hz, 4 plug multi-country
USB Connection	2.0, 1.5 m cable included
Magnification (low power)	40x
Magnification (high power)	400x (1600 with digital zoom)
Continuous Video (VGA)	Yes, 30 fps
Included Accessories	1 GB SD memory card
Objective Nosepiece	3 position with click stop
Objective Lens Diameter	3 achromatic - 4x, 10x, 40x
Condenser Lens	+HEADER+ 0.65
Illumination	Upper and lower, built-in adjustable LEDs
Stage	Fully mechanical with metal clips, 88mm x 88mm (3.5" x 3.5")
Dimensions	170mm x 140mm x 330mm (6.7" x 5.5" x 13")
Weight	56 oz (1600 g)
LCD Screen	High definition, 320 x 240 pixels resolution, 90mm (3.5") with 4x digital zoom, 262K colors
Filter Wheel	6 position - red, blue, green, 1mm, 3mm, 6mm aperture
Course Focuser	Yes - smooth, single motion
Batteries	4AA (User supplied- up to 3 hours of use)

Figure 7: Detailed technical specifications.

## 8. WARRANTY AND SUPPORT


Celestron provides a 2-Year US Warranty for this product, ensuring peace of mind with your purchase. Additionally, unlimited support is available from their team of US-based experts. For detailed warranty information, please refer to the official Warranty PDF document provided with your product or available on the Celestron website.

For further assistance or to download the complete user manual, please visit the official Celestron support page or refer to the documents section on the product's Amazon listing.

[User Manual \(PDF\)](#)

[Warranty \(PDF\)](#)

## Related Documents - 44341

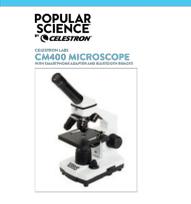 <p>INSTRUCTION MANUAL MODEL #44349</p>	<p><a href="#">Celestron TetraView LCD Digital Microscope Instruction Manual</a></p> <p>Comprehensive instruction manual for the Celestron TetraView LCD Digital Microscope (Model #44349), covering setup, operation, digital imaging, specifications, troubleshooting, and care. Features a 4.3-inch LCD screen and 40x-1600x magnification.</p>
 <p>Microscope Instruction Manual Models 4010, 4020 and 4030</p>	<p><a href="#">Celestron Microscope Instruction Manual: Models 4010, 4020, 4030 - User Guide</a></p> <p>Comprehensive instruction manual for Celestron microscopes, covering models 4010, 4020, and 4030. Includes assembly, operation, focusing, care, maintenance, and warranty information for your Celestron microscope.</p>
 <p>POPULAR SCIENCE CELESTRON CM400 MICROSCOPE INSTRUCTION MANUAL MODEL #44340</p>	<p><a href="#">Celestron Labs CM400 Microscope Instruction Manual</a></p> <p>Instruction manual for the Celestron Labs CM400 Microscope, including setup, operation, care, maintenance, and use of the smartphone adapter and Bluetooth remote.</p>
 <p>CELESTRON HD DIGITAL MICROSCOPE IMAGER QUICK SET-UP GUIDE MODEL #44422</p>	<p><a href="#">Celestron HD Digital Microscope Imager Quick Set-Up Guide</a></p> <p>A quick set-up guide for the Celestron HD Digital Microscope Imager, explaining its features, installation, software usage, and care instructions.</p>
 <p>CELESTRON INFINIVIEW QUICK START GUIDE MODEL #44360</p>	<p><a href="#">Celestron InfiniView LCD Digital Microscope Quick Start Guide</a></p> <p>A quick start guide for the Celestron InfiniView LCD Digital Microscope, model #44360, covering setup, battery installation, and basic operation in multiple languages.</p>
 <p>CELESTRON 5MP DIGITAL MICROSCOPE IMAGER QUICK SETUP GUIDE MODEL #44422</p>	<p><a href="#">Celestron 5MP Digital Microscope Imager Quick Setup Guide</a></p> <p>Quick setup guide for the Celestron 5MP Digital Microscope Imager (Model #44422), covering contents, installation, connection, and usage. Includes warranty and FCC information.</p>



[\[pdf\]](#) User Manual Instructions Diagram


44341 LCD DigMicro2 Manual Celestron Digital Microscope II agenaastro media documents

LCD Digital Microscope II INSTRUCTION Manual Model **#44341** English Introduction

Thank you for purchasing the Celestron LCD Digital Microscope with a 3.5 monitor.

Your microscope is a precision optical instrument, made of the highest quality materials to ensure durability and long life. It is desig...

lang:en score:40 filesize: 9.5 M page\_count: 40 document date: 2012-10-08

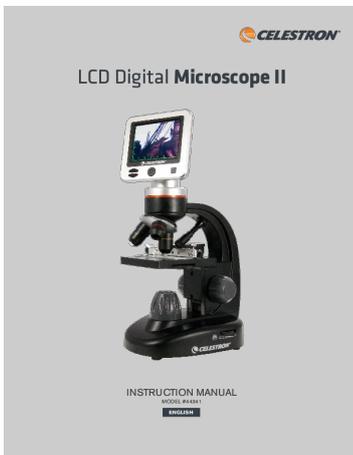

[\[pdf\]](#) User Manual Instructions Diagram


44341 LCD Digital Microscope II Manual 5lang indd Web celestron site support files s3 amazonaws |||

LCD Digital Microscope II INSTRUCTION MANUAL MODEL **#44341** ENGLISH

INTRODUCTION Thank you for purchasing the Celestron LCD Digital Microscope II

with a 3.5 monitor. Your microscope is a precision optical instrument, made of the highest quality materials to ensure durability and long life. It is de...

lang:en score:36 filesize: 1.72 M page\_count: 40 document date: 2019-11-07

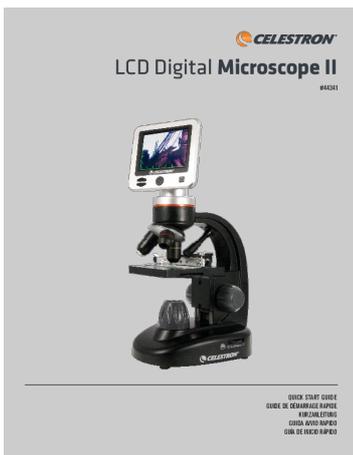

[\[pdf\]](#) User Manual Quick Start Guide Guide

44341 LCD Digital Microscope II QSG Eng indd Microsco Index of 2021 01 Manual astronomyplus |||

LCD Digital Microscope II **#44341** QUICK START GUIDE GUIDE DE DMARRAGE

RAPIDE KURZANLEITUNG GUIDA AVVIO RAPIDO GUA DE INICIO RPIDO LCD

Digital Microscope II Quick Start Guide- Model **#44341** Thank you for purchasing the

Celestron LCD Digital Microscope II. Your microscope is a precision optical inst...

lang:en score:35 filesize: 1.46 M page\_count: 12 document date: 2019-10-14

**Celestron 44341 Mikroskop cyfrowy LCD II**  
 Indeks: 250730 Producent: CELESTRON Kod producenta: 44341  
 Cena: 2,435.39 zł

**Opis**

**Celestron 44341 Mikroskop cyfrowy LCD II**  
 Producent: Celestron

To profesjonalny cyfrowy biologiczny mikroskop z wbudowaną kamerą cyfrową 5 MP i kolorowym ekranem LCD TFT 3,5 cala. Dzięki pełnej regulowalności obrotów mechanicznych oraz ciębnemu łańcuchowi z 3 stopniami mocy (4x, 10x, 40x), łatwo osiągnąć najwyższą precyzję i wygodę w pracowni. Należy używać w przyrodniczych badaniach i zajęciach.

Mikroskop cyfrowy Celestron jest wyposażony w 4 tryby zoom cyfrowy do powiększenia do 1600x oraz celownik pomiarowy do pomiarowania rozmiarów organizmów. W zestawie znajduje się również 1 GB karty SD, dzięki której zamocowane do SD zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Mikroskop został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ergonmii. Dostępne również opcje personalizacji, w tym możliwość pomiaru trybu do przetwarzania z pakietem na ramie, 5 przystosowanych do 4 trybów oraz regulowalność adaptera AC.

To doskonały wybór dla profesjonalistów i amatorów. Mikroskop cyfrowy Celestron jest nie tylko funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu, ale też świetnie wygląda dzięki połączeniu koloru czarnego z czerwonym. Nie zawiera żadnych części ze stali nierdzewnej ani drewna.

- Profesjonalny cyfrowy biologiczny mikroskop. Kolorowy ekran LCD TFT 3,5" z oprogramowaniem pokładowym.
- Wbudowana kamera cyfrowa 5 MP i tryb zdjęć zbliżony w wysokiej rozdzielczości i wideo 30 klatk./s. W pełni regulowany stop mechaniczny dla łatwego przetwarzania.
- Ciężarówka obrotowa 3 360° zapewnia łatwe ustawianie zdjęć. Obrotowa tarcza ciębnego z 3 stopniami mocy (4x, 10x, 40x). Czujnik kamery. Światło tylne (dostępny w opcji). Wyświetlacz mocy 40 x 100 x 400 μm.
- 4 tryby zoom cyfrowy do powiększenia do 1600x. Celownik pomiarowy do pomiarowania rozmiarów organizmów o 1 GB karty SD w zestawie. Dostępny również adapter do SD zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Wyświetlacz TV do wyświetlania na dużych rozdzielczościach w klasie lab. laboratoryjnej.
- Łatwo osiągnąć 1 GB karty SD, dzięki przystosowaniu trybów pomiaru trybu do przetwarzania z pakietem na ramie, 5 przystosowanych do 4 trybów i regulowalność adaptera AC.

- waga produktu: 6,5 pound
- marka: Celestron
- typ: Digital Microscope Mikroskop, foto, naukowe, edukacyjne, laboratoryjne, 6552, 450009, nie rozprzestr. Celestron, (18, 5x2), podgrz. 26x100, celestron, 1000-37056, dzieci, szkolna, 10x20, podobna, dach, pryzmat, pasek, celownik, teleskopowa, 10x
- numer katalogowy: 44341
- przedmiot: 18, 5x2, 26x100, 1000-37056, 10x20, podobna, dach, pryzmat, pasek, celownik, teleskopowa, 10x
- producent: Celestron
- numer modelu: 44341
- dostawca: zaobserwował rozpoznawanie dla: not\_applicable

[pdf]

Celestron 44341 Mikroskop cyfrowy LCD II Sklep internetowy stylem pl celestron mikroskop lcd ii 250730 upload files product |||

Celestron **44341** Mikroskop cyfrowy LCD II Indeks: 250730 Producent: CELESTRON Kod producenta: **44341** Cena: 2,435.39 zł Opis Celestron **44341** Mikroskop cyfrowy LCD II Producent: Celestron To profesjonalny cyfrowy biologiczny mikroskop z wbudowaną kamerą cyfrową 5 MP i kolorowym ekranem LCD TFT 3,5 cala. Dz... lang:pl score:33 filesize: 502.69 K page\_count: 3 document date: 2023-05-14

**CELESTRON**

**LCD Digital Microscope II**



INSTRUCTION MANUAL  
 MODEL #44341

[pdf] User Manual Instructions Diagram

44341 LCD DigMicro2 Manual Eng2015 indd 12039867531294 costco co uk medias sys master hde hbd LCD Digital Microscope II INSTRUCTION MANUAL MODEL #44341 ENGLISH INTRODUCTION Thank you for purchasing the Celestron LCD Digital Microscope with a 3.5 monitor. Your microscope is a precision optical instrument, made of the highest quality materials to ensure durability and long life. It is desig... lang:en score:32 filesize: 1.61 M page\_count: 40 document date: 2015-02-10

**CELESTRON**

**LCD Digital Microscope II**



INSTRUCTION MANUAL  
 MODEL #44341

[pdf] User Manual Instructions Diagram

44341 LCD DigMicro2 Manual Eng2015 indd Digital Microscope II Thank you for purchasing the Celestron with a 3 5 monitor Your microscope is precision optical instrument made of highest quality materials to ensure durability and long life It designed give lifetime enjoyment minimal amount maintenance A1cp62awvfL images na ssl amazon I LCD Digital Microscope II INSTRUCTION MANUAL MODEL #44341 ENGLISH INTRODUCTION Thank you for purchasing the Celestron LCD Digital Microscope with a 3.5 monitor. Your microscope is a precision optical instrument, made of the highest quality materials to ensure durability and long life. It is desig... lang:en score:30 filesize: 1.61 M page\_count: 40 document date: 2017-10-20



[\[pdf\]](#) User Manual

44341 LCD DigMicro2 Manual Eng2015 indd DIGITALES MIKROSKOP II Optik Pro 26 apr 2021 — 54870 bedienungsanlei nimax img de Produkt

DIGITALES LCD-MIKROSKOP II BEDIENUNGSANLEITUNG MODELL-NR. **44341**  
 DEUTSCH EINFHRUNG Vielen Dank fr den Kauf des digitalen LCD-Mikroskops mit 3,5 Zoll-Bildschirm von Celestron. Bei Ihrem Mikroskop handelt es sich um ein przises optisches Instrument, das aus Materialien hchster Qualitt gefertigt wurde...  
 lang:de score:30 filesize: 1.61 M page\_count: 8 document date: 2016-12-15



[\[pdf\]](#) Catalog

CelestronMicroscope 2014Catalog celestron site support files s3 amazonaws |||

Microscopes 2014 Microscopes 1 Microscopes 2014 Microscopes 2 Just as Celestron s industry-l ... adapter, AV out cable for use with external monitor Microscopes 7 LCD Digital Microscope II **#44341** The LCD Digital microscope II is a professional-level high power biological digital microscope...  
 lang:en score:22 filesize: 2.01 M page\_count: 16 document date: 2013-12-24



[\[pdf\]](#) Catalog

Microscopes Factory Outlet Store 3 Just as Celestron s industry leading telescopes reveal distant galaxies hidden in the night sky our innovative microscopes give a new perspective on unseen worlds makes using Microscope Catalog REV factoryoutletstore content celestron


Microscopes Microscopes 2015 Just as Celestron s industry-leading telescopes reveal distant gala ... B cable, AV out cable for use with external monitor Microscopes 9 LCD Digital Microscope II **#44341** The LCD Digital microscope II is a professional-level high power biological digital microscope...  
 lang:en score:22 filesize: 2.96 M page\_count: 20 document date: 2016-01-05



[\[pdf\]](#) Accessories Borchure Catalog

Microscope Trifold indd celestron microscope catalog beta static fishersci content dam en US documents programs education brochures and catalogs

OUTDOOR ACCESSORIES TO POWER YOUR ADVENTURE Celestron is leading the charge to revolutionize the E ... ive lenses, coarse focus, 180 rotatable head, fully mechanical stage, 1GB SD card and accessories. **#44341** Portable low power up to 140x light microscope with 5MP CMOS sensor, 3.5 color LCD screen, ...  
 lang:en score:21 filesize: 7.53 M page\_count: 6 document date: 2016-09-07

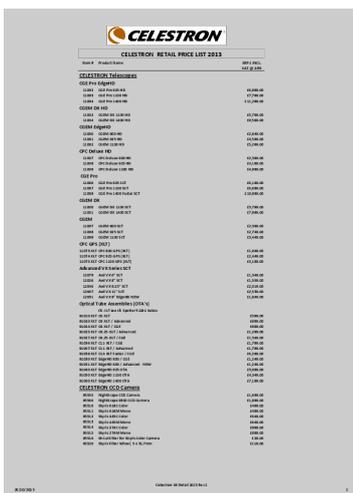

[\[pdf\]](#) Price List

Adam Hinds David Ltd price list celestron uk 80 s |||

CELESTRON RETAIL PRICE LIST 2013 Item # Product Name CELESTRON Telescopes CGE Pro EdgeHD 11092 11 ... Portable LCD Digital - clam Digital 44325 Amoeba Digital - Blue 44340 LCD Digital Microscope LDM **44341** LCD Digital Microscope LDM II 44345 LCD Digital Microscope DELUXE 44348 PentaView LCD Digita...  
 lang:en score:21 filesize: 344.61 K page\_count: 6 document date: 2013-10-28



[\[pdf\]](#) Accessories

94000 17 Microscope Trifold indd cdn shopify s files 1 1935 4371 microscop Celestron uk анализ сайта seo характеристики келестрон точка ук ком microscope trifold 2017 web 1196745701796910859 ||| OUTDOOR ACCESSORIES TO POWER YOUR ADVENTURE Celestron is leading the charge to revolutionize the E ... ive lenses, coarse focus, 180 rotatable head, fully mechanical stage, 1GB SD card and accessories. #44341 High power up to 400x, digital zoom up to 1600x light microscope with full color 4.3 LCD to... lang:en score:21 filesize: 4.54 M page\_count: 6 document date: 2017-03-16



[\[pdf\]](#) Borchure Catalog

2015 Microscopes Fisher Scientific Micro Fi is a Wi enabled handheld digital microscope that works with your smart devices to stream live video and record movies still images Download the celestron microscopes catalog fishersci content dam en US documents programs education brochures catalogs ||| Microscopes 2015 Microscopes 1 Microscopes 2015 Microscopes 2 Just as Celestron s industry-le ... B cable, AV out cable for use with external monitor Microscopes 9 LCD Digital Microscope II #44341 The LCD Digital microscope II is a professional-level high power biological digital microscope... lang:en score:20 filesize: 2.32 M page\_count: 11 document date: 2015-02-27



[\[pdf\]](#) Catalog

Catálogo Celestron Mirando al cielo Junio 2021 México CatalogoCelestron 2022 celestronmexico ||| DESCUBRE TU PASIN Por ms de 60 aos, el mayor anhelo de CELESTRON ha sido inspirar un sentimiento ... ve USA: 93612 35 MICROSCOPIOS Tecnologia al servicio de la ciencia Clave MX: 500045 Clave USA: 44341 Microscopio Digital con pantalla LCD Clave Pantalla Amplificaciones Zoom digital Lentes o... lang:es score:19 filesize: 5.94 M page\_count: 48 document date: 2022-07-20



[pdf] Catalog

Catálogo Celestron México CatalogoCelestron 2023 celestronmexico |||

5 Usos y aplicaciones de los telescopios 5 Usos y aplicaciones de los binoculares 5 Característica ... Pantalla Amplificaciones Zoom digital Lentes objetivos Tarjeta Cmara digital MX: 500045 USA: **44341** LCD 3.5 40x, 100x, 400x 4x 4x, 10x, 40x SD 1GB 5 MP 5 muestras preparadas Cable USB ...

lang:es score:19 filesize: 10.27 M page\_count: 44 document date: 2023-08-02

CELESTRON	
Origin - Intelligent Observatory	5.299,00 € 4.852,00 €
4.999,00 € 5.981,00 €	
6.999,00 € 8.999,00 €	
14.999,00 € 12.999,00 €	
7.999,00 € 8.999,00 €	
9.999,00 € 1.000,00 €	
15.999,00 € 13.999,00 €	
9.999,00 € 7.999,00 €	
23.999,00 € 25.102,00 €	
5.199,00 € 4.200,00 €	
4.999,00 € 6.999,00 €	
4.999,00 € 4.200,00 €	
2.999,00 € 2.999,00 €	
4.999,00 € 4.200,00 €	
5.999,00 € 4.999,00 €	
7.999,00 € 6.999,00 €	
7.999,00 € 4.200,00 €	
4.999,00 € 3.999,00 €	
3.999,00 € 3.999,00 €	
4.999,00 € 3.999,00 €	
5.999,00 € 4.999,00 €	
4.999,00 € 3.999,00 €	
4.999,00 € 4.999,00 €	
5.999,00 € 4.999,00 €	
4.999,00 € 3.999,00 €	
4.999,00 € 4.999,00 €	
3.999,00 € 2.999,00 €	
4.999,00 € 3.999,00 €	
5.999,00 € 4.999,00 €	
4.999,00 € 2.999,00 €	
4.999,00 € 4.999,00 €	
6.999,00 € 5.999,00 €	


[pdf]

Robert Reisenauer Celestron Preisliste 3 2025 Baader Planetarium StarSense Explorer LT 114AZ

Newton 269 00 € 226 05 822103 Modul für 659 553 78 825102S AutoAlign celestron preisliste 03 baader planetarium en dl file id 1909 |||

1,19 AUI Celestron Preisliste 3/2025 Art.Nr. Produkt Home Observatories Origin - Serie 821880 ... ital Mini 822468 TetraView digitales Mikroskop mit Touch Screen 822503 Mikroskop LCD Digital II **44341** 822508 MicroDirect 1080p HDMI dig. Handmikroskop Biologische Mikroskope 822490 Mikroskop-...

lang:af score:19 filesize: 1.13 M page\_count: 9 document date: 2025-02-18

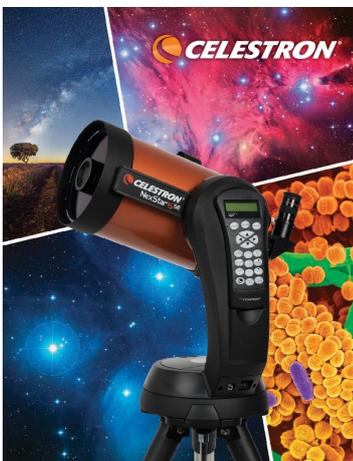

[pdf] Catalog

celestronmexico Por más de 50 años el mayor anhelo CELESTRON ha sido inspirar un sentimiento asombro conocimiento y diversión con cada producto que CatalogoCelestron 2020 |||

Por ms de 50 aos, el mayor anhelo de CELESTRON ha sido inspirar un sentimiento de asombro, conocim ... a a a a a MICROSCOPIOS Tecnologa al servicio de la ciencia Clave MX: 500045 Clave USA: **44341** Microscopio Digital con pantalla LCD Clave Pantalla Amplificaciones Zoom digital Lentes o...

lang:es score:18 filesize: 5.36 M page\_count: 40 document date: 2020-03-03




[pdf]

Цифровой микроскоп с LCD экраном II 2895578084b6faafe7e27b2515a16e4b top radar ru upload iblock 289 |||

LCD- II #44341 Celestron LCD . . . . 13 . . . . 1 . . . . 40x 400x 1600x . . . . . 40 . . . . .


lang:fr score:18 filesize: 1.06 M page\_count: 8 document date: 2014-11-17

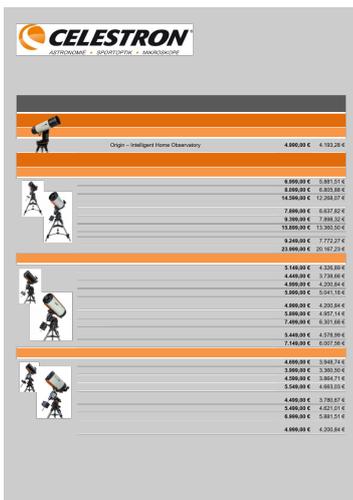

[Celestron Preisliste und Katalog 3/2024 - Baader Planetarium](#)

Umfassende Preisliste und Katalog von Celestron Teleskopen, Ferngläsern, Mikroskopen und Zubehör, vertrieben von Baader Planetarium. Enthält detaillierte Produktlisten mit Artikelnummern und Preisen für Astronomie- und Beobachtungsausrüstung.

lang:af score:17 filesize: 903.97 K page\_count: 11 document date: 2024-02-21

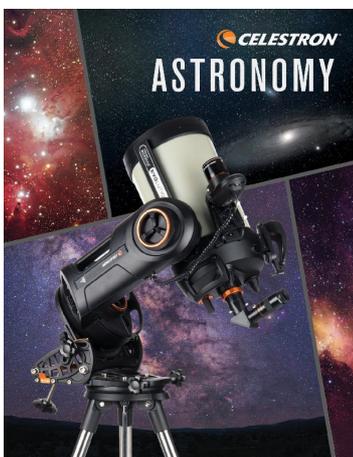

[pdf] Accessories Catalog

Celestron Optical Equipment Accessories Catalog optics binoculars monoculars scopes rangefinders microscopes telescopes night vision thermal sights tripods CARiD celestron product catalog images carid items |||

TECHNOLOGICAL INNOVATION SkyAlign™ Ideal for beginners and advanced users alike, SkyAlign makes a ... ive lenses, coarse focus, 180 rotatable head, fully mechanical stage, 1GB SD card and accessories. #44341 Portable low power up to 140x light microscope with 5MP CMOS sensor, 3.5 color LCD screen, ...

lang:en score:17 filesize: 12.4 M page\_count: 69 document date: 2021-08-02



[\[pdf\]](#) Catalog

Catálogo Celestron Celestron México v1 celestronmexico Catalogo Celestron 2025 |||

Por ms de 60 aos, el mayor anhelo de CELESTRON ha sido inspirar un sentimiento de asombro, conocim ... , 500070 y 500071 MICROSCOPIOS Tecnologa al servicio de la ciencia Clave MX: 500045 Clave USA: **44341** Microscopio Digital con pantalla LCD Clave Pantalla Amplificaciones Zoom digital Lentes o...

lang:es score:13 filesize: 2.95 M page\_count: 48 document date: 2025-06-16



[\[pdf\]](#) Catalog

Catalogo Celestron 2021 celestronmexico DESCUBRE TU PASIÓN |||

DESCUBRE TU PASIN Por ms de 60 aos, el mayor anhelo de CELESTRON ha sido inspirar un sentimiento ... a a a a a MICROSCOPIOS Tecnologa al servicio de la ciencia Clave MX: 500045 Clave USA: **44341** Microscopio Digital con pantalla LCD Clave Pantalla Amplificaciones Zoom digital Lentes o...

lang:es score:13 filesize: 7.68 M page\_count: 44 document date: 2021-02-17