




momcozy Mobile Flow™ Snelstartgids

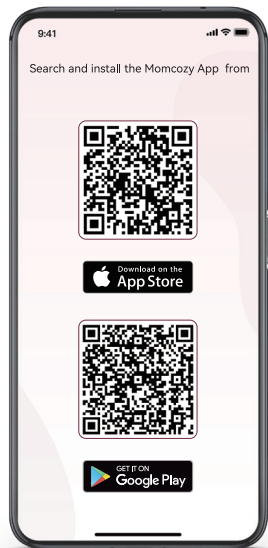



Stap 1:

Om te beginnen, zoekt u naar de Momcozy-app in de app store van uw smartphone, Google Play Store of App Store. De app is compatibel met iOS 13 en Android 8.0 of hogere versies. Houd er rekening mee dat de Bluetooth-verbinding van de app afhankelijk kan zijn van de smartphone die op het apparaat is aangesloten.

1


Stap 2:

Registreer uw account na de installatie. U kunt inloggen als u een Momcozy account hebt.

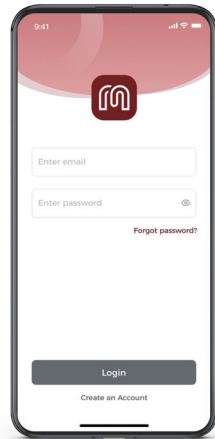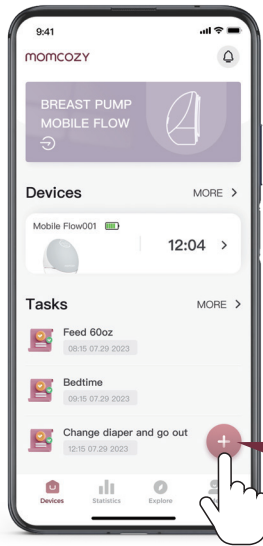


Stap 3:

U dient de Bluetooth op uw telefoon in te schakelen waarbij de borstkolf ingeschakeld moet blijven. Voeg apparaten toe met behulp van de knoppen "+" en "Apparaten".

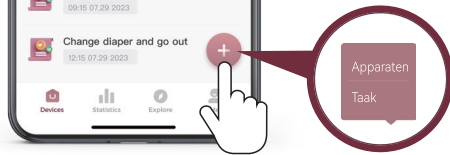


2

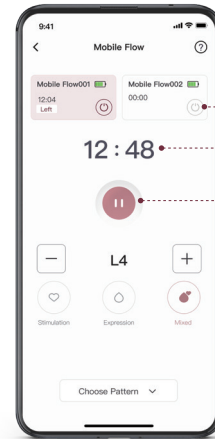

Uit
Werkingsijd
Pauzeren/Doorgaan

Zuigniveau

Keuzeknop standen

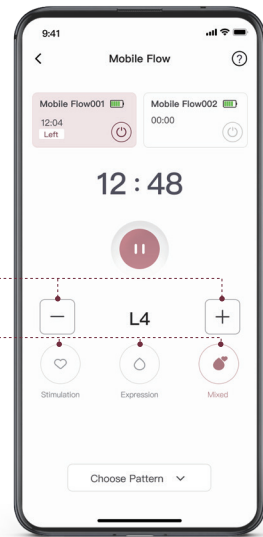


Stap 4:


Gebruik na het aansluiten de app om de borstkolf te bedienen.

3


Installatierichtlijnen

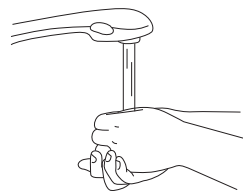


1
Was uw handen goed met water en zeep.

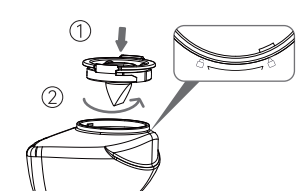

2
Monteer de melkverzamelaar door deze te draaien in de richting van het vergrendelingspictogram aan de flesmond.

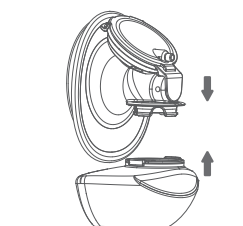

3
Bevestig de flens aan de flesmond en monteer deze op de melkverzamelaar.

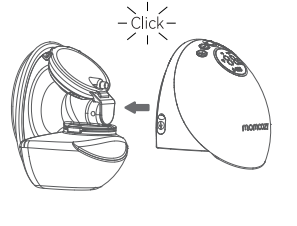

4
Monteer de motor en flens.


4

Reiniging en sterilisatie

*Niet-afwasbare onderdelen
Kolfmotor



* Afwasbare onderdelen

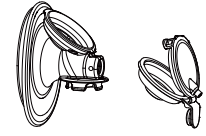

Flens Membraan



Melkverzamelaar Klep

Reinigen en steriliseren van afwasbare onderdelen
1. Reinigen met zeepwater (40-60 °C) gedurende 2-5 minuten.
2. Gebruik kokend water/stoom/sterilisatiepan voor sterilisatie. 100 °C (212 °F) gedurende 5-10 minuten is vereist.

* Het wordt aanbevolen dat u kolfonderdelen niet in een microgolfoven of UV-sterilisator steriliseert. Hoge temperaturen (> 110 °C) verkorten de gebruiksduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.

Raadpleeg bij problemen met het product de video in de bedieningshandleiding voor aanvullende oplossingen. Scan de QR-code hieronder om toegang te krijgen tot de video van de bedieningshandleiding.



5

Batterij-indicatorlampje



- | | |
|--|--|
| 1 Batterij-display | 2 Herinnering melkoverloop |
| 3 Lang indrukken: Inschakelen / uitschakelen | 4 Keuzeknop standen |
| 5 Kort indrukken: Pauzeren/Doorgaan | 6 Bluetooth-indicatorlampje |
| 6 Schakelrichting | 7 Display voor werkingstijd/zuigniveau |
| 7 Display voor werkingstijd/zuigniveau | 8 Stand-indicatorlampje |
| 8 Stand-indicatorlampje | |

Tips

1) De verwachte gebruiksduur van de afwasbare onderdelen is 1 tot 3 maanden. Het wordt aanbevolen om de afwasbare onderdelen te vervangen als u de kolf gedurende een lange periode hebt bewaard, of voordat u gaat kolven voor uw volgende kind.

2) De borstkolf schakelt automatisch uit na het afkolven gedurende 30 minuten.

3) Als er irritatie of ongemak optreedt, gebruik dan uw vinger om de afsluiting tussen de flens en het borstweefsel te verbreken, stop met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: support@momcozy.com

6