



MANUAL DE USUARIO

Masajeador TENS de doble canal

Relajación,
cualquier lugar,
cualquier momento

Modelo AS8012

INCLUIDO EN ESTE PAQUETE ESTÁNDAR

- Masajeador AUVON® TENS de doble canal
- Almohadillas de alfiler cuadrado
- Alfombrillas rectangulares
- Soporte de almohadillas
- Bolsa
- Juego de cables de plomo (1/2 Wire)
- Cable USB y adaptador USB
- Manual del usuario
- Tarjeta Feliz

CARACTERÍSTICAS

- 2 salidas con 20 modos
- 20 niveles de intensidad
- Temporizador predeterminado de 20 minutos, ajustable de 10 a 60 minutos.
- Batería de litio recargable
- Indicador de la batería para saber cuándo es necesario recargar la batería
- Adaptador de CA 110-240V, cargador USB 5V

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

NO UTILICE EN ESTAS CONDICIONES

Consulte con su médico antes de usar esta unidad. La unidad puede causar alteraciones letales del ritmo en ciertos individuos susceptibles. Si ha tenido un procedimiento quirúrgico reciente, la estimulación puede interrumpir el proceso de curación.

Antes de usar su unidad, inspeccione estas cosas.

1. El cordón no está roto.
2. El gel de la almohadilla no está dañado.
3. La conexión del cable del electrodo no está rota.
4. La unidad está intacta y funcionando.
5. No hay fuga de la batería.

NO UTILIZAR EN ESTAS PERSONAS

- Las mujeres embarazadas.
- No lo use en niños o bebés porque el dispositivo no ha sido evaluado para uso pediátrico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños porque el cable del electrodo podría causar estrangulación.
- Personas incapaces de expresar sus pensamientos o intenciones.
- Personas incapaces de operar la unidad por sí mismas.

- Úselo con precaución si tiene tendencia a sangrar internamente, como después de una lesión o fractura.
- Si sospecha o se le diagnostica una enfermedad cardíaca, debe seguir las precauciones recomendadas por su médico.
- Si tiene una epilepsia sospechosa o digna, debe seguir las precauciones recomendadas por su médico.
- Tenga cuidado si la estimulación se aplica sobre el útero menstrual.

NUNCA APLIQUE LAS ALMOHADILLAS EN ESTAS PARTES DEL CUERPO:

- La cabeza, la boca o cualquier área de la cara.
- El cuello o cualquier área de la garganta porque esto podría causar espasmos musculares severos que resulten en el cierre de las vías respiratorias, dificultad para respirar o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión sanguínea.
- No lo use cerca del corazón o en el área genital.
- Ambos lados del tórax simultáneamente (lateral o frontal y posterior), o a través del pecho porque la introducción de la corriente

eléctrica puede causar alteraciones del ritmo que podrían ser letales.

- En las pantorrillas de ambas piernas al mismo tiempo porque esto puede causar una alteración cardíaca.
- en la parte inferior de ambos pies al mismo tiempo porque esto puede causar una alteración cardíaca. Heridas abiertas o sarpullidos o sobre inflamados, zonas rojas, infectadas o inflamadas o erupciones de la piel (como varices, flebitis, tromboflebitis y trombosis), o encima o cerca de lesiones cancerosas, o sobre zonas de la piel que carecen de sensibilidad normal.

NO UTILICE LAS ALMOHADILLAS DURANTE ESTAS ACTIVIDADES

- Cuando está en la bañera o en la ducha;
- Mientras dormía;
- Mientras conduce, opera maquinaria o durante cualquier actividad en la que la estimulación eléctrica pueda ponerle en riesgo de lesión.

ADVERTENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

- Si ha recibido tratamiento médico o físico para su dolor, consulte con su

médico antes de usar esta unidad.

- Si su dolor no mejora, se vuelve crónico o severo, o continúa por más de cinco años, deje de usar la unidad y consulte con su médico.
- La mera existencia del dolor funciona como una advertencia muy importante que nos dice que algo está mal. Por lo tanto, si usted sufre de alguna enfermedad grave, consulte a su médico para confirmar que es aconsejable que utilice esta unidad de potencia de alivio.

PRECAUCIONES

No mueva las almohadillas a otro lugar mientras la unidad está encendida.

- La terapia no funcionará con una sola almohadilla. Debes usar dos almohadillas al mismo tiempo.
- Asegúrese de que los componentes estén bien conectados y las almohadillas estén fijadas en la parte del cuerpo que desea tratar o la terapia puede no ser eficaz.
- La almohadilla no debe tocar ningún objeto metálico, como la hebilla del cinturón, el collar u otro metal que se lleve debajo de la ropa.
- No superpongas las almohadillas ni pongas las almohadillas una encima de la otra. Puede debilitar o detener la terapia, o la

unidad puede dejar de funcionar. Las almohadillas de gel también pueden pegarse entre sí y hacer que el gel se elimine al separarse.

- No comparta las almohadillas con otra persona. Esto puede causar una irritación o infección de la piel. Las almohadillas están diseñadas para ser usadas por una persona.
 - No deje las almohadillas pegadas a la piel después del tratamiento.
 - No se dobla ni se pliega porque el gel puede dañarse y no se pegará o no funcionará correctamente.
 - Para evitar que se dañe la superficie adhesiva de las almohadillas, coloque las almohadillas sólo sobre la piel o sobre el soporte de plástico de las almohadillas provisto para evitar que se dañe la superficie adhesiva de las almohadillas.
 - Siempre coloque almohadillas limpias de acuerdo con ilustraciones proporcionadas.
 - No aplique pomada ni ningún disolvente a las almohadillas o a su piel porque interrumpirá el funcionamiento de las mismas.
- El auto
las almohadillas adhesivas se adherirán a tu piel.

¿CÓMO FUNCIONA?

La teoría científica sugiere que la terapia de estimulación eléctrica puede funcionar de varias maneras:

1. El suave pulso eléctrico se mueve a través de la piel hasta casi los nervios para bloquear o apagar el mensaje de dolor desde la fuente del dolor hasta llegar al cerebro.
2. El suave pulso eléctrico aumenta la producción de los analgésicos naturales del cuerpo, como las endorfinas.
3. Además, se cree que la estimulación eléctrica también mejora la circulación de la sangre.

Los músculos se contraen y relajan con el flujo de la estimulación eléctrica. Con el replanteado contrayéndose y relajándose, la sangre fluye hacia adentro y hacia afuera y la circulación sanguínea mejoró.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO UTILIZAR

1. Limpie su piel antes de usarla. Use las almohadillas en áreas limpias y planas, sin sudor, sin grasa.
2. Ata un par o dos pares de almohadillas de

electrodos a la zona del masajeador, como el hombro y la pierna.

Nota: Añadiendo unas pocas gotas de agua en las almohadillas y secándolas de forma natural se incrementará su longevidad. Asegúrese de que ambas almohadillas estén en la piel y no se superpongan.

3. Conecte un par de almohadillas de electrodos a un cable conductor enchufándolas; el otro extremo del cable se conecta a la salida izquierda del dispositivo. Del mismo modo, el otro par de almohadillas de electrodos se conecta al extremo del cable restante y a la salida derecha del dispositivo.

4. Encienda el dispositivo deslizando el interruptor de encendido y apagado en la parte superior de la unidad.

5. Presione el botón A para elegir el canal A.

Presione el botón M para probar un modo diferente y presione +/- para aumentar o disminuir la intensidad. Presione el botón B para elegir el canal B y seleccione su modo e intensidad favoritos (los modos del canal A pueden ser diferentes a los del canal B).

Nota: Recuerde que la intensidad se ajustará por defecto al valor más bajo de cada

selección de modo.

6. La aplicación recomendada es de 10 a 60 minutos. Aumente 10 minutos por cada ajuste presionando la T del dispositivo. El tiempo

El resto se cuenta automáticamente hasta que se apague una vez que el tiempo termine.

7. Mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos para bloquear la pantalla, 3 segundos de nuevo para desbloquearla.

DESPUÉS DEL USO

1. Apague el dispositivo deslizando el interruptor de encendido/apagado en la parte superior de la unidad.








2. Retire la clavija del cable del conector del electrodo girándolo suavemente y sacándolo.

3. Levanta una esquina del electrodo y lentamente lo despega. Evite tocar el gel tanto como sea posible.


NO peles el electrodo por el cable.

4. Retire los electrodos de la bolsa de almacenamiento y vuelva a cerrarla bien para evitar que se seque. Almacene a temperatura ambiente o fresca y manténgalo alejado de la luz solar directa.

PUNTOS DE MASAJE RECOMENDADOS

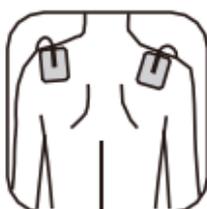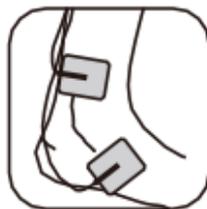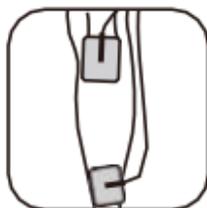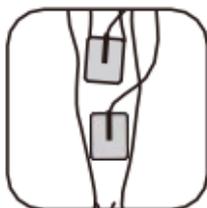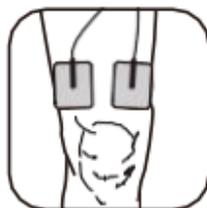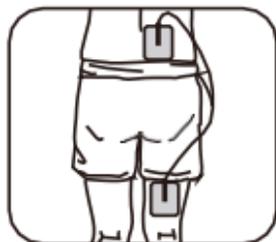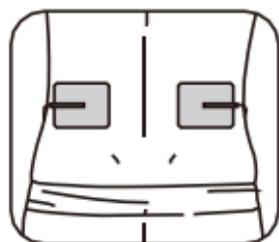

EXPLICACIÓN DEL DISPOSITIVO Y LOS ACCESORIOS

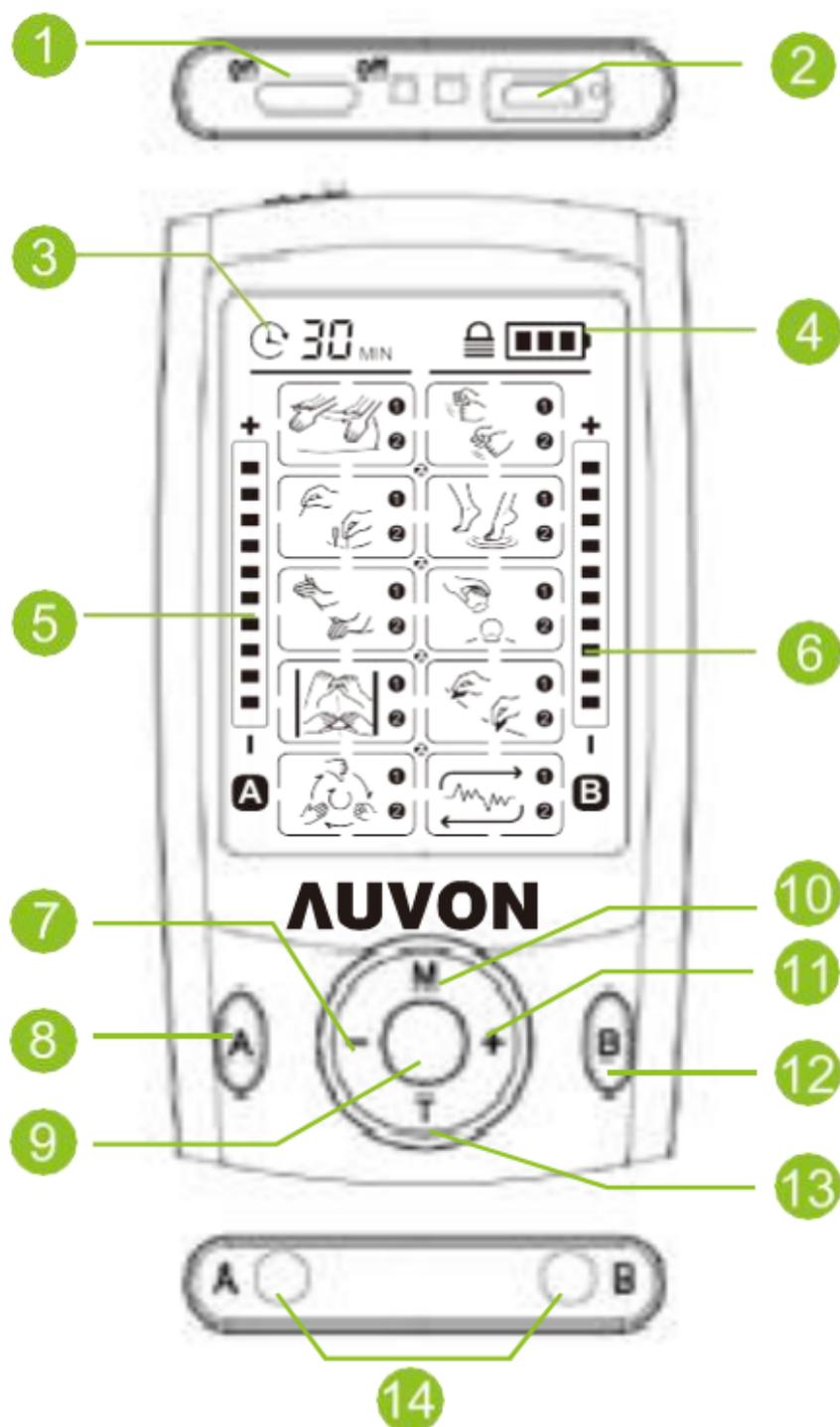

- ① Interruptor
- ② Puerto USB
- ③ Tiempo
- ④ Indicador de la batería
- ⑤ Intensidad ajustable (Canal A)
- ⑥ Intensidad ajustable (Canal B)
- ⑦ Disminución de la intensidad
- ⑧ Canal A
- ⑨ Cierre de modo
- ⑩ Selección del modo
- ⑪ Aumento de la intensidad
- ⑫ Canal B
- ⑬ Selección de tiempo
- ⑭ Conector de dos salidas

Icono y modo		Nombre	Descripción
	1	Tuina	Simulando Tuina es un cuerpo de manos tratamiento que abre el flujo a través de los meridianos
	2	Tuina-ombinación	
	3	Aprovechando	Simulando El golpeteo es con la intención de producir un duro golpeando sensación que masajea tus músculos
	4	Golpeteo -ombinación	

Icono y modo		Nombre	Descripción
	5	Acupuntura	La simulación de la acupuntura proporciona la misma sensación sin agujas
	6	Acupuntura - Combinación	
	7	Masaje tailandés	Simulando un masaje tailandés para reflejar las capas profundas de los músculos...
	8	Masaje tailandés- Combinación	
	9	Amasar la palma de la mano	Simulando la sensación de usar los dedos y la palma de la mano para aplicar peso al cuerpo
	10	Amasado de palma... Combinación	
	11	Ventosas	Ventosas estimulantes, la estimulación relativamente constante contrae los músculos
	12	Combinación de ventosas	

Icono y modo		Nombre	Descripción
	13	Manipulación de pellizcos de elevación	Simulando el pulgar y el dedo índice se levanta la piel
	14	Pellizco de elevación-Combinación	
	15	Raspado	Estimulando la sensación de desecho sobre la piel con un instrumento de bordes lisos
	16	Combinación de raspado	
	17	Golpear, amasar, empujar...	Combinación automática de Golpear-Amasar-Empujar
	18	Auto-Combinación 1	
	19	Auto-Combinación 2	Combinación automática de varios modos para la relajación
	20	Auto-combinación 3	

PROBLEMAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si su dispositivo no funciona correctamente, por favor, compruebe a continuación los problemas comunes y las soluciones sugeridas. Si la acción recomendada no resuelve el problema, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Problema	Posible Causa	Solución
Una almohadilla se siente más fuerte que la otra	Esto es normal. Diferentes áreas de su cuerpo reaccionarán de manera diferente	No hay nada que hacer. Asegúrate de que las almohadillas estén húmedas y hagan buen contacto.
La piel se vuelve roja o se siente irritada.	El adhesivo de la superficie de las almohadillas está sucio o seco	Lave el adhesivo de la superficie de las almohadillas suavemente con la punta de los dedos durante unos 3 segundos bajo agua corriente lenta
	El tiempo de la terapia es demasiado largo o la intensidad es demasiado alto	Reducir el tiempo de aplicación o reducir la intensidad
	El electrodo la superficie de la almohadilla está desgastada	Reemplazar la almohadilla de electrodos

Problema	Posible Porque	Solución
La intensidad no se siente con un nivel de intensidad muy débil	Las almohadillas no están adheridas al cuerpo firmemente	Ataca ambas almohadillas firmemente a la piel
	Las películas transparentes todavía están pegadas a la almohadillas	Despegar la película de la superficie adhesiva de las almohadillas
	Las almohadillas se apilan juntas o superposición	No apile las almohadillas ni las superponga.
	El cable no está conectado correctamente a la unidad	Conecta el cable correctamente en el enchufe
	La intensidad de la configuración se está volviendo débil	Aumentar el nivel de intensidad
	La capacidad de la batería es bajo	Cargue la batería
No hay fuente de energía; no hay pantalla en LCD.	La capacidad de la batería está agotada	Cargue la batería

Problema	Posible Porque	Solución
Es difícil fijar la almohadilla a la piel	¿Has quitado la película transparente de la almohadilla?	Despegar la película de la superficie adhesiva de las almohadillas
	¿Se aplicó la almohadilla inmediatamente después lavado?	Seca la almohadilla
	¿Es el adhesivo en la superficie de la almohadilla Dañado?	Reemplazar la almohadilla
Se corta la energía durante el uso	La batería es débil	Cargue la batería
	El cordón es roto	Reemplazar el cordón
El adhesivo en la superficie de una almohadilla no es pegajoso	Las almohadillas se deterioran	Contacte con el proveedor para que le sustituya
	¿Guarda las almohadillas bajo alta temperatura, alta humedad, o directamente el sol?	Reemplazar la almohadilla

* El masajeador AUVON® TENS tiene 10 modos de masaje, y totalmente 20 opciones de sub-modo.

SOPORTE DE LAS ALMOHADILLAS TENSORAS

CARACTERÍSTICAS




De alta calidad
El material ABS
para
Asegúrate de
que lo usas de
forma segura.



Amplia
compatibilidad
para parches
de diferentes
tamaños.


La forma de la punta saliente
diseñada especialmente para
disminuir el daño a los parches.

INSTRUCCIÓN

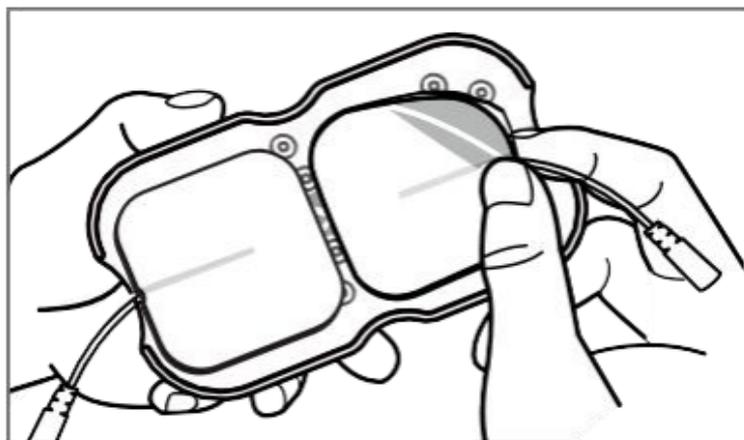

Paso 1

Pega los parches de electrodos en el soporte para evitar que se llene de polvo.

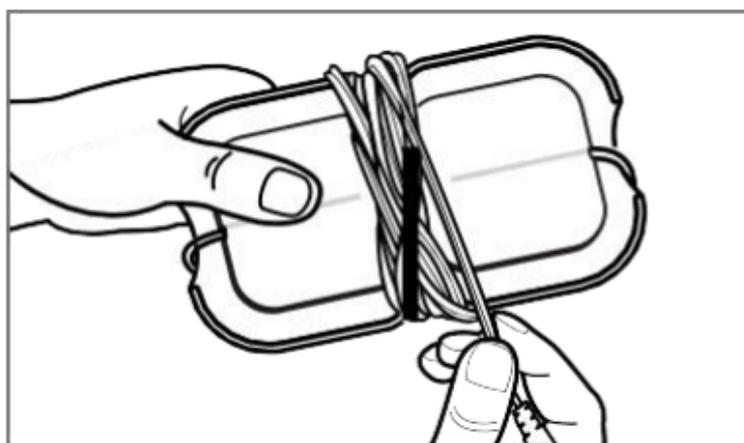

Paso 2

Enrolle el hilo alrededor del soporte para que sea fácil de usar como se muestra en la imagen.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

I. Cuando termine de usar el dispositivo, apáguelo y quítese las almohadillas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco hasta el próximo uso.

2. Después de su uso, por favor cubra las almohadillas con la película protectora y póngalas de nuevo en sus bolsas ziploc. Aplicar unas gotas de agua antes y después del uso aumentará la longevidad de las almohadillas.

O pegar los parches de electrodos en el soporte y enrollar el hilo alrededor del soporte.

3. Cargue la unidad al menos cada 3 meses en caso de que no se utilice con regularidad. También puede utilizar la unidad con un cargador de pared o directamente desde el ordenador mediante el cable USB.

Advertencia:

1. El estimulador no tiene ninguna salida cuando se está cargando. Debes quitarte las almohadillas de electrodos de tu cuerpo antes de que el estimulador se cargue.

2. Cargando sólo con este adaptador AC (Modelo: GDP06AV-0500550-UL, fabricante Shenzhen Guandexin Technology Co., Ltd).

Operación ambiental para el adaptador

Temperatura ambiente normal de trabajo	5~40°C
Humedad ambiente normal de trabajo y presión atmosférica	≤80%RH; Presión atmosférica: 700 ~1060hPa
Almacenar y transportar la temperatura ambiente	-20~55°C
Almacenar y transportar la humedad ambiental y la presión atmosférica	≤93%RH; Presión atmosférica: 700 ~1060hPa

Carga	Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.18A Max Salida: DC5V---250mA Clase II, parte no aplicada, no apta para ser usada en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno u óxido nitroso, operación continua
-------	---

La combinación del estimulador y el adaptador de CA se considera un sistema eléctrico médico. El adaptador CA no se considera parte del equipo de ME El sistema de ME.

Cargando la batería

1. Apaga el controlador.
2. Conecte el controlador y el cargador con el cable de extensión USB. Enchufe el cargador en cualquier toma de corriente, la luz verde muestra la carga. El proceso de carga durará aproximadamente 1 hora.



Nota: Sólo cargue el controlador cuando la batería se haya agotado completamente las 2 primeras veces. Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando la carga esté completa. Cuando la fuerza del masaje disminuye, indica que el dispositivo necesita ser cargado.

Recárgalo y luego sigue usando el dispositivo. No utilice el controlador cuando esté cargando.

Característica tecnológica generale	- Entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.25A
	- Salida	DC5V---550mA
Estándares cumplidos		IEC60950
Etiquetado en el cargador de CA		
Cómo se conecta al dispositivo		

SERVICIO AL CLIENTE

- Garantía limitada de 24 meses
- Extensión de la garantía de soporte técnico de por vida:

Regístrate en <https://www.iauvon.com/register>, podrías tener 36 meses de garantía gratis



+1 (678) 829-7256



support@iauvon.com



<https://www.iauvon.com>