

REVITIVE®

Essential

(EN) **User's Manual**

(FR) **Manuel de l'utilisateur**

(DE) **Bedienungsanleitung**

(IT) **Manuale d'uso**

(NL) **Gebruikershandleiding**



Please read the user's manual Carefully before using this product. USE ONLY AS DIRECTED.

If symptoms persist, consult your healthcare professional.

Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT SELON L'USAGE PRÉCONISÉ. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un professionnel de santé.

Bitte lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme dieses Produkts die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

BEFOLGEN SIE DIE ANWENDUNGSHINWEISE. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt auf.

Leggere attentamente il manuale d'uso Prima di utilizzare questo prodotto.

USARE SOLO COME INDICATO. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico di fiducia.

Lees vóór gebruik van dit product deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.

UITSLUITEND GEBRUIKEN VOLGENS DE AANWIJZINGEN. Raadpleeg bij aanhoudende klachten een professionele zorgverlener.

Model number/Numéro de modèle/ Modellnummer/Numero di modello /Modelnummer: RLV


CIRCULATION BOOSTER®

For best results

Use daily

 Intensity **40+**
 **30-60 min**

 for **60+** days

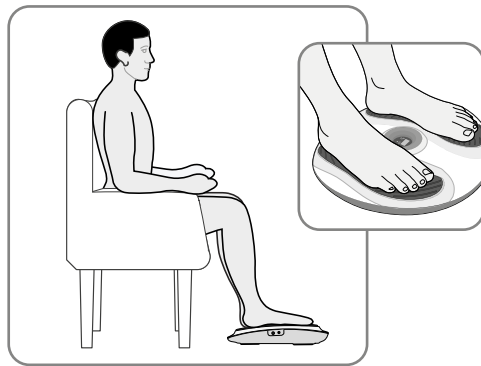

**How-to videos/Tutoriels vidéo/Anleitungsvideos/
Video esplicativi/Vídeos instructivos/ Instructievideo's**



For videos of setup and using your Revitive system, go to: **support.revitive.com**

Pour regarder les vidéos d'installation et d'utilisation de votre Revitive, rendez-vous sur : **support.revitive.com**

Videos zur Einrichtung und Anwendung Ihres Revitive-Systems finden Sie auf: **support.revitive.com**

Per accedere ai video su come installare e utilizzare Revitive, visitare: **support.revitive.com**

Ga voor video's over het instellen en gebruiken van uw Revitive-systeem naar: **support.revitive.com**


Table of contents

What is inside the box?	4
Parts and Controls	5
Introduction to Revitive	6
Operator profile	6
How Revitive works	6
Indications for use	6
Important Safeguards	7-10
Who should NOT use Revitive	7
Warnings and Cautions	8-9
Safety Precautions	10
Adverse Reactions	10
Instructions for use	11-18
How do I get the most from Revitive?	11
Step 1: Setting up Revitive for the first time	11
Step 2: Using the foot-pads	12-13
Step 3: Using the Body Pads	14-17
Cleaning and storing	18
Replacing the Body Pads	18
Troubleshooting	19
Technical Specifications	20-21
Warranty	22


What's in the box?

Upon opening the carton, please check that the following components are provided. If you think anything is missing, please contact us using the helpline numbers on the back of this booklet.

- 1** Power adaptor
Cable length 180cm

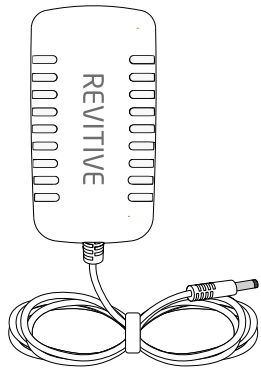


- 2** Electrode Body Pads

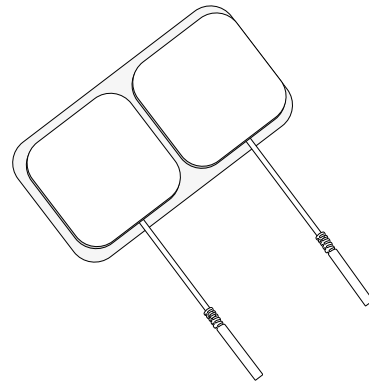




- 3** Revitive Device



- 4** Electrode cord
Cable length 150cm

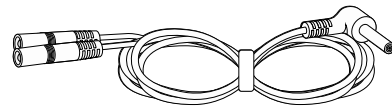

Parts and controls

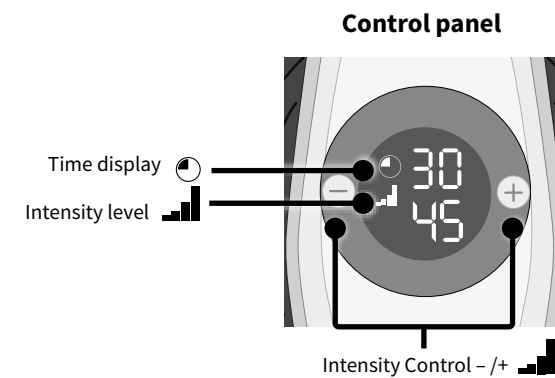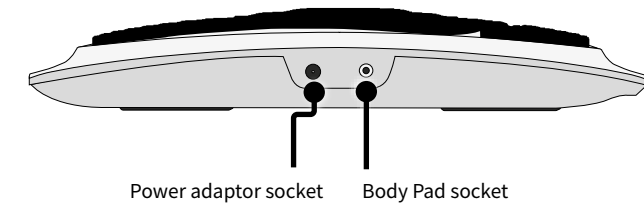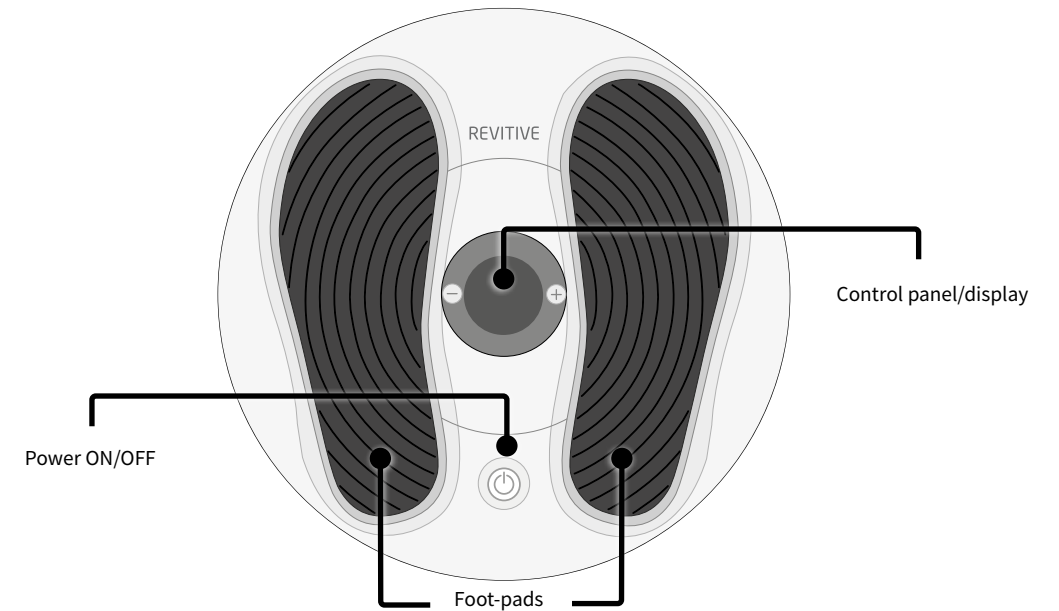

Introduction to Revitive

Operator profile

The intended operator profile is based on users in the home environment who may have a sedentary lifestyle or experience long periods of sitting or standing and related issues such as pain, leg stiffness and swelling in the legs, ankles and feet.

Revitive is intended for use by the end user in a non-clinical setting and without the supervision or intervention of a clinician during use.

A typical user may be of any adult age range and is not specific to any demographic of gender, ethnicity or educational background.

How Revitive works

Revitive delivers Electrical Muscle Stimulation (EMS) to your feet via a pair of cushioned foot-pads, while you are seated. The electrical stimulation causes muscles in your calf and foot to contract, which helps to increase circulation in your legs.

Revitive has been developed so that it is comfortable for you to use.

Revitive can also deliver electrical stimulation to the knees, shoulders, back or arms, through the use of the Electrode Body Pads provided.

Indications for use

Revitive is intended to, when using the foot-pads:

- Improve circulation to reduce or prevent blood-pooling (stasis) - caused by poor circulation due to a sedentary lifestyle or long periods of sitting or standing
- Help maintain leg vein health – by increasing circulation, delivering more oxygenated-blood in the legs

The above Indications for Use are certified under the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

In addition, if you have a sedentary lifestyle or spend long periods inactive, Revitive may help to:

- Strengthen leg muscles
- Reduce foot & leg discomfort
- Actively increase circulation.

Visit www.revitive.com for more information

Important safeguards

Read all instructions before use.

Save these instructions.

Revitive should not be used by some people.



Do not use if (contraindications):

- You are fitted with an electronic implanted device such as a heart pacemaker or Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD)
- You are pregnant
- You are being treated for, or have the symptoms of, an existing Deep Vein Thrombosis (“DVT”)

Long periods of inactivity can put you at greater risk of developing Deep Vein Thrombosis (DVT). DVT is a blood clot and usually occurs in a deep leg vein. If part of the DVT breaks off it may lead to potentially life-threatening complications such as pulmonary embolism.

If you have been inactive for prolonged periods and suspect you may have a DVT, consult your doctor immediately.

To prevent dislodging the clot do not use Revitive.

In some cases of DVT there may be no symptoms. However it is important to be aware of the symptoms that may include:

- Pain, swelling and tenderness in one of your legs (usually your calf)
- A heavy ache in the affected area
- Warm skin in the area of the clot
- Redness of your skin, particularly at the back of your leg, below the knee

Consult your doctor as soon as possible if you show any signs of the above symptoms.

Important safeguards

Warnings

Consult with your doctor before using this device if:

- You are in the care of a doctor
- You have a history of heart problems
- You have had medical or physical treatment for your pain
- You have suspected or diagnosed heart disease
- You have suspected or diagnosed epilepsy
- You are unsure about the suitability of the device for you
- You are unsure about the cause of your symptoms

If you have a metallic implant:

- If you have a metallic implant, you may experience pain or discomfort near the implant when applying electrical stimulation. If this should occur discontinue use and seek advice from your doctor
- The electrical stimulation may feel more intense close to a metallic implant. It is safe to continue use provided no pain is experienced. You may need to adjust the intensity to a comfortable level

When applying foot-pads or electrode body pads:

- Do **not** use the electrode pads on your head, face, neck or chest
- Application of the electrodes near the thorax (chest) may increase the risk of cardiac fibrillation
- Only apply to areas with intact/unbroken skin
- Do not apply foot-pads or electrode pads directly or adjacent to these areas:
 - on cut or broken skin, open wounds or rashes; swollen, red, infected or inflamed areas; or skin eruptions (such as phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, cellulitis). Check under your feet and toes before using the device
 - on, or close to, malignant tumours
 - on areas treated with radiotherapy (within the past 6 months)
 - on reproductive organs
 - on opposing thighs and refer to pad placement diagrams in this User's Manual for correct placement
 - over the carotid sinus nerves (front of the neck), particularly in patients with a known sensitivity to the carotid sinus reflex
- Electrode pads are for single person use only. Do **not** share Body Pads with others
- Do **not** use electrode pads after their use-by date
- There is a chance you may experience skin irritation or burns beneath the electrodes or hypersensitivity due to the electrical stimulation
- Ensure that any moisturiser/gel/balm is evenly applied and thoroughly absorbed into the skin before applying stimulation. There is a chance that uneven application of a moisturiser/gel/balm could increase the risk of skin irritation or burn, when using the electrical stimulation
- Symptoms may worsen during the initial treatment phase before getting better. This may occur if the body has not fully adjusted to increased muscular activity and blood circulation. If this occurs, reduce the intensity and the duration of treatment which will reduce the initial symptoms. If symptoms persist consult with your doctor

When not to use Revitive:

- Do not use the device:
 - In the presence of electronic monitoring equipment
 - Together with a life-supporting medical electronic device
 - When you are in the bath or shower
 - While you are sleeping
 - In conjunction with a brace or cast without first consulting with your doctor

Warnings

When not to use Revitive:

- Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally

Additional Warnings:

- Use of accessories and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Revitive System, including cables specified by the manufacturer

Cautions

When applying foot-pads or electrode body pads:

- Be careful when applying stimulation over areas of skin that lack normal sensation. It may cause skin irritation due to the inability to feel stimulation until the intensity is too high. Use a low intensity to achieve a gentle muscle contraction, and/or use for a shorter time, to avoid over-stimulation. Check for signs of skin irritation (redness), bruising or pain. If in doubt consult your doctor
- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by a person responsible for their safety

When using EMS:

- Be careful when applying stimulation:
 - Over the abdomen during menstruation
 - After recent surgical procedures (within the past 6 months) as stimulation may disrupt your healing process
 - If your tissues are likely to bleed following an injury such as a muscle tear - it is recommended not to stimulate the immediate area within the first 12 hours after sustaining the injury. Use a low intensity and/or shorter time to avoid over-stimulation
 - After a long period of immobility or inactivity – use a low intensity and shorter time to avoid over-stimulation or muscle fatigue

Additional Cautions:

- The long term effects of electrical stimulation are unknown
- Electrical stimulation may not work for every user, please seek advice from your doctor

Important safeguards



Safety Precautions

- Do not stand on the machine. Use only when seated
- Do not position the Revitive so that it is difficult to disconnect or turn off
- Use the device only for its intended purpose
- Do not expose the device to extreme heat
- Do not spill liquid on the device or its accessories
- Do not overload the electrical socket
- Keep device out of the reach of children
- Keep power cords and cables out of the reach of children to prevent risk of strangulation
- Revitive foot-pads may be used by multiple persons. Ensure device is cleaned after each use
- During use, do not touch foot-pads with your hands until the paused feature is enabled or device has powered off
- Use Revitive only with the accessories supplied by, or purchased from, the manufacturer
- Check Body Pads, cords and cables periodically for damage
- Do not open Revitive or repair it yourself. This will invalidate your warranty and may cause serious harm
- In the unlikely event your Revitive malfunctions, disconnect it from the power source and contact your nearest authorised agent
- It has been reported that some universal remote control devices (e.g. for TV etc.) can change the settings on Revitive if used during a treatment. If this should occur, simply adjust the time or intensity settings on Revitive back to where you want them using the Revitive Remote Control, or using the device Control Panel
- Revitive has passed the required tests for Electromagnetic Interference (EMI); it may still be affected by excessive emissions and/or may interfere with more sensitive equipment
- After any exposure to hot or cold temperatures outside the specified operating range of 10 – 40°C allow the product to re-adjust to the recommended operating temperatures to ensure continued product performance



Adverse Reactions

- If you experience adverse reactions, stop using Revitive and consult with your doctor immediately

Instructions for use

How do I get the most from Revitive?

For best results:


- Use **Revitive foot-pads for at least 30 to 60 minutes each day**, 7 days a week.
 - It is important to use Revitive at a high enough intensity to give you a strong comfortable muscle contraction. Most people achieve a strong muscle contraction **over intensity level 40** (intensity range 1-50).
 - If you are diagnosed with a long term medical condition such as High Blood Pressure, High Cholesterol, Diabetes, Osteoarthritis, Chronic Venous Insufficiency (CVI), Peripheral Arterial Disease (PAD), or COPD, it can take **up to 8 weeks** to help reduce symptoms associated with these chronic conditions.
- Do not use Revitive, using EMS stimulation, for more than 6 sessions of 30 minutes (or the equivalent) per day.

Step 1: Setting up Revitive for the first time

a Remove all parts from the box:

- Power adaptor
- Revitive device
- Body Pads
- Electrode cord


See What is inside the Box? on page 4 to help identify the parts.

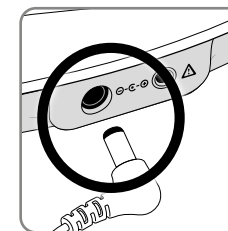

b

Locate the power adaptor.

Plug the small end of the power cord into the socket on the side of the Revitive.

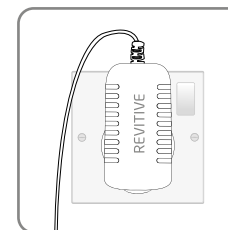

c



Plug the power adaptor into the nearest electrical socket.

Before you use Revitive for the first time, read the Important Safeguards on pages 7-10. If in doubt, consult your doctor before using the product.

Instructions for use

Step 2: Using the foot-pads

Sit with both bare feet on the foot-pads

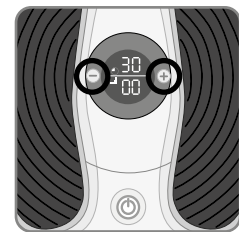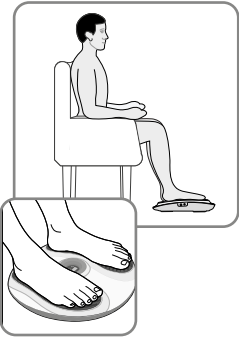

- a** It is important that you are hydrated. We recommend drinking a glass of water before using Revitive.
- You may also apply a moisturiser to the soles of the feet to help hydrate the skin.
- Hint: Applying a moisturising lotion to the soles of the feet before using Revitive can help improve the delivery of electrical stimulation.
- b** Get into a comfortable seated position.
For best results sit with your knees at a 90 degree angle (right angle).
- c** Place Revitive on the floor in front of you.
- Revitive is designed to be used while seated.
Never stand on the Revitive unit.
- d** Place **both bare** feet on the foot-pads. Make sure you remove all footwear, including socks/stockings.
- e** Press the power button on the Revitive.
You will hear a beep and the display lights will light up.
The ⌚ time will read 30 minutes and 🔊 Intensity will read 00.
To turn off the device at any time during operation, press the power button.
- f** Press the 🔊 (+) Intensity Control one time to start stimulation.
Press the (+) button to increase the level.
Press the (-) button to decrease the level.
- g** Ensure you familiarise yourself with the feeling of Electrical Muscle Stimulation (EMS). Use on a low intensity for 30-60 minutes once per day for a few days
- Set the intensity at a level where you can feel the stimulation in your feet and which creates a calf contraction.
- It is normal to feel tingling or varying sensations in your calf muscles.
Revitive does **not** vibrate.

- h** After a few days of familiarisation, use a higher intensity that provides you with **strong but comfortable calf muscle contractions**.

Most people experience a strong contraction at intensity level 40 or over. You can set the intensity between 1-50.

Please note that the intensity required may vary from day to day.

If you feel pain or discomfort:

- Remove one or both feet from the foot-pads to stop the stimulation.
- Lower the intensity of the foot-pads using the 🔊 (-) Intensity level button on the control panel before replacing your feet on Revitive.

- i** The ⌚ time display will start to count down in minutes as Revitive cycles through its program.

- j** When Revitive times out, the ⌚ time display reads 00 and you will hear three beeps.

- k** The Revitive switches itself off automatically.

Instructions for use

Step 3: Using the Electrode Body Pads

 Electrode Body Pads are for single person use only. Do not share body pads with others.

Revitive comes with one pair of reusable (up to 20-30 applications) Electrode Body Pads that can be used to deliver targeted electrical stimulation.


The Body Pads cannot be used at the same time as the foot-pads.
Using the Body Pads will automatically turn the foot-pads off.

Use Revitive Body Pads in EMS mode as and when required, from 30 minutes per day.


Do not use Revitive in EMS mode for more than 6 sessions of 30 minutes (or the equivalent) per day. This may result in muscle fatigue.

a Select the area you wish to apply electrical stimulation to.

 Example Body Pad placements are shown below:

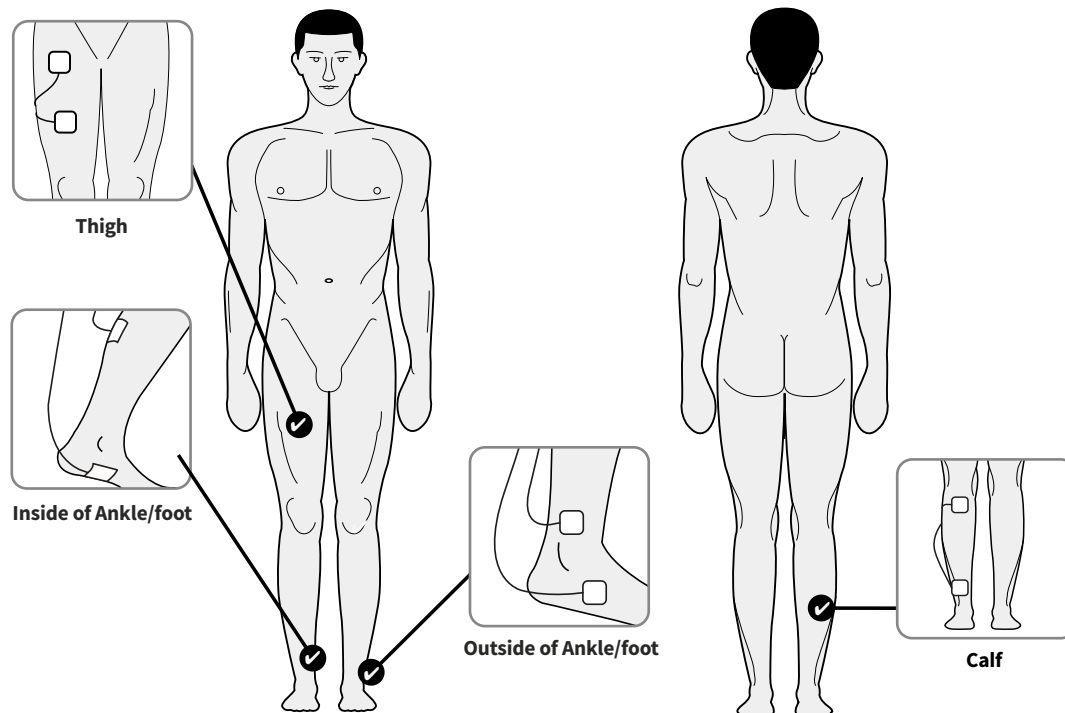


Do NOT use the Body Pads on your head, face, neck or chest

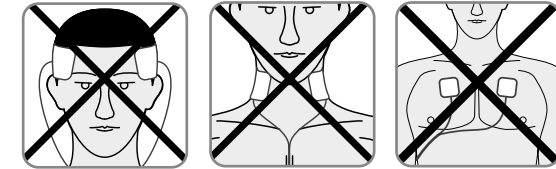


b Clean and dry the area where you will place the Body Pads.


c Make sure Revitive is switched off. If the control panel is still illuminated, press the power button and turn Revitive off.

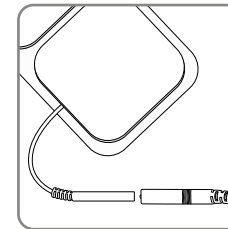


d Attach the ends of the electrode pad to the electrode cord.

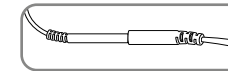

Press connectors until there is no gap between them.
 Leaving a gap may cause discomfort or no stimulation.

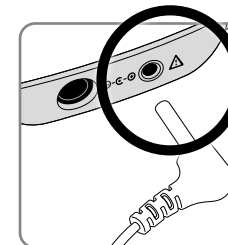


e Plug the other end of the Electrode Cord into the opening on the side of Revitive.
Plugging in the Electrode Cord will automatically turn the foot-pads off.

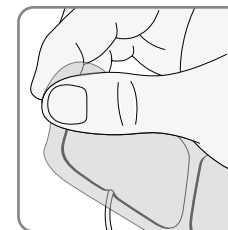

f Remove the plastic liner from the Body Pads, by peeling it off carefully. Replace the Body Pads onto the plastic liner after use.

Instructions for use

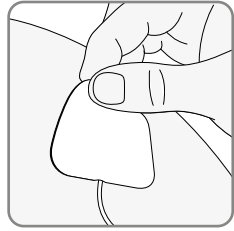

- g** Press the Body Pads on the area you wish to apply electrical stimulation to, as shown on page 14, gently pressing the adhesive side against the skin.



- h** Press the power button on the Revitive.
You will hear a beep and the display lights will read 30 minutes.
- To turn off the device at any time during operation, press the power button.



- i** Press the (+) Intensity Control one time to start stimulation.
Press the (+) button to increase the level.
Press the (-) button to decrease the level.

- j** Ensure you familiarise yourself with the feeling of Electrical Muscle Stimulation (EMS). Use on a low intensity for 30 minutes once per day for a few days.
- It is normal to feel tingling or varying sensations in your muscles you are treating.


- k** After a few days of familiarisation, use a higher intensity that provides you with **strong but comfortable muscle contractions**.
- You can set the intensity between 1-50.
- Please note that the intensity required may vary from day to day.

- l** The time display will start to count down in minutes as Revitive cycles through its program.

- m** When Revitive times out, the time display reads 00 and you will hear three beeps, and the device will switch itself off automatically.


If you feel pain or discomfort:

- Lower the intensity of the Body Pads using the (-) Intensity Control.
- You can also choose to stop therapy before the end of the 30 minute session to avoid skin irritation. You can do this by pressing the power button.

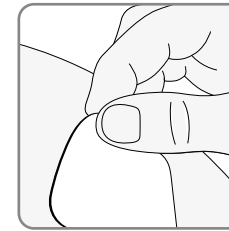


- n** Ensuring that the device has switched itself off, then gently peel the Body Pads from the skin.

Do not pull the Body Pads off the skin using the Electrode cords as this may damage the cords.

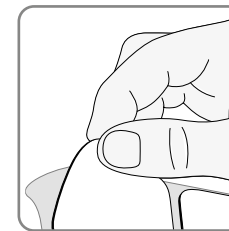

- o** Replace the Body Pads onto its plastic liner after use.

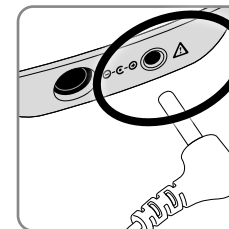

- p** Unplug the Electrode cord from the opening on the device.
- You do not need to detach the Body Pads from the Electrode cord.

Instructions for use

Cleaning and storing Revitive

- a** Ensure Revitive is switched off.
- b** Wipe down the foot-pads with a soft damp cloth.
Do not clean with chemicals.
Do not immerse Revitive in water.
- c** Store Revitive in a cool, dry and dust-free location.
Store out of direct sunlight.
- d** Place Body Pads onto the plastic liner.
- e** Store the Body Pads in a dry and ventilated location.
Store out of direct sunlight.
You do not have to detach the Body Pads from the Electrode cords to store them.

Replacing the Body Pads

The Body Pads are reusable up to 20-30 applications. If the Body Pads start to lose their adhesiveness, rub a few drops of water into the surface. Replacement Body Pads can be obtained via www.revitive.com.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Revitive is on (lights illuminated on the LED display) but I cannot feel the electrical stimulation through the foot-pads.	Not placing both bare feet on the foot-pads at the same time.	Ensure that your feet are bare and each foot is placed on each of the foot-pads at the same time. Keep increasing the intensity up to a maximum of 50 until you feel the stimulation.
	Your feet may be dry.	Moisturise the soles of your feet to improve conductivity and stimulation and try the procedure again. You may also have to increase the intensity level.
	You may be dehydrated.	Drink plenty of water before and after using the device. The device uses your body to create the electrical circuit. Water is an excellent conductor of electricity and if your body is less hydrated (below 60%) then the stimulation may be less, therefore it is important to always remain well hydrated.
	The intensity level may be on too low a setting.	This is a very safe device. Keep increasing the intensity level towards 50 until you feel the stimulation. You may find that you have to increase the intensity level as you get used to the therapy. The aim is not to get to 50 but to find a setting that is comfortable for you.
	Electrode cord is connected to device.	Disconnect the Electrode cord - the foot-pads will not work while the Electrode cord is plugged in.
	If, having tried the solutions above, you still cannot feel the stimulation:	Test the device by placing one hand across both footpads at the same time (The heel end of the footpads is easiest). With your other hand, and starting from zero, increase the intensity level until you can feel the stimulation. If you can feel the stimulation through your hand then the device is working. If on 50 you still cannot feel the stimulation then please contact your authorised dealer.
No power or lights to Revitive when it is switched on.	AC Adaptor not switched on at the electrical socket or AC Adaptor not plugged into device properly.	Check electrical socket power is switched on and the AC Adaptor is plugged into the device correctly. If still not working – contact your authorised dealer.
Revitive is not vibrating.	REVITIVE IS NOT DESIGNED TO VIBRATE.	
My legs are aching after treatment.	You may have the intensity on too high a setting and your muscles are being overworked.	Leave adequate time after each treatment to allow the muscles to recover (just like after vigorous exercise!). On your next session start on a lower setting (where you can feel the mild electrical stimulation and it is comfortable) and reduce the duration until your muscles have acclimatized to the stimulation.

For more information including Frequently Asked Questions, please visit www.revitive.com

Technical specifications

Name of product	Revitive Essential
Model	RLV
Frequency (+/-10%)	Foot: 20 to 44Hz Body: 37 to 51Hz
Output current	Max 8.5mA
Weight (+/-0.5kg)	1.13kg
Dimensions	Ø 355 mm x 77(D) mm
Power consumption	5W
AC adaptor	CE Approved
Power source Input (adaptor used)  Output 	100-240V  AC (), 50/60Hz, 0.18A 5V () DC  ,1.0A
Service Life of Device Period of time specified by the manufacturer during which the device is expected to remain safe for use.	4 Years
Applied parts Part of Revitive that in normal use come into physical contact with user to perform therapy	Foot-pads - 135.5cm ² Electrode Body Pads - 5cm x 5cm = 25cm ²

Output Specifications for Electrical Muscle Stimulation (EMS):



Waveform		Biphasic	
Shape		Square symmetrical with polarity reversal	
Maximum Output Voltage (+/-15%)	@500Ω	Foot: 21.5Vp	Body: 21.5Vp
Pulse Duration (+-10%)		Foot: 450 or 970μs (Mode 7)	Body: 450μs
Net Charge	@ 500Ω	[0.001]mC	
Maximum Power Density	@ 500Ω	Foot: 0.19 mW/cm²	Body: 1.50 mW/cm²
ON Time (+-10%)		Foot: 1.9 - 8.3s	Body: 1.9 - 6.5s
OFF Time (+-10%)		Foot: 1.00 - 1.50s	Body: 1.00s

The values of PULSE DURATIONS, PULSE repetition frequencies and amplitudes, including any d.c. component, shall not deviate by more than ± 20 % when measured with a load resistance within the range specified.

If confirmation is required that the Revitive works within its Essential Performance after a certain period of time, contact the manufacturer

Symbols

Complies with European Medical Devices Directive (93/42/EEC)	
Device serial number including year (YYYY) and month (MM) of manufacture can be found on the box and back of unit	 #YYYYMMXXXXX
Item number	
Contraindications, Warnings and Cautions Make sure you understand these before using Revitive	
Power	
Time Remaining	
Intensity Level	
Center Positive Polarity	
Class II medical electrical equipment double insulated	
Type BF medical electrical equipment	
Legal manufacturer of the device	
EU/EC European Authorized Representative	
UK Conformity Assessed Product conforms to all applicable U.K. legislative requirements.	
FCC mark Certification mark employed on electronic products manufactured or sold in the United States which certifies that the electromagnetic interference from Revitive is under limits approved by the Federal Communications Commission. Actegy Ltd complies with all applicable FCC rules.	

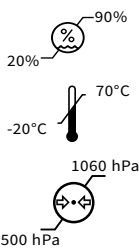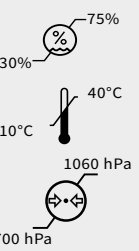Consult instructions for use	
The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive). At the end of the product lifecycle, do not throw this product into normal household garbage, but take it to a collection point for the recycling of electronic equipment	
Ingress Protection Rating	IP21
Use-by date	 YYYY MM DD
Humidity, temperature and air pressure limit for storage and transport	
Humidity, temperature and air pressure limit for operating conditions After any exposure to hot or cold temperatures outside the specified operating range of 10 - 40°C allow the product to re-adjust to the recommended operating temperatures to ensure continued product performance.	
Indoor Use Only	
Medical device does not contain natural rubber latex	
Do not disassemble	

Your 2-year warranty

It is important to retain the retailer's receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference.

Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the base of the product:

Model no:

Lot no:

All Revitive devices are individually tested before leaving the factory. In the unlikely event of any device proving to be faulty within 30 days of purchase, it should be returned to the place of purchase for it to be replaced.

If the fault develops after 30 days and within 24 months of original purchase, you should contact your local distributor quoting model number and LOT number on the product, or write to your local distributor at the address shown.

You will be asked to return the product (in secure, adequate packaging) to the address shown with a copy of proof of purchase.

Subject to the exclusions set out below (see Exclusions) the faulty device will then be repaired or replaced and dispatched, usually within 14 working days of receipt.

If, for any reason, this item is replaced during the 2-year guarantee period, the guarantee on the new item will be calculated from the original purchase date. Therefore, it is vital to retain your original till receipt or invoice to indicate the date of initial purchase.

To qualify for the 2-year guarantee, the device must have been used according to the manufacturer's instructions supplied.

Exclusions

- 1 Actegy, manufacturer of Revitive devices, shall not be liable to replace the goods under the terms of the guarantee where:
 - The fault has been caused or is attributable to accidental use, misuse, negligent use or used contrary to the manufacturer's recommendations or where the fault has been caused by power surges or damage caused in transit.
 - The device has been used on a voltage supply other than that stated on the product or used with a power adaptor other than the one supplied with the product.
 - Repairs have been attempted by persons other than our service staff (or authorised dealer).
 - The device has been used for hire purposes or non-domestic use.
 - The device is second hand.
- 2 Actegy are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee.
- 3 Accessories such as Electrode Body Pads and bags are not covered by the guarantee.
- 4 Remote control batteries and any damage from leakage are not covered by the guarantee.
- 5 This guarantee does not confer any rights other than those expressly set out above and does not cover any claims for consequential loss or damage. This guarantee is offered as an additional benefit and does not affect your statutory rights as a consumer.

**To activate your free 2-year warranty please register your device at:
support.revitive.com**


Sommaire

Que contient la boîte ?	24
Pièces et commandes	25
Introduction à Revitive	26
Profil de l'utilisateur	26
Comment fonctionne Revitive	26
Indications d'utilisation	26
Précautions importantes	27-30
Quand NE PAS utiliser Revitive	27
Avertissements et mises en garde	28-29
Précautions de sécurité	30
Effets indésirables	30
Mode d'utilisation	31-38
Comment bénéficier au mieux de Revitive ?	31
Étape 1 : Réglage initial de l'appareil Revitive	31
Étape 2 : Utilisation des repose-pieds	32-33
Étape 3 : Utilisation des électrodes	34-37
Nettoyage et rangement de l'appareil	38
Remplacement des électrodes	38
Dépannage	39
Spécifications techniques	40-41
Garantie	42


Que contient la boîte ?

Lorsque vous ouvrez la boîte, veuillez vérifier que les éléments suivants sont bien présents. Si vous pensez que quelque chose manque, veuillez nous contacter en utilisant l'un des numéros d'assistance téléphonique indiqués au dos de ce livret.

- 1** Adaptateur universel
Longueur du câble 180cm

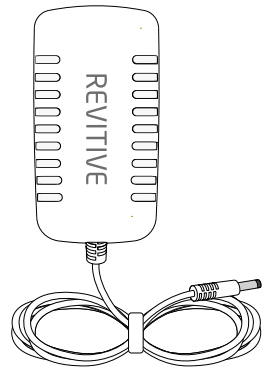


- 2** Électrodes corporelles

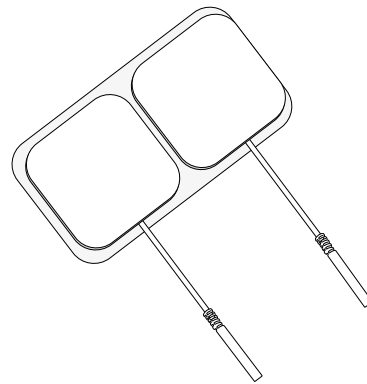



- 3** Appareil Revitive




- 4** Cordons des électrodes
Longueur du câble 150cm

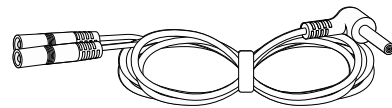

Pièces et commandes

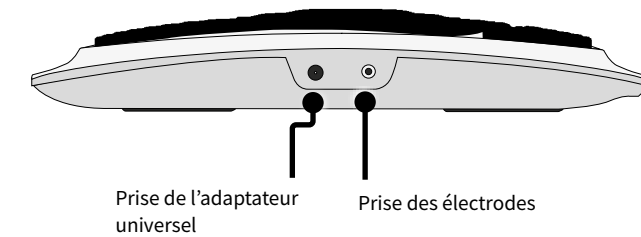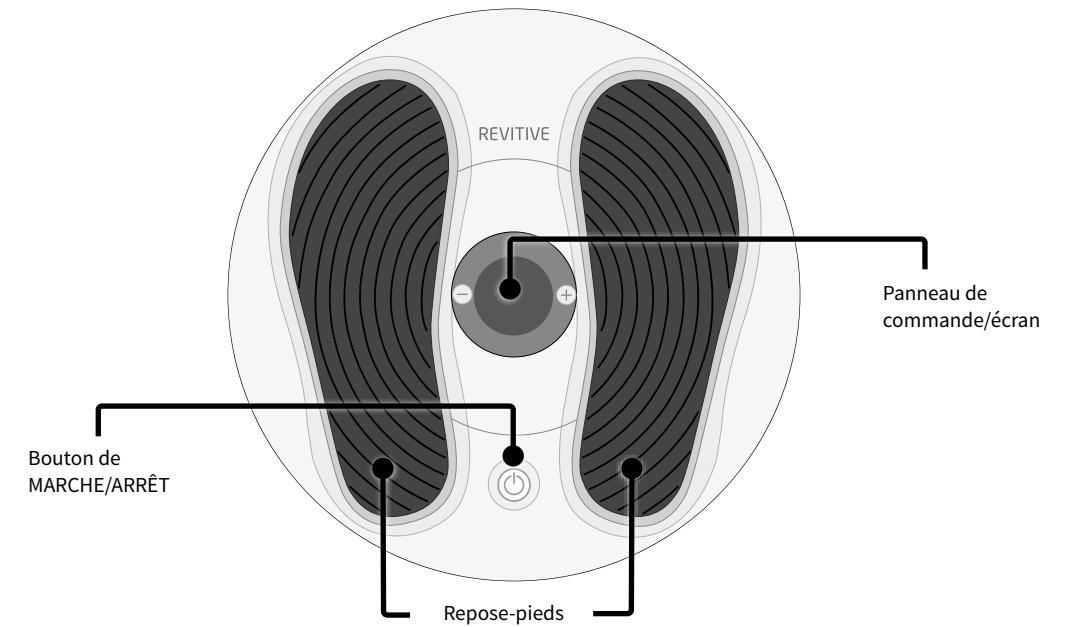

Panneau de commande/écran

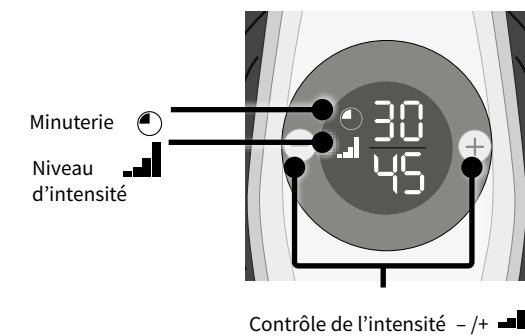

Introduction à Revitive

Profil de l'utilisateur

Le Revitive est destiné à un usage à domicile par les personnes ayant un mode de vie sédentaire ou qui passent de longues périodes assises ou debout, et qui souffrent de problèmes associés comme des douleurs, des raideurs et des gonflements au niveau des jambes, des chevilles et des pieds.

Le Revitive est conçu pour une utilisation hors clinique sans la surveillance ni l'intervention d'un clinicien.

Un utilisateur typique est un adulte de n'importe quel âge, sans distinction de sexe, d'ethnicité ou d'éducation.

Comment fonctionne Revitive

Revitive délivre une électrostimulation musculaire (EMS) à vos pieds par l'intermédiaire d'une paire de repose-pieds rembourrés, pendant que vous êtes assis. L'électrostimulation provoque la contraction des muscles de vos mollets et de vos pieds, ce qui contribue à améliorer la circulation dans la partie inférieure des jambes.

Revitive a été développé pour un grand confort d'utilisation.

Revitive peut également délivrer une stimulation électrique au niveau des genoux, des épaules, du dos et des bras, par l'intermédiaire des électrodes corporelles fournies.

Indications d'utilisation

Lors de l'utilisation des repose-pieds, le Revitive vise à :

- Améliorer la circulation sanguine pour réduire ou prévenir l'accumulation du sang (stase) due à un style de vie sédentaire ou à de longues périodes en position assise ou debout
- Contribuer au maintien de la santé des veines des jambes, en augmentant la circulation et l'apport en sang oxygéné des jambes, des pieds et des chevilles

Les indications d'utilisation susmentionnées sont certifiées conformément à la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE

De plus, si vous avez un style de vie sédentaire ou des périodes d'inactivité prolongées, Revitive peut contribuer à :

- Renforcer les muscles de la jambe
- Soulager les pieds fatigués et les jambes lourdes
- Augmenter activement la circulation.

Rendez-vous sur www.revitive.fr pour plus d'informations

Précautions importantes

Lire toutes les instructions avant utilisation.

Quand ne pas utiliser Revitive.

Revitive ne doit pas être utilisé par certaines personnes.



Ne pas utiliser dans les cas suivants (contre-indications) :

- Si vous portez un dispositif électronique implanté tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur cardioveteur implantable automatique (DCIA)
- Si vous êtes enceinte
- Si vous suivez un traitement ou présentez des symptômes relatifs à une thrombose veineuse profonde (« TVP ») existante

Les longues périodes d'inactivité vous font courir un plus grand risque de développer une thrombose veineuse profonde (TVP). Une TVP se caractérise par un caillot de sang qui se forme généralement dans les veines profondes des jambes. En se détachant, une partie de la TVP risquerait d'entraîner des complications dangereuses telles qu'une embolie pulmonaire.

Si vous avez été inactif/inactive pendant des périodes prolongées, et que vous pensez peut-être souffrir d'une TVP, consultez immédiatement votre médecin. **Pour éviter tout déplacement du caillot, n'utilisez pas Revitive.**

Certaines TVP ne présentent aucun symptôme. Cependant, il est important de noter que les symptômes peuvent inclure :

- une douleur, un gonflement ou une sensibilité au niveau d'une jambe (en général dans le mollet)
- une douleur sourde au niveau de la zone concernée
- une peau plus chaude dans la zone du caillot
- une rougeur de la peau, en particulier à l'arrière de la jambe, au-dessous du genou

Consultez votre médecin dès que possible si vous remarquez l'un des symptômes ci-dessus.

Précautions importantes



Avertissements

Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si :

- Vous êtes suivi(e) par un médecin
- Vous avez des antécédents de problèmes cardiaques
- Vous avez suivi un traitement médical ou une kinésithérapie pour votre douleur
- Vous présentez une cardiopathie suspectée ou diagnostiquée
- Vous souffrez de problèmes suspectés ou diagnostiqués d'épilepsie
- Vous n'avez pas la certitude que le Revitive vous convient
- Vous ne connaissez pas précisément la cause de vos symptômes

Si vous avez un implant métallique :

- Vous pourriez être susceptible de ressentir une gêne ou une douleur au niveau de cet implant lors de la stimulation électrique ; dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin
- La stimulation électrique peut être ressentie plus intensément à proximité d'un implant métallique. L'utilisation de l'appareil peut se poursuivre si toutefois aucune douleur n'est ressentie. Il peut être nécessaire de régler l'intensité de la stimulation, pour atteindre un niveau confortable

Précautions d'utilisation des repose-pieds ou des électrodes corporelles :

- **N'utilisez pas** les électrodes sur la tête, le visage, le cou, la poitrine ou l'intérieur des cuisses et reportez-vous au schéma pour la pose correcte des électrodes
- L'application des électrodes près du thorax (la poitrine) peut augmenter les risques de fibrillation cardiaque
- N'appliquer que sur les zones où la peau est intacte
- Ne pas utiliser les repose-pieds et ne pas appliquer les électrodes corporelles directement sur ou à côté de :
 - une lésion cutanée, une plaie ouverte ou une zone irritée, enflée, rouge, infectée ou enflammée, ou une éruption cutanée (telle que phlébite, thrombophlébite, varices, cellulite). Vérifiez sous vos pieds et vos orteils avant d'utiliser l'appareil.
 - lésions cancéreuses/tumeurs malignes
 - des nerfs du sinus carotidien (avant du cou), plus particulièrement chez les patients présentant une hypersensibilité sinocarotidienne
 - sur des zones traitées par radiothérapie (au cours des 6 derniers mois)
 - des organes reproductifs
 - l'intérieur des cuisses et reportez-vous au schéma pour la pose correcte des électrodes
- Lorsque vous utilisez la neurostimulation électrique transcutanée, ne l'appliquez pas à des zones cutanées dépourvues de sensations normales
- Les électrodes sont strictement réservées à votre usage personnel ; ne les partagez pas avec qui que ce soit
- **N'utilisez pas** les électrodes au-delà de leur date de péremption
- Il est possible que vous ressentiez une irritation cutanée ou des brûlures sous l'effet des électrodes ou une hypersensibilité due à l'électrostimulation
- Si vous utilisez un gel ou baume hydratant sur vos pieds, assurez-vous qu'il soit appliqué uniformément et qu'il soit bien absorbé par la peau, avant toute stimulation. Il est possible que l'application inégale du produit hydratant augmente le risque d'irritation cutanée et provoque même une sensation de brûlure à l'application de l'électrostimulation
- Les symptômes peuvent s'aggraver au cours de la phase initiale avant de remarquer une amélioration. Cela peut être dû au fait que votre corps ne s'est pas encore adapté à l'augmentation de l'activité musculaire ou de la circulation sanguine. Si cela se produit, réduisez le niveau d'intensité et la durée du traitement afin de soulager les symptômes initiaux. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin



Avertissements

Utilisation proscrite :

- Certains environnements ne se prêtent pas à l'utilisation du Revitive. **N'utilisez pas** :
 - En présence d'équipements de surveillance électronique
 - Avec un dispositif électronique médical d'assistance vitale
 - Dans le bain ou sous la douche
 - Pendant le sommeil
- En association avec une attelle ou un plâtre sans l'avis de votre médecin
- Il est déconseillé de poser le Revitive sur ou à proximité d'autres appareils pendant son utilisation, au risque d'entraîner des dysfonctionnements. Si une telle utilisation s'avère nécessaire, il conviendra d'observer tous les appareils concernés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement

Avertissements supplémentaires :

- L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil pourrait augmenter les émissions électromagnétiques ou réduire l'immunité électromagnétique de l'appareil et entraîner un dysfonctionnement
- Les équipements portables de communication par radiofréquence (dont les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne devraient pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie du système Revitive, y compris les câbles spécifiés par le fabricant



Mises en garde

Lors de la stimulation :

- Faites preuve de prudence quand vous stimulez des zones cutanées dépourvues de sensations normales. Cela peut provoquer une irritation de la peau due à l'impossibilité de ressentir la stimulation avant que l'intensité ne soit trop forte ; utilisez un niveau d'intensité plus faible pour obtenir une contraction musculaire douce, et/ou utilisez l'appareil moins longtemps pour éviter l'hyperstimulation. Vérifiez s'il y a des signes d'irritation de la peau (rougeurs), des bleus ou une douleur. En cas de doute, consultez votre médecin
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles ne soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité

Lors de l'utilisation de la stimulation EMS :

- Faites preuve de prudence quand vous appliquez la stimulation :
 - Sur l'abdomen pendant les règles
 - Après de récentes interventions chirurgicales (dans les six derniers mois), car la stimulation pourrait perturber le processus de cicatrisation
 - Si les tissus risquent de saigner à la suite d'une blessure de type déchirure musculaire, nous vous conseillons de ne pas stimuler la zone concernée dans les 12 heures qui suivent la blessure. Utilisez une faible intensité et/ou utilisez l'appareil moins longtemps pour éviter l'hyperstimulation
- Après une longue période d'immobilité ou d'inactivité, utilisez une faible intensité et utilisez l'appareil moins longtemps, pour éviter l'hyperstimulation ou la fatigue musculaire

Mises en garde supplémentaires :

- Les effets à long terme de la stimulation électrique ne sont pas connus
- Il est possible que la stimulation électrique ne soit pas efficace chez certains utilisateurs. Veuillez demander conseil à votre médecin

Précautions importantes



Précautions de sécurité

- Ne vous tenez pas debout sur l'appareil : utilisez-le uniquement en position assise
- Positionnez le Revitive de manière à pouvoir l'éteindre ou le débrancher en toute aise
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême
- Ne renversez pas de liquide sur l'appareil ou ses accessoires
- Ne surchargez pas la prise électrique
- Tenez cet appareil hors de la portée des enfants
- Tenez les câbles électriques et les cordons hors de portée des enfants, pour prévenir tout risque d'étranglement
- Le Revitive peut être utilisé par plusieurs personnes, mais assurez-vous de nettoyer l'appareil entre deux utilisations
- Pendant l'utilisation, ne touchez les repose-pieds avec les mains qu'une fois que l'appareil a été éteint
- N'utilisez le Revitive qu'avec les accessoires fournis ou achetés auprès du fabricant
- Vérifiez régulièrement que les électrodes corporelles, les cordons et les câbles sont en parfait état
- N'ouvrez pas votre appareil Revitive et ne le réparez pas vous-même, car cela annulerait la garantie et risquerait d'occasionner des blessures graves
- Au cas peu probable où votre appareil Revitive présenterait un dysfonctionnement, débranchez-le de la source d'alimentation et prenez contact avec votre agent agréé le plus proche
- Le Revitive a passé avec succès les tests requis sur les interférences électromagnétiques, mais peut être affecté par un niveau excessif d'émissions et/ou causer des interférences sur les équipements plus sensibles
- Après toute exposition à des températures basses ou élevées en dehors de la plage opérationnelle spécifiée de 10 – 40 °C, laissez l'appareil se réajuster aux températures de fonctionnement recommandées pour assurer la continuité de ses performances
- Il a été signalé que certaines télécommandes universelles (pour la télévision, par exemple) peuvent modifier les réglages du Revitive si elles sont utilisées pendant un traitement ; si cela se produit, il vous suffit de régler à nouveau l'heure ou l'intensité de votre appareil Revitive à l'aide de sa télécommande ou de son panneau de commande



Effets indésirables

- Si vous ressentez un effet indésirable, cessez d'utiliser le Revitive et consultez votre

Mode d'utilisation

Comment bénéficier au mieux de Revitive ?

Pour des résultats optimaux :

- Utilisez les repose-pieds **Revitive pendant au moins 30 à 60 minutes chaque jour**, 7 jours par semaine
- Il est important d'utiliser l'appareil Revitive à une intensité suffisante pour obtenir une contraction musculaire forte mais confortable. La plupart des utilisateurs obtiennent une contraction musculaire forte à partir d'un **niveau d'intensité de 40** (plage d'intensité de 1 à 50).
- Si vous souffrez d'un trouble médical de longue durée diagnostiqué (par exemple hypertension, taux de cholestérol élevé, diabète, arthrose, insuffisance veineuse chronique (IVC), artérite des membres inférieurs ou bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), **il est possible que vous deviez patienter jusqu'à 8 semaines** pour constater une amélioration des symptômes liés à ces troubles.


N'utilisez pas l'appareil Revitive avec l'électrostimulation musculaire (EMS) pendant plus de six séances de 30 minutes (ou équivalent) par jour.

Étape 1 : Réglage initial de l'appareil Revitive

a Retirez toutes les pièces de la boîte :

- Adaptateur d'alimentation
- Appareil Revitive
- Électrodes corporelles
- Cordons des électrodes


Consultez les pages 24 de la section « Que contient la boîte ? » pour identifier les pièces.

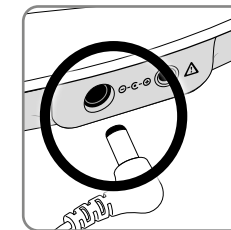

b

Trouvez l'adaptateur d'alimentation.

Branchez la petite extrémité du cordon d'alimentation dans l'ouverture située sur le côté de Revitive.

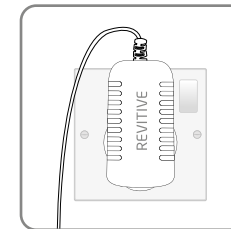

c



Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise de courant la plus proche.

Avant d'utiliser votre appareil Revitive pour la première fois, lisez les avertissements et mises en garde aux pages 27 à 30. En cas de doute, consultez votre médecin avant toute utilisation de l'appareil.

Mode d'utilisation

Étape 2 : Utilisation des repose-pieds

Asseyez-vous et placez les pieds nus sur les repose-pieds

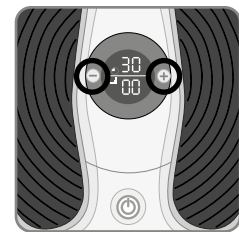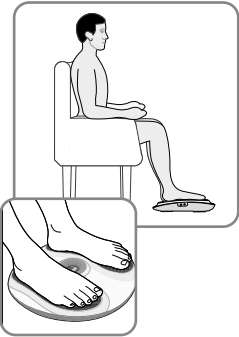

- a** Il est important de vous hydrater. Nous vous recommandons de boire un verre d'eau avant d'utiliser Revitive.
- Vous pouvez également appliquer une crème hydratante sur la plante des pieds pour favoriser l'hydratation de la peau.

Astuce : le fait d'appliquer une crème hydratante sur la plante des pieds avant d'utiliser Revitive peut améliorer la stimulation électrique.

- b** Asseyez-vous dans une position confortable.
Pour optimiser les résultats, asseyez-vous avec les genoux à 90 degrés (angle droit).
- c** Placez Revitive sur le sol, devant vous.

Cet appareil est conçu pour être utilisé en position assise.
Ne vous tenez jamais debout sur cet appareil.

- d** Placez les **deux pieds nus** sur les repose-pieds.
Assurez-vous d'avoir enlevé vos chaussures, chaussettes ou collants.
- e** Pour allumer l'appareil, appuyez sur son bouton de marche/arrêt.
L'appareil émet un bip, et l'écran s'allume.
La durée ⌚ réglée sur 30 minutes et l'intensité 📶 sur 00.
- Pour éteindre l'appareil à tout moment en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton de marche/arrêt

- f** Appuyez une fois sur la touche de commande d'intensité 📶 (+) pour lancer la stimulation.
- Appuyez sur la touche (+) pour augmenter l'intensité.
Appuyez sur la touche (-) pour diminuer l'intensité.

- g** Il est important que vous vous familiarisiez à la sensation d'électro-stimulation musculaire (EMS). Commencez par utiliser une faible intensité pendant 30 à 60 minutes par jour, pendant quelques jours.
- Ensuite, réglez l'intensité à un niveau auquel vous pouvez ressentir la stimulation dans les pieds, ce qui entraîne une contraction des mollets.
- Il est normal de sentir des fourmillements ou des sensations diverses dans les muscles des mollets.
- Revitive **n'est pas** censé vibrer.

- h** Après quelques jours de familiarisation, utilisez un niveau d'intensité supérieur, qui vous permet d'obtenir **des contractions musculaires fortes mais confortables**.

La plupart des utilisateurs ressentent une contraction forte à un niveau d'intensité de 40 ou plus. Vous pouvez régler l'intensité de 1 à 50.

Veuillez noter que l'intensité requise peut varier d'un jour à l'autre.

Si vous ressentez une gêne ou de la douleur :

- Retirez un pied, ou les deux, des repose pieds pour arrêter la stimulation
- Réduisez l'intensité des repose pieds à l'aide de la touche de commande d'intensité 📶 (-) du panneau de commande et remettez les pieds sur les repose-pieds Revitive

- i** L'affichage du temps ⌚ commence le compte à rebours en minutes dès que Revitive entame le cycle de son programme.

- j** Quand la séance arrive à sa fin, l'affichage du temps ⌚ indique 00 et l'appareil émet trois bips.

- k** L'appareil Revitive s'éteint alors automatiquement.

Mode d'utilisation

Étape 3 : Utilisation des électrodes corporelles



Les électrodes sont strictement réservées à votre usage personnel ; ne **pas** les partager avec autrui

Revitive est fourni avec une paire d'électrodes corporelles réutilisables (entre 20 et 30 applications maximum) qui peuvent être utilisées pour stimuler les muscles au niveau du dos, des épaules, des cuisses, des genoux ou des bras.


Les électrodes corporelles ne peuvent pas être utilisées en même temps que les repose-pieds. Leur utilisation désactive automatiquement les repose-pieds.

Utilisez les électrodes corporelles de Revitive en mode EMS selon vos besoins et au minimum 30 minutes par jour.


N'utilisez pas Revitive pendant plus de 6 séances de 30 minutes (ou équivalent) par jour pour éviter toute fatigue musculaire.

a Sélectionnez la partie du corps à laquelle vous souhaitez appliquer l'électrostimulation

✓ Placez les électrodes selon l'illustration ci-dessous :


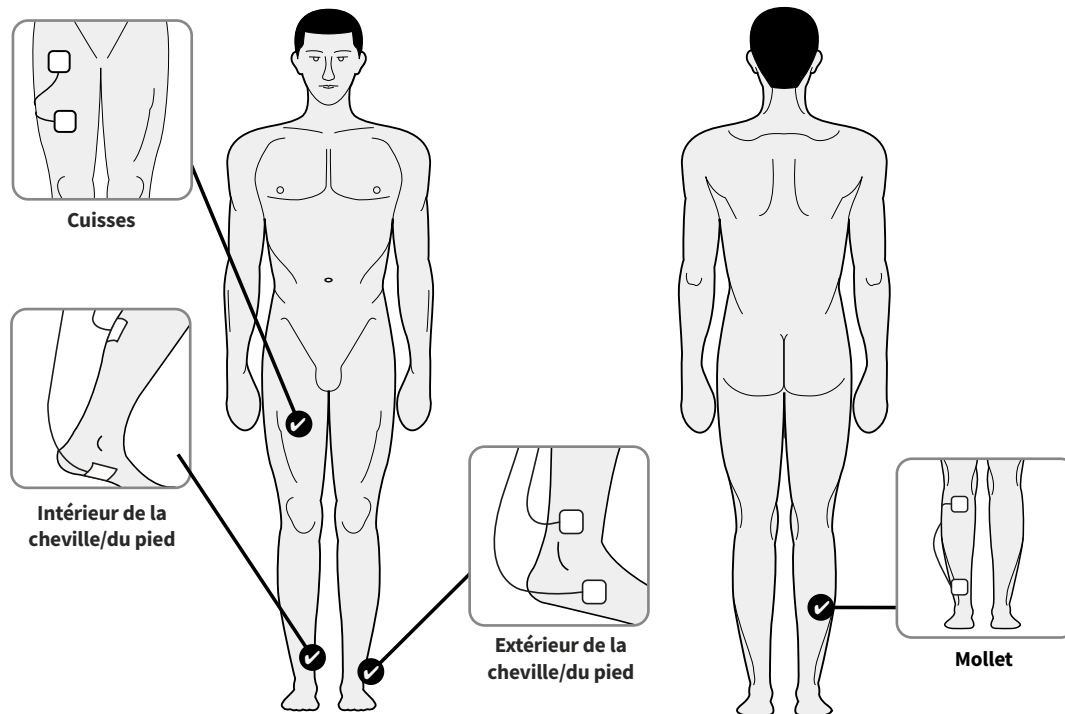


N'utilisez PAS les électrodes corporelles sur la tête, le visage, le cou ou la poitrine.

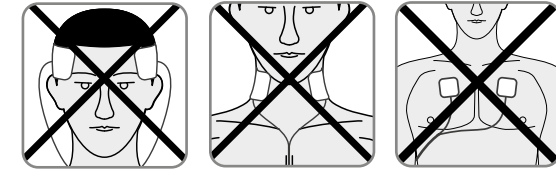


b Lavez et séchez la zone sur laquelle vous allez placer les électrodes corporelles.

c Vérifiez que Revitive est bien éteint. Si le panneau de commande est toujours allumé, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

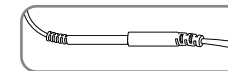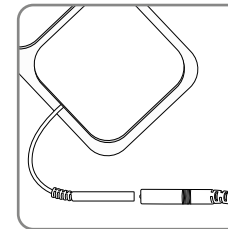


d Raccordez les électrodes corporelles à leur cordon.

Reliez les connecteurs jusqu'à ce qu'il **n'y ait plus d'espace** entre eux. Le fait de laisser un espace peut provoquer une gêne.

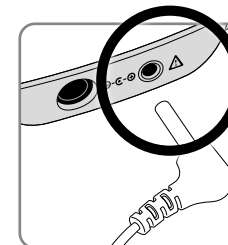


e Branchez l'autre extrémité du cordon des électrodes dans l'ouverture située sur le côté de l'appareil Revitive.

Le fait de brancher le cordon des électrodes désactive automatiquement les repose-pieds.

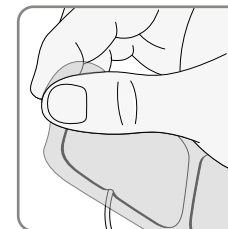

f Retirez soigneusement le film protecteur des électrodes. Remettez les électrodes en place sur leur film protecteur après utilisation.

Mode d'utilisation

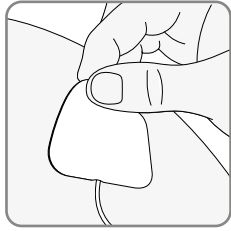

- g** Pressez les électrodes sur la zone à stimuler, comme indiqué à la page 34, en pressant doucement la face adhésive contre la peau.



- h** Appuyez sur le bouton de marche/arrêt de l'appareil.
L'appareil émet un bip et l'écran s'allume. La durée est réglée sur 30 minutes et l'intensité sur 00.
Pour éteindre l'appareil à tout moment en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton de marche/arrêt.




- i** Appuyez une fois sur la touche de commande d'intensité (+) pour lancer la stimulation.
Appuyez sur la touche (+) pour augmenter l'intensité.
Appuyez sur la touche (-) pour diminuer l'intensité.

- j** Il est important que vous vous familiarisiez à la sensation d'électrostimulation musculaire (EMS). Commencez par utiliser une faible intensité pendant 30 minutes par jour, pendant quelques jours.
Réglez l'intensité à un niveau auquel vous ressentez la stimulation.
Il est tout à fait normal de ressentir des picotements ou différentes sensations dans les muscles traités.
- k** Après quelques jours de familiarisation, utilisez l'appareil à un niveau d'intensité supérieur, jusqu'à obtenir des **contractions musculaires fortes mais confortables**.
La plupart des utilisateurs ressentent une contraction. Vous pouvez régler l'intensité de 1 à 50.
Veuillez noter que l'intensité requise peut changer d'un jour à l'autre.
- l** L'affichage du temps commence le compte à rebours en minutes dès que Revitive entame le cycle de son programme.
- m** Quand la séance arrive à sa fin, l'affichage du temps indique 00 et l'appareil émet trois bips et s'éteint alors automatiquement.


Si vous ressentez des douleurs ou une gêne :

- Diminuez l'intensité de la stimulation par les électrodes corporelles au moyen de la touche d'intensité (-) du panneau de commande.
- Vous pouvez également arrêter le traitement avant la fin de la séance de 30 minutes, pour éviter toute irritation cutanée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de marche/arrêt .

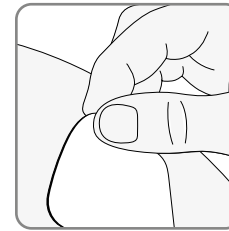


- n** Vérifiez que l'appareil s'est bien éteint, puis décollez soigneusement les électrodes de la peau.

Ne retirez pas les électrodes en tirant sur les cordons, car cela risque de les endommager.

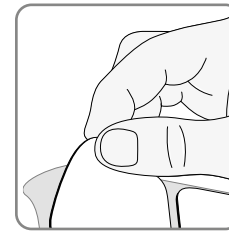

- o** Remettez les électrodes corporelles en place sur leur film protecteur après utilisation.

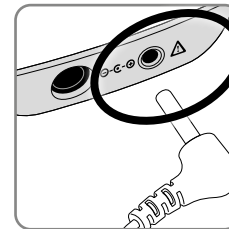

- p** Débranchez le cordon des électrodes de l'ouverture de Revitive.
Il n'est pas nécessaire de détacher les électrodes de leur cordon.

Mode d'utilisation

Nettoyage et rangement de l'appareil

- a** Vérifiez que Revitive est bien éteint.
- b** Essuyez les repose-pieds avec un chiffon doux et humide.
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits chimiques.
Ne plongez jamais Revitive dans l'eau.
- c** Rangez Revitive dans un endroit sec, frais et exempt de poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- d** Placez les électrodes sur leur film protecteur.
- e** Rangez les électrodes dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Il n'est pas nécessaire de détacher les électrodes de leur cordon pour les ranger.

Remplacer les électrodes

Les électrodes corporelles sont réutilisables de 20 à 30 fois. Si toutefois elles commencent à adhérer moins bien, humectez-en la surface et frottez doucement. Pour obtenir des électrodes de rechange, rendez-vous sur www.revitive.com

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Revitive est en marche (l'affichage LED s'éclaire), mais je ne ressens pas les impulsions électriques sur les repose-pieds.	Les deux pieds nus ne sont pas placés sur les repose-pieds en même temps.	Assurez-vous d'être pieds nus et d'avoir un pied sur chacun des repose-pieds en même temps. Augmentez l'intensité jusqu'au maximum de 50, ou jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation
	Vos pieds sont peut-être secs.	Hydratez la plante des pieds pour améliorer la conductivité et la stimulation et réessayez. Il peut être nécessaire d'augmenter le niveau d'intensité.
	Vous êtes peut-être déshydraté(e).	Buvez un grand verre d'eau avant et après chaque utilisation de l'appareil. En effet, l'appareil utilise votre corps pour créer un circuit électrique, or l'eau est un excellent conducteur électrique. Par conséquent, si votre corps est moins hydraté (moins de 60 %), la stimulation peut être plus faible. C'est pourquoi il est important de toujours bien s'hydrater.
	L'intensité est peut-être réglée sur un niveau trop bas.	Cet appareil est particulièrement sûr. Vous pouvez augmenter l'intensité de 00 à 50 jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation. Peut-être devrez-vous augmenter le niveau d'intensité à mesure que vous vous habituez au traitement. L'objectif n'est pas d'atteindre le niveau d'intensité 50, mais de trouver un réglage qui vous convient.
	Le cordon des électrodes est branché dans l'appareil.	Débranchez le cordon des électrodes : les repose-pieds ne fonctionneront pas tant que ce cordon sera branché.
	Si, après avoir essayé les solutions ci-dessus, vous ne ressentez toujours pas la stimulation :	Pour savoir si l'appareil fonctionne correctement, placez une main sur les deux repose-pieds à la fois (il est plus facile de mettre la main sur la partie étroite des repose-pieds). De l'autre main, en commençant à zéro, augmentez le niveau d'intensité jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation. Si votre main ressent la stimulation, l'appareil fonctionne bien. Si, au niveau 50, vous ne ressentez toujours pas de stimulation, veuillez contacter votre revendeur agréé.
Pas d'alimentation ni de voyants allumés sur Revitive quand on le met en marche.	L'adaptateur CA n'est pas allumé sur la prise secteur ou n'est pas correctement branché dans l'appareil.	Vérifiez que la prise est sous tension et que l'adaptateur CA est correctement branché dans l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à votre revendeur agréé.
Revitive is not vibrating.	REVITIVE N'EST PAS CONÇU POUR VIBRER.	
Mes jambes sont douloureuses après le traitement.	Vous avez peut-être réglé l'intensité sur un niveau trop élevé et vos muscles ont trop travaillé.	Après chaque traitement, laissez aux muscles le temps de se reposer (comme après tout exercice physique). Lors de votre prochaine séance, commencez à un niveau plus bas (pour ressentir une stimulation électrique légère et confortable) et réduisez la durée jusqu'à ce que vos muscles soient habitués à la stimulation.

Pour plus d'informations, y compris notre foire aux questions, rendez-vous sur www.revitive.fr

Spécifications techniques

Nom du produit	Revitive Essential
Modèle	RLV
Fréquence (+/-10%)	Pied: 20 pour 44Hz Corps: 37 pour 51Hz
Courant de sortie	Max 8.5mA
Poids (+/-0,5kg)	1.13kg
Dimensions	Ø 355 mm x 77(D) mm
Puissance consommée	5W
Adaptateur universel	CE Approved
Source d'alimentation Entrée (adaptateur utilisé) → Sortie →	100-240V  , 50/60Hz, 0.18A 5V (→) DC  , 1.0A
Durée de vie de l'appareil La période de temps spécifiée par le fabricant pendant laquelle l'appareil devrait continuer à être utilisable en toute sécurité.	4 ans
Parties en contact Les parties du Revitive qui, lors d'une utilisation normale, sont en contact physique avec l'utilisateur pendant le traitement.	Repose-pieds - 135.5cm ² Électrodes corporelles - 5cm x 5cm = 25cm ²

Caractéristiques de sortie pour l'électrostimulation musculaire (EMS) :



Signal		Biphasique	
Forme		Onde carrée symétrique avec inversion de polarité	
Tension de sortie maximale (+/-15%)	@500Ω	Pied : 21,5Vp	Corps : 21,5Vp
Durée des impulsions (+-10%)		Pied : 450 ou 970μs (Mode 7)	Corps : 450μs
Charge nette	@ 500Ω	[0,001]mC	
Densité de puissance maximale	@ 500Ω	Pied : 0,19 mW/cm²	Corps : 1,50 mW/cm²
Temps d'ACTIVATION (+-10%)		Pied : 1,9 - 8,3 s	Corps : 1,9 - 6,5 s
Temps de DÉSACTIVATION (+-10%)		Pied : 1,00 - 1,50 s	Corps : 1,00 s

Les valeurs de DURÉES DES IMPULSIONS, d'amplitudes et de fréquences de répétition des IMPULSIONS, y compris toute composante de courant continu, ne doivent pas dévier de plus de ± 20 % lorsqu'elles sont mesurées avec une résistance de charge située dans la plage spécifiée.

Pour savoir si l'appareil Revitive fonctionne toujours conformément à ses caractéristiques de performance essentielle après un certain temps, veuillez contacter le fabricant.

Symboles

Conforme à la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/CEE)	
Le LOT et le numéro de série de l'appareil, y compris l'année (AAAA) et le mois (MM) de fabrication, figurent sur la boîte et au dos de l'appareil	 AAAA MMXXXX
Numéro d'article	
Contre-indications, Avertissements et mises en garde Assurez-vous de bien comprendre ces avertissements et mises en garde avant d'utiliser Revitive	
MARCHE/ARRÊT	
Temps restant	
Niveau d'intensité	
Polarité positive centrale	
Matériel électrique médical de classe II à double isolation	
Matériel électrique médical de type BF	
Fabricant légal de l'appareil	
Représentant agréé européen UE/CE	
Conformité évaluée pour le Royaume-Uni Produit conforme à toutes les dispositions législatives applicables au Royaume-Uni.	
Marque FCC Marque de certification apposée sur les produits électroniques fabriqués ou vendus aux États-Unis, qui certifie que les interférences électromagnétiques générées par le Revitive se situent en dessous des limites approuvées par la Federal Communications Commission (FCC). Actegy Ltd respecte toutes les règles applicables de la FCC.	

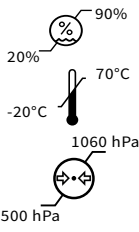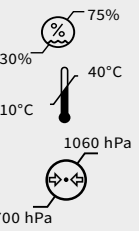Consultez les instructions d'utilisation	
Directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE). À la fin de son cycle de vie, ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers habituels ; apportez-le dans un centre de collecte et de recyclage des équipements électroniques.	
IP21 – Indice de protection (IP)	IP21
Utiliser avant le	 AAAA MM JJ
Seuils d'humidité, de température et de pression pour le rangement et le transport	 90% 20% 70°C -20°C 1060 hPa 500 hPa
Seuils d'humidité, de température et de pression pour le fonctionnement Après toute exposition à des températures hautes ou basses en dehors de la plage opérationnelle spécifiée de 10 à 40°C, laissez l'appareil se réajuster aux températures de fonctionnement recommandées pour assurer la continuité de ses performances.	 75% 30% 40°C 10°C 1060 hPa 700 hPa
Usage intérieur uniquement	
Dispositif médical ne contenant aucun latex de caoutchouc naturel	
Ne pas démonter	

Garantie 2 ans

1. Les Produits bénéficient d'une garantie commerciale constructeur de 24 mois à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison du Produit en cas d'achat sur internet. Cette garantie est valable pour les achats par des consommateurs effectués en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les Produits défectueux ou endommagés, couverts par cette garantie, seront échangés gratuitement par Revitive/Actegy ou par le revendeur du Produit, s'il n'a pas été acheté directement auprès de Revitive/Actegy (hors les cas d'exclusion de la garantie exposés ci-après). Il en est de même si, au-delà du délai de 24 mois précité, le Produit bénéficie d'une extension de garantie promotionnelle de la part de Revitive/Actegy, pour la durée de ladite extension.

2. Exclusions de garantie : la garantie commerciale constructeur de Revitive/Actegy ne sera pas applicable au cas où une intervention extérieure aurait été faite sur le Produit, ni en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, de négligence ou de défaut d'entretien des Produits par le Client.

3. Pour bénéficier de la garantie commerciale constructeur, le Client est invité à se rapprocher du revendeur du Produit, s'il n'a pas été acheté directement auprès de Revitive/Actegy, ou à contacter l'agence Revitive/Actegy locale aux coordonnées indiquées au dos de ce Manuel. Si le Produit est défectueux ou endommagé, hors les cas d'exclusion de garantie, le service client de Revitive/Actegy ou le revendeur du Produit organisera le retour et l'échange du Produit, gratuitement.

4. Le Produit doit être rangé dans sa boîte d'origine pour être renvoyé. Si le Produit est renvoyé sans son emballage d'origine, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Les périphériques et tous les accessoires et manuels du Produit doivent être inclus dans l'emballage lors de ce renvoi.

5. La présente garantie commerciale constructeur est accordée indépendamment et sans préjudice des garanties légales applicables. Le Client peut trouver le détail des garanties légales, lorsque cela est requis par la loi applicable, en ligne sur **www.revitive.fr/garantie**, ou le demander par courrier auprès de l'agence Revitive/Actegy locale.

6. La présente garantie est soumise au droit français pour les ventes réalisées en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas et au droit allemand pour les ventes réalisées en Allemagne, sous réserve, dans tous les cas, des règles impératives du pays de résidence du Client.

Bedienungsanleitung - Inhalt


Lieferumfang	44
Bedienelemente	45
Einführung in Revitive	46
Anwenderprofil	46
Wie Revitive funktioniert	46
Hinweise zum Gebrauch	46
Wichtige Sicherheitshinweise	47-50
Wer Revitive NICHT verwenden sollte	47
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	48-49
Sicherheitsvorkehrungen	50
Unerwünschte Nebenwirkungen	50
Bedienungsanleitung	51-58
Wie kann ich Revitive noch intensiver nutzen?	51
Schritt 1: Erstmalige Inbetriebnahme von Revitive	51
Schritt 2: Verwendung der Fuß-Pads	52-53
Schritt 3: Verwendung der Elektroden-Pads	54-57
Reinigung und Aufbewahrung	58
Austausch der Pads	58
Fehlerbehebung	59
Technische Daten	60-61
Garantie	62

Pour activer votre garantie gratuite de 2 ans, veuillez enregistrer votre appareil sur le site : support.revitive.com


Lieferumfang

Überprüfen Sie nach Öffnen der Verpackung, dass die folgenden Teile vorhanden sind. Sollte der Inhalt nicht vollständig sein, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

- 1** Netzteil
Kabellänge 180cm

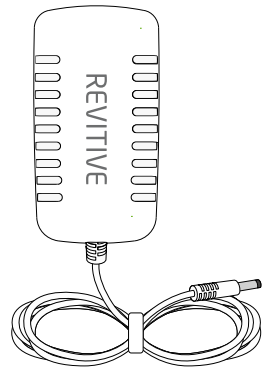


- 2** Elektroden-Pads

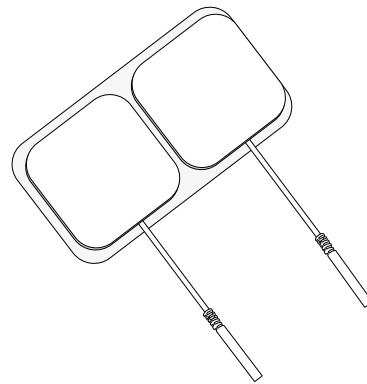




- 3** Revitive Gerät



- 4** Elektroden-Kabel
Kabellänge 150cm

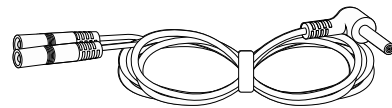

Bedienelemente

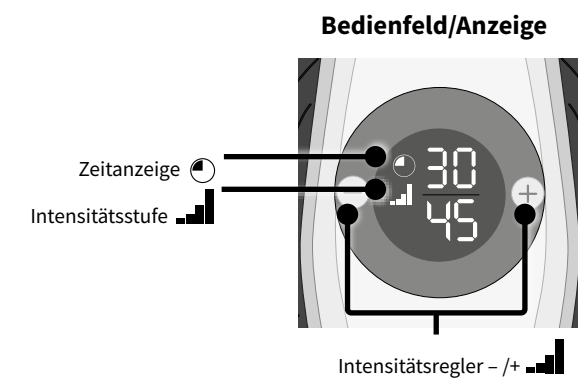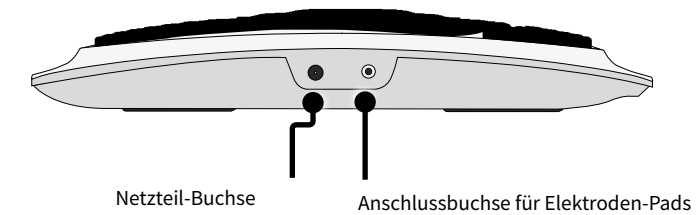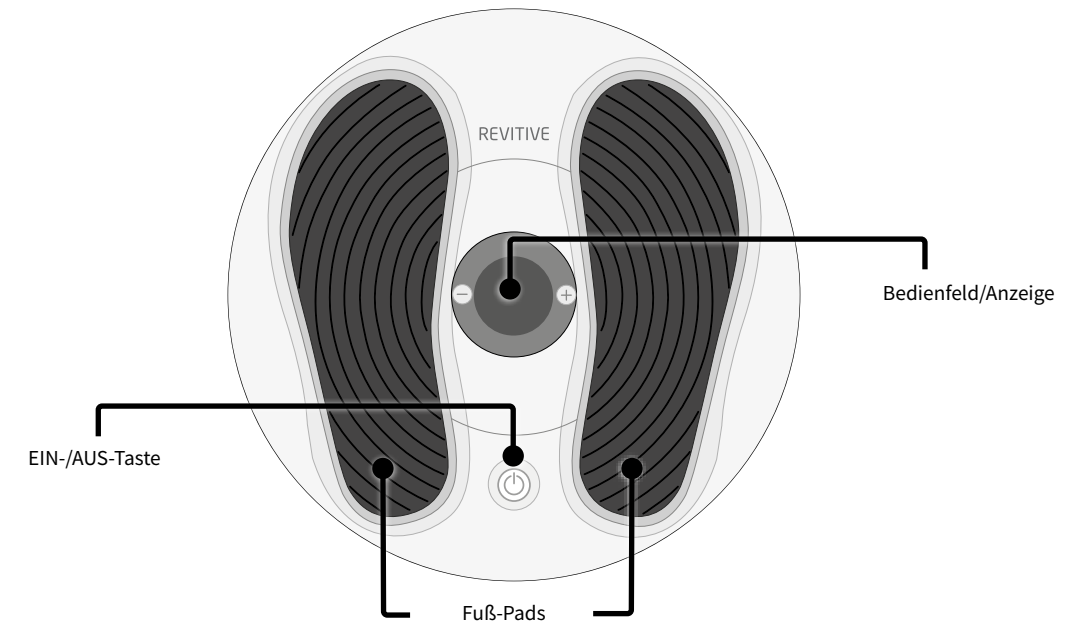

Einführung in Revitive

Anwenderprofil

Dieses Gerät ist für den Einsatz in der häuslichen Umgebung durch Personen vorgesehen, die sich insgesamt wenig bewegen oder häufig über einen längeren Zeitraum sitzen oder stehen und unter Schmerzen, steifen Beinen oder Schwellungen in den Beinen, Knöcheln und Füßen leiden.

Revitive ist für den direkten Einsatz durch den Anwender außerhalb einer klinischen Umgebung vorgesehen. Kontrollen oder Eingriffe von Klinikpersonal sind während der Anwendung nicht notwendig.

Typische Anwender sind im mehr oder weniger fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Geschlecht, Ethnie oder Bildung spielen dabei keine Rolle.

So funktioniert Revitive

Revitive arbeitet nach dem Prinzip der elektrischen Muskelstimulation. Während Sie sitzen, werden Ihre Füße über zwei gepolsterte Fuß-Pads stimuliert. Dabei ziehen sich Ihre Waden- und Fußmuskeln zusammen. Ihre Unterschenkel werden besser und stärker durchblutet.

Der Revitive ist einfach in der Anwendung.

Der Revitive kann auch zur Elektrostimulation der Knie, Schultern, des Rückens oder der Arme eingesetzt werden. Verwenden Sie dafür die im Lieferumfang enthaltenen Elektroden-Pads.

Hinweise zum Gebrauch

Durch die Verwendung der Revitive Fuß-Pads soll Folgendes erreicht werden:

- Verbesserung der Durchblutung zur Verringerung oder Prävention von Blutstau (Stase) - verursacht durch eine schlechte Durchblutung bei Bewegungsmangel oder langem Sitzen bzw. Stehen
- Unterstützung der Gesundheit der Beinvenen – durch Verbesserung der Durchblutung, stärkere Anreicherung des Bluts mit Sauerstoff in Beinen

Die genannten Hinweise zum Gebrauch sind nach der Medizingerätrichtlinie 93/42/EWG zertifiziert.

Auch wenn Sie viel sitzen oder längere Zeit inaktiv sind, kann Revitive Folgendes unterstützen:

- Stärkt die Beinmuskulatur
- Reduzierung von Beschwerden in Füßen & Beinen
- Aktive Verbesserung der Durchblutung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.revitive.de

Wichtige Sicherheitshinweise

**Lesen sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
Bestimmte Personen dürfen Revitive nicht verwenden.**



Anwendungsbeschränkungen – folgende Personen dürfen das Gerät nicht benutzen:

- Personen mit elektronischen Implantaten wie einem Herzschrittmacher oder einem automatischen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (AICD)
- Frauen während der Schwangerschaft
- Personen, die Symptome einer bestehenden tiefen Venenthrombose (TVT) aufweisen oder wegen dieser Form der Thrombose behandelt werden

Lange Phasen der Untätigkeit vergrößern das Risiko einer tiefen Venenthrombose (TVT). TVT ist der medizinische Ausdruck für die Bildung eines Blutgerinnsels in tiefen Beinvenen. Wenn ein Teil des Blutgerinnsels wandert, z. B. in die Lunge, kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie einer Lungenembolie kommen.

Wenn Sie sich für einen längeren Zeitraum nicht bewegt haben und vermuten, dass Sie an einer tiefen Venenthrombose leiden, verständigen Sie umgehend Ihren Arzt. Um eine Verlagerung des Blutgerinnsels zu verhindern, benutzen Sie unter keinen Umständen Ihr Revitive Gerät.

In manchen Fällen entwickelt sich eine Thrombose ohne jegliche Symptome oder Anzeichen. Es ist jedoch wichtig, die typischen Symptome einer Thrombose zu kennen:

- Schmerzen, Schwellungen und Druckempfindlichkeit in einem Ihrer Beine (gewöhnlich in der Wade)
- Starke Schmerzen an der betroffenen Stelle
- Warme Haut an der Stelle des Blutgerinnsels
- Hautrötung, vor allem an der Beinhinterseite unterhalb des Knies

Wenn diese Symptome auftreten, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn:

- Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden
- Sie Probleme mit dem Herzen hatten oder haben
- Sie sich einer medizinischen oder körperlichen Schmerzbehandlung unterzogen haben
- Sie eine vermutete oder diagnostizierte Herzerkrankung haben
- Bei Ihnen Epilepsie vermutet wird oder diagnostiziert wurde
- Sie nicht sicher sind, ob Revitive für Sie geeignet ist
- Sie nicht sicher sind, woher Ihre Beschwerden rühren

Wenn Sie ein metallisches Implantat tragen:

- Wenn Sie ein metallisches Implantat tragen, verspüren Sie während der Elektrostimulation in der Nähe des Implantats eventuell Schmerzen oder Beschwerden. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung ein und holen Sie ärztlichen Rat ein
- Die Elektrostimulation kann sich in der Nähe eines metallischen Implantats intensiver anfühlen. Wenn Sie keine Schmerzen verspüren, können Sie die Verwendung sicher fortsetzen. Eventuell müssen Sie die Intensität auf eine für Sie angenehme Stufe einstellen

Bei der Verwendung der Fuß-Pads oder Elektroden-Pads:

- Verwenden Sie die Elektroden-Pads **nicht** am Kopf, im Gesicht, Nacken- oder Brustbereich
- Die Anbringung der Elektroden nahe des Thorax (Brust) kann das Risiko von Herzflimmern erhöhen
- Nur auf Bereichen mit intakter/unversehrter Haut anbringen
- Fuß-Pads bzw. Elektroden-Pads nicht direkt auf oder in der Nähe der folgenden Bereiche anbringen:
 - auf Schnittwunden oder Verletzungen, auf offenen Wunden oder Stellen mit Hautausschlag, geschwollenen, geröteten, infizierten oder entzündeten Bereichen oder auf Hauteruptionen (z. B. bei Venenentzündungen, Thrombophlebitis, Krampfadern, Cellulitis). Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts auch die Unterseite Ihrer Füße und Zehen.
 - auf oder in der Nähe von kanzerösen Läsionen/bösartigen Tumoren
 - auf Bereichen, die (innerhalb der vergangenen 6 Monate) im Rahmen einer Strahlentherapie behandelt wurden
 - auf Geschlechtsorganen
 - an gegenüberliegenden Oberschenkeln und greifen Sie in Bezug auf die richtige Platzierung auf die Diagramme zur Pad-Platzierung in dieser Bedienungsanleitung zurück
 - über dem Karotissinusnerv (vordere Halsseite), insbesondere bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber dem Karotissinusreflex
- Elektroden-Pads sind nur von einer Person zu verwenden. **Nicht** gemeinsam mit anderen Personen verwenden
- Verwenden Sie **keine** Elektroden-Pads, deren Verfallsdatum überschritten ist
- Es kann vorkommen, dass unter den Elektroden-Pads Hautreizungen oder Verbrennungen auftreten oder Sie durch die Elektrostimulation überempfindlich reagieren
- Sorgen Sie dafür, dass Feuchtigkeitslotion/Gel/Balsam gleichmäßig aufgetragen und in die Haut eingezogen ist, bevor Sie mit der Stimulation beginnen. Ein ungleichmäßiges Auftragen von Feuchtigkeitslotion/Gel/Balsam könnte das Risiko von Irritationen oder einem Brennen auf der Haut erhöhen, wenn die elektrische Stimulation angewendet wird
- Die Symptome können sich während der anfänglichen Behandlungsphase verschlimmern, bevor sie besser werden, denn oft hat sich der Körper noch nicht an die erhöhte Muskelaktivität und Durchblutung gewöhnt. Falls dies der Fall ist, reduzieren Sie einfach die Intensität und Dauer der Behandlung, wodurch die anfänglichen Symptome zurückgehen werden. Befragen Sie bei anhaltenden Beschwerden bitte Ihren Arzt.

Warnhinweise

Wann Sie Revitive nicht verwenden dürfen:

- Benutzen Sie das Gerät nicht:
 - in Gegenwart von elektronischen Überwachungsgeräten
 - zusammen mit einem lebenserhaltenden elektronischen Gerät
 - wenn Sie ein Bad oder eine Dusche nehmen
 - wenn Sie schlafen
 - In Verbindung mit einer Schiene oder einem Gipsverband, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren
- Die Verwendung dieses Geräts neben oder auf einem anderen Gerät sollte vermieden werden, da dies Fehler beim Betrieb zur Folge haben kann. Sollte eine solche Verwendung notwendig sein, müssen dieses und das andere Gerät beobachtet werden, um sicherzugehen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren

Zusätzliche Warnhinweise:

- Die Verwendung von Zubehörteilen und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieser Ausrüstung angegeben oder mitgeliefert wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Freisetzungen und einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit des Geräts führen und Fehler beim Betrieb zur Folge haben
- Der Abstand zwischen tragbaren HF-Kommunikationsgeräten (einschließlich Peripheriegeräten wie Antennenkabel und externen Antennen) und jedem Teil des Revitive-Systems muss bei Verwendung mindestens 30 cm betragen

Vorsichtsmaßnahmen

Bei Anwendung der Stimulation:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Stimulation auf Hautbereichen anwenden, bei denen das normale Empfinden gestört ist. Dies könnte Hautirritationen verursachen, da Sie die Stimulation nicht fühlen können, bis die Intensität zu hoch ist. Wählen Sie eine niedrige Intensitätsstufe für ein sanftes Zusammenziehen der Muskeln und/oder verwenden Sie das Gerät kürzere Zeit, um eine Überstimulation zu vermeiden. Achten Sie auf Anzeichen von Hautreizungen (Hautrötung), Blutergüssen oder Schmerzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt

Bei der Verwendung von EMS:

- Seien Sie vorsichtig bei der Anwendung der Stimulation:
 - Auf dem Unterleib während der Menstruation
 - Nach kürzlich erfolgten chirurgischen Eingriffen (innerhalb der letzten 6 Monate), da durch die Stimulation der Heilungsprozess gestört werden kann
 - Wenn Sie nach Verletzungen wie einer Muskelzerrung wahrscheinlich an Gewebeblutungen leiden – es empfiehlt sich, den unmittelbaren Bereich innerhalb der ersten 12 Stunden nach Zuziehen der Verletzung nicht zu stimulieren. Benutzen Sie das Gerät auf einer niedrigen Intensitätsstufe und mit kurzer Anwendungsdauer, um eine Überstimulation zu vermeiden

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen:

- Die langfristigen Wirkungen der Elektrostimulation sind nicht bekannt
- Elektrostimulation wirkt eventuell nicht bei jedem Anwender. Bitte fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Wichtige Sicherheitshinweise



Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Benutzen Sie es nur im Sitzen
- Verwenden Sie das Gerät nur für den angegebenen Zweck
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät oder Zubehör
- Überlasten Sie das Stromnetz nicht
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Kabel für Kinder unzugänglich aufbewahren, um die Gefahr des Strangulierens zu vermeiden
- Revitive kann von mehreren Personen verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach jeder Verwendung gereinigt wird
- Revitive darf nur mit Originalzubehör oder Zubehör des Herstellers verwendet werden
- Überprüfen Sie die Pads, Anschlüsse und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen
- Positionieren Sie Revitive so, dass Sie das Gerät einfach von der Stromversorgung trennen können
- Revitive nicht öffnen oder selbst reparieren. Dadurch wird Ihre Garantie ungültig, und es kann erheblicher Schaden entstehen
- Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Revitive nicht funktioniert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen offiziellen Vertriebshändler
- Revitive hat die erforderlichen Prüfungen für Elektromagnetische Interferenz (EMI) bestanden. Dennoch kann es von übermäßigen Emissionen betroffen sein und/oder störend auf empfindlichere Geräte einwirken
- Berichten zufolge können einige Universalfernbedienungen (z. B. für Fernsehgeräte usw.) Einstellungen des Revitive verändern, wenn sie während der Behandlung benutzt werden. In diesem Fall stellen Sie die Zeit oder Intensität des Geräts einfach am Bedienfeld wieder auf die gewünschten Werte ein
- Wenn das Gerät hohen oder niedrigen Temperaturen außerhalb des spezifizierten Betriebsbereichs von 10-40 °C ausgesetzt war, muss sich das Gerät erneut auf die empfohlene Betriebstemperatur einstellen, um eine fortwährende Produktleistung zu gewährleisten.



Unerwünschte Nebenwirkungen

- Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Revitive ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Bedienungsanleitung

Wie kann ich Revitive noch intensiver nutzen?

Für beste Ergebnisse:

- Verwenden Sie die **Revitive Fuß-Pads mindestens 30 bis 60 Minuten pro Tag**, 7 Tage die Woche.
- Es ist wichtig, Revitive mit einer ausreichend hohen Intensität zu nutzen, um eine starke, angenehme Muskelkontraktion zu erzielen. Die meisten Menschen erzielen eine starke Muskelkontraktion **über der Intensitätsstufe 40** (Intensitätsstufen 1-50).
- Wenn bei Ihnen eine langfristige Erkrankung wie hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel, Diabetes, Arthrose, chronische venöse Insuffizienz (CVI), periphere Arterienerkrankung oder COPD diagnostiziert wurde, kann es **bis zu 8 Wochen** dauern, bis Symptome, die mit diesen chronischen Erkrankungen einhergehen, reduziert werden.


Verwenden Sie Revitive mit EMS-Stimulation nicht häufiger als 6 Mal für 30 Minuten (höchstens 180 Minuten) pro Tag.

Schritt 1: Erstmalige Inbetriebnahme von Revitive

a Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung:


- Netzteil
- Revitive-Gerät
- Elektroden-Pads
- Elektroden-Kabel

Eine Beschreibung der Teile finden Sie im Abschnitt „Lieferumfang“ auf den Seite 44

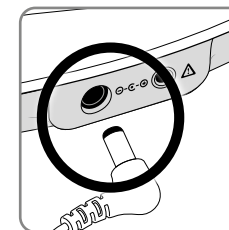

b Nehmen Sie das Netzteil zur Hand.

Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzkabels in die Öffnung an der Seite des Revitive.

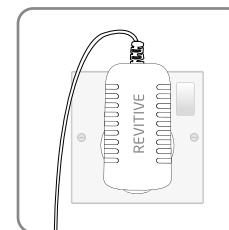


c Stecken Sie das Netzteil in die nächstgelegene Steckdose

Bevor Sie Revitive das erste Mal benutzen, lesen Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf den Seiten 47 bis 50. Wenn Sie sich nicht sicher sind, konsultieren Sie vor der Benutzung des Produkts bitte Ihren Arzt.

Bedienungsanleitung

Schritt 2: Verwendung der Fuß-Pads

Im Sitzen die bloßen Füße auf die Fuß-Pads stellen

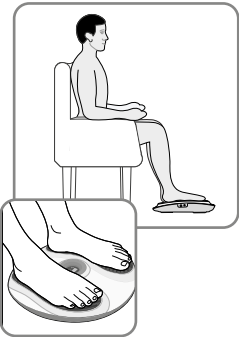

- a** Es ist wichtig, dass Sie mit ausreichend Flüssigkeit versorgt sind. Wir empfehlen, vor der Benutzung von Revitive ein Glas Wasser zu trinken.
- Sie können auch eine Feuchtigkeitslotion auf Ihre Fußsohlen auftragen, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
- Tipp: Wenn Sie vor der Benutzung von Revitive Ihre Fußsohlen mit einer Feuchtigkeitslotion einreiben, wird die Elektrostimulation besser unterstützt.
- b** Setzen Sie sich bequem hin. Setzen Sie sich am besten so hin, dass Ihre Knie im rechten Winkel stehen (90-Grad-Winkel).
- c** Stellen Sie Revitive vor sich auf den Boden.
- Revitive wurde für die Anwendung im Sitzen entwickelt. Bitte stellen **Sie sich nie auf** das Revitive Gerät.
- d** Platzieren Sie **beide Füße barfuß** auf den Fuß-Pads. Ziehen Sie immer Schuhe, auch Socken und Strümpfe aus.
- e** Um Revitive einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät. Sie hören einen Piepton und die Anzeige leuchtet. Es werden die Zeit ⌚ (30 Minuten) und die Intensität 📶 Intensity (00) angezeigt.
- Sie können Revitive während der Behandlung jederzeit über die Ein-/Aus-Taste am Gerät ausschalten.
- f** Drücken Sie die Taste 📶 (+) einmal, um die Stimulation zu starten.
- Drücken Sie die Taste (+), um die Intensität zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste (-), um die Intensität zu verringern.
- g** Gewöhnen Sie sich an das Gefühl der Elektrischen Muskelstimulation (EMS). Verwenden Sie einige Tage lang eine niedrige Intensität für 30-60 Minuten einmal täglich.
- Stellen Sie die Intensität auf eine Stufe ein, auf der Sie die Stimulation in Ihren Füßen spüren, die zu einer Kontraktion der Unterschenkel-Muskulatur führt.
- Es ist normal, wenn Sie in Ihren Füßen und Unterschenkel-muskeln ein kribbelndes oder unterschiedlich starkes Gefühl verspüren.
- Revitive vibriert **nicht**.

- h** Nach einigen Tagen der Gewöhnung wählen Sie eine höhere Intensität aus, bei der Sie eine starke, aber immer noch **angenehme Kontraktion der Unterschenkelmuskeln spüren**.

Die meisten Menschen verspüren eine starke Kontraktion auf der Intensitätsstufe 40 oder höher. Sie können eine Intensitätsstufe zwischen 1 und 50 einstellen.

Anmerkung: Die erforderliche Intensitätsstufe kann von Tag zu Tag variieren.

Bei Schmerzen oder Beschwerden:

- Nehmen Sie einen oder beide Füße von den Fuß-Pads, um die Stimulation zu stoppen.
- Verringern Sie die Intensität an den Fuß-Pads über den Intensitätsregler 📶 (-) des Bedienfelds. Stellen Sie dann Ihre Füße wieder auf den Revitive.

- i** Die Zeitanzeige ⌚ (Minuten) läuft rückwärts, während Revitive das Programm durchläuft.
- j** Nach Ablauf der Zeit erscheint ⌚ 00 in der Zeitanzeige Ihres Revitive und Sie hören drei Pieptöne.
- k** Revitive schaltet sich automatisch ab.

Bedienungsanleitung

Schritt 3: Verwendung der Elektroden-Pads

 Elektroden-Pads sind nur von einer Person zu verwenden. **Nicht** gemeinsam mit anderen Personen verwenden.


Im Lieferumfang des Revitive ist ein Paar wiederverwendbare Elektroden-Pads (bis zur 20-30 Anwendungen) zur Elektrostimulation des Rückens, der Schultern, Oberschenkel, Knie oder Arme enthalten.

Die Elektroden-Pads können nicht gleichzeitig mit den Fuß-Pads benutzt werden.
Bei Verwendung der Elektroden-Pads schalten sich die Fuß-Pads automatisch ab.


Verwenden Sie die Revitive Elektroden-Pads im EMS-Modus nach Bedarf jederzeit, ab 30 Minuten pro Tag.
 Verwenden Sie Revitive im EMS-Modus nicht häufiger als 6 Mal für 30 Minuten (höchstens 180 Minuten) pro Tag.
 Andernfalls kann es zu einer Ermüdung der Muskulatur kommen.

a Wählen Sie den Bereich für die Elektrostimulation aus.


 Empfehlungen für die Befestigung der Pads:

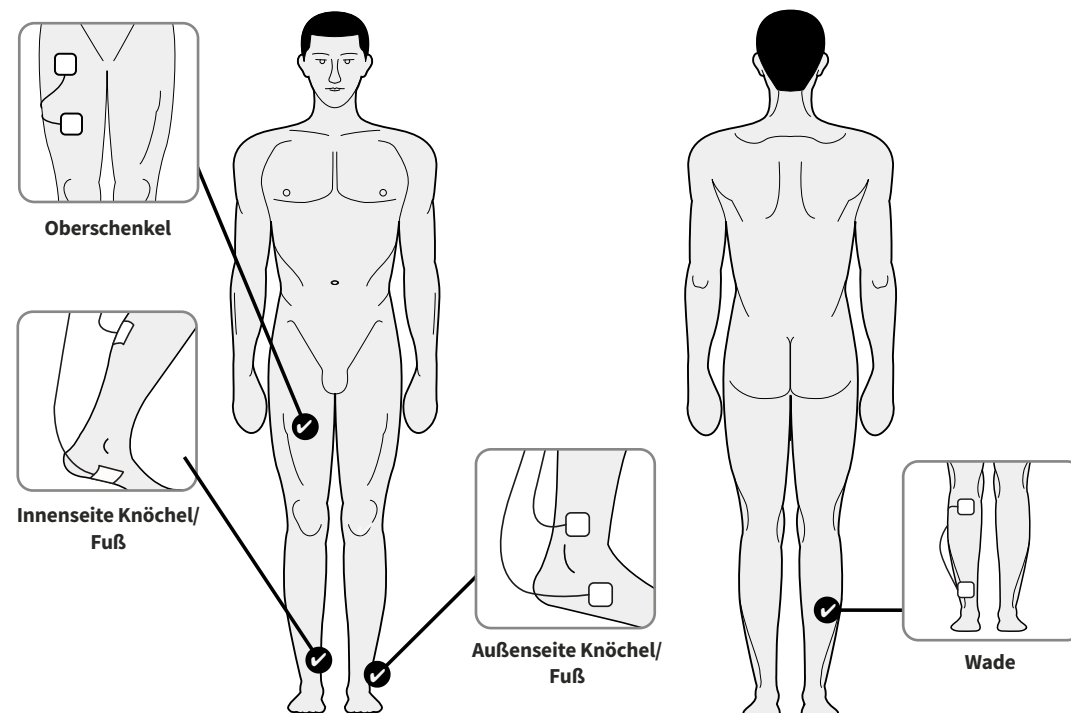


Verwenden Sie die Pads **NICHT** an Kopf, Gesicht, Nacken- oder Brustbereich.

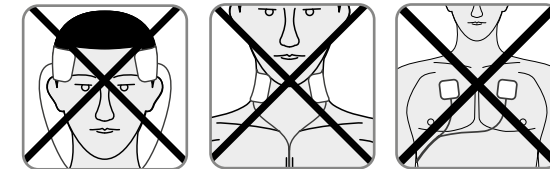

- b** Waschen Sie die zu behandelnden Körperstellen und trocknen Sie sie ab.
- c** Vergewissern Sie sich, dass Revitive ausgeschaltet ist. Wenn das Bedienfeld noch leuchtet, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Revitive auszuschalten.

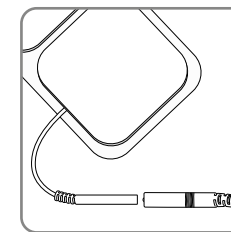


d Bringen Sie die Pads am Elektroden-Kabel an.

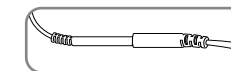


Stecken Sie die Anschlüsse fest zusammen. Es sollte keine Lücke vorhanden sein

Sind die Anschlüsse nicht ohne Lücke zusammengesteckt, kann dies unangenehm sein.

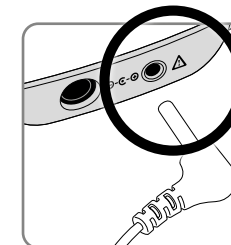


e Stecken Sie das andere Ende des Elektroden-Kabels in die Öffnung an der Seite des Revitive.

Bei Verwendung der Elektroden-Pads schalten sich die Fuß-Pads automatisch ab.

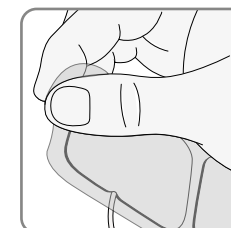

f Ziehen Sie die Kunststoffolie vorsichtig von den Pads ab. Kleben Sie die Pads nach jedem Gebrauch wieder auf die Kunststoffolie.

Bedienungsanleitung

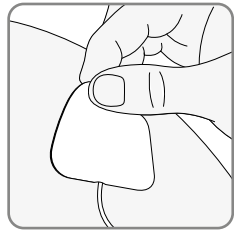

- g** Platzieren Sie die Elektroden-Pads auf die Körperstelle(n), die stimuliert werden soll(en) (siehe Seite 54). Drücken Sie dabei die selbstklebende Seite vorsichtig auf die Haut.



- h** Um Revitive einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Sie hören einen Piepton und die Anzeige leuchtet. Es werden die Zeit (30 Minuten) und die Intensität (00) angezeigt.
- Sie können Revitive während der Behandlung jederzeit über die Ein-/Aus-Taste am Gerät ausschalten.



- i** Drücken Sie die Taste (+) einmal, um die Stimulation zu starten.
- Drücken Sie die Taste (+), um die Intensität zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste (-), um die Intensität zu verringern.

- j** Gewöhnen Sie sich an das Gefühl der Elektrischen Muskelstimulation (EMS). Verwenden Sie einige Tage lang eine niedrige Intensität für 30 Minuten einmal täglich.
- Es ist normal, wenn Sie in den Muskeln, die Sie behandeln, ein kribbelndes oder unterschiedlich starkes Gefühl verspüren.


- k** Nach einigen Tagen der Gewöhnung wählen Sie eine höhere Intensität aus, bei der Sie eine starke, **aber immer noch angenehme Muskelkontraktion spüren**.
- Sie können eine Intensitätsstufe zwischen 1 und 50 einstellen.
- Anmerkung: Die erforderliche Intensitätsstufe kann von Tag zu Tag variieren.

- l** Die Zeitanzeige (Minuten) läuft rückwärts, während Revitive das Programm durchläuft.

- m** Nach Ablauf der Zeit erscheint 00 in der Zeitanzeige Ihres Revitive und Sie hören drei Pieptöne. Revitive schaltet sich automatisch ab.


Bei Schmerzen oder Beschwerden:

- Verringern Sie die Intensität an den Pads über den Intensitätsregler (-) des Bedienfelds am Gerät.
- Sie können die Behandlung auch vor dem Ende der 30-minütigen Behandlungssitzung beenden, um Hautreizungen zu vermeiden. Falls Sie dies wünschen, können Sie das Gerät über die Ein-/Aus-Taste ausschalten.

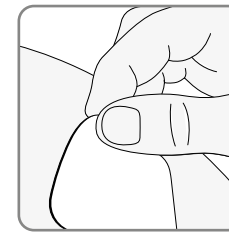


- n** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und ziehen Sie dann die Pads vorsichtig von der Haut ab.

Ziehen Sie nicht an den Elektroden-Kabeln, um die Pads von der Haut zu entfernen, da die Kabel dadurch beschädigt werden können.

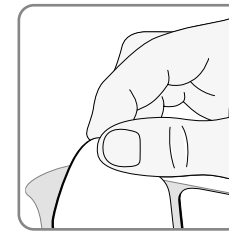

- o** Kleben Sie die Pads nach jedem Gebrauch wieder auf die Kunststoffolie.

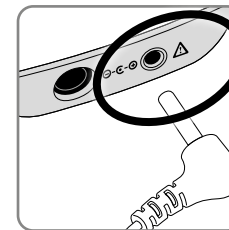

- p** Ziehen Sie das Elektroden-Kabel von der Gerätebuchse des Revitive ab. Die Elektroden-Kabel müssen nicht von den Pads entfernt werden.

Bedienungsanleitung

Reinigung und Aufbewahrung Ihres Revitive

- a** Vergewissern Sie sich, dass Revitive ausgeschaltet ist.
- b** Wischen Sie die Fuß-Pads mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- c** Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.
- d** Kleben Sie die Elektroden-Pads auf die Kunststoffolie.
- e** Bewahren Sie die Elektroden-Pads an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, an dem sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Die Elektroden-Pads müssen zur Aufbewahrung nicht von den Elektroden-Kabeln entfernt werden.

Austausch der Elektroden-Pads

Die Elektroden-Pads können circa 20 bis 30 Mal wiederverwendet werden. Wenn die Klebefähigkeit der Pads nachlässt, verreiben Sie ein paar Tropfen Wasser auf der Oberfläche. Ersatz-Pads können Sie über **www.revitive.com** beziehen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Revitive ist eingeschaltet (LED-Anzeige leuchtet auf), aber ich verspüre keine elektrische Stimulation durch die Fuß-Pads.	Die unbedeckten Füße stehen nicht gleichzeitig auf den Fuß-Pads.	Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße unbedeckt sind und jeder Fuß gleichzeitig auf jedem der Fuß-Pads steht. Erhöhen Sie die Intensität weiter bis max. zur höchsten Stufe 50, bis Sie die Stimulation spüren können.
	Ihre Füße sind möglicherweise trocken.	Cremen Sie Ihre Fußsohlen ein, um die Leitfähigkeit und Stimulation zu verbessern. Starten Sie dann die Behandlung erneut. Sie müssen möglicherweise die Intensitätsstufe erhöhen.
	Sie sind möglicherweise dehydriert.	Trinken Sie vor und nach Verwendung des Geräts genügend Wasser. Das Gerät erzeugt mithilfe Ihres Körpers den Stromkreis. Wasser ist ein hervorragender Stromleiter. Wenn Ihr Körper nicht ausreichend hydriert ist (unter 60 %), ist die Stimulation nicht so stark. Deshalb ist es wichtig, den Körper stets gut hydriert zu halten.
	Die Intensitätsstufe ist möglicherweise zu niedrig eingestellt.	Das Gerät ist sehr sicher in der Anwendung. Erhöhen Sie die Intensität immer weiter in Richtung Stufe 50, bis Sie die Stimulation spüren. Sie werden eventuell feststellen, dass Sie die Intensitätsstufe erhöhen müssen, wenn sich Ihr Körper an die Behandlung gewöhnt hat. Es ist nicht das Ziel, sich auf Stufe 50 vorzuarbeiten, sondern eine Stufe zu finden, die für Sie angenehm ist.
	Das Elektroden-Kabel ist an das Gerät angeschlossen.	Ziehen Sie das Elektroden-Kabel ab. Die Fuß-Pads funktionieren nicht, solange das Elektroden-Kabel angeschlossen ist.
	Wenn Sie trotz der genannten Lösungen noch immer keine Stimulation spüren:	Überprüfen Sie das Gerät. Legen Sie dazu eine Hand so auf die Fuß-Pads (am besten auf den Fersenbereich), dass Sie beide Pads gleichzeitig berühren. Stellen Sie mit der anderen Hand zunächst die Intensitätsstufe Null ein und erhöhen Sie die Intensitätsstufe so lange, bis Sie die Stimulation spüren können. Wenn Sie die Stimulation an Ihrer Hand spüren können, funktioniert das Gerät. Wenn Sie auch auf Intensitätsstufe 50 nichts spüren, kontaktieren Sie bitte Ihren offiziellen Vertriebs Händler.
Die LED-Anzeige leuchtet nicht auf, und Revitive funktioniert nicht, obwohl es eingeschaltet ist.	Das Netzteil steckt nicht richtig in der Steckdose oder im Gerät.	Überprüfen Sie, dass das Netzteil korrekt in der Steckdose steckt und mit dem Gerät verbunden ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihren offiziellen Vertriebs Händler.
Revitive vibriert nicht.	REVITIVE IST NICHT DARAUF AUSGELEGT, ZU VIBRIEREN.	
Meine Beine schmerzen nach der Behandlung.	Die Intensitätsstufe ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Ihre Muskeln werden daher überanstrengt.	Lassen Sie nach jeder Behandlung genügend Zeit verstreichen, damit sich Ihre Muskeln erholen können (genauso wie nach starker, körperlicher Anstrengung). Beginnen Sie bei der nächsten Anwendung auf einer niedrigeren Stufe (auf der Sie eine sanfte elektrische Stimulation spüren, die Sie als angenehm empfinden) und reduzieren Sie die Anwendungsdauer, bis sich Ihre Muskeln an die Stimulation gewöhnt haben.

Weitere Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf **www.revitive.de**

Technische Daten

Produktbezeichnung	Revitive Essential
Modell	RLV
Frequenzbereich (+/-10%)	Fuß : 20 bis 44Hz Körper : 37 bis 51Hz
Ausgangsstrom	Max. 8,5mA
Gewicht (+/-0,5kg)	1,13kg
Maße	Ø 355 mm x 77(D) mm
Stromverbrauch	5W
Netzteil	CE-gekennzeichnet
Stromquelle Eingang (Netzteil in Gebrauch) → Ausgang →	100-240V  , 50/60Hz, 0,18A 5V () DC  , 1,0A
Betriebsdauer des Geräts Vom Hersteller angegebene Zeitspanne, während der das Gerät sicher für den Gebrauch sein sollte.	4 Jahre
Anwendungsteile Bauteil von Revitive, das bei normaler Nutzung physischen Kontakt zum Anwender hat, um die Behandlung durchzuführen	Fuß-Pads - 135,5cm ² Elektroden-Pads - 5cm x 5cm = 25cm ²

Ausgangsspezifikationen für Elektrische Muskelstimulation (EMS):



Impulswellen	Zweiphasig	
Form	Quadratisch symmetrisch mit Polaritätswechsel	
Maximale Ausgangsspannung (+/-15%): @500Ω	Fuß: 21,5Vp	Körper: 21,5Vp
Impulsdauer (+/-10%):	Fuß: 450 oder 970µs (Modus 7)	Körper: 450µs
Nettoladung @ 500Ω	[0,001]mC	
Maximale Leistungsdichte @ 500Ω	Fuß: 0,19 mW/cm ²	Körper: 1,50 mW/cm ²
EIN-Zeit (+/- 10%)	Fuß: 1,9 - 8,3s	Körper: 1,9 - 6,5s
AUS-Zeit (+/- 10%)	Fuß: 1,00 - 1,50s	Körper: 1,00s

Die Werte der IMPULSDAUER, IMPULS-Wiederholungshäufigkeiten und -Höhen, einschließlich jeglicher Gleichstromkomponente, dürfen nicht um mehr als ± 20 % abweichen, wenn sie mit einem Lastwiderstand innerhalb des spezifizierten Bereichs gemessen werden.

Falls ein Nachweis erforderlich ist, dass das Revitive-Gerät nach einem gewissen Zeitraum innerhalb seines wesentlichen Leistungsspektrums arbeitet, sollte der Hersteller kontaktiert werden.

Symbole

Entspricht der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG)	 2797
Die Chargen- und Seriennummer einschließlich Herstellungsjahr (JJJJ) und -monat (MM) befinden sich auf der Verpackung und an der Unterseite des Geräts.	 #JJJJMMXXXXX
Artikelnummer	
Anwendungsbeschränkungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Revitive verwenden	
Betrieb	
Verbleibende Zeit	
Positive Polarität	
Medizinisches elektrisches Gerät der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung	
Medizinisches elektrisches Gerät des Typs BF	
Berechtigter Hersteller des Geräts	
EU/EG autorisierter Stellvertreter Europa	
Beurteilung der UK-Konformität Das Produkt erfüllt alle einschlägigen gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs (UK).	
FCC-Zeichen Das für die in den Vereinigten Staaten hergestellten oder vertriebenen elektronischen Produkte verwendete Prüfzeichen bestätigt, dass die elektromagnetische Interferenz von Revitive unter den Grenzwerten der US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) liegt. Actegy Ltd erfüllt alle einschlägigen Vorschriften der FCC.	

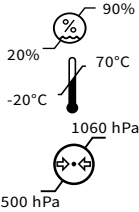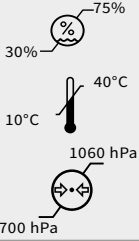Bedienungsanleitung beachten	
Richtlinie über Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE-Richtlinie) Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden.	
IP21 – Schutzart-Klassifizierung	IP21
Verfallsdatum	 JJJJ MM DD
Feuchtigkeits-, Temperatur- und Luftdruckgrenze für Aufbewahrung und Transport	 90% 20% 70°C -20°C 1060 hPa 500 hPa
Feuchtigkeits-, Temperatur- und Luftdruckgrenze für Betriebsbedingungen Wenn das Gerät hohen oder niedrigen Temperaturen außerhalb des spezifizierten Betriebsbereichs von 10-40 °C ausgesetzt war, muss sich das Gerät erneut auf die empfohlene Betriebstemperatur einstellen, um eine fortwährende Produktleistung zu gewährleisten.	 75% 30% 40°C 10°C 1060 hPa 700 hPa
Nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet	
Medizinprodukt enthält kein Latex aus Naturkautschuk	
Gerät nicht auseinanderbauen	
Das Markenzeichen „Grüner Punkt“ auf der Verpackung bedeutet, dass Actegy einen finanziellen Beitrag an den nationalen Betreiber für Verpackungsverwertung geleistet hat, der gemäß den in der europäischen Richtlinie Nr. 94/62/EG und dem entsprechenden nationalen Gesetz festgelegten Grundsätzen festgelegt wurde.	

Garantie

1. Revitive/Actegy gewährt auf das erworbene Produkt eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum oder beim Kauf in einem Online-Shop ab dem Datum der Lieferung des Produkts. Der Garantieanspruch gilt für Käufe, die in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden getätigt wurden. Defekte oder beschädigte Produkte, die unter die Herstellergarantie fallen, werden von Revitive/Actegy oder wenn sie nicht direkt bei Revitive/Actegy gekauft wurden, vom jeweiligen Verkäufer des Produkts, kostenlos umgetauscht, es sei denn der Garantieanspruch ist nach Ziffer 2 ausgeschlossen. Der Garantieanspruch besteht, wenn für das Produkt über den oben genannten Zeitraum von 24 Monaten hinaus eine Sonder-Garantieverlängerung durch Revitive/Actegy gewährt wird, für die Dauer einer solchen Verlängerung weiter.

2. Garantieausschlüsse: Der Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Beschädigung auf einer Fremdeinwirkung auf das Produkt beruht; bei unsachgemäßer Verwendung bzw. unsachgemäßem Einsatz des Produkts; wenn der Endkunde kein Verbraucher ist; wenn das Produkt durch Fahrlässigkeit des Kunden oder aufgrund mangelnder Wartung durch den Kunden beschädigt wird.

3. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, hat der Kunde sich an den jeweiligen Verkäufer des Produkts zu wenden, wenn das Produkt nicht direkt bei Revitive/Actegy gekauft wurde, oder sich direkt an die lokale Revitive/Actegy-Vertretung zu wenden. Die Kontaktdaten der Revitive/Actegy-Vertretungen sind auf der Rückseite dieses Handbuchs aufgeführt. Ist das Revitive-Produkt defekt oder beschädigt und liegt kein Grund für einen Garantieausschluss vor, organisiert Revitives/Actegys Kundendienst oder der jeweilige Verkäufer kostenlos die Rücksendung und den Umtausch des Revitive-Produkts.

4. Das Revitive-Produkt muss in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Wenn das Revitive-Produkt nicht in der Originalverpackung zurückgesendet wird, können zusätzliche Gebühren anfallen. Peripheriegeräte sowie sämtliches Zubehör und Handbücher für das Revitive-Produkt müssen bei der Rücksendung des Produkts in der Verpackung enthalten sein.

5. Diese Herstellergarantie wird zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen des Kunden gewährt. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt oder sonst berührt. Der Kunde kann die Voraussetzungen der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, sollte dies nach geltendem nationalen Recht erforderlich sein, online auf www.revitive.de/garantie einsehen oder per Post bei der lokalen Revitive/Actegy-Vertretung anfordern.

6. Die Herstellergarantie unterliegt bei Verkäufen in Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden französischem Recht und bei Verkäufen in Deutschland deutschem Recht, vorbehaltlich der zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat.

Um Ihre zweijährige kostenfreie Garantie zu aktivieren, registrieren Sie Ihr Gerät bitte auf: support.revitive.com


Indice

Contenuto della confezione	64
Componenti e comandi	65
Introduzione a Revitive	66
Profilo dell'operatore	66
Come funziona Revitive	66
Indicazioni d'uso	66
Importanti istruzioni per la sicurezza	67-70
Chi NON deve utilizzare Revitive	67
Avvertenze e avvisi	68-69
Precauzioni di sicurezza	70
Reazioni avverse	70
Istruzioni per l'uso	71-78
Come massimizzare i benefici di Revitive	71
Step 1: Prima configurazione di Revitive	71
Step 2: Utilizzo della pedana	72-73
Step 3: Utilizzo degli elettrodi per il corpo	74-77
Pulizia e conservazione	78
Sostituzione degli elettrodi per il corpo	78
Risoluzione dei problemi	79
Specifiche tecniche	80-81
Garanzia	82


Componenti e comandi

All'apertura della confezione, verificare la presenza dei componenti di seguito elencati. Se necessario, segnalare eventuali componenti mancanti contattando i numeri dell'assistenza riportati sul retro del presente manuale.

- 1** Adattatore di corrente
Lunghezza cavo: 180 cm

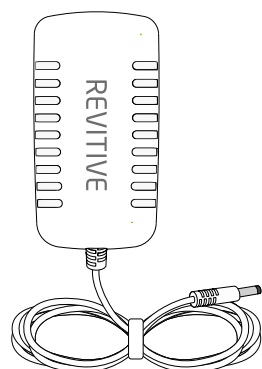


- 2** Elettrodi per il corpo

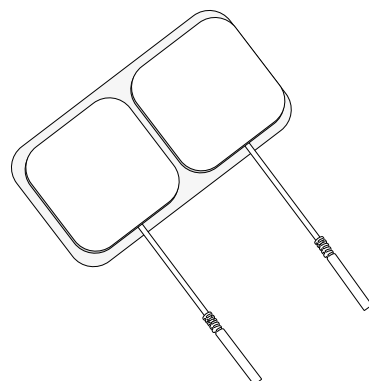




- 3** Dispositivo Revitive



- 4** Cavetto degli elettrodi
Lunghezza cavo: 150 cm

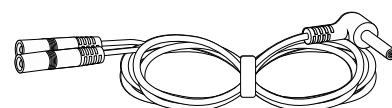

Componenti e comandi

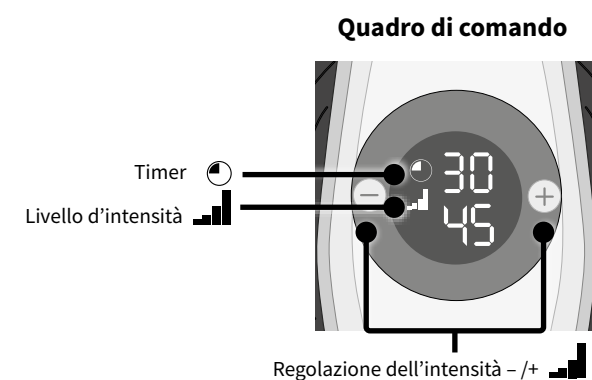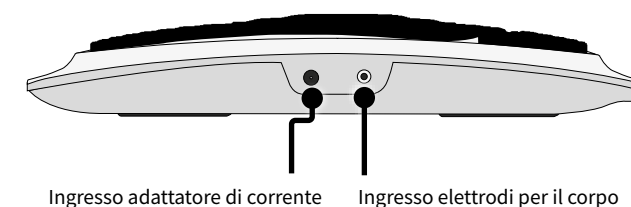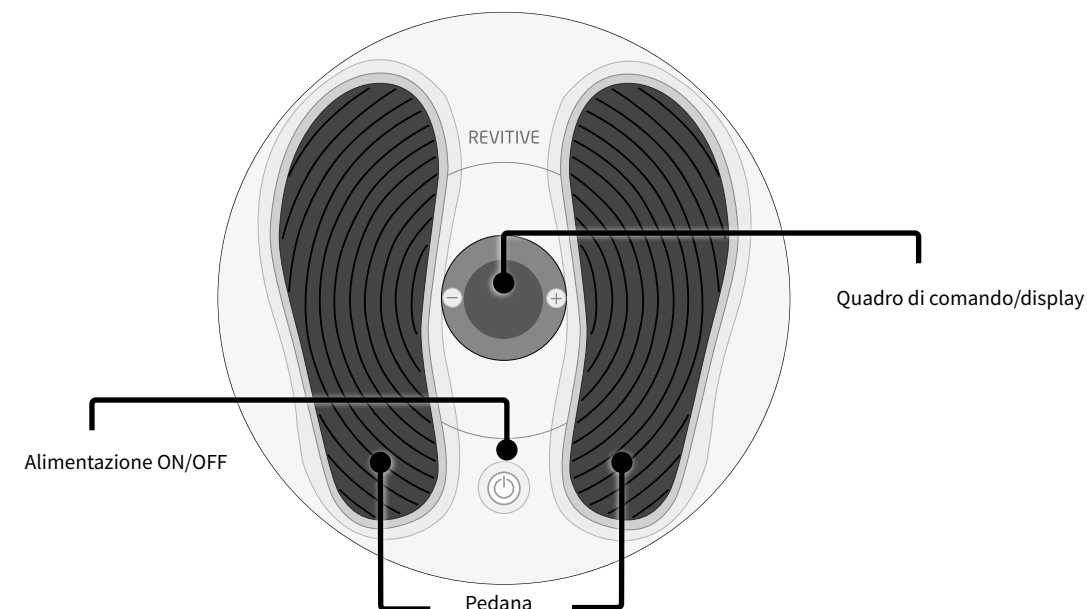

Introduzione a Revitive

Profilo dell'operatore

Il presente dispositivo è destinato all'uso in ambiente domestico da parte di utenti che conducono una vita sedentaria o trascorrono periodi di tempo eccessivi in piedi o seduti, o che soffrono di problematiche correlate come dolore, rigidità e gonfiore a carico di gambe, caviglie e piedi.

Revitive è inteso per l'uso da parte dell'utente finale in contesti non clinici e senza la supervisione o l'intervento di un medico durante l'utilizzo.

L'utente tipo è una persona di età adulta senza alcuna limitazione specifica in termini di fattori demografici quali sesso, etnia o livello di istruzione.

Come funziona Revitive

Revitive eroga un'Elettrostimolazione muscolare (EMS) attraverso una pedana, sopra cui l'utente colloca i piedi, stando seduto. L'elettrostimolazione provoca la contrazione dei muscoli del piede e del polpaccio, contribuendo a incrementare la circolazione a livello delle gambe.

Revitive è stato sviluppato in modo da garantire un'esperienza di utilizzo confortevole.

Revitive può erogare anche elettrostimolazione in corrispondenza di ginocchia, spalle, schiena o braccia, utilizzando gli appositi elettrodi per il corpo, in dotazione.

Indicazioni d'uso

Con l'utilizzo della pedana, Revitive permette di:

- Migliorare la circolazione per ridurre o prevenire il ristagno di sangue (stasi) causato da cattiva circolazione dovuta a uno stile di vita sedentario o da periodi di tempo eccessivi trascorsi seduti o in piedi
- Aiutare a preservare la salute delle vene delle gambe, aumentando la circolazione e l'afflusso di sangue ossigenato a livello delle gambe

Le Indicazioni d'uso sopraelencate sono certificate ai sensi della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Inoltre, se si conduce una vita sedentaria o si trascorrono periodi di inattività prolungata, Revitive può contribuire a:

- Rafforzare i muscoli delle gambe
- Ridurre il disagio alle gambe e ai piedi
- Migliorare la circolazione.

Per ulteriori informazioni, visitare www.revitive.it

Importanti istruzioni per la sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Chi non deve utilizzare Revitive.

Revitive non deve essere utilizzato da specifiche categorie di persone.



Non utilizzare (controindicazioni):

- Qualora si sia stati sottoposti all'impianto di un dispositivo elettronico, come un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile (AICD)
- In stato di gravidanza
- In caso di trattamento in corso per trombosi venosa profonda (TVP) o in presenza di sintomi di questa malattia

L'inattività prolungata può aumentare il rischio di sviluppare una trombosi venosa profonda (TVP), ovvero la formazione di un coagulo di sangue, di solito in una vena localizzata in profondità negli arti inferiori. In caso di distacco di un frammento di trombo possono insorgere complicanze potenzialmente fatali come l'embolia polmonare.

Rivolgersi subito al proprio medico se si è stati inattivi per lunghi periodi di tempo e si sospetta di essere affetti da trombosi venosa profonda. Per evitare la migrazione del trombo, non utilizzare Revitive.

Talora i soggetti colpiti da trombosi venosa profonda non manifestano alcun sintomo. Tuttavia, è importante essere a conoscenza dei sintomi a essa associati, tra cui:

- dolore, gonfiore e dolore alla palpazione dell'arto (solitamente a livello del polpaccio)
- dolore marcato nella zona interessata
- sensazione di calore nella sede del trombo
- arrossamento della pelle, soprattutto nella parte posteriore della gamba, al di sotto del ginocchio

Consultare immediatamente il proprio medico in presenza di uno o più dei sintomi sopraelencati.

Importanti istruzioni per la sicurezza

Avvertenze

Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo se:

- Si è in cura presso un medico
- Si soffre di problemi cardiaci
- Si è stati sottoposti a trattamenti medici o terapia fisica per alleviare il dolore
- È stata diagnosticata una patologia cardiaca o si sospetta di esserne affetti
- È stata diagnosticata epilessia o si sospetta di esserne affetti
- Si nutrono dubbi circa l'idoneità di Revitive per la propria condizione
- Si nutrono dubbi circa la causa dei propri sintomi

Soggetti portatori di protesi o corpi metallici:

- Se si è portatori di protesi o corpi metallici impiantati, è possibile che durante l'applicazione dell'elettrostimolazione si avverta dolore o fastidio in prossimità della sede interessata. In tal caso sospendere l'uso e consultare il proprio medico
- L'elettrostimolazione può risultare più intensa in prossimità del dispositivo metallico impiantato. È possibile continuare a utilizzare il dispositivo in sicurezza, a condizione che non provochi dolore. Potrebbe essere necessario regolare l'intensità su un livello tollerabile

Quando si usano la pedana o gli elettrodi per il corpo:

- Non applicare gli elettrodi su testa, viso, collo o petto
- L'applicazione degli elettrodi su zone in prossimità del torace (petto) potrebbe aumentare il rischio di fibrillazione atriale
- Applicare solo su aree con pelle intatta/non lacerata
- Non utilizzare la pedana o applicare gli elettrodi a diretto contatto o in prossimità di queste aree:
 - su tagli o lacerazioni della pelle, ferite aperte o eritemi; aree gonfie, arrossate, infette o infiammate; o su eruzioni cutanee (come flebite, tromboflebite, vene varicose, cellulite). Controllare le aree sotto i piedi e le dita dei piedi prima di usare il dispositivo.
 - in corrispondenza o in prossimità di lesioni tumorali/tumori maligni
 - su zone sottoposte a radioterapia (negli ultimi 6 mesi)
 - su organi riproduttivi
 - in corrispondenza del nervo del seno carotideo (parte anteriore del collo), soprattutto in pazienti con nota sensibilità al riflesso del seno carotideo
 - su entrambe le cosce; fare riferimento alle immagini esplicative riportate nel presente manuale d'uso per una corretta applicazione degli elettrodi
- Gli elettrodi sono progettati per essere usati da un solo utente. Non condividere gli elettrodi con altri
- Non utilizzare gli elettrodi dopo la data di scadenza indicata
- Si potrebbe accusare irritazione cutanea o bruciore sotto gli elettrodi o ipersensibilità dovuta all'elettrostimolazione
- Prima di procedere all'elettrostimolazione, assicurarsi che eventuali creme idratanti/gel/balsami siano stati applicati in modo uniforme e completamente assorbiti dalla pelle. Un'applicazione non omogenea di creme idratanti/gel/balsami potrebbe aumentare il rischio di irritazione o ustione della pelle durante l'utilizzo dell'elettrostimolazione
- Nella fase iniziale del trattamento, prima di notare un miglioramento si potrebbe verificare un peggioramento dei sintomi, qualora il corpo non si sia pienamente adattato all'incremento dell'attività muscolare e della circolazione sanguigna. In tal caso, ridurre l'intensità e la durata del trattamento, per alleviare i sintomi iniziali. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico

Avvertenze

Quando non utilizzare Revitive:

- In alcuni casi l'uso di Revitive va evitato. Non utilizzare Revitive:
 - In presenza di attrezzature di monitoraggio elettronico
 - Insieme a un dispositivo medico elettronico di supporto vitale
 - Nella vasca o sotto la doccia
 - Durante il sonno
 - Se si indossa un tutore ortopedico o un'ingessatura, senza consultare prima il proprio medico
- L'uso di questo apparecchio in posizione adiacente o sovrapposta ad altri apparecchi va evitato, perché potrebbe dare luogo a un funzionamento improprio. Se tale uso è indispensabile, questa e le altre attrezzature devono essere tenute sotto controllo per verificare che funzionino normalmente

Avvertenze ulteriori:

- L'utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore per questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità ai campi elettromagnetici di questa apparecchiatura e causare un funzionamento improprio
- Apparecchiature portatili di comunicazione in RF (comprese periferiche come antenne esterne e i relativi cavi) non devono essere utilizzate a meno di 30 cm di distanza da qualsiasi componente del sistema Revitive, compresi i cavi specificati dal produttore.

Precauzioni

Quando si usano la pedana o gli elettrodi per il corpo:

- Prestare attenzione quando si applica la stimolazione su zone della pelle interessate da una perdita di sensibilità. Ciò potrebbe provocare irritazione cutanea a causa dell'incapacità di avvertire la stimolazione fino a quando l'intensità è troppo alta. Per evitare una stimolazione eccessiva, impostare un'intensità bassa per generare una leggera contrazione muscolare e/o ridurre il tempo di utilizzo. Assicurarsi che non siano comparsi sintomi di irritazione cutanea (arrossamento), lividi o dolore. In caso di dubbi, consultare il proprio medico
- Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali, salvo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza

Quando si utilizza l'elettrostimolazione muscolare (EMS):

- Prestare attenzione durante l'applicazione della stimolazione:
 - Sopra l'addome durante le mestruazioni
 - Se di recente (negli ultimi 6 mesi) si è stati sottoposti a un intervento chirurgico, poiché la stimolazione potrebbe interferire con il processo di guarigione
 - Qualora i tessuti siano soggetti a sanguinamento a causa di una lesione (ad es. uno strappo muscolare), si consiglia di non stimolare la zona interessata nelle 12 ore successive alla lesione. Per evitare una stimolazione eccessiva, impostare un'intensità bassa e/o ridurre il tempo di utilizzo
 - Dopo un periodo prolungato di immobilità o inattività, impostare un'intensità bassa e una durata inferiore, per evitare una stimolazione eccessiva o l'affaticamento muscolare

Ulteriori precauzioni

- Gli effetti a lungo termine dell'elettrostimolazione non sono noti
- L'elettrostimolazione potrebbe non essere indicata per alcune persone: chiedere il parere del proprio medico.

Importanti istruzioni per la sicurezza

Misure di sicurezza

- Non mettersi in piedi sull'apparecchio. Utilizzare esclusivamente da seduti
- Non mettere Revitive in una posizione in cui è difficile scollegarlo o spegnerlo
- Utilizzare Revitive esclusivamente per lo scopo a cui è destinato
- Non esporre Revitive a temperature molto elevate
- Non versare liquidi su Revitive o i relativi accessori
- Non sovraccaricare la presa di corrente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Tenere i cavi di alimentazione lontano dalla portata dei bambini per scongiurare il rischio di strangolamento
- La pedana può essere utilizzata da più persone. Assicurarsi che il dispositivo venga pulito dopo ogni utilizzo
- Durante l'utilizzo non toccare la pedana con le mani fino allo spegnimento del dispositivo
- Utilizzare Revitive solo con gli accessori forniti o acquistati dal produttore
- Ispezionare i cavi periodicamente per accertarsi che non siano danneggiati
- Non aprire Revitive e non procedere autonomamente ad alcun intervento di riparazione. Ciò renderebbe nulla la garanzia e potrebbe arrecare gravi danni
- Nel caso in cui Revitive non dovesse funzionare correttamente, scollegarlo dalla rete elettrica e contattare il rivenditore autorizzato più vicino
- Revitive ha superato i test previsti in merito alle interferenze elettromagnetiche; ciononostante potrebbe essere comunque suscettibile a emissioni eccessive e/o potrebbe interferire con attrezzature con una maggiore sensibilità
- È stato segnalato che alcuni telecomandi universali (per es. per la TV, ecc.), se utilizzati durante il trattamento, possono modificare le impostazioni di Revitive. In tal caso, basta reimpostare la durata o l'intensità desiderata utilizzando il telecomando di Revitive o il quadro di comando del dispositivo
- Se il prodotto è rimasto esposto a temperature inferiori o superiori al range operativo previsto (10-40 °C), attendere che torni alle temperature consigliate prima di utilizzarlo; diversamente, le normali prestazioni potrebbero non essere garantite.

Reazioni avverse

- In caso di reazioni avverse, sospendere l'uso di Revitive e consultare immediatamente il proprio medico.

Istruzioni per l'uso

Come massimizzare i benefici di Revitive

Per risultati ottimali:

- Utilizzare **la pedana Revitive per almeno 30-60 minuti al giorno**, 7 giorni su 7.
- È importante regolare Revitive su un'intensità sufficientemente elevata per produrre una contrazione muscolare intensa, ma tollerabile. La maggior parte delle persone avverte una forte contrazione muscolare **con un'intensità superiore al livello 40** (intervallo di intensità: 1-50).
- Qualora siano state diagnosticate patologie di lungo termine, come ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, osteoartrite, insufficienza venosa cronica (CVI), arteriopatia periferica (PAD) o BPCO, potrebbero essere necessarie **fino a 8 settimane** di trattamento con Revitive per favorire la riduzione dei sintomi associati a tali patologie croniche.


Evitare di utilizzare Revitive, con stimolazione EMS, per più di 6 sessioni da 30 minuti (o il periodo di tempo equivalente) al giorno.

Step 1: Prima configurazione di Revitive

a Rimuovere tutti i componenti dalla confezione:


- Adattatore di corrente
- Dispositivo Revitive
- Elettrodi per il corpo
- Cavetto degli elettrodi

Consultare la sezione "Contenuto della confezione" alle pagine 64 per identificare i componenti.

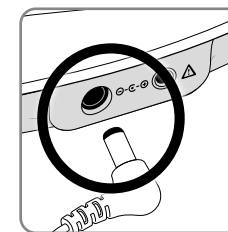

b Individuare l'adattatore di corrente.

Inserire l'estremità più piccola del cavetto degli elettrodi nell'apposito ingresso sul lato del dispositivo Revitive.

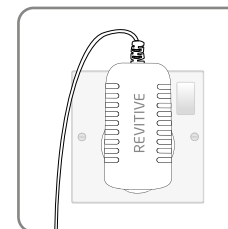



c Collegare l'adattatore alla presa elettrica più vicina.

Prima di utilizzare Revitive per la prima volta, leggere la sezione "Avvertenze e avvisi" alle pagine 67-70. In caso di dubbi, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'uso

Step 2: Utilizzo della pedana

Sedersi posizionando i piedi nudi sulla pedana

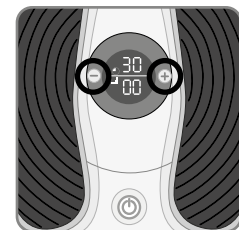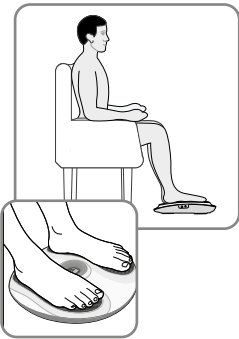

a È importante essere bene idratati. Consigliamo di bere un bicchiere d'acqua prima di utilizzare Revitive.

È possibile, inoltre, applicare una crema idratante sulle piante dei piedi per idratare la pelle.

Suggerimento: l'applicazione di una crema idratante sulle piante dei piedi prima di utilizzare Revitive può favorire la trasmissione dell'elettrostimolazione.

b Assumere una comoda posizione seduta. Per i migliori risultati, sedersi con le ginocchia a formare un angolo di 90 gradi (angolo retto).

c Posizionare Revitive sul pavimento davanti a sé.

Revitive è progettato per essere utilizzato da seduti.
Non mettersi mai in piedi sull'unità Revitive.

d Posizionare **entrambi i piedi nudi** sulla pedana. Togliere sempre scarpe e calze.

e Premere il pulsante di accensione sul dispositivo Revitive. Si avvertirà un segnale acustico e il display si accenderà. Il timer indicherà una durata di 30 minuti e l'intensità sarà impostata su 00.

Per spegnere il dispositivo in qualsiasi momento durante la sessione, premere il pulsante di accensione/spegnimento.

f Premere il pulsante di Regolazione dell'intensità (+) una volta per avviare la stimolazione.

Premere il pulsante (+) per aumentare il livello.
Premere il pulsante (-) per ridurre il livello.

g Acquisire familiarità con la sensazione generata dall'Elettrostimolazione muscolare (EMS). Utilizzare un livello di intensità basso per 30-60 minuti una volta al giorno per alcuni giorni.

Regolare l'intensità su un livello che consenta di percepire la stimolazione ai piedi, dando luogo a una contrazione del polpaccio.

È normale avvertire una sensazione di formicolio o sensazioni variabili a livello dei polpacci.

Revitive **non** emette vibrazioni.

h Dopo avere acquisito familiarità con il dispositivo per alcuni giorni, impostare un livello di intensità più alto per ottenere **contrazioni del polpaccio intense ma sopportabili**.

La maggior parte degli utenti avverte una forte contrazione muscolare a partire da un livello di intensità pari a 40. L'intensità può essere impostata tra 1 e 50.

Si noti che l'intensità necessaria potrebbe variare da un giorno all'altro.

Se si avverte dolore o disagio:

- Rimuovere uno o entrambi i piedi dalla pedana per interrompere la stimolazione.
- Ridurre l'intensità della stimolazione erogata dalla pedana premendo sul pulsante di Regolazione dell'intensità (-) dal quadro di comando prima di posizionare nuovamente i piedi su Revitive.

i Il timer inizierà un conto alla rovescia durante l'esecuzione del programma terapeutico di Revitive.

j Al termine della sessione di Revitive, il timer verrà azzerato e il dispositivo emetterà tre segnali acustici.

k Revitive si spegnerà automaticamente.

Istruzioni per l'uso

Step 3: Utilizzo degli elettrodi per il corpo

⚠ Gli elettrodi per il corpo sono progettati per essere utilizzati da un solo utente. Non condividere gli elettrodi per il corpo con altre persone.

Revitive è fornito con una coppia di elettrodi per il corpo riutilizzabili (fino a 20-30 applicazioni), in grado di erogare elettrostimolazione in corrispondenza di schiena, spalle, cosce, ginocchia o braccia.


Gli elettrodi per il corpo non possono essere utilizzati contemporaneamente alla pedana.
Quando si utilizzano gli elettrodi per il corpo, la pedana si disattiva automaticamente.

Utilizzare gli elettrodi per il corpo Revitive in modalità EMS secondo le proprie necessità, per almeno 30 minuti al giorno.


Non utilizzare Revitive in modalità EMS per più di 6 sessioni giornaliere di 30 minuti (o il periodo di tempo equivalente) al giorno per evitare affaticamento muscolare.

a Stabilire in quale area applicare l'elettrostimolazione.

✓ Le zone consigliate per il posizionamento degli elettrodi per il corpo sono mostrate di seguito:


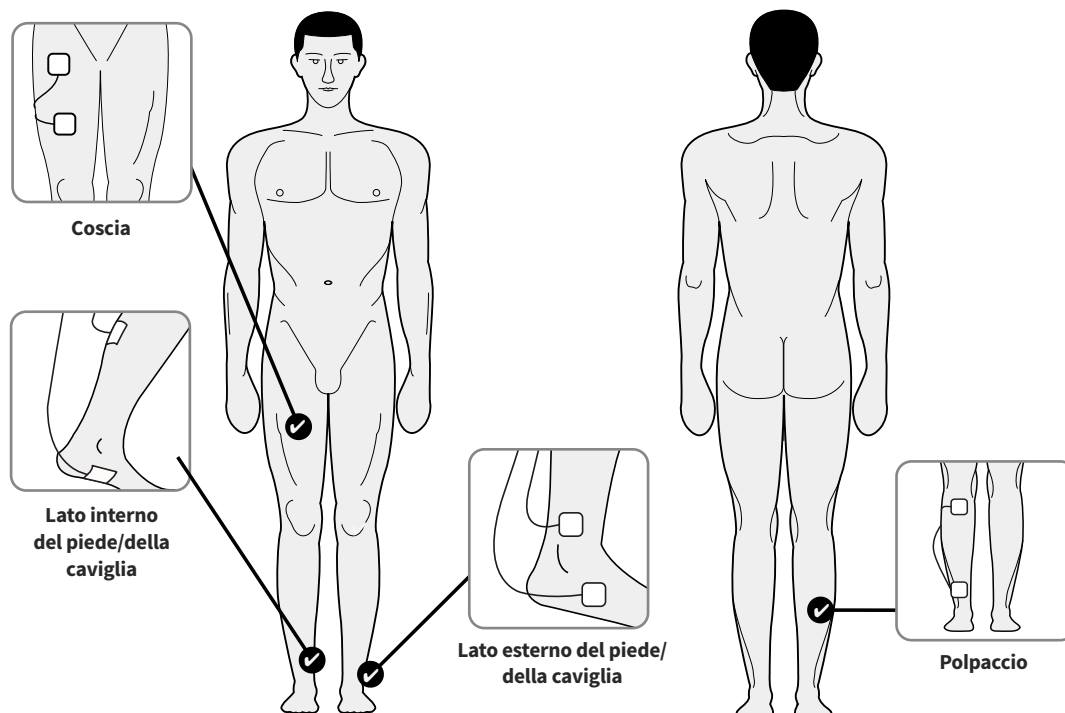


NON applicare gli elettrodi per il corpo su testa, viso, collo o petto

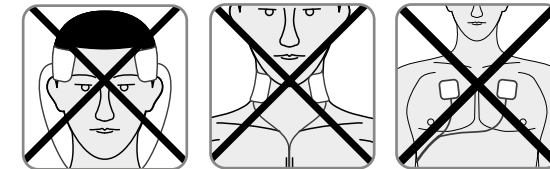


b Pulire e asciugare l'area di applicazione degli elettrodi per il corpo.

c Verificare che Revitive sia spento. Se il quadro di comando è ancora acceso, premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere Revitive.

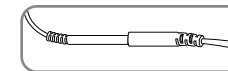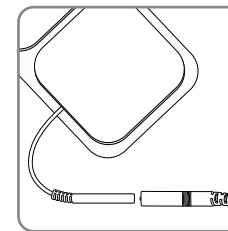


d Collegare le estremità degli elettrodi per il corpo al cavetto degli elettrodi.

Premere i connettori fino in fondo **senza lasciare alcuno spazio** tra cavetto ed elettrodo. La presenza di uno spazio potrebbe provocare disagio.

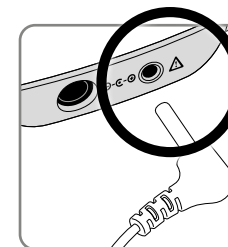


e Collegare l'altra estremità del cavetto alla porta ubicata sul lato di Revitive.

Collegando il cavetto degli elettrodi, la pedana si disattiva automaticamente.

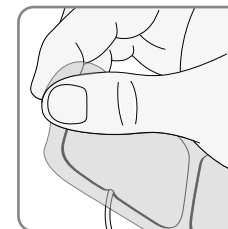

f Rimuovere la pellicola di plastica dagli elettrodi per il corpo staccandola con cura. Dopo l'uso, applicare nuovamente la pellicola di plastica sugli elettrodi per il corpo.


Istruzioni per l'uso

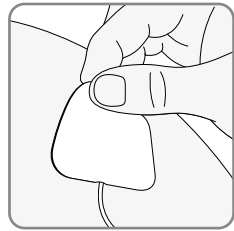

- g** Premere gli elettrodi per il corpo sull'area in cui si desidera applicare l'elettrostimolazione, come mostrato a pagina 74, premendo delicatamente il lato adesivo sulla pelle.



- h** Premere il pulsante di accensione sul dispositivo Revitive. Si avvertirà un segnale acustico e sul display comparirà un tempo di 30 minuti.
- Per spegnere il dispositivo in qualsiasi momento durante la sessione, premere il pulsante di accensione/spegnimento.

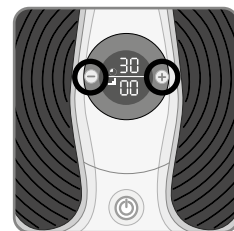

- i** Premere il pulsante di Regolazione dell'intensità (+) una volta per avviare la stimolazione.
- Premere il pulsante (+) per aumentare il livello.
Premere il pulsante (-) per ridurre il livello.

- j** Acquisire familiarità con la sensazione generata dall'Elettrostimolazione muscolare (EMS). Utilizzare un livello di intensità basso per 30 minuti una volta al giorno per alcuni giorni.
- È normale avvertire una sensazione di formicolio o sensazioni variabili a livello dei muscoli trattati.


- k** Dopo avere acquisito familiarità con il dispositivo per alcuni giorni, impostare un livello di intensità più alto per ottenere **contrazioni muscolari intense ma sopportabili**.
- L'intensità può essere impostata tra 1 e 50.
- Si noti che l'intensità necessaria potrebbe variare da un giorno all'altro.

- l** Il timer inizierà un conto alla rovescia durante l'esecuzione del programma terapeutico di Revitive.

- m** Al termine della sessione di Revitive, il timer verrà azzerato e il dispositivo emetterà tre segnali acustici prima di spegnersi automaticamente.


Se si avverte dolore o disagio:

- Ridurre l'intensità della stimolazione erogata dagli elettrodi per il corpo utilizzando il pulsante di Regolazione dell'intensità (-).
- È inoltre possibile interrompere in qualsiasi momento la terapia prima del termine della sessione da 30 minuti per evitare irritazioni cutanee. Per farlo, basta premere il pulsante di accensione/spegnimento.

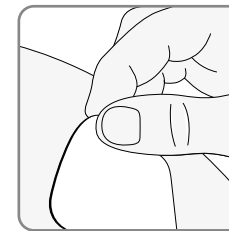


- n** Dopo avere verificato che il dispositivo sia spento, staccare delicatamente gli elettrodi per il corpo dalla pelle.

Evitare di rimuovere gli elettrodi per il corpo dalla pelle tirando i cavetti degli elettrodi, poiché così facendo si rischia di danneggiare i cavetti stessi.

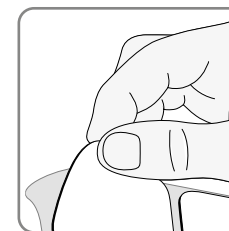

- o** Dopo l'uso, applicare nuovamente la pellicola di plastica sugli elettrodi per il corpo.

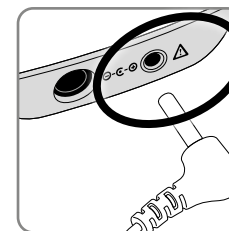

- p** Scollegare il cavetto degli elettrodi dal dispositivo. Non è necessario scollegare gli elettrodi per il corpo dal cavetto degli elettrodi.

Istruzioni per l'uso

Pulizia e conservazione di Revitive

- a** Verificare che Revitive sia spento.
- b** Pulire la pedana con un panno morbido inumidito con acqua.
Non utilizzare detergenti chimici.
Non immergere Revitive nell'acqua.
- c** Conservare Revitive in un ambiente fresco, asciutto e privo di polvere.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
- d** Applicare la pellicola di plastica sugli elettrodi per il corpo.
- e** Conservare gli elettrodi per il corpo in un luogo asciutto e ventilato.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
Non è necessario scollegare gli elettrodi per il corpo dai cavetti degli elettrodi prima di.

Sostituzione degli elettrodi per il corpo

Gli elettrodi per il corpo sono riutilizzabili per un massimo di 20-30 applicazioni. Se gli elettrodi per il corpo iniziano a perdere aderenza, applicare poche gocce d'acqua sulla loro superficie. Per richiedere elettrodi sostitutivi, visitare il sito www.revitive.com.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Revitive è acceso (le spie del display a LED sono illuminate) ma non percepisco alcuna stimolazione dalla pedana.	Non sono stati posizionati entrambi i piedi nudi contemporaneamente sulla pedana.	Assicurarsi che entrambi i piedi nudi siano posizionati contemporaneamente sulla pedana. Continuare a incrementare l'intensità fino a un massimo di 50, fino a quando non si avverte la stimolazione.
	Potrebbe essere necessario idratare le piante dei piedi.	Applicare una crema idratante sulle piante dei piedi per migliorare la conducibilità e la stimolazione e provare a ripetere la procedura. Potrebbe inoltre essere necessario aumentare il livello di intensità.
	Idratazione insufficiente.	Assicurarsi di bere molta acqua prima e dopo l'utilizzo del dispositivo. Il dispositivo utilizza l'organismo per creare conducibilità elettrica. L'acqua è un eccellente conduttore di elettricità e, se il corpo è scarsamente idratato (sotto il 60%), la stimolazione potrebbe risultare insufficiente. È dunque importante mantenere una buona idratazione.
	Il livello di intensità potrebbe essere impostato su un valore troppo basso.	Revitive è un dispositivo estremamente sicuro. Continuare a incrementare l'intensità fino a un livello massimo di 50, fino a quando non si avverte la stimolazione. Potrebbe essere necessario aumentare progressivamente il livello di intensità man mano che ci si abitua alla terapia. L'obiettivo non è arrivare a 50, ma trovare un livello confortevole per le proprie esigenze.
	Il cavetto degli elettrodi è collegato al dispositivo.	Scollegare il cavetto degli elettrodi; la pedana non entra in funzione se il cavetto è collegato.
Assenza di alimentazione o spie spente anche quando Revitive è acceso.	La presa di corrente a cui è collegato l'adattatore CA non è accesa o l'adattatore CA non è collegato correttamente al dispositivo.	Testare il dispositivo posizionando una mano trasversalmente sulla pedana in modo da toccare contemporaneamente le zone di appoggio di entrambi i piedi (se si posiziona la mano sulla parte inferiore della pedana, sarà più facile). Con l'altra mano, aumentare il livello di intensità partendo da zero fino a quando non si avverte la stimolazione. Se si avverte la stimolazione tramite la mano, il dispositivo funziona correttamente. Se non si avverte alcuna stimolazione una volta raggiunto un livello di intensità di 50, contattare il proprio rivenditore autorizzato.
Revitive non vibra.	REVITIVE NON È PROGETTATO PER EMETTERE VIBRAZIONI.	
Dolore alle gambe a seguito del trattamento.	È possibile che l'intensità sia impostata su un livello troppo alto e che i muscoli siano sottoposti a una stimolazione eccessiva.	Si raccomanda di lasciare un tempo adeguato tra un trattamento e l'altro per permettere ai muscoli di recuperare (proprio come a seguito di un'intensa sessione di allenamento). Iniziare la sessione successiva impostando un livello di intensità più basso (che permetta di avvertire una stimolazione elettrica leggera e tollerabile), riducendo la durata del trattamento per consentire ai muscoli di abituarsi alla stimolazione.

Per ulteriori informazioni o per consultare le risposte alle domande più frequenti, visitare www.revitive.it

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Revitive Essential
Modello	RLV
Frequenza (+/-10%)	Pedana: 20-44 Hz Corpo: 37-51 Hz
Corrente di uscita	Massimo 8,5 mA
Peso (+/- 0,5 kg)	1,13 kg
Dimensioni	Ø 355 mm x 77 (P) mm
Consumo di energia	5 W
Adattatore CA	Omologato CE
Fonte di alimentazione Ingresso (adattatore utilizzato)  Uscita 	100-240 V  , 50/60 Hz, 0,18 A 5 V () DC  , 1,0 A
Vita utile (durata) del dispositivo Periodo di tempo, specificato dal produttore, durante il quale il dispositivo è considerato sicuro da utilizzare.	4 anni
Componenti applicati Componenti di Revitive che, durante il normale utilizzo del dispositivo, entrano fisicamente in contatto con l'utente per l'esecuzione della terapia	Pedana – 135,5 cm ² Elettrodi per il corpo – 5 cm x 5 cm = 25 cm ²

Specifiche tecniche per l'Elettrostimolazione muscolare (EMS):



Forma d'onda	Bifasica	
Forma	Quadrata simmetrica con inversione di polarità	
Tensione di uscita massima (+/- 15%): @500Ω	Pedana: 21,5 Vp	Corpo: 21,5 Vp
Durata dell'impulso (+/-10%):	Pedana: 450 o 970 μs (Modalità 7)	Corpo: 450 μs
Carica netta @ 500Ω	[0,001] mC	
Massima densità di potenza @ 500Ω	Pedana: 0,19 mW/cm ²	Corpo: 1,50 mW/cm ²
Tempo di attivazione (+/- 10%)	Pedana: 1,9-8,3 s	Corpo: 1,9-6,5 s
Tempo di disattivazione (+/- 10%)	Pedana: 1,00-1,50 s	Corpo: 1,00 s

I valori di DURATA DEGLI IMPULSI, frequenza e ampiezza di ripetizione degli IMPULSI, inclusi quelli relativi a eventuali componenti in CC, non presenteranno scostamenti superiori di ± 20% se misurati con una resistenza di carico entro l'intervallo specificato.

Per ricevere conferma del funzionamento di Revitive nei limiti delle “prestazioni essenziali” dopo un determinato periodo di tempo, rivolgersi al produttore del dispositivo

Simboli

Conforme alla Direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE)	
Il numero di serie del dispositivo, comprendente l'anno (AAAA) e il mese (MM) di fabbricazione, è specificato sulla confezione e sul retro dell'unità	 #XXXXX/MM/AAAA
Numero articolo	
Controindicazioni, avvertenze e avvisi Si raccomanda di acquisire familiarità con tali informazioni, prima di utilizzare Revitive	
Accensione	
Tempo rimanente	
	
Polarità positiva centrale	
Apparecchio elettromedicale di classe II a doppio isolamento	
Apparecchio elettromedicale di tipo BF	
Produttore legale del dispositivo	
Rappresentante europeo autorizzato UE/CE	
Valutazione di conformità Regno Unito Prodotto conforme a tutti i requisiti normativi applicabili per il Regno Unito.	
Marchio FCC Marchio di certificazione applicato sui prodotti elettronici fabbricati o venduti negli Stati Uniti, il quale attesta che l'interferenza elettromagnetica generata da Revitive rientra nei limiti approvati dalla Federal Communications Commission. Actegy Ltd osserva tutte le regole applicabili della FCC.	

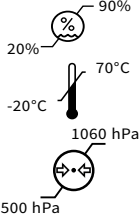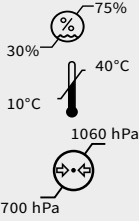Consultare le istruzioni per l'uso	
Direttiva per il controllo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Al termine della sua vita utile, non smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici, ma portarlo in un centro di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.	
Grado di protezione in ingresso	IP21
Data di scadenza	 GG/MM/AAAA
Limitazioni relative a umidità, temperatura e pressione dell'aria per la conservazione e il trasporto	 90% 20% 70°C -20°C 1060 hPa 500 hPa
Limitazioni relative a umidità, temperatura e pressione dell'aria per il funzionamento Se il prodotto è rimasto esposto a temperature inferiori o superiori al range operativo previsto (10-40 °C), attendere che torni alle temperature consigliate prima di utilizzarlo; diversamente, le normali prestazioni dell'apparecchio potrebbero non essere garantite.	 75% 30% 40°C 10°C 1060 hPa 700 hPa
Solo per uso in ambienti chiusi	
Il dispositivo medico non contiene lattice di gomma naturale	
Non smontare	

Garanzia di 2 anni

1. Revitive/Actegy concede una garanzia del produttore di 24 mesi sul prodotto acquistato a partire dalla data di acquisto o, in caso di acquisto presso un negozio online, dalla data di consegna del prodotto. La garanzia è valida sugli acquisti effettuati in Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia e Spagna. I prodotti difettosi o danneggiati coperti dalla garanzia del produttore saranno sostituiti gratuitamente da Revitive/Actegy o, se non sono stati acquistati direttamente da Revitive/Actegy, dal rispettivo venditore del prodotto, a meno che la garanzia non sia dovuta ai sensi della sezione 2. Qualora venga concessa da Revitive/Actegy un'estensione speciale della garanzia relativa al prodotto, eccedente il periodo di 24 mesi specificato, la garanzia continuerà a rimanere valida per tutta la durata dell'estensione temporale concessa.

2. Esclusioni della garanzia: La garanzia non è dovuta se il danno al prodotto è causato da interferenze esterne; in caso di uso improprio o applicazione impropria del prodotto; nel caso in cui il cliente finale non sia un consumatore; se i danni al prodotto sono causati da negligenza o mancata manutenzione da parte del cliente.

3. Per usufruire della garanzia, il cliente è tenuto a contattare il rispettivo venditore del prodotto, se il prodotto non è stato acquistato direttamente da Revitive/Actegy, o a contattare direttamente il rappresentante locale di Revitive/Actegy. I recapiti per contattare i rappresentanti Revitive/Actegy sono riportati sul retro della copertina di questo manuale. Qualora il prodotto Revitive sia difettoso o danneggiato e non sussistano motivi di esclusione della garanzia, il servizio clienti di Revitive/Actegy o il rispettivo venditore provvederà alla restituzione e alla sostituzione gratuita del prodotto Revitive.

4. Il prodotto Revitive deve essere restituito nella sua confezione originale. Se il prodotto Revitive non viene restituito nella sua confezione originale, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Le periferiche e tutti gli accessori e i manuali del prodotto Revitive devono essere inclusi nella confezione originale, quando il prodotto viene restituito.

5. Questa garanzia del produttore è concessa in aggiunta alla garanzia di tutela del consumatore obbligatoria per legge. I diritti di garanzia obbligatori per legge non sono in alcun modo limitati o altrimenti influenzati dalla garanzia del produttore. Laddove previsto dalla legislazione locale vigente, il cliente può prendere visione delle condizioni della garanzia obbligatoria per legge, collegandosi al sito www.revitive.it/garanzia o richiedendole per posta al rappresentante locale di Revitive/Actegy.

6. La garanzia del fabbricante è regolata dalla legge vigente nel luogo di residenza del cliente. Qualsiasi azione legale o altra azione che derivi da, si riferisca a, o sia in relazione con la produzione o la vendita del prodotto sarà regolata dalla legge del luogo di residenza del cliente, e il foro competente per qualsiasi azione sarà quello del luogo di residenza del cliente.

La garanzia è valida sugli acquisti effettuati in Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Paesi Bassi, Italia e Spagna.

Per attivare la garanzia gratuita di 2 anni, registrare il dispositivo all'indirizzo: support.revitive.com


Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?	84
Onderdelen en knoppen	85
Introductie tot Revitive	86
Hoe Revitive werkt	86
Gebruikersprofiel	86
Indicaties voor gebruik	86
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	87-90
Voor wie is Revitive niet bedoeld	87
Waarschuwingen en voorzichtigheid geboden	88-89
Veiligheidsmaatregelen	90
Bijwerkingen	90
Instructies voor gebruik	91-98
Hoe haal ik het meeste uit Revitive?	91
Stap 1: Revitive voor de eerste keer opzetten	91
Stap 2: De voetstappen gebruiken	92-93
Stap 3: De elektroden gebruiken	94-97
Hygiëne en opbergen	98
De batterijen en lichaamselektroden vervangen	98
Problemen oplossen	99
Technische specificaties	100-101
Garantie	102


Wat zit er in de doos?

Controleer na opening van de doos of de volgende componenten aanwezig zijn. Als u denkt dat er een component ontbreekt, neemt u contact met ons op via onze hulplijn. Telefoonnummers staan vermeld op de achterzijde van deze handleiding.

- 1** AC/DC-adapter
Kabellengte 180cm

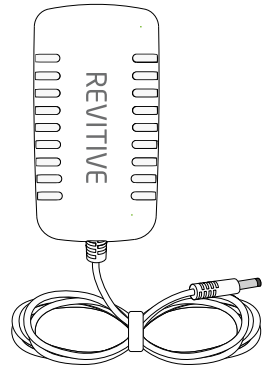


- 2** Lichaamselektroden

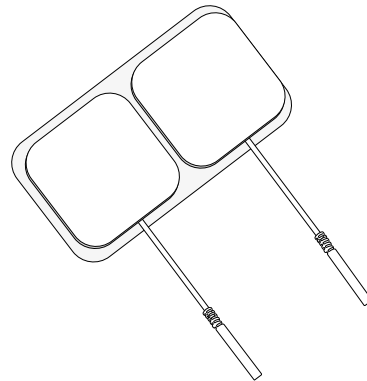



- 3** Revitive-apparaat




- 4** Geleidingsdraden
Kabellengte 150cm

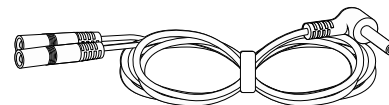

Onderdelen en knoppen

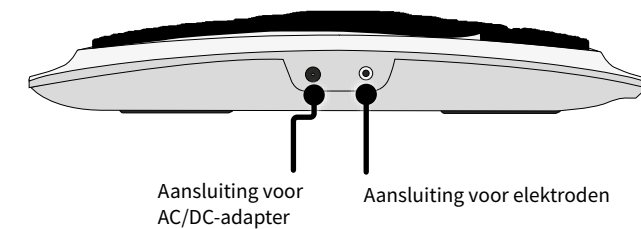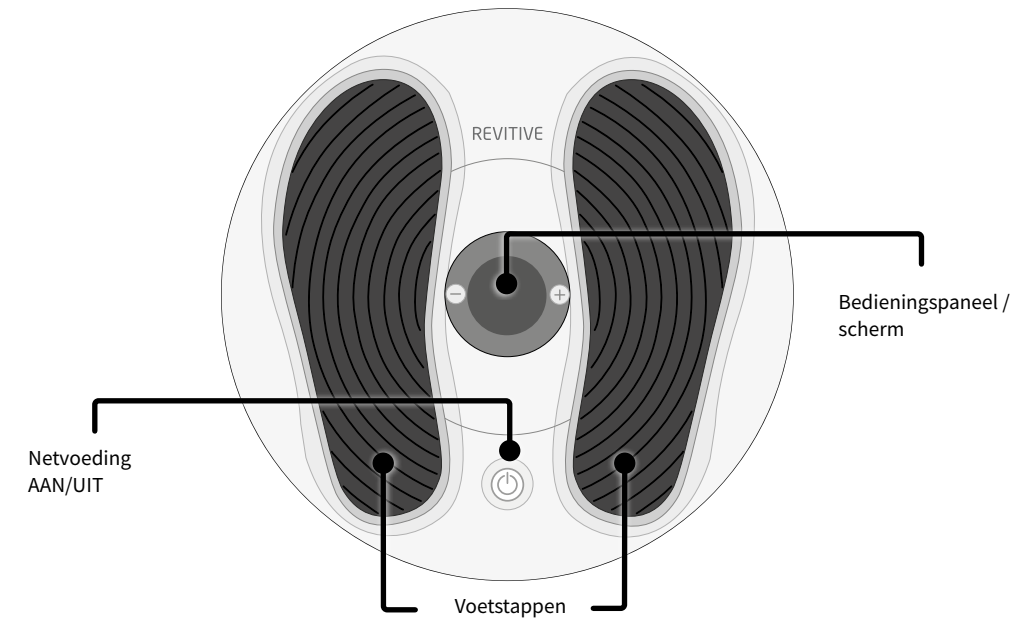

Bedieningspaneel

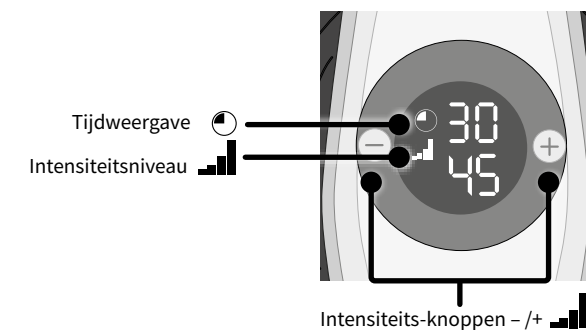

Introductie tot Revitive

Gebruikersprofiel

Het beoogde gebruikersprofiel is gebaseerd op gebruikers thuis, die een zittend leven leiden of lange perioden staan of zitten en daaraan gerelateerde problemen ervaren zoals pijn, stijfheid en zwellingen in de benen, enkels en voeten.

De Revitive is bedoeld voor gebruik door eindgebruikers in een niet-klinische omgeving en zonder toezicht of interventie van een arts tijdens het gebruik.

De gebruiker is doorgaans volwassen en hoeft geen specifieke demografische kenmerken als geslacht, etniciteit of opleidingsniveau te hebben.

Hoe de Revitive werkt

Revitive verstrekt elektrische stimulatie aan uw voeten via een paar zachte voetstappen, terwijl u zit. De elektrische stimulatie zorgt ervoor dat de spieren in uw kuit en voet samentrekken, wat helpt om de bloedsomloop in uw onderbenen te verbeteren.

Revitive is ontwikkeld zodat het apparaat comfortabel is in gebruik.

Revitive kan ook elektrische stimulatie bieden voor de knieën, schouders, rug of armen, met behulp van de meegeleverde Elektroden.

Indicaties voor gebruik

Wanneer de voetstappen van de Revitive worden gebruikt:

- Verbetering van de bloedsomloop om bloedophoping (stagnatie) te verminderen of voorkomen – veroorzaakt door een zittend leven of lange periodes zitten of staan.
- Helpt de beenaderen in goede conditie te houden – door middel van verbetering van de bloedsomloop, de toevoer van meer zuurstofrijk bloed in de benen, voeten en enkels.

De bovengenoemde indicaties voor gebruik zijn goedgekeurd conform de richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Daarnaast kan Revitive, als u een zittend leven leidt of gedurende lange periodes niet actief bent, helpen bij:

- Versterkt de beenspieren
- Vermindering van ongemak in voeten en benen
- Actieve verbetering van de bloedsomloop.

Ga naar www.revitive.nl voor meer informatie

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees vóór gebruik alle instructies.

Voor wie is Revitive niet bedoeld.

Revitive is niet voor iedereen geschikt.



Het product mag niet worden gebruikt (contra-indicaties):

- als bij u een elektronisch implantaat zoals een pacemaker of AICD (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator) is ingebracht;
- tijdens de zwangerschap;
- als u onder behandeling staat voor, of symptomen hebt van, bestaande diep-veneuze trombose (DVT).

Langdurige perioden van inactiviteit kunnen uw risico op het ontstaan van diep-veneuze trombose (DVT) vergroten. DVT is een bloedstolsel dat zich meestal in een diepe ader in het been voordoet. Indien een deel van het bloedstolsel los breekt, kan dit leiden tot mogelijk levensbedreigende complicaties, zoals longembolie.

Als u gedurende langere tijd inactief bent geweest en u meent dat u een bloedstolsel hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Om te voorkomen dat het stolsel loskomt, mag Revitive niet worden gebruikt.

In sommige gevallen van DVT doen zich geen klachten voor. Toch is het belangrijk dat u van de klachten op de hoogte bent, o.a.:

- pijn, zwelling en gevoeligheid in een van uw benen (meestal uw kuit)
- heftige pijn in het betreffende gebied
- warme huid in de buurt van het stolsel
- rode huid, met name aan de achterkant van uw been, onder de knie

Raadpleeg uw arts als u een of meerdere van de hierboven beschreven klachten hebt.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Waarschuwingen

Raadpleeg uw arts voordat u dit hulpmiddel gaat gebruiken indien:

- U onder behandeling van een arts staat
- U in het verleden hartproblemen hebt gehad
- U medisch of fysiek bent behandeld voor uw pijn
- U een vermeende of vastgestelde hartziekte hebt
- Bij u epilepsie wordt vermoed of is geconstateerd
- U twijfelt of Revitive geschikt is voor u
- U twijfelt over de oorzaak van uw symptomen

Als u een metalen implantaat hebt:

- Als u een metalen implantaat hebt, kunt u nabij het implantaat pijn of ongemak ervaren wanneer de elektrische stimulatie wordt toegepast. In dat geval dient u het gebruik te staken en uw arts om advies te vragen
- De elektrische stimulatie kan dichtbij een metalen implantaat intenser aanvoelen. U kunt het gebruik veilig voortzetten mits u geen pijn ervaart. Het kan zijn dat u de intensiteit moet aanpassen totdat het aangenaam aanvoelt

Bij het aanbrengen van de voetstappen of lichaamselektroden:

- Breng de lichaamselektroden **niet** aan op uw hoofd, gezicht, hals of borst
- Aanbrenging van de elektroden in de buurt van de borstkas kan het risico op hartfibrilleren verhogen
- Alleen aanbrengen op plekken van de huid die intact/onbeschadigd zijn
- Breng de voetstappen of elektroden niet rechtstreeks aan op of in de buurt van deze plekken:
 - op sneetjes of beschadigde huid, open wonden of huiduitslag, gezwollen, rode, geïnfecteerde of ontstoken huid of huidrupties (zoals flebitis, tromboflebitis, spataders, cellulitis). Controleer uw voetzolen en tenen voor u het apparaat gebruikt
 - op, of in de buurt van (nabij), kwaadaardige laesies/tumors
 - op gebieden die met radiotherapie zijn behandeld (in de afgelopen 6 maanden)
 - op voortplantingsorganen
 - op tegengestelde dijbenen en raadpleeg de diagrammen in deze gebruikershandleiding voor juiste plaatsing van de elektroden
 - op de halsslagaderzenuwen (voorzijde van de hals), met name bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor reflex van de halsslagader
- Elektroden zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon. Deel uw elektroden **niet** met anderen
- Gebruik de lichaamselektroden **niet** na hun houdbaarheidsdatum
- De kans bestaat dat u last krijgt van huidirritatie of brandwonden onder de stimulatie-elektroden, of van hypergevoeligheid door de elektrische stimulatie
- Zorg dat een balsem/gel/vochtinbrengende crème gelijkmatig wordt aangebracht en volledig door de huid is opgenomen vóór u stimulatie toepast. Het ongelijkmatig aanbrengen van een balsem/gel/vochtinbrengende crème kan het risico op een geïrriteerde huid of brandwonden mogelijk vergroten bij het toepassen van de elektrische stimulatie
- Symptomen kunnen mogelijk verergeren tijdens de eerste behandelingsfase voordat ze verbeteren. Dit kan zijn omdat uw lichaam zich nog niet heeft ingesteld op meer spieractiviteit en een verbeterde bloedcirculatie. In dit geval verlaagt u de intensiteit en de tijdsduur van de behandeling, waardoor de eerste symptomen zullen afnemen. Raadpleeg uw arts bij aanhoudende klachten



Waarschuwingen

Wanneer moet u de Revitive niet gebruiken:

- In sommige gevallen kunt u Revitive beter niet gebruiken. Gebruik het apparaat niet:
 - In de buurt van elektronische bewakingsapparatuur
 - In combinatie met een levensondersteunend medisch elektronisch apparaat
 - Terwijl u doucht of een bad neemt
 - Terwijl u slaapt
 - Gebruik niet in combinatie met een brace of gipsverband zonder eerst uw arts te raadplegen
- Gebruik dit apparaat niet terwijl het zich naast of tussen andere apparaten bevindt, omdat dat de werking nadelig kan beïnvloeden. Als gebruik op die manier nodig is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten gehouden worden om te verifiëren dat ze normaal werken.

Aanvullende waarschuwingen:

- Gebruik van accessoires en kabels die niet door de fabrikant van dit apparaat zijn aangegeven of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van dit apparaat en bijgevolg een slechte werking.
- Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet worden gebruikt op een afstand van minder dan 30 cm tot enig onderdeel van het Revitive-systeem, inclusief door de fabrikant aangegeven kabels.



Voorzichtigheid geboden

Bij het toepassen van stimulatie:

- Wees voorzichtig wanneer u stimulatie toepast op gebieden van de huid die minder gevoelig zijn dan normaal. De huid kan geïrriteerd raken, omdat u de stimulatie pas kunt voelen als de intensiteit te hoog is. Gebruik een lage intensiteit om een zachte samentrekking van de spieren te creëren en/of pas de stimulatie gedurende kortere tijd toe om overstimulatie te voorkomen. Controleer de huid op symptomen van irritatie (rode huid), bloedingstoringen of pijn. Raadpleeg bij twijfel uw arts
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

When using EMS:

- Wees voorzichtig wanneer u stimulatie toepast:
 - Op de buik tijdens de menstruatie
 - Na recente chirurgische ingrepen (in de afgelopen zes maanden), omdat de stimulatie uw genezingsproces zou kunnen verstoren
 - Als u door letsel zoals een spierscheur waarschijnlijk bloedend weefsel heeft, wordt aangeraden de eerste 12 uur nadat het letsel is opgelopen niet op een plaats in de directe omgeving daarvan te stimuleren. Gebruik een lage intensiteit en/of een kortere duur om overstimulatie te voorkomen.
 - Na een lange periode van immobiliteit of inactiviteit – gebruik een lage intensiteit en kortere gebruiksduur om overstimulatie of spiervermoeidheid te voorkomen

Aanvullende waarschuwingen:

- De langetermijneffecten van elektrische stimulatie zijn onbekend
- Elektrische stimulatie werkt mogelijk niet voor elke gebruiker; raadpleeg uw arts

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Veiligheidsmaatregelen

- Ga niet op het apparaat staan. Gebruik het apparaat alleen zittend
- Plaats de Revitive niet zodanig dat deze moeilijk losgekoppeld of uitgeschakeld kan worden
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte
- Mors geen vloeistof op het apparaat of op de accessoires
- Voorkom overbelasting van het stopcontact
- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen
- Houd snoeren en kabels buiten bereik van kinderen om het risico op wurging te voorkomen
- Revitive kan door meerdere personen worden gebruikt; zorg dat het apparaat na elk gebruik wordt schoongemaakt
- Raak de voetstappen tijdens het gebruik niet met uw handen aan voordat de pauzefunctie is ingeschakeld of het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik Revitive alleen met de door de fabrikant geleverde of via de fabrikant aangeschafte accessoires
- Controleer de lichaamselektroden, snoeren en kabels regelmatig op beschadiging
- Maak Revitive niet open en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Doet u dat wel, dan vervalt uw garantie en kunt u ernstig letsel oplopen
- In het onwaarschijnlijke geval dat uw Revitive niet naar behoren werkt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde erkende agent
- Er zijn gevallen bekend waarbij sommige universele afstandsbedieningen (bv. van de tv, enz.) de instellingen op Revitive kunnen wijzigen als ze ten tijde van een behandeling worden gebruikt. Mocht dit het geval zijn, stel dan gewoon de tijd of intensiteit van Revitive opnieuw naar uw wens in met behulp van de Revitive afstandsbediening, of via het bedieningspaneel van het apparaat
- Revitive heeft de vereiste tests voor elektromagnetische interferentie (EMI) doorstaan; maar kan nog wel worden beïnvloed door overmatige emissie en/of interferentie veroorzaken met gevoeliger apparatuur
- Nadat het apparaat aan warme of koude temperaturen buiten het opgegeven temperatuurbereik van 10-40°C is blootgesteld, moet u het apparaat opnieuw aan de aanbevolen gebruikstemperaturen laten acclimatiseren om de goede werking van het product te handhaven



Bijwerkingen

- Als u last hebt van bijwerkingen moet u het gebruik van Revitive staken en onmiddellijk uw arts raadplegen

Instructies voor gebruik

Hoe haal ik het meeste uit Revitive?

Voor de beste resultaten:

- Gebruik de **Revitive voetstappen ten minste 30 tot 60 minuten per dag**, 7 dagen per week.
- Het is belangrijk om Revitive op een intensiteit te gebruiken die hoog genoeg is zodat uw spieren op een krachtige, aangename manier samentrekken. De meeste mensen ervaren sterke spiersamentrekkingen bij **intensiteitsniveau 40 of hoger** (intensiteitsbereik van 1 - 50).
- Als u een langdurige medische conditie hebt, zoals hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes, osteoartrose, chronische veneuze insufficiëntie (CVI), perifere arteriële aandoeningen (PAD) of COPD het kan **tot 8 weken** duren voor symptomen van deze chronische aandoeningen verminderen.


Gebruik Revitive, met EMS-stimulatie, per dag niet langer dan 6 sessies van 30 minuten (of het equivalent daarvan).

Stap 1: Revitive voor de eerste keer opzetten

a Haal alle onderdelen uit de doos:


- AC/DC-adapter
- De Revitive
- Lichaamselektroden
- Geleidingsdraden

Zie Wat zit er in de doos op pagina 82-83 om de onderdelen te controleren.

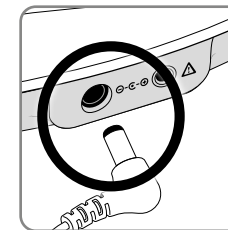

b

Pak de AC/DC-adapter.
Steek het kleine uiteinde van de netvoedingskabel in de opening aan de zijkant van de Revitive.

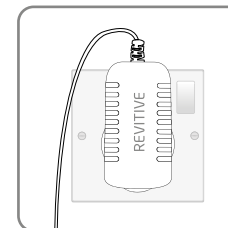

c


Steek de netvoedingsadapter in het dichtstbijzijnde stopcontact.

Lees vóór u Revitive voor de eerste keer gebruikt de Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen op pagina 86-89. Raadpleeg bij twijfel uw arts vóór u het apparaat gebruikt.

Instructies voor gebruik

Stap 2: De voetstappen gebruiken

Ga zitten en plaats beide blote voeten op de voetstappen

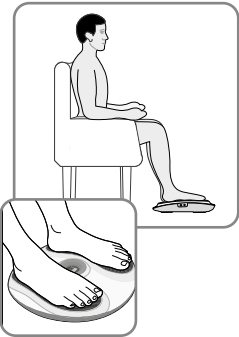

a Het is belangrijk dat u uw vochthuishouding op peil houdt. Wij bevelen aan om een glas water te drinken voor u Revitive gebruikt.

Ook kunt u een vochtinbrengende crème op de voetzolen aanbrengen om de huid te hydrateren.

Tip: het aanbrengen van een vochtinbrengende crème op de voetzolen vóór u Revitive gebruikt, kan de werking van de elektrische stimulatie verbeteren.

b Zorg dat u een comfortabele zithouding hebt. Voor het beste resultaat gaat u zitten met uw knieën in een hoek van 90 graden (rechte hoek).

c Plaats Revitive vóór u op de vloer.

Revitive is ontwikkeld voor gebruik terwijl u zit
Ga nooit op het Revitive-apparaat staan

d Plaats **beide blote** voeten op de voetstappen. Zorg dat u al het schoeisel verwijdt, inclusief sokken/panty.

e Druk op de aan/uit-knop op het apparaat. U hoort een pieptoon en de schermverlichting gaat aan. De ⌚ tijd die wordt weergegeven is 30 minuten en de 📶 intensiteit staat op 00.

Om Revitive tijdens het gebruik uit te schakelen, kunt u op elk gewenst moment de aan/uit-knop indrukken.

f Druk op de 📶 (+) intensiteitsknop om de stimulatie te starten. Druk op de (+) knop om de het niveau te verlengen. Druk op de (-) knop om de het niveau te verkorten.

g Neem even de tijd om aan het gevoel van elektrische spierstimulatie (EMS) te wennen. Gebruik het apparaat een paar dagen één keer per dag voor 30-60 minuten op een lage intensiteit.

Stel de intensiteit in op een niveau waarbij u de stimulatie in uw voeten kunt voelen waardoor de kuitspier samentrekt.

Een tintelend of wisselend gevoel in uw kuitspieren is normaal.

Revitive trilt **niet**.

h Gebruik, na een paar dagen van gewenning, een hogere intensiteit die **sterke maar aangename samentrekkingen van de kuitspieren** veroorzaakt.

De meeste mensen ervaren sterke spiersamentrekkingen vanaf intensiteitsniveau 40. U kunt de intensiteit instellen van 1-50.

Merk op dat de vereiste intensiteit van dag tot dag kan verschillen.

Als u pijn of ongemak voelt:

- Haal één of beide voeten weg van de voetstappen om de stimulatie te stoppen.
- Verlaag de intensiteit van de voetstappen met behulp van de 📶 (-) intensiteitsknop op het bedieningspaneel voordat u uw voeten terugplaatst op Revitive.

i De ⌚ tijdweergave begint de minuten af te tellen terwijl Revitive zijn programmacyclus doorloopt.

j Bij een time-out van Revitive geeft de ⌚ tijdweergave (00) weer en hoort u drie keer een pieptoon.

k De Revitive schakelt zichzelf automatisch uit.

Instructies voor gebruik

Stap 3: De lichaamselektroden gebruiken

 Elektroden zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon. Deel uw elektroden **niet** met anderen.

Revitive wordt geleverd met één paar herbruikbare (tot 20 à 30 behandelingen) Elektroden, die gebruikt kunnen worden om stimulatie te bieden aan de rug, schouders, bovenbenen, knieën of armen.

De elektroden kunnen niet tegelijkertijd met de voetstappen worden gebruikt.


Bij het gebruik van de elektroden worden de voetstappen automatisch uitgeschakeld.

Gebruik de Revitive elektroden in de EMS-modus wanneer nodig, ten minste 30 minuten per dag.


Gebruik Revitive in de EMS-modus niet meer dan 6 sessies van 30 minuten (of het equivalent daarvan) per dag, omdat anders spiermoeheid kan optreden.

a Selecteer de plek waarop u elektrische stimulatie wilt toepassen.

 Hieronder staan voorbeelden van plekken waarop u de elektroden kunt aanbrengen:


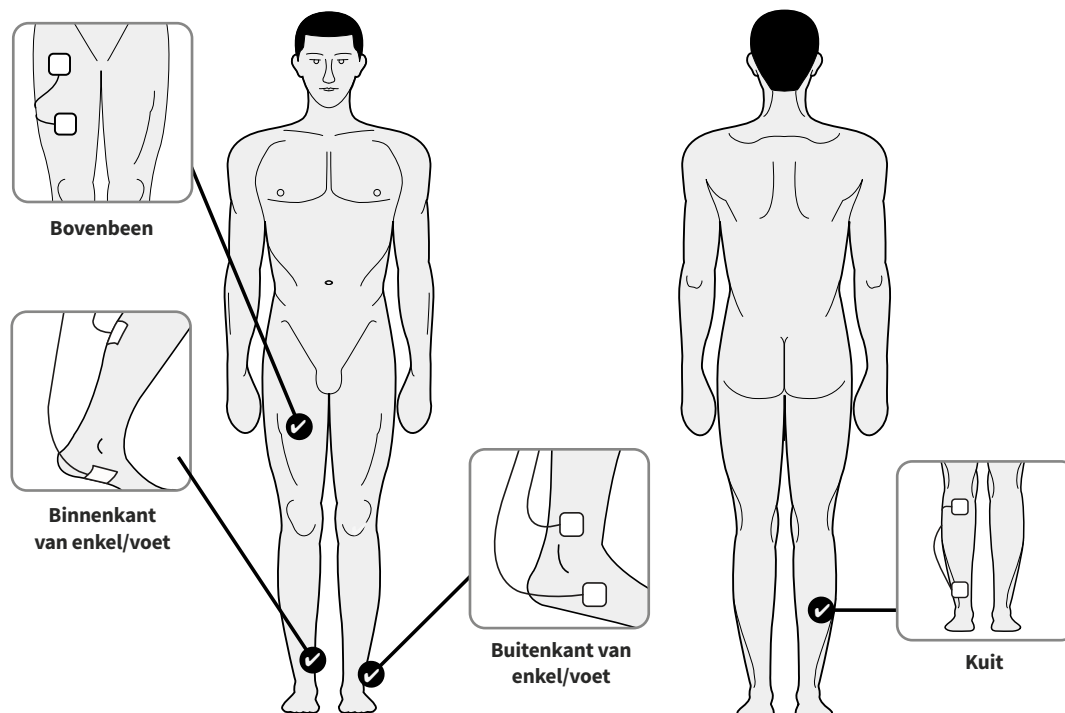


Breng de lichaamselektroden **NIET** aan op uw hoofd, gezicht, hals of borst.

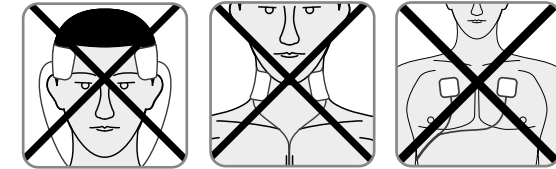


b Maak het gebied waar u de elektroden gaat aanbrengen schoon en droog.

c Controleer of Revitive is uitgeschakeld. Als het bedieningspaneel nog steeds verlicht is, drukt u op de aan/uit-knop en schakelt u Revitive uit.

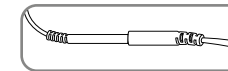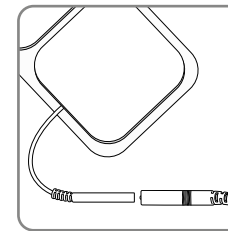


d Bevestig de uiteinden van de elektroden aan de geleidingsdraad.

Druk de aansluitingen aan zodat er geen ruimte tussen zit.
Als er ruimte tussen zit kan dat ongemak veroorzaken.

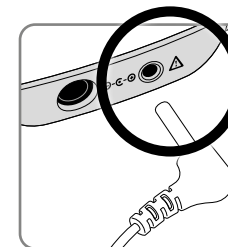


e Steek het andere uiteinde van de geleidingsdraad in de opening aan de zijkant van Revitive.
Bij het insteken van de geleidingsdraad worden de voetstappen automatisch uitgeschakeld.

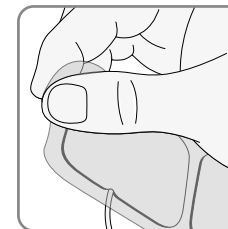

f Verwijder de beschermfolie van de elektroden door deze er voorzichtig af te trekken. Plaats de elektroden na gebruik terug op de beschermfolie.


Instructies voor gebruik

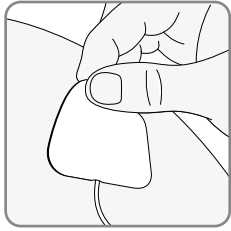

- g** Druk de elektroden aan op de plek waar u elektrische stimulatie wilt toepassen, volgens de afbeeldingen op pagina 94, door de plakkende kant zachtjes op de huid te drukken.



- h** Druk op de aan/uit-knop op het apparaat.
U hoort een pieptoon en het verlichte scherm geeft 30 minuten weer.
Om Revitive tijdens het gebruik uit te schakelen, kunt u op elk gewenst moment de aan/uit-knop indrukken.

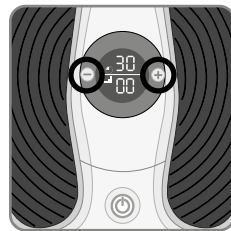

- i** Druk één keer op de (+) intensiteitsknop om de stimulatie te starten.
Druk op de (+) knop om de intensiteit te verhogen.
Druk op de (-) knop om de intensiteit te verlagen.

- j** Neem even de tijd om aan het gevoel van elektrische spierstimulatie (EMS) te wennen. Gebruik het apparaat een paar dagen lang één keer per dag 30 minuten op een lage intensiteit.
Een tintelend of wisselend gevoel in uw spieren is normaal.

- k** Gebruik na een paar dagen van gewenning een hogere intensiteit die **sterke maar aangename samentrekkingen van de spieren veroorzaakt**.

U kunt de intensiteit instellen van 1-50.


Merk op dat de vereiste intensiteit van dag tot dag kan verschillen.

- l** De tijdweergave (in minuten) loopt terug wanneer Revitive de programmacycclus doorloopt.

- m** Na afloop van het programma geeft de tijdweergave 00 aan en hoort u drie pieptonen. Daarna schakelt de Revitive zichzelf automatisch uit.


Als u pijn of ongemak voelt:

- Verlaag de intensiteit van de lichaamselektroden met behulp van de (-) intensiteitsknop.
- U kunt de behandeling ook vóór het einde van de behandelsessie van 30 minuten beëindigen om een geïrriteerde huid te voorkomen. Dit doet u door op de aan/uit-knop te drukken.

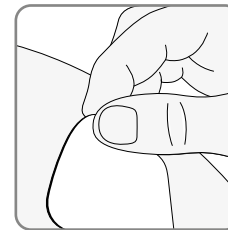


- n** Nadat het apparaat zichzelf heeft uitgeschakeld, trekt u de lichaams-elektroden voorzichtig van de huid los.

Trek niet aan de geleidingsdraden van de lichaamselektroden om ze van de huid los te halen, aangezien dit de draden kan beschadigen.

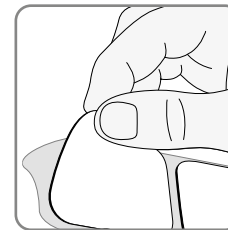

- o** Plaats de lichaamselektroden na gebruik terug op de beschermfolie.

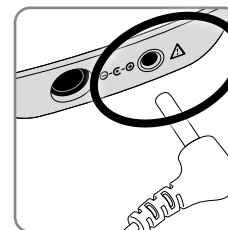

- p** Haal de geleidingsdraad uit de aansluiting op de Revitive.
U hoeft de lichaamselektroden niet van de geleidingsdraden los te halen.

Instructies voor gebruik

Hygiëne en opbergen van Revitive

- a** Controleer of Revitive is uitgeschakeld.
- b** Maak de voetstappen schoon met een zachte, vochtige doek.
Het apparaat niet met chemicaliën reinigen.
Revitive niet onderdompelen in water.
- c** Bewaar Revitive op een koele, droge en stofvrije plaats.
Niet opbergen in direct zonlicht.
- d** Plaats de elektroden op de beschermfolie.
- e** Bewaar de elektrodenpads op een droge en goed geventileerde plek.
Niet opbergen in direct zonlicht.
U hoeft de elektroden niet los te koppelen van de geleidingsdraden om ze op te bergen.

De elektroden vervangen

De lichaamselektroden kunnen 20 à 30 keer worden hergebruikt. Als de elektroden minder goed blijven plakken, kunt u het oppervlak inwrijven met een paar druppels water. Nieuwe elektroden zijn verkrijgbaar op www.revitive.com.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Revitive staat aan (het LCD-scherm is verlicht) maar ik voel geen elektrische stimulatie via de voetstappen.	U plaatst uw beide blote voeten niet tegelijkertijd op de voetstappen.	Zorg dat u op blote voeten bent en beide voeten tegelijkertijd op de voetstappen plaatst. Verhoog de intensiteit tot maximaal 50 totdat u de stimulatie voelt.
	Uw voeten hebben een droge huid.	Breng een vochtinbrengende crème aan op de zolen van uw voeten om de geleiding en stimulatie te verbeteren, en voer de procedure opnieuw uit. Soms is het ook nodig om de intensiteit te verhogen.
	U bent gedehydrateerd.	Drink voldoende water voor en na het gebruik van het apparaat. Het apparaat gebruikt uw lichaam om een elektrisch circuit te creëren. Water is een uitstekende geleider van elektriciteit. Als uw lichaam onvoldoende is gehydrateerd (minder dan 60%), is de stimulatie minder sterk. Het is daarom belangrijk dat u altijd voldoende drinkt.
	De intensiteit is te laag ingesteld.	Dit is een zeer veilig apparaat. Blijf de intensiteit verhogen tot 50 totdat u de stimulatie voelt. U merkt misschien dat u de intensiteit moet verhogen naarmate u aan de behandeling gewend raakt. Het doel is niet om op intensiteit 50 te eindigen, maar om een intensiteit te vinden die voor u aangenaam is.
	De geleidingsdraad is aangesloten op het apparaat.	Haal de geleidingsdraad uit het apparaat. De voetstappen werken niet als de geleidingsdraad is aangesloten.
	Als u, na het proberen van de bovenstaande oplossingen, nog steeds geen stimulatie kunt voelen.	Test het apparaat door één hand tegelijkertijd op allebei de voetstappen te plaatsen (op de hielen van de voetstappen is het gemakkelijkst). Met uw andere hand, beginnend bij nul, verhoogt u het intensiteitsniveau totdat u de stimulatie kunt voelen. Als u de stimulatie via uw hand voelt, werkt het apparaat. Als u de stimulatie bij 50 nog steeds niet kunt voelen, kunt u het beste contact opnemen met een erkende dealer.
Geen stroom en Revitive wordt niet verlicht na inschakeling.	De AC-adapter zit niet goed in het stopcontact of de AC-adapter is niet goed aangesloten op het apparaat.	Controleer of de AC-adapter goed in het stopcontact is gestoken en of de AC-adapter goed is aangesloten op het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende dealer.
Revitive trilt niet.	REVITIVE HOORT NIET TE TRILLEN.	
Mijn benen doen pijn na de behandeling.	De intensiteit staat misschien te hoog ingesteld en uw spieren zijn overbelast.	Geef uw spieren voldoende tijd tussen behandelingen in om te kunnen herstellen (net als na intensief sporten!). Begin bij uw volgende sessie op een lagere intensiteit (u voelt een milde elektrische stimulatie die aangenaam is) en beperk de tijdsduur van de behandelingen totdat uw spieren aan de stimulatie zijn geacclimatiseerd.

**Ga naar www.revitive.nl voor meer informatie, inclusief
Veelgestelde vragen**

Technische specificaties

Productnaam	Revitive Essential
Model	RLV
Frequentie (+/-10%)	Voet : 20 tot 44Hz Lichaam : 37 tot 51Hz
Uitgangsstroom	Max. 8,5mA
Gewicht (+/-0,5kg)	1,13kg
Afmetingen	Ø 355 mm x 77(D) mm
Stroomverbruik	5W
AC-adapter	CE-goedgekeurd
Voedingsbron Ingang (bij gebruik van adapter) ⊕ Uitgang ⊖	100-240V ~ AC (⊕), 50/60Hz, 0,18A 5V (⊖) DC ⊕, 1,0A
Levensduur van apparaat Door de fabrikant opgegeven periode waarin het apparaat naar verwachting veilig voor gebruik zal blijven.	4 jaar
Toegepaste onderdelen Onderdeel van Revitive dat bij normaal gebruik met de gebruiker in fysiek contact komt voor de behandeling	Voetstappen - 135,5cm ² Lichaamselektroden - 5cm x 5cm = 25cm ²

Outputspecificaties voor elektrische spierstimulatie (EMS):



Golfvorm	Tweefasig	
Vorm	Vierkant symmetrisch met polariteitsomkering	
Maximale uitgangsspanning (+/-15%) : @500Ω	Voet: 21,5Vp	Lichaam: 21,5Vp
Pulsduur (+/-10%):	Voet: 450 of 970μs (Mode 7)	Lichaam: 450μs
Nettolading @ 500Ω	[0.001]mC	
Maximale vermogensdichtheid @ 500Ω	Voet: 0,19 mW/cm ²	Lichaam: 1,50 mW/cm ²
AAN-tijd (+/-10%)	Voet: 1,9 - 8,3s	Lichaam: 1,9 - 6,5s
AAN-tijd (+/-10%)	Voet: 1,00 - 1,50s	Lichaam: 1,00s

De waarden voor pulsduur, -herhalingsfrequenties en -amplitudes, inclusief gelijkstroomcomponenten, mogen niet meer dan ± 20 % afwijken wanneer wordt gemeten met een belastingsweerstand binnen het gespecificeerde bereik.

Neem contact op met de fabrikant als na een bepaalde periode bevestigd moet worden dat de Revitive binnen zijn essentiële prestatievermogen werkt.

Symbolen

Voldoet aan de Europese richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG)	 2797
LOT- en serienummer van het apparaat, inclusief jaar (JJJJ) en maand (MM) van productie, zoals vermeld op de verpakking en achterop het apparaat	 #JJJJMMXXXXX
Artikelnummer	
Contra-indicaties, Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Zorg dat u deze begrijpt voordat u de Revitive in gebruik neemt	
Voeding	
Resterende tijd	
Intensiteitsniveau	
Polariteit positief in midden	
Dubbel geïsoleerd medisch elektrisch toestel van klasse II	
Medisch elektrisch toestel van het type BF	
Wettelijke fabrikant van het apparaat	
EU/EG Europees gemachtigde	
Conform VK-regelgeving Product voldoet aan alle wettelijke eisen van het VK.	
FCC-keurmerk Keurmerk op in de Verenigde Staten geproduceerde of verkochte elektronische producten dat aangeeft dat de elektromagnetische interferentie van Revitive lager is dan de door de Federal Communications Commissions goedgekeurde limieten. Actegy Ltd. voldoet aan alle toepasselijke regels van de FCC.	

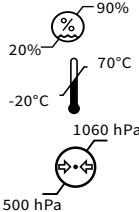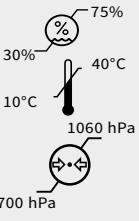Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	
De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn). Voer dit product aan het einde van zijn gebruiksduur niet af met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een verzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur	
IP21 – Beschermingsgraad tegen binnendringing	IP21
Houdbaarheidsdatum	 JJJJ MM DD
Luchtvochtigheids-, temperatuur- en luchtdrukbereik tijdens opslag en transport	
Luchtvochtigheids-, temperatuur- en luchtdrukbereik voor gebruiksomstandigheden Nadat het apparaat aan warme of koude temperaturen buiten het opgegeven temperatuurbereik van 10-40°C is blootgesteld, moet u het apparaat opnieuw aan de aanbevolen gebruikstemperaturen laten acclimatiseren om de goede werking van het product te handhaven	
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis	
Medisch apparaat bevat geen natuurlijke rubber (latex)	
Het apparaat niet demonteren	

Twée jaar garantie

1. De Producten hebben een commerciële garantie van 24 maanden vanaf hun aankoopdatum of vanaf hun leveringsdatum wanneer zij per internet worden gekocht. Deze garantie is geldig voor aankopen in Frankrijk, Duitsland, België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. Defecte of beschadigde Producten die onder deze garantie vallen, worden gratis vervangen door Revitive/Actegy of haar wederverkoper wanneer de producten niet rechtstreeks bij Revitive/Actegy werden gekocht (behalve in de gevallen van garantie-uitsluitingen die hierna worden uiteengezet). Als Revitive/Actegy bepaalde promotionele garantieverlengingen heeft toegekend, vallen de producten ook na de periode van 24 maanden nog onder de garantie.

2. Garantie-uitsluitingen: de commerciële garantie van Revitive/Actegy vervalt in geval van externe tussenkomst op het Product, slecht gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of slecht onderhoud van het Product door de klant.

3. Om gebruik te maken van de commerciële garantie wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de wederverkoper van het Product wanneer hij het product niet rechtstreeks bij Revitive/Actegy heeft gekocht, of zich te wenden tot een lokale vestiging van Revitive/Actegy via de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding. Indien het Product, afgezien van garantie-uitsluiting, defect of beschadigd is, zorgt de Revitive/Actegy klantendienst of de wederverkoper van de Producten voor gratis retournering en vervanging van het product.

4. Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. Wanneer het Product wordt teruggezonden zonder de originele verpakking, kunnen extra kosten worden gerekend. Randapparatuur, alle accessoires en de handleidingen van het Product moeten bij de retourzending met het Product worden meegeleverd.

5. De commerciële garantie van deze fabrikant wordt onafhankelijk en zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke garanties toegekend. De Klant kan de details van de wettelijke garanties, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, online vinden op **www.revitive.nl/garantie**, of ze per post aanvragen bij het lokale Revitive/Actegy-bureau.

6. Deze garantie is onderworpen aan het Franse recht voor verkopen in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland en aan het Duitse recht voor verkopen in Duitsland, in alle gevallen onder voorbehoud van de geldende regelgeving in het land van verblijf van de klant.

Om te profiteren van 2 jaar gratis garantie, dient u uw apparaat te registreren op: support.revitive.com

REVITIVE®

Essential



actegy®
health

powered by science
inspired by you™



Actegy Ltd

1 West Point
Western Road
Bracknell, RG12 1HJ
United Kingdom

Tel: +44 (0)800 014 6377



MDSS

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany.

Distributor / Distributeur / Vertrieb / Distributore

UK:

Imported by and
UK Responsible Person:
Actegy Ltd
1 West Point
Western Road
Bracknell, RG12 1HJ
United Kingdom
Tel: +44 (0)800 014 6377
info.uk@actegy.com

FR/IT/NL/BE:

Revitive SAS
250 bis boulevard Saint-Germain
75007 Paris
France/Francia/Frankrijk/Frankreich
Tel: 0805 321 051 (FR)
+33 (0)1 75 85 03 74 (BE/NL)
contact@revitive.fr

DE:

Actegy GmbH
Rankestraße 8
10789 Berlin
Deutschland
Tel: 0731 2407 6000
Kundenservice@revitive.de

Copyright © 2023 Actegy Ltd. All rights reserved. Actegy®, Revitive® and Circulation Booster® are registered trademarks of Actegy Ltd. The Revitive product is a proprietary design and is protected by applicable design laws.

Copyright © 2023 Actegy Ltd. Tous droits réservés. Actegy®, Revitive® et Circulation Booster® sont des marques déposées d'Actegy Ltd. Ce produit Revitive est un design exclusif protégé par la législation applicable sur les dessins et modèles industriels.

Copyright © 2023 Actegy Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Actegy®, Revitive® und Circulation Booster® sind eingetragene Handelsmarken von Actegy Ltd. Revitive ist ein geschütztes Design und fällt unter die jeweils geltenden Musterrechte.

Copyright © 2023 Actegy Ltd. Tutti i diritti riservati. Actegy®, Revitive® e Circulation Booster® sono marchi o marchi registrati di Actegy Ltd. Questo prodotto Actegy è un design proprietario ed è protetto dalle norme vigenti in materia di tutela di disegni e modelli industriali.

Copyright © 2023 Actegy Ltd. Alle rechten voorbehouden. Actegy®, Revitive® en Circulation Booster® zijn geregistreerde handelsmerken van Actegy Ltd. Het Revitive-apparaat is een eigen ontwerp en is beschermd door de toepasselijke wetten op ontwerpgebied.

AW 8034_IFU01_18976655 P.D 01.2023



CE
2797

CIRCULATION BOOSTER®

www.revitive.com