

ACTIVESHOP[®]

Gebruiksaanwijzing

Azzurro 713A hydraulische podotherapiestoel



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scannen
voor
verschillen
de talen




Afmetingen van de stoel:

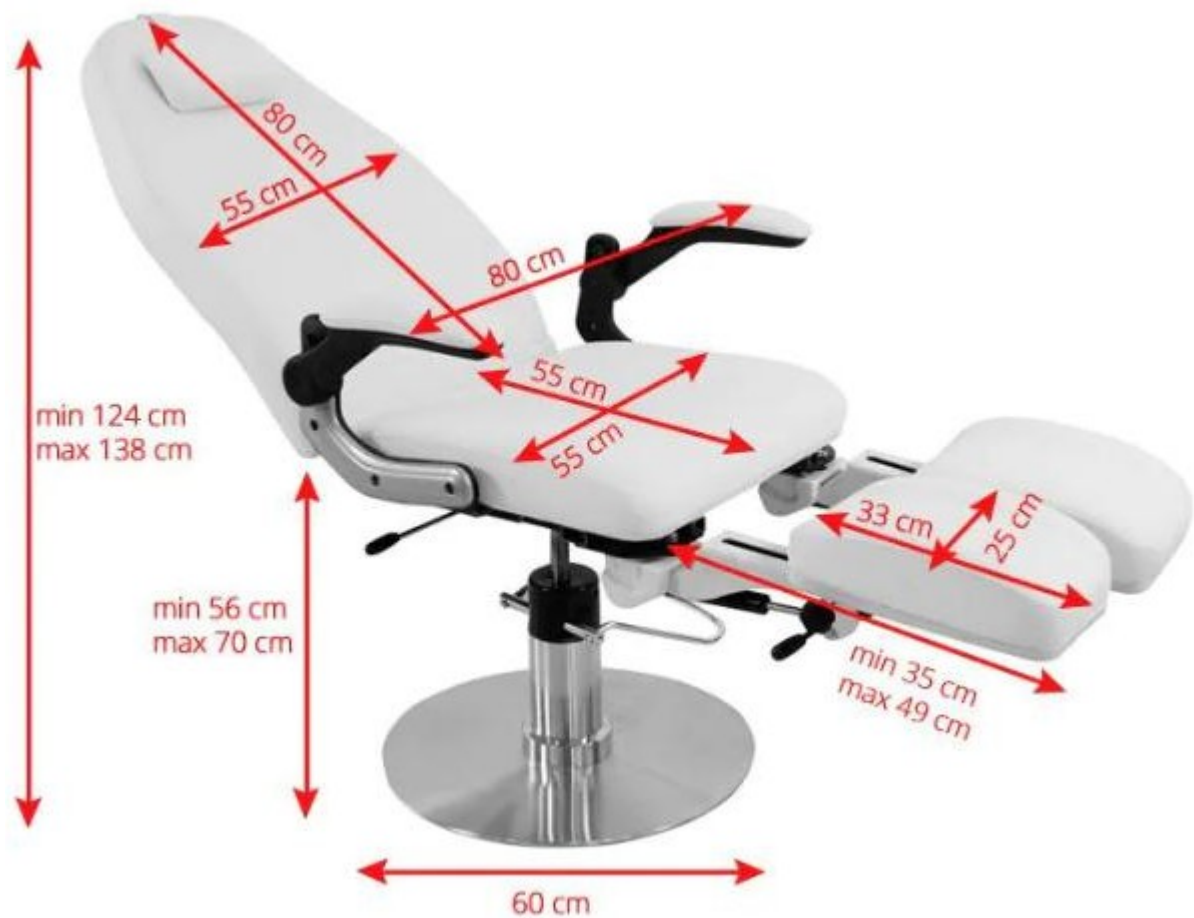


Montage:


1. Zet de actuatorhendel in de hoogste stand en ga vervolgens op de actuatorstang zitten zoals afgebeeld.

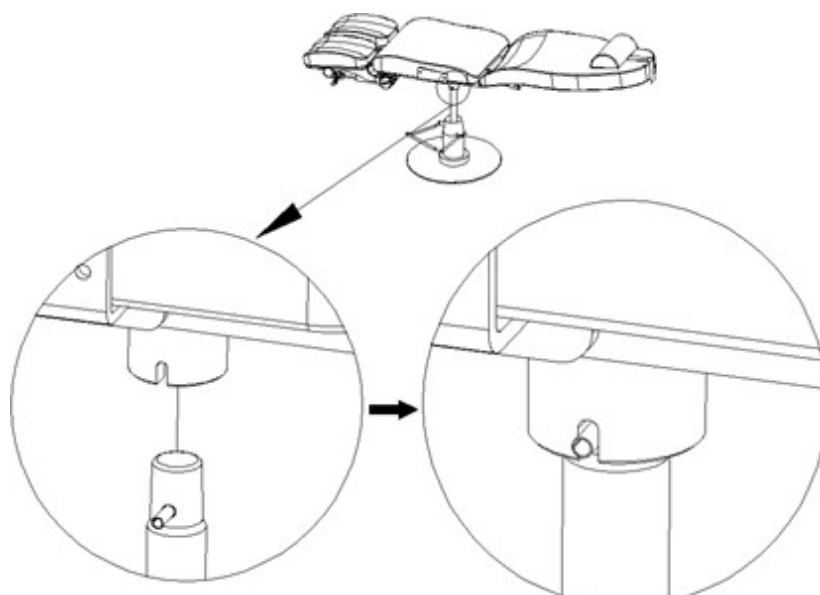

2. Lijn de rugleuningstang uit met het gat in de actuator. Plaats de bout zoals afgebeeld en zet deze vast met de klem.

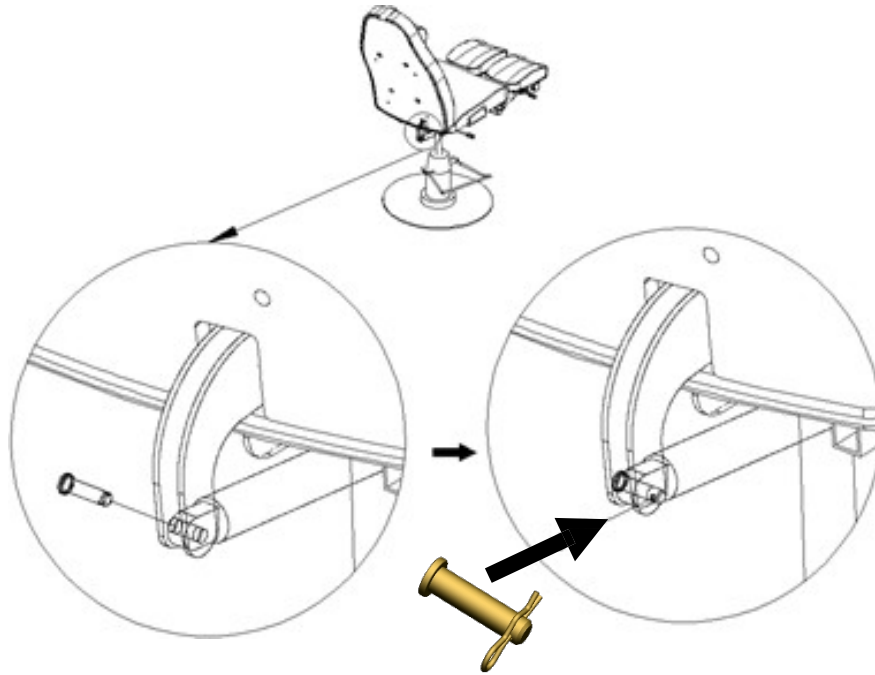


3. Monteer de armleuningingen met de schroeven zoals afgebeeld.

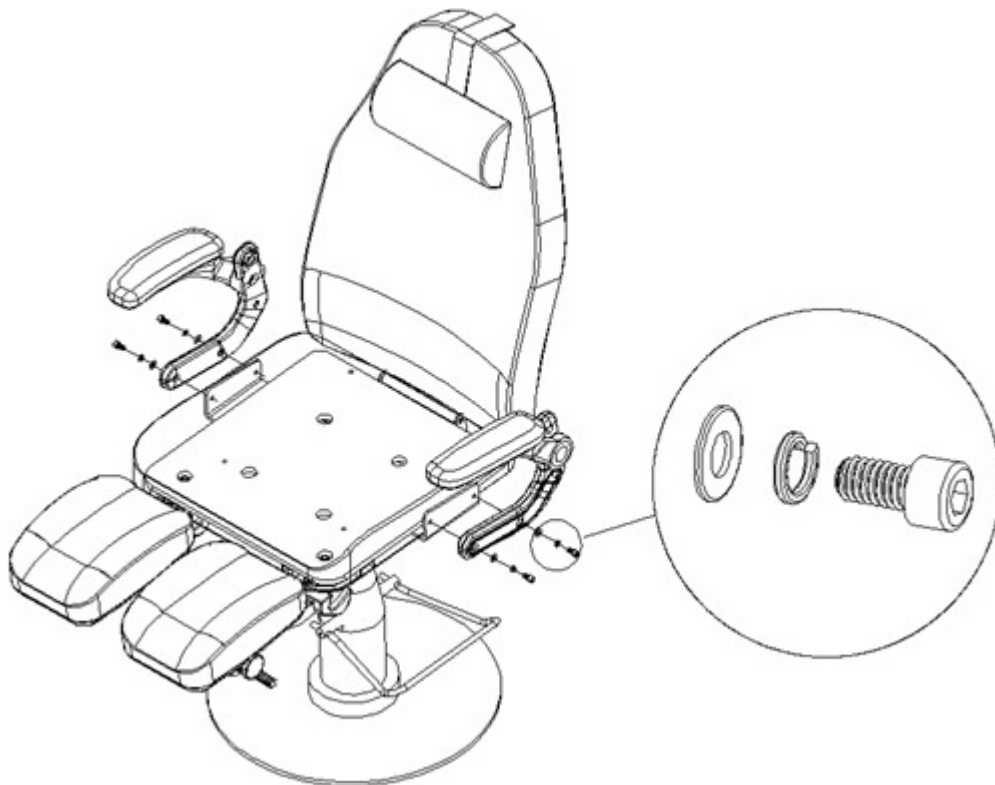


Funcities:


1. De zithoogte kan worden ingesteld met de hendel. Het omhoog brengen van de hendel veroorzaakt door de stoelrotatie te vergrendelen en de hendel in te drukken, zakt de stoel naar beneden.

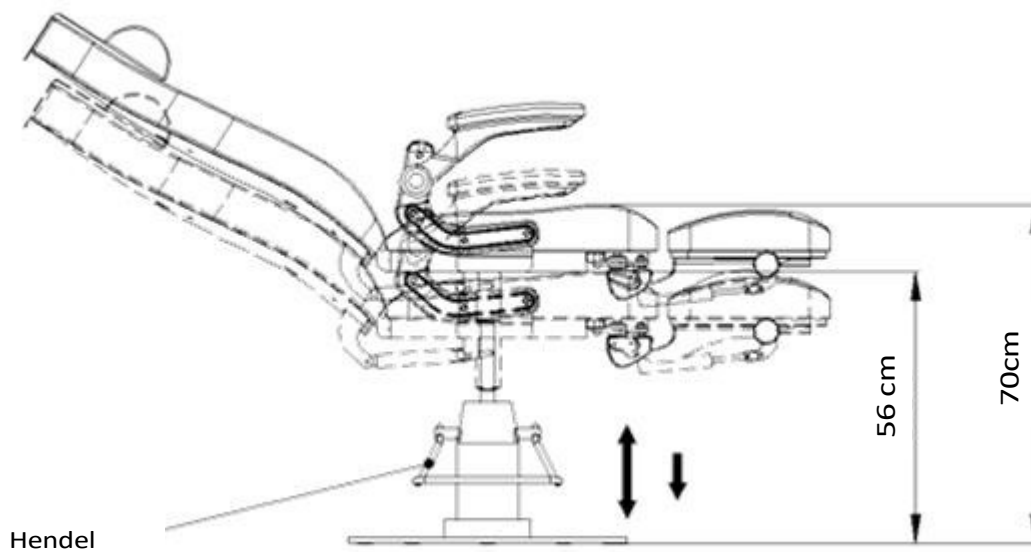

2. Om de rugleuning te kantelen druk je op de hendel en leun je achterover, waarna de rugleuning in een handige hoek kantelt.
De maximale kanteling van de rugleuning is 45 graden.

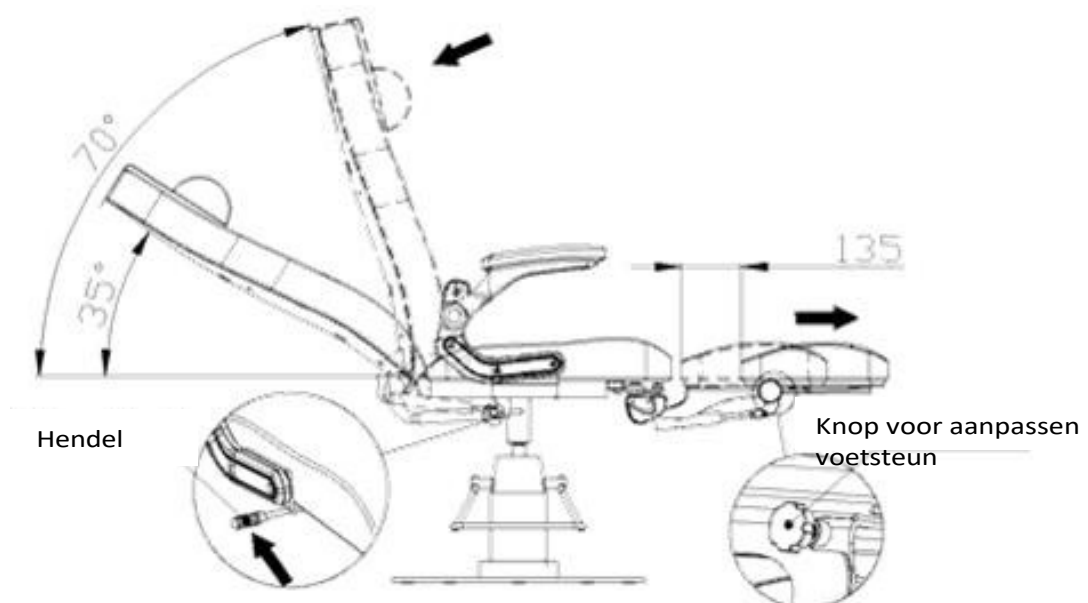


3. De voetsteun kan worden vergrendeld in de stand 30°, 60° of 90°.

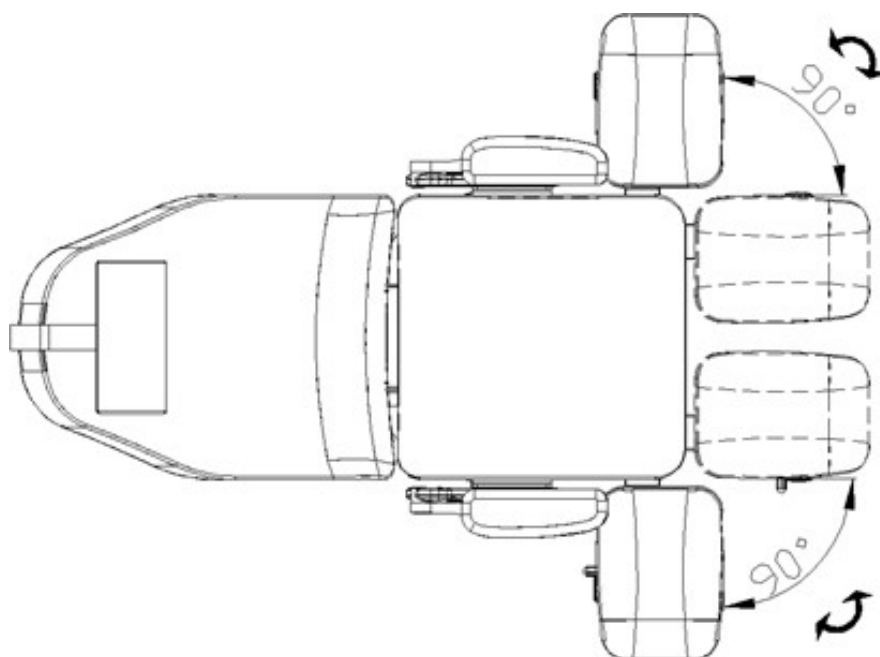

4. a) Gebruik de knop en druk tegelijkertijd op de voetsteun om deze in de gewenste hoek te kantelen. Kantelbereik: tot 90°.

b) De armsteun kan van horizontaal naar verticaal worden versteld.

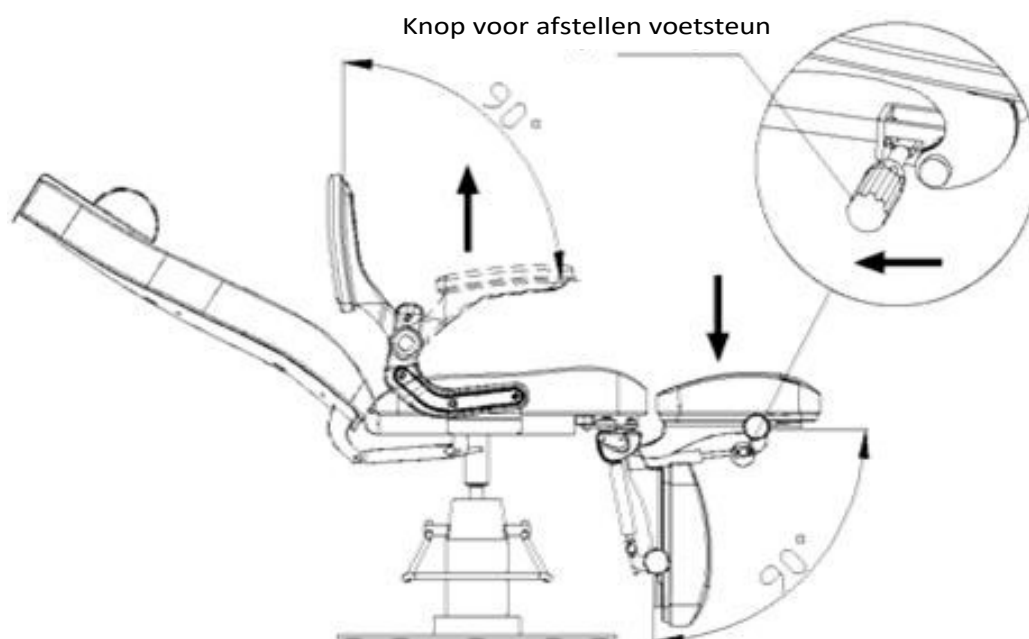

Let op.

- Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de buurt van de stoel spelen.
- Steek uw hand of voet niet in de spleten van de stoel.
- Stel de stoel niet bloot aan direct zonlicht.
- Duw of trek de stoel niet over oneffen vloeren.
- Ga niet op de stoel staan.
- De stoel mag niet worden gebruikt door mensen met fysieke beperkingen, zintuiglijke handicaps of mentale problemen.

Reiniging en onderhoud:

- Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel eenmaal per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken schoon met een vochtige doek. Moeilijk bereikbare moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken met een kleine borstel.
- Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

- De beste . reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Niet reinigen bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid. Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Zitvlak

- Veeg het oppervlak van het zadel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de aandrijving/besturingseenheid openen of vervangen.

Technische gegevens:

- Maximale belasting 150kg
- Gewicht 56,5kg
- PU/PVC leer

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - dus, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het toestel kan beschadigd raken als het valt er kan schade ontstaan.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met een geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden

ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingezonden voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.