

正面

120mm

momcozy

Bomba tira-leite portátil


Diretrizes de instalação (consulte o manual de utilização para obter mais informações)

*Certifique-se de que as suas mãos estão limpas antes da instalação.

1. Ligue o diafragma e a válvula ao acessório de ligação.




2. Junte o acessório de ligação montado ao coletor de leite.

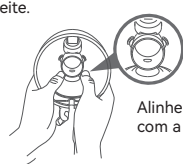

Alinhe a "orelha" com a ranhura

3. Ligue o funil ao coletor de leite.

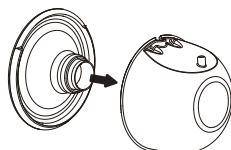


4. Monte a bomba tira-leite e o coletor de leite.



Transbordo de leite


Segure o coletor de leite materno na direção correta quando extrair o leite.

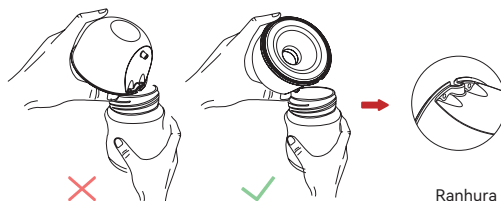

Ranhura

Consulte o vídeo de resolução de problemas para obter mais soluções, caso ocorra algum problema com o produto durante a instalação ou a sua sessão de extração de leite.

Para aceder ao vídeo de resolução de problemas, leia o código QR.

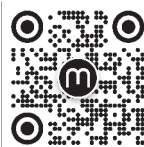

反面

Como evitar fugas de leite e sugestões de extração para obter mais leite materno

1. Incline-se para a frente para se certificar de que o seu mamilo está centrado no túnel do funil. A bomba tira-leite deve estar firmemente encostada ao seu peito.



2. Recomendamos que use um sutiã de amamentação de cobertura total para formar uma vedação apertada entre o peito e o funil.

3. Certifique-se de que a bomba tira-leite está bem montada.

4. Durante a extração, sente-se ou fique direita se estiver em pé – não se deite.

Limpeza e esterilização

***Peças não laváveis:**



Motor da bomba tira-leite

***Peças laváveis:**



Coletor de leite



Funil



Diafragma



Acessório de ligação



Válvula de ligação

Recomendamos o uso de água com sabão (40 a 60 °C) para limpar as peças laváveis por 3-5 minutos.

Utilize água a ferver/vapor/panela de esterilização para esterilização, com temperatura não superior a 100 °C (212 °F). Ferva e esterilize as peças durante 5-10 minutos.

*Não é recomendado esterilizar os acessórios da sua bomba tira-leite num micro-ondas, pois isso reduzirá a vida útil dos acessórios.

Sugestões:

- A vida útil prevista para as peças laváveis é de 1 a 3 meses. Recomenda-se que substitua as peças laváveis após um longo período de armazenamento ou antes de extrair leite para outra criança.
- A bomba tira-leite desliga-se automaticamente após a utilização durante 30 minutos. Se sentir irritação ou desconforto, interrompa a utilização do dispositivo e consulte um/uma profissional de saúde.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail.
support@momcozy.com

150mm