




momcozy Mobile Flow™ Handleiding om snel te beginnen

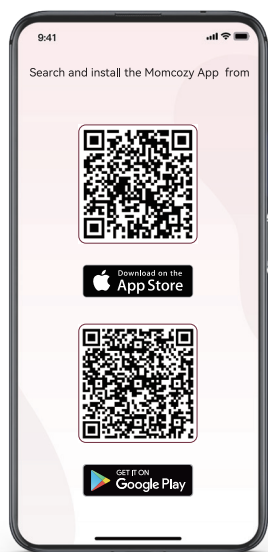



Stap 1:

Om te beginnen, zoekt u naar de app Momcozy in de app store van uw smartphone, Google Play Store of App Store. De app is compatibel met iOS 13 en Android 8.0 of hogere versies. Houd er rekening mee dat de bluetooth-verbinding van de app afhankelijk kan zijn van de smartphone die op het apparaat is aangesloten.

1


Stap 2:

Registreer uw account na het installeren. Log in als u een Momcozy-account hebt.

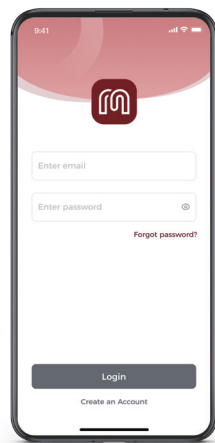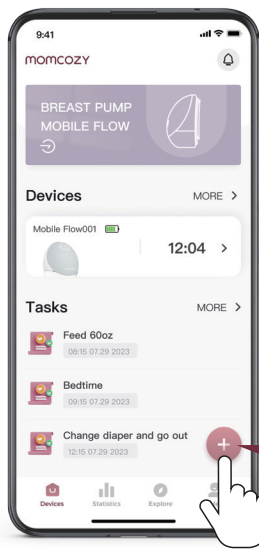


Stap 3:

Zorg ervoor dat u bluetooth op uw telefoon hebt ingeschakeld en dat de borstkolf ingeschakeld blijft. Voeg apparaten toe via de knoppen "+" en "Apparaten".

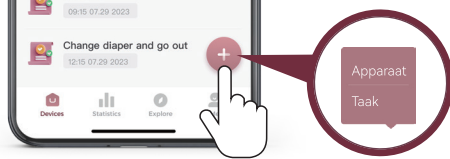


2

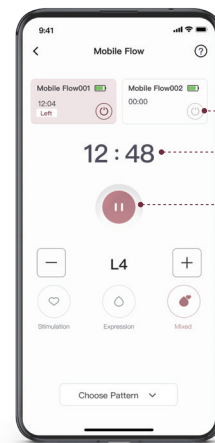

Uit
Gebruiksduur
Pauze/Doorgaan


Zuigniveau
Kiezen modus

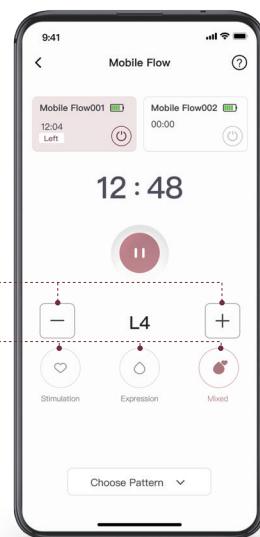


Stap 4:
Gebruik na het verbinden de app om de borstkolf te bedienen.

3


Installatierichtlijnen

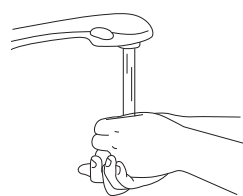


1
Was uw handen grondig met water en zeep.

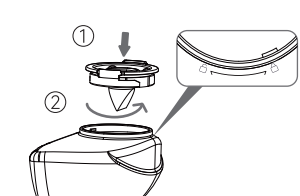

2
Zet de melkverzamelaar in elkaar door deze in de richting van het slotpictogram bij de mond van de fles te draaien.

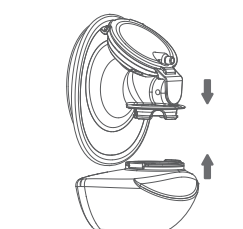

3
Bevestig het borstschild aan de mond van de fles en monteer deze met de melkopvangbak.

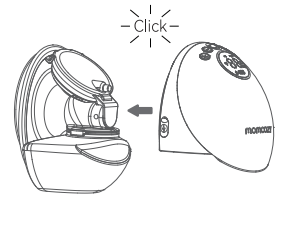

4
Motor en borstschild in elkaar zetten.

4


Reiniging en sterilisatie

*Niet wasbare onderdelen

Motor kolf



*Wasbare onderdelen

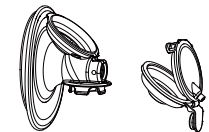

Borstschild Membraam



Melkopvangbak Ventiel

Wasbare onderdelen reinigen en steriliseren
1. Schoonmaken met zeepwater (40-60 °C) gedurende 3-5 minuten.
2. Gebruik kokend water/stoom/sterilisatiepot voor sterilisatie. 100 °C (212 °F) gedurende 5-10 minuten is vereist.

* Het wordt niet aanbevolen om kolfonderdelen te steriliseren in een magnetron of uv-sterilisator. Hoge temperaturen (>110°C) verkorten de levensduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.

Raadpleeg bij problemen met het product de video in de handleiding voor verdere oplossingen. Scan de QR-code hieronder om toegang te krijgen tot de video van de bedieningshandleiding.



5

Batterijlampje



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Batterijweergave | 2 Herinnering overloop melk |
| 3 Lang drukken: Aan-/uitzetten | 4 Kiezen modus |
| Kort indrukken: Pauze/Doorgaan | |
| 5 Omschakelen naar andere kant | 6 Indicator bluetooth |
| 7 Gebruiksduur/Weergave zuigniveau | 8 Modusindicator |
| 9 Verhogen / Verlagen | |

Tips

- 1) De verwachte levensduur van de wasbare onderdelen is 1-3 maanden. Het wordt aanbevolen om de wasbare onderdelen te vervangen na langdurige bewaring of voordat u gaat kolven voor uw volgend kind.
- 2) De borstkolf schakelt automatisch uit na 30 minuten kolven.
- 3) Als er irritatie of ongemak optreedt, gebruik dan uw vinger om de afsluiting tussen het borstschild en het borstweefsel te verbreken. Stop met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.
support@momcozy.com

6