




momcozy Mobile Flow™ Skrócona instrukcja obsługi

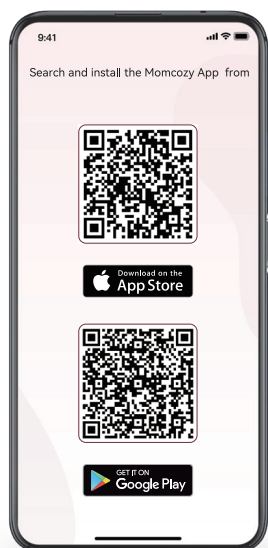


Krok 1:

W celu rozpoczęcia, wyszukaj aplikację Momcozy w sklepie z aplikacjami na swoim smartfonie, Google Play Store lub App Store. Aplikacja jest kompatybilna z systemami iOS 13 i Android 8.0 lub nowszymi wersjami. Należy pamiętać, że połączenie Bluetooth aplikacji może zależeć od smartfona podłączonego do urządzenia.


1

Krok 2:

Po instalacji zarejestruj swoje konto. Zaloguj się, jeśli masz już konto Momcozy.

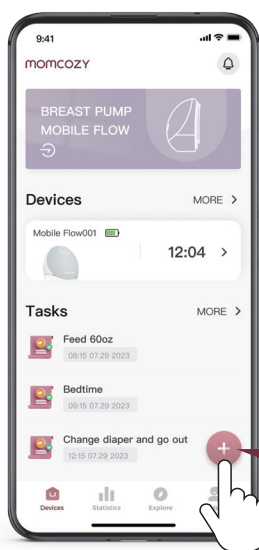


2

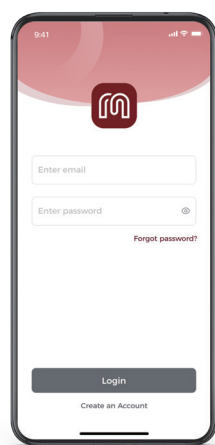


Krok 3:

Pamiętaj, aby wyłączyć Bluetooth w telefonie, a laktator powinien pozostać zasilany. Dodaj urządzenia za pomocą przycisków „+” i „Urządzenia”.

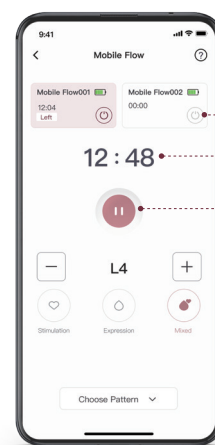


Wylłącz
Czas działania
Pauza/Kontynuuj

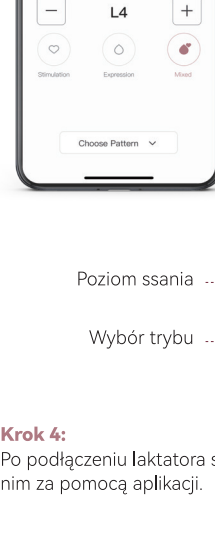

Poziom ssania

Wybór trybu

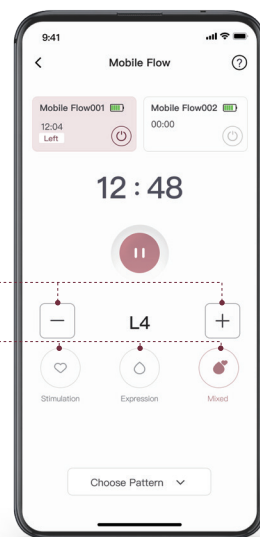


3


Krok 4:

Po podłączeniu laktatora steruj nim za pomocą aplikacji.


Wytyczne dotyczące montażu

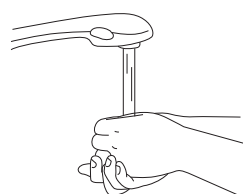


1
Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

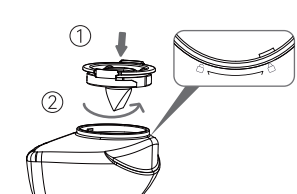

2
Zamontuj pojemnik na mleko, obracając go w kierunku wskazanym przez ikonę blokady na otworze butelki.

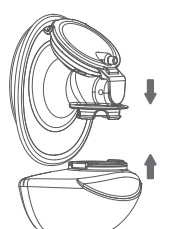

3
Przymocuj kołnierz do otworu butelki i połącz z pojemnikiem na mleko.

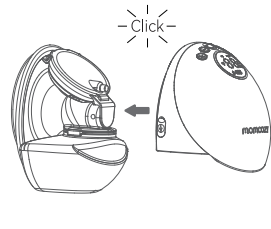

4
Zamontuj silnik i kołnierz.


4

Czyszczenie i sterylizacja

*Części, których nie można myć
Silnik pompy



*Części nadające się do mycia

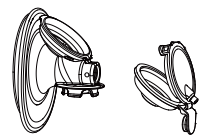

Kołnierz Membrana



Zbiornik na mleko Zawór

Czyszczenie i sterylizacja części nadających się do mycia
1. Czyść wodą z mydłem (40–60°C) przez 3–5 minut.
2. Do sterylizacji używaj wrzącej wody/pary/garńka do sterylizacji. Wymagana jest temperatura 100°C (212°F) przez 5–10 minut.

* Nie zalecamy sterylizacji części pompy w kuchence mikrofalowej lub sterylizatorze UV. Wysoka temperatura (> 110°C) skróci okres ich użytkowania i spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem należy zapoznać się z filmem instruktażowym, aby poznać dalsze rozwiązania. Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do filmu instruktażowego.



5

Wskaźnik baterii



- 1 Wyświetlacz baterii
- 2 Przypomnienie o przelewie mleka
- 3 Długie naciśnięcie: Włącz / Wylłącz
- 4 Wybór trybu
- 5 Krótkie naciśnięcie: Pauza / Kontynuuj
- 6 Wskaźnik Bluetooth
- 7 Przełączanie kierunku
- 8 Wskaźnik trybu
- 9 Czas działania/Wyświetlacz poziomu ssania
- 9 Zwiększanie / zmniejszanie

Wskaźniki

1) Oczekiwana żywotność części nadających się do mycia wynosi 1–3 miesiące. Wymiana części nadających się do mycia jest zalecana po długotrwałym przechowywaniu lub przed odciąganiem pokarmu dla kolejnego dziecka.

2) Laktator wyłączy się automatycznie po 30 minutach odciągania pokarmu.

3) Jeśli dojdzie do podrażnienia lub dyskomfortu, użyj palca, aby złamać uszczelkę między kołnierzem a tkanką piersi, przerwij używanie i skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: support@momcozy.com

6