

正面


130 mm

对折线



Tips om melkverlies te voorkomen en meer moedermelk af te kolven.

- 1 Zorg ervoor dat de kolf goed gemonteerd is.
- 2 Buig naar voren om ervoor te zorgen dat uw tepel zich in het midden van het flenskanaal bevindt. De borstkolf moet stevig aan uw borst liggen.

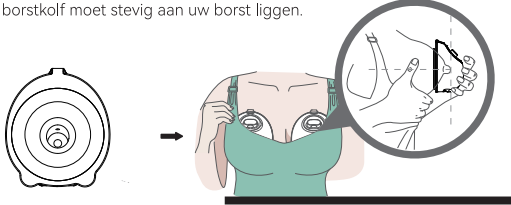

- 3 We raden gebruikers aan een volledig dekkende borstvoedingsbeha te dragen die een goede afsluiting vormt tussen de borsten en de flens.
- 4 Leun iets voorover om de kolf na het kolven uit de borst te halen.

Tips

- 1) De verwachte gebruiksduur van de afwasbare onderdelen is 1 tot 3 maanden. Het wordt aanbevolen om de afwasbare onderdelen te vervangen als u de kolf gedurende een lange periode hebt bewaard, of voordat u gaat kolven voor uw volgende kind.
- 2) De borstkolf schakelt automatisch uit na het afkolven gedurende 30 minuten.
- 3) Als er irritatie of ongemak optreedt, gebruik dan uw vinger om de afsluiting tussen de flens en het borstweefsel te verbreken, stop met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail.
support@momcozy.com


4

momcozy

Draagbare borstkolf

Installatierichtlijnen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor nadere informatie)

*Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn alvorens de kolf te installeren.

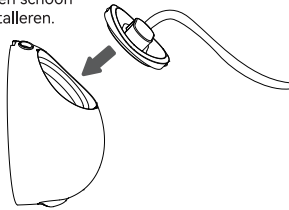

- 1 Bevestig de melkverzamelaar en zet het deksel vast om een hechte afsluiting te krijgen.



- 2 Druk voorzichtig de klep in de melkverzamelaar. Er mag geen ruimte vrij zijn.




Raadpleeg de eenvoudige video in de bedieningshandleiding voor aanvullende oplossingen. Scan de QR-code hieronder om toegang te krijgen tot de video van de bedieningshandleiding.

1


背面

- 3

Laat de melkverzamelaar eerst overeenkomen met de bovenzijde van de flens, druk dan rondom om een hechte aansluiting te krijgen.

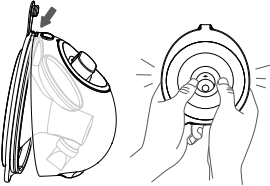


- 4

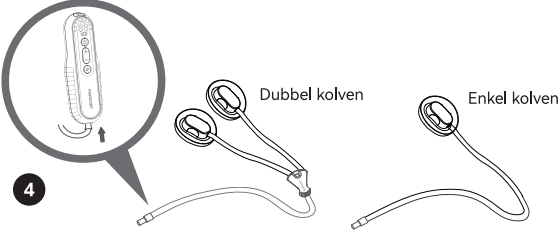

Verbind het lange uiteinde van de slang met de kolfmotor.

Melk schenken

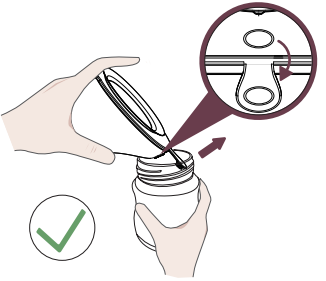

Houd de moedermelk-collector in de juiste richting als u melk schenkt. Schenk de melk vervolgens uit door het flenskanaal.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail.
support@momcozy.com

2

Reiniging en sterilisatie


*** Niet-afwasbare onderdelen**

Slang
Kolfmotor



*** Afwasbare onderdelen**

Flens
Klep
Melkverzamelaar

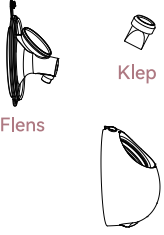


Reinigen en steriliseren van afwasbare onderdelen

1. Reinigen met zeepwater (40-60 °C) gedurende 3-5 minuten.
2. Gebruik kokend water/stoom/sterilisatiepan voor sterilisatie. 100 °C (212 °F) gedurende 5-10 minuten is vereist.

* Het wordt niet aanbevolen dat u kolfonderdelen in een microgolfoven of UV-sterilisator steriliseert. Hoge temperaturen (> 110 °C) verkorten de gebruiksduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.

Bedieningspaneel

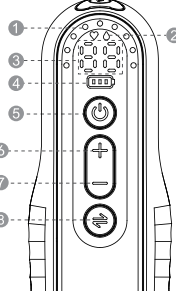

- 1 Indicatorlampje zuigniveau
- 2 Stand-indicatorlampje
- 3 Display voor werkingstijd/zuigniveau
- 4 Batterij-display
- 5 Aan/Uit
- 6 Verhogen
- 7 Verlagen
- 8 Keuzeknop standen

- Houd lang ingedrukt om Aan / Uit te schakelen;
- Druk kort op om te pauzeren / de kolfsessie voort te zetten.
- Stimulatie Kolven Gemengd

3

180 mm