

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ


ELEGANTE 880 4V1 MICRO +
SKIN SCRUB+ VACUUM+ SPRAY

Model M-880



Dovozce

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024

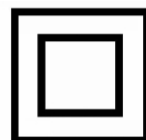


Technické údaje:

Vymezeno v příloze č.

1. Vymezeno v příloze

č. 2:

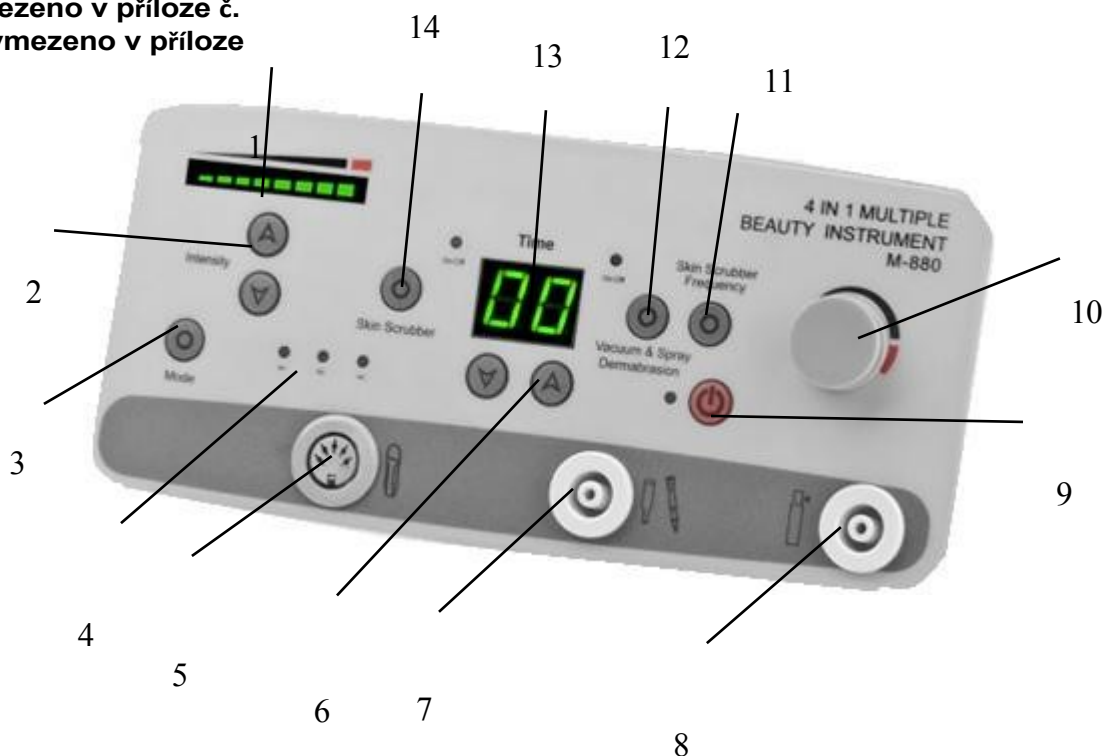

- | | |
|--|---|
| <p>1. Indikátor intenzity kavitačního loupání,
2. Nastavení intenzity kavitačního loupání,
3. Výběr možnosti ošetření kavitačním peelingem,
4. světelná kontrolka provozu kavitačního peelingu,
5. Připojení kavitačního peelingu,
6. Nastavení času</p> | <p>7. Připojení vakua a mikrodermabraze
8. Připojení spreje
9. Zařízení pro zapnutí/vypnutí
10. Nastavení výkonu odsávání
11. Nastavení frekvence kavitačního peelingu
12. Zapnutí/vypnutí vakua, sprej, mikrodermabraze
13. Zobrazení času
14. Zapnutí/vypnutí kavitačního peelingu.</p> |
|--|---|

Kavitační peeling je především bezbolestné čištění pokožky pomocí ultrazvukových vibrací. Umožňuje důkladné odstranění přebytečného kožního mazu z pórů a vlasových folikulů a také zbavení černých teček. Při použití peelingu dochází k jevu kavitace, který nastává, když se ultrazvuk dostane do kontaktu s kapalinou, poté se vytvoří mikroskopické bublinky plynu a proběhne řada chemických procesů, jejichž výsledkem je rozpad odumřelých buněk rohové vrstvy.

INDIKACE

- Vyvýšení obličejového oválu a brady,
- Zpevnění struktury kůže,
- Vyhlazení povrchových vrásek,
- redukce váček pod očima a vrásek,
- Rekonstrukce kolagenu,
- Terapie proti stárnutí - prevence,
- redukce nečistot, rozšířených pórů,
- Zpevnění struktury pleti.
- Čištění pleti.

MIKRODERMABRAZE

Jedná se o ošetření, při kterém se pomocí abrazivních diamantových hrotů a sací síly exfoliují povrchové vrstvy epidermis.

Mikrodermabraze je účinné ošetření pro redukci jemných vrásek, kuřích ok, barevných změn a jizev po akné. Stimuluje výstavbu kožních buněk a kolagenu. Jedná se o velmi oblíbené neinvazivní kosmetické ošetření. Při pravidelném používání přináší skvělé výsledky u všech typů pleti. Výsledky jsou patrné okamžitě.

Indikace

- Jizvy po akné,
- černé tečky, bílé tečky,
- rozšířené póry,
- drsná, zrohovatělá pokožka,
- ochablost pokožky,
- omlazení pleti a odstranění jemných linek a vrásek kolem očí, úst a krku,
- strie,
- suchá pokožka,
- hyperpigmentace a změny barvy,
- poškození slunečním zářením (obličej, ruce, krk),
- peri-folikulární keratóza,
- Acne vulgaris (komedonální, papulární),
- seborea.

Kontraindikace

- virové infekce,
- bakteriální infekce
- plísňové infekce,
- pustulózní a hnisavé akné,
- růžovka,
- kůže očních víček,
- přerušená kontinuita kůže,
- kožní nádory a mateřská znaménka,
- kavernózní angiomy,
- léčba proti akné přípravkem Roaccutan (doporučuje se přestávka nejméně 3 měsíce),
- náchylnost ke keloidům (jizvení),
- operace obličeje (doporučená přestávka nejméně 2 měsíce).


Pozor:

Mikrodermabraze musí být čistá a dezinfikovaná.

Ošetření se provádí na suché pokožce.

Bavlněné filtry pro mikrodermabrazi jsou na jedno použití. Pohyby

hlavic

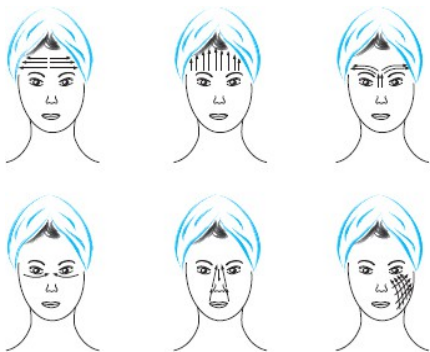

Trysky

Filtr b bavlna

Hlavice

VACUUM

Jedná se o ošetření, při kterém se používá sací síla a nástavce vhodně zvolené pro ošetřovanou oblast.

INDIKACE:

- černé tečky,
- rozšířené póry,
- drsná, zrohovatělá pokožka
- ochablost kůže
- strie,



- suchá pokožka.

Sprej

Slouží k jemnému tonizování pleti pomocí vakua a tonika obsaženého v nádobce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovanou . autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.