


Nipple Shields with Sterilizer Case

20 mm | 24 mm


Nipple shields should be used under the care of a medical professional or lactation consultant. Before first use and after every use, wash nipple shields in warm soapy water, rinse clean, sterilize, and air dry.

WARNING! Sterilizer case and water will be HOT after microwaving. USE CAUTION.


Rest nipple shields on holders inside case. Add water to fill line (7 tsp / 35mL), close lid securely, and microwave (using a 700-1250 watt microwave) for 3 minutes and 30 seconds. Carefully remove sterilizer from microwave and drain water from either end of case. Open lid and allow shields to cool for 5 minutes, then wipe out any remaining water before closing lid to store.

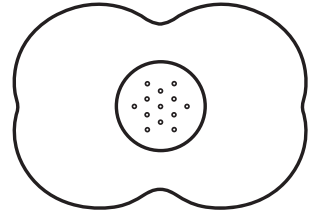

- 1 Check that the nipple shield is not inside out. Dr. Brown's logo should be visible in the correct direction from the outside.

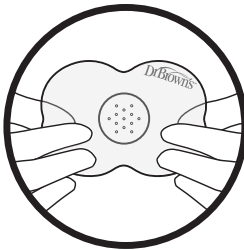


- 2 Center holes over your nipple. Gently stretch nipple shield and apply to breast.

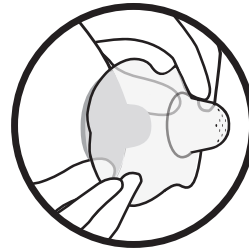

- 3 If needed, apply a very small amount of nipple balm to the inside wings of the shield to help stick to skin.




- 4 Once feeding begins you may need to rotate shield to ensure that baby's nose is free from obstruction and to maximize skin-to-skin contact.

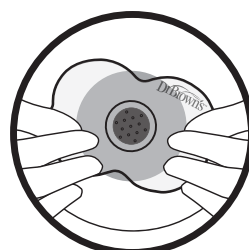

FR Téterelles avec étui de stérilisation

20 mm | 24 mm


Les téterelles doivent être utilisées en suivant les recommandations d'un professionnel de la santé ou d'une consultante en allaitement. Après la première utilisation et par la suite après chaque utilisation, lavez les téterelles à l'eau chaude savonneuse, rincez, stérilisez et laissez sécher à l'air.

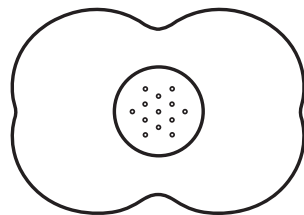


AVERTISSEMENT ! L'étui de stérilisation et l'eau seront CHAUDS à la sortie du four à micro-ondes. SOYEZ PRUDENTE.

Déposez les téterelles sur les supports, à l'intérieur de l'étui. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage (7 cuillerées à thé / 35 mL), refermez bien le couvercle et placez au four à micro-ondes (four de 700 à 1 250 watt) pendant 3 minutes 30 secondes. Retirez soigneusement le stérilisateur du four à micro-ondes et videz l'eau des deux côtés de l'étui. Ouvrez le couvercle et laissez sécher les téterelles pendant 5 minutes, puis essuyez toute eau restante dans l'étui avant de le refermer pour le rangement.


- 1** Assurez-vous que les téterelles ne sont pas à l'envers. Le logo Dr. Brown doit être visible dans le bon sens lorsque vous regardez l'extérieur de la téterelle.

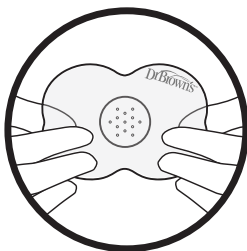


- 2** Centrez les trous sur votre mamelon. Étirez délicatement la téterelle et appliquez-la sur le sein.

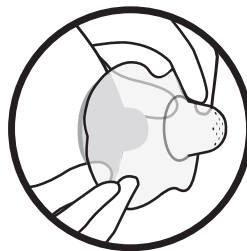

- 3** Au besoin, appliquez une toute petite quantité de baume à mamelon à l'intérieur des ailettes de la téterelle pour favoriser l'adhésion à la peau.

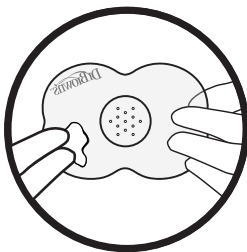

- 4** Lorsque débute la tétée, vous pourriez devoir tourner la téterelle pour vous assurer que le nez du bébé n'est pas obstrué et pour favoriser le contact peau à peau.

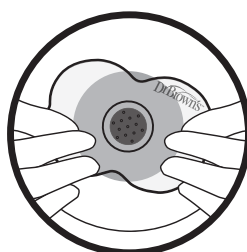


ES Protectores de pezón con estuche esterilizador

20 mm | 24 mm


Los protectores de pezón deben utilizarse bajo el cuidado de un profesional médico o una asesora de lactancia. Antes de usar por primera vez y después de cada uso, lave los protectores de pezón en agua tibia jabonosa, enjuague, esterilice y deje secar al aire.

¡ADVERTENCIA! El estuche esterilizador y el agua estarán CALIENTES después de sacarlos del microondas. TENGA CUIDADO.


Coloque los protectores de pezón en los soportes del interior del estuche. Agregue agua hasta la línea de llenado (7 cucharaditas / 35 mL), cierre bien la tapa y caliente en el microondas (con un microondas de 700-1250 vatios) durante 3 minutos y 30 segundos. Retire con cuidado el esterilizador del microondas y escurra el agua de ambos extremos del estuche. Abra la tapa y deje que los protectores se enfrien durante 5 minutos; a continuación, seque cualquier resto de agua antes de cerrar la tapa para guardarlo.

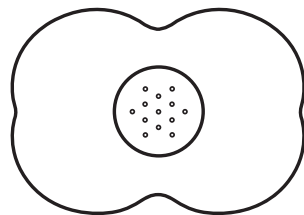


- 1 Compruebe que el protector de pezón no esté del revés. El logo de Dr. Brown's debe poder verse en el sentido correcto desde el exterior.

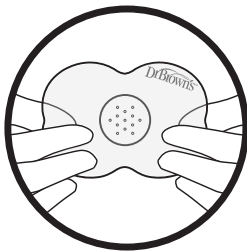

- 2 Centre los orificios sobre su pezón. Estire suavemente el protector de pezón y colóquelo sobre el pecho.

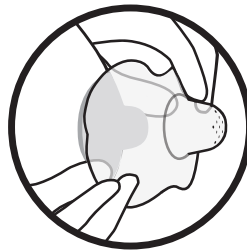

- 3 Si es necesario, aplique una cantidad muy pequeña de bálsamo para pezones en las alas interiores del protector para ayudar a que se adhiera a la piel.

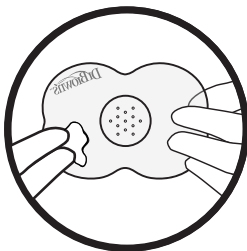

- 4 Una vez que comience la toma, es posible que tenga que girar el protector para asegurarse de que la nariz del bebé no se encuentre obstruida y para maximizar el contacto piel con piel.

