



⚙️ Installation with Clamp-On Bracket

1. Ideal for ComfyGO Mobility Electric Wheelchairs:
 - A. IQ-8000 Series, IQ-9000 Series, and IQ-7000 Series
2. Open the clamp and place it around the handlebar.
3. Align the controller with the brass inserts.
4. Use the short screws to fix the controller to the bracket.
5. Use the long screw, and tighten the bolt at the bottom using the Allen wrench.



⚙️ Installation with Screw-On Bracket

1. Ideal for ComfyGO Mobility Electric Wheelchairs:
 - A. Phoenix Carbon Fiber Series, X-9 Series, X-7 Series, X-6 Series, and X-Lite Series
2. Align the controller's back and screw it in securely using the shorter screws.
3. Fix the bracket directly onto a flat bar or panel using the long screws.

🔌 Charging

1. When turned on, 5 battery LEDs will light up, then turn off after 5–6 seconds if unused.
2. If only 1 LED shows, please charge it as soon as possible.
3. Use the provided USB-A to USB-C cable.
4. Charging port is on the back of the controller.
5. Full charge takes ~2–3 hours.

🧑 Basic Operation

1. Joystick: Move to control direction.
2. + / – Buttons: Adjust speed.
3. Power Button: Turn controller on/off.
4. Horn Button: Activates horn.

⚠️ Safety & Warnings

- Do not use in rain or wet conditions.
- Ensure mount is tight before use.
- Only charge with certified USB chargers.
- Keep out of reach of children
- Read the wheelchair's user manual for safety rules that apply to the caregiver controller.


🔄 Pairing Instructions

1. Turn on the wheelchair, then turn on the caregiver controller.
2. Press and hold the – (speed decrease) button on the caregiver controller until the red LED appears.
3. Then press and hold the – button on the wheelchair controller until the red LED appears or starts blinking.
4. Press the horn button on the wheelchair controller.
5. Both devices will automatically turn off after successful pairing.
6. Turn them on again and enjoy using the caregiver controller.

❗ If it doesn't work, repeat the steps carefully or contact us using the information at the bottom of this page.

United States of America & Canada

- info@ComfyGoMobility.com
- +1 844 755 5055
- Visit comfygomobility.com/pages/contact or scan the QR code with your smartphone to fill out the help form.

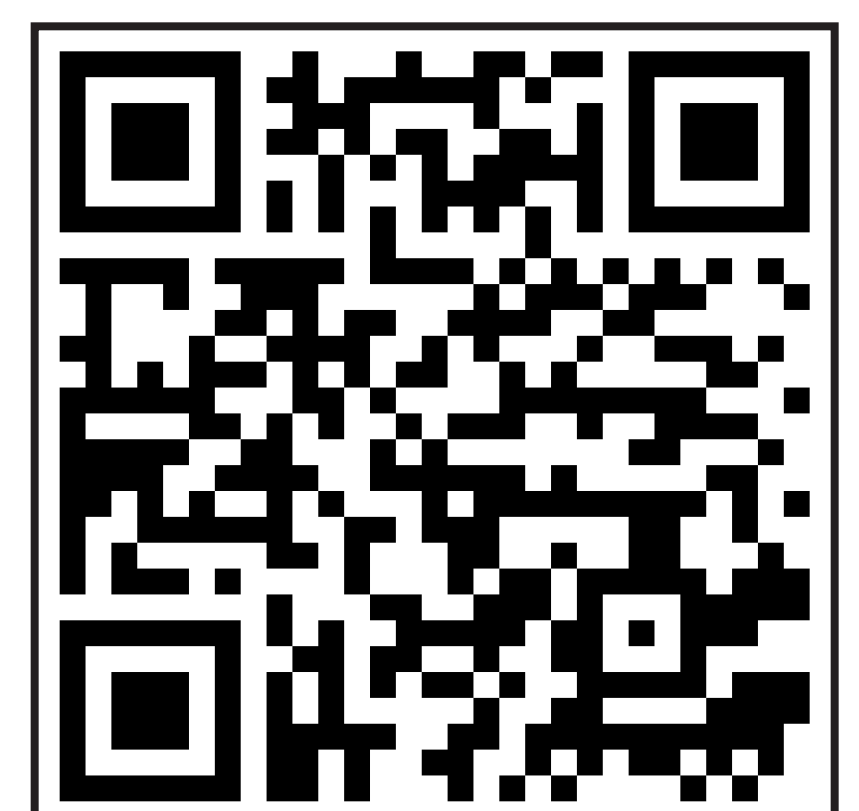



⚙️ Installatie met Klembeugel

1. Ideaal voor ComfyGO Mobility Elektrische Rolstoelen:
 - A. IQ-8000 Serie, IQ-9000 Serie en IQ-7000 Serie
2. Open de klem en plaats deze rond het duwhandvat.
3. Lijn de controller uit met de messing inzetstukken.
4. Gebruik de korte schroeven om de controller aan de beugel te bevestigen.
5. Gebruik de lange schroef en draai de bout aan de onderzijde vast met de inbussleutel.



⚙️ Installatie met Schroefbeugel

1. Ideaal voor ComfyGO Mobility Elektrische Rolstoelen:
 - A. Phoenix Carbon Fiber Serie, X-9 Serie, X-7 Serie, X-6 Serie en X-Lite Serie
2. Lijn de achterkant van de controller uit en bevestig deze stevig met de korte schroeven.
3. Bevestig de beugel direct op een platte stang of paneel met de lange schroeven.

🔌 Opladen

1. Zorgverlener Controller: Bij inschakelen lichten 5 batterij-LED's op en gaan na 5-6 seconden uit als er geen gebruik is.
2. Brandt slechts 1 LED? Laad dan zo snel mogelijk op.
3. Gebruik de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel.
4. De oplaadpoort bevindt zich aan de achterkant van de controller.
5. Volledig opladen duurt ongeveer 2-3 uur.

👤 Basisbediening

1. Joystick: Beweeg om de richting te bepalen.
2. + / - Knoppen: Pas de snelheid aan.
3. Aan/uit-knop: Zet de controller aan of uit.
4. Claxonknop: Activeert de claxon.

⚠️ Veiligheid & Waarschuwingen

- Gebruik niet in regen of natte omstandigheden.
- Zorg dat de beugel stevig vastzit voor gebruik.
- Laad alleen op met gecertificeerde USB-opladers.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Lees de handleiding van de rolstoel voor veiligheidsregels die ook gelden voor de zorgverlener controller.

Europa

- info@ComfyGoMobility.eu
- **+31 (0) 20 809 7031**
- Bezoek comfygomobility.eu/pages/contact of scan de QR-code met uw smartphone om het hulpformulier in te vullen.

🔄 Koppelingsinstructies

1. Zet eerst de rolstoel aan en daarna de zorgverlener controller.
2. Houd de knop - (snelheid verlagen) op de zorgverlener controller ingedrukt tot het rode LED-lampje verschijnt.
3. Houd vervolgens de - knop op de rolstoelcontroller ingedrukt tot het rode LED-lampje verschijnt of begint te knipperen.
4. Druk op de claxonknop van de rolstoelcontroller.
5. Beide apparaten schakelen automatisch uit na succesvolle koppeling.
6. Zet ze weer aan en geniet van de zorgverlener controller.

❗ Werkt het niet? Herhaal de stappen zorgvuldig of neem contact met ons op via de informatie onderaan deze pagina.





⚙️ Installation mit Klemmbefestigung

1. Ideal für ComfyGO Mobility Elektrorollstühle:
 - A. IQ-8000 Serie, IQ-9000 Serie und IQ-7000 Serie
2. Öffnen Sie die Klemme und legen Sie sie um den Schiebegriff.
3. Richten Sie den Controller auf die Messingbuchsen aus.
4. Verwenden Sie die kurzen Schrauben, um den Controller an der Halterung zu befestigen.
5. Verwenden Sie die lange Schraube und ziehen Sie den Bolzen an der Unterseite mit dem Inbusschlüssel fest.



⚙️ Installation mit Schraubbefestigung

1. Ideal für ComfyGO Mobility Elektrorollstühle:
 - A. Phoenix Carbonfaser-Serie, X-9 Serie, X-7 Serie, X-6 Serie und X-Lite Serie
2. Richten Sie die Rückseite des Controllers aus und befestigen Sie ihn sicher mit den kurzen Schrauben.
3. Befestigen Sie die Halterung mit den langen Schrauben direkt an einer flachen Stange oder einem Paneel.

🔌 Aufladen

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel.
2. Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite des Controllers.
3. Eine vollständige Aufladung dauert ca. 2–3 Stunden
4. Pflegeperson-Controller: Beim Einschalten leuchten 5 Batterie-LEDs und schalten sich nach 5–6 Sekunden aus, wenn unbenutzt.
5. Leuchtet nur 1 LED? Bitte sofort aufladen..

🛠️ Grundlegende Bedienung

1. Joystick: Bewegung zur Steuerung der Fahrtrichtung.
2. + / – Tasten: Geschwindigkeit einstellen.
3. Ein-/Ausschalter: Controller ein- oder ausschalten.
4. Hupe: Aktiviert das Signalhorn.

⚠️ Sicherheit & Warnhinweise

- Nicht bei Regen oder in nassen Umgebungen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung vor Gebrauch fest sitzt.
- Nur mit zertifizierten USB-Ladegeräten aufladen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Rollstuhls für Sicherheitshinweise, die auch für den Pflegeperson-Controller gelten.

Europa

- info@ComfyGoMobility.eu
- **+31 (0) 20 809 7031**
- Besuchen Sie comfygomobility.eu/pages/contact oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Hilfeformular auszufüllen.

🔄 Kopplungsanleitung

1. Schalten Sie zuerst den Rollstuhl ein, dann den Pflegeperson-Controller.
 2. Halten Sie die – (Geschwindigkeit verringern) Taste am Pflegeperson-Controller gedrückt, bis die rote LED erscheint.
 3. Halten Sie dann die – Taste am Rollstuhl-Controller gedrückt, bis die rote LED erscheint oder zu blinken beginnt.
 4. Drücken Sie die Hupe-Taste am Rollstuhl-Controller.
 5. Beide Geräte schalten sich nach erfolgreicher Kopplung automatisch aus.
 6. Schalten Sie beide erneut ein und genießen Sie die Steuerung über den Pflegeperson-Controller.
- ❗ Funktioniert es nicht? Wiederholen Sie die Schritte sorgfältig oder kontaktieren Sie uns über die Informationen am Ende dieser Seite.





🔧 Installation avec Support à Collier

1. Idéal pour les fauteuils roulants électriques ComfyGO Mobility :
A. Série IQ-8000, IQ-9000 et IQ-7000
2. Ouvrez le collier et placez-le autour de la poignée.
3. Alignez la télécommande avec les inserts en laiton.
4. Utilisez les vis courtes pour fixer la télécommande au support.
5. Utilisez la longue vis et serrez le boulon en bas à l'aide de la clé Allen.



🔧 Installation avec Support à Visser

1. Idéal pour les fauteuils roulants électriques ComfyGO Mobility :
A. Série Phoenix en fibre de carbone, X-9, X-7, X-6 et X-Lite
2. Alignez l'arrière de la télécommande et fixez-la solidement avec les vis courtes.
3. Fixez le support directement sur une barre plate ou un panneau à l'aide des longues vis.

🔌 Chargement

1. Télécommande pour Aidant : À l'allumage, 5 voyants de batterie s'allument, puis s'éteignent après 5-6 secondes sans utilisation.
2. Si un seul voyant est allumé, rechargez dès que possible.
3. Utilisez le câble USB-A vers USB-C fourni.
4. Le port de chargement se trouve à l'arrière de la télécommande.
5. Une charge complète prend environ 2 à 3 heures.

🏠 Fonctionnement de Base

1. Joystick : Permet de diriger le fauteuil.
2. Boutons + / - : Ajustent la vitesse.
3. Bouton d'alimentation : Allume/éteint la télécommande.
4. Bouton klaxon : Active le klaxon.

⚠️ Sécurité & Avertissements

- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans un environnement humide.
- Assurez-vous que le support est bien serré avant utilisation.
- Rechargez uniquement avec des chargeurs USB certifiés.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lisez le manuel d'utilisation du fauteuil roulant pour connaître les consignes de sécurité applicables à la télécommande pour aidant.

Europe

- info@ComfyGoMobility.eu
- **+31 (0) 20 809 7031**
- Rendez-vous sur comfygomobility.eu/pages/contact ou scannez le QR code avec votre smartphone pour remplir le formulaire d'aide.

🔄 Instructions d'Appairage

1. Allumez le fauteuil roulant, puis la télécommande pour aidant.
2. Appuyez sur le bouton - (réduction de vitesse) de la télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED rouge apparaisse.
3. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton - du contrôleur principal jusqu'à ce que la LED rouge apparaisse ou commence à clignoter.
4. Appuyez sur le bouton du klaxon du contrôleur du fauteuil.
5. Les deux appareils s'éteindront automatiquement après un appairage réussi.
6. Rallumez-les et profitez de l'utilisation de la télécommande pour aidant.

❗ Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes avec soin ou contactez-nous via les informations en bas de cette page.

