


Elastic Ankle Support

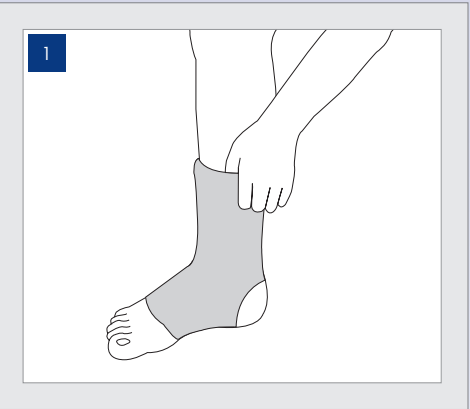

DANSK
LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL
Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder assistance. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER:
Den elastiske DonJoy-ankelstøtte er udviklet til at støtte anklen. Den kan være velegnet til brug efter en let forstrækning eller forstuvning af anklen og ved bløddelsskader og kan være med til at afhjælpe instabilitet i anklen og ledbetændelse. Halvstiv tekstilvare, der er udviklet til at begrænse bevægelighed baseret på en elastisk eller halvstiv konstruktion.

KONTRAINDIKATIONER: Ikke relevant

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:
• Hvis der opstår smerter, hævelser, føleforstyrrelser eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.
• Støtten skal sidde tæt, men må ikke begrænse blodomløbet.
• Må ikke anvendes over åbne sår.
• Brug ikke denne anordning, hvis den er beskadiget, og/eller hvis emballagen har været åbnet.
• Hvis du får en allergisk reaktion og/eller oplever kløende, rød hud efter kontakt med en del af denne anordning, skal du stoppe brugen og kontakte lægen omgående.
BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af denne anordning.

PÅFØRINGSVEJLEDNING:
1) Sid på kanten af en stol, og træk støttebindet over foden og op på anklen og underbenet. Hælen skal placeres i støttens runde åbning.

RENGØRINGSVEJLEDNING:
Håndvaskes i varmt vand med en mild sæbe. Skylles grundigt. LUFTTØRRER. Bemærk: Hvis enheden ikke skylles grundigt, kan sæberester give irritation og forringe materialet.

LATEX
MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT.
FORSIGTIG: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURGUMMILATEX, DER KAN FORÅRSAGE ALLERGISKE REAKTIONER.

GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

BEMÆRK: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNGDÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA
LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL
Systemet är avsett att användas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:
DonJoy elastiskt ankelstöd är utformat för att ge stöd åt ankeln. Det kan vara lämpligt för användning efter lätta ankelstukningar, skador på mjukvävnad och kan hjälpa personer som lider av ankelinstabilitet och artrit. Mjuk/halvstiv utformning för att begränsa rörelse genom elastisk eller halvstiv konstruktion.

KONTRAINDIKATIONER: Ej tillämpligt

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
• Om smärta, svullnad, känselförändringar eller andra ovanliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten bör du omedelbart kontakta din läkare.
• Stöten ska sitta åt, men inte så hårt att det hindrar cirkulationen.
• Använd inte över öppna sår.
• Använd inte denna enhet om den är skadad och/eller förpackningen har öppnats.
• Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klåande, röd hud efter att ha kommit i kontakt med någon del av denna enhet ska du sluta använda den och kontakta din läkare omedelbart.
OBSERVERA: Kontakta tillverkaren och behörig myndighet vid allvarligt tillbud i samband med användningen av denna produkt.

BRUKSANVISNING:
1) Sitt på kanten av en stol, drag stödet över foten och upp på ankeln och underbenet. Hålen bör vara placerad i stödets runda öppning.

RENGÖRING:
Handtvätt i varmt vatten med mild tvål, skölj noga. LUFTTÖRKA. OBS: Om stödet inte sköljs noga kan kvarvarande tvålrester ge hudirritation eller försämramaterialet.

LATEX
ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.
VAR FÖRSIKTIG: PRODUKTEN INNEHÅLLER NATURGUMMILATEX, VILKET KAN ORSAKA ALLERGISKA REAKTIONER.

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dens tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

NORSK
FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUKERPROFIL
Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper til. Brukeren bør kunne lese, forstå og være i fysisk stand til å følge alle anvisningene, advarslene og forholdsreglene som er oppgitt i bruksanvisningen.

TILTENKT BRUK/INDIKASJONER:
DonJoy elastisk ankelstøtte er utformet for å gi støtte til ankelen. Den kan være egnet for bruk etter milde forstuinger og bløtvevsskader, og kan være til hjelp ved ankelustabilitet og artritt. Myk-/halvfast utforming for å forhindre bevegelse gjennom elastisk eller halvfast konstruksjon.

KONTRAINDIKASJONER: Ikke relevant

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:
• Dersom smerte, hevelse, endringer i følelsen eller andre uvanlige reaksjoner oppstår når du bruker dette produktet, bør du kontakte legen din umiddelbart.
• Støtten skal sitte tett, men ikke hemme blodsirkulasjonen.
• Skal ikke brukes over åpne sår.
• Bruk ikke denne enheten hvis den er skadet og/eller pakningen er åpnet.
• Hvis du utvikler en allergisk reaksjon og/eller kløende, rød hud etter å ha kommet i kontakt med noen del av denne enheten, må du slutte å bruke den og kontakte helsepersonell umiddelbart.
MERK: Kontakt produsenten og vedkommende myndighet dersom det oppstår en alvorlig bivirkning på grunn av bruk av denne enheten.

BRUKSANVISNING:
1) Sitt på en stolkant og trekk støttebandasjen over foten og opp på ankelen og nedre del av leggen. Hælen plasseres i den runde åpningen på støtten.

RENGJØRINGSINSTRUKS:
Håndvaskes i varmt vann med et mildt vaskemiddel. Skylles grundig. LUFTTØRKES. MERK: Hvis den ikke skylles grundig kan såperester forårsake irritasjon og skade materialet.

LATEX
KUN FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT.
FORSIKTIG: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER NATURGUMMILATEKS SOM KAN FORÅRSAKE ALLERGISKE REAKSJONER.

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

SUOMI
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET
Laitte on tarkoitettu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen, potilaan, hänen hoitajansa tai häntä avustavien perheenjäsenten käytettäväksi. Käyttäjän täytyy pystyä lukemaan ja ymmärtää kaikki annetut ohjeet, varoitukset ja varotoimet ja olla fyysisesti kykenevä noudattamaan niitä.

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖAIHEET:
Elastinen DonJoy-nilkkatuki on suunniteltu tukemaan nilkkaa. Se voi soveltua käytettäväksi lievien nilkan venähysten ja nyrjähdysten sekä pehmytkudosvaurioiden jälkeen, ja se voi auttaa nilkan epävakaudesta ja niveltulehduksesta kärsiviä potilaita. Pehmeä ja mukava / puolijäykkä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puolijäykän rakenteen ansiosta.

VASTA-AIHEET: ei ole

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:
• Jos tätä tuotetta käytettäessä ilmenee kipua, turvotusta, tuntumuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
• Tuen tulee istua tiiviisti, mutta se ei saa haitata verenkiertoa.
• Älä käytä avohaavojen päällä.
• Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut ja/tai pakkaus on avattu.
• Jos sinulle kehittyy allerginen reaktio ja/tai ihosi kutiaa ja punoittaa tultuaan kontaktiin tämän laitteen minkä tahansa osan kanssa, lopeta sen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän laitteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

KÄYTTÖOHJEETV:
1) Istu tuolin reunalla, vedä tuki jalkaan nilkan ja alasäären kohdalle. Kantapää asetetaan tuen pyöreän aukon kohdalle.

PUHDISTUSOHJEET:
Käsinpesu saippualla lämpimässä vedessä. Huuhtelee huolella. ILMAKUIVAA. HUOM: Jos huuhtelua ei tehdä huolella, saippuajäämät voivat aiheuttaa ärsytystä ja kuluttaa materiaalia.

LATEX
VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN.
HUOMIO: TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ KUMILATEKSIA, JOKA VOI AIHEUTTAA ALLERGISIA REAKTIOITA.

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITYT VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITTAISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

DONJOY®

ELASTIC ANKLE SUPPORT
CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE
TOBILLERA ELÁSTICA
ELASTISCHE SPRUNGGELLENK BANDAGE
CAVIGLIERA ELASTICA
ELASTISCHE ENKELSTEUN
ELASTICKÁ KOTNÍKOVÁ OPORA
ELASTICKÁ OPORA ČLENKA
ELASTISK ANKELSTÖTTEBIND
ELASTISKT ANKELSTÖD
ELASTISK ANKELSTØTTE
ELASTINEN NILKKATUKI



DJO®



CE

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553 • USA

DONJOY®