

正面

120mm

momcozy

Tiralatte indossabile

Istruzioni di montaggio (per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso)

*Lavarsi le mani prima del montaggio.

1. Collegare la membrana e la valvola al raccordo della flangia.




2. Collegare il raccordo della flangia montato al raccoglitore del latte.




Allineare "l'orecchietta" alla scanalatura

3. Collegare la flangia montata al raccoglitore del latte.

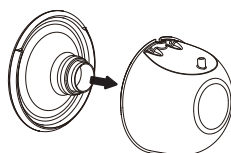


4. Montare il tiralatte e il raccoglitore del latte.

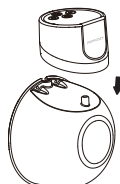

Versamento del latte

Quando si versa il latte, tenere il raccoglitore del latte del tiralatte nella direzione corretta.

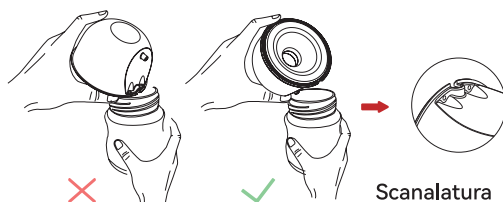


Qualora si verificassero dei problemi durante il montaggio o il tiraggio, fare riferimento al video sulla risoluzione dei problemi per conoscere ulteriori soluzioni. Per accedere al video sulla risoluzione di problemi, effettuare la scansione del codice QR.



反面

Come impedire la dispersione del latte e consigli sul tiraggio per una maggiore quantità di latte materno

1. Piegare in avanti per assicurare che il capezzolo sia al centro del passaggio della flangia. Il tiralatte deve essere saldamente a contatto con il seno.

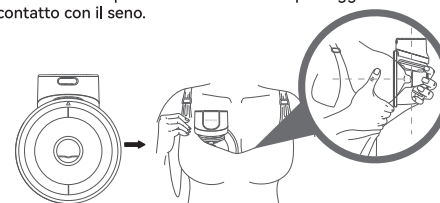

2. Si consiglia di indossare un reggiseno per allattamento a copertura completa per formare una tenuta tra i seni e la flangia.
3. Assicurarsi di aver montato il tiralatte correttamente.
4. Durante il tiraggio, mantenere una posizione eretta da sedute o in piedi, non coricarsi.

Pulizia e sterilizzazione

***Componenti non lavabili:** ***Componenti lavabili:**



Motore del tiralatte



Raccoglitore del latte



Flangia



Membrana



Raccordo della flangia



Valvola

Si consiglia di utilizzare acqua saponata (40-60 °C) per pulire i componenti lavabili per 3-5 minuti. Sterilizzare utilizzando il contenitore dell'acqua bollente/vapore/sterilizzazione, a una temperatura non superiore ai 100 °C (212 °F). Far bollire o sterilizzare i componenti tra i 5-10 minuti.

*Si sconsiglia di sterilizzare gli accessori del tiralatte in un microonde, in quanto ridurrà la durata degli stessi.

Suggerimenti:

- La durata prevista dei componenti lavabili è di 1-3 mesi. Si consiglia di sostituire i componenti lavabili se sono rimasti inutilizzati per un lungo periodo o prima di utilizzarli per il tiraggio per i bambini successivi.
- Il tiralatte si spegne automaticamente dopo 30 minuti di tiraggio. In caso di irritazioni o fastidi, interrompere l'uso e consultare un medico.

Per chiarimenti, contattateci per e-mail.

support@momcozy.com

150mm