



08

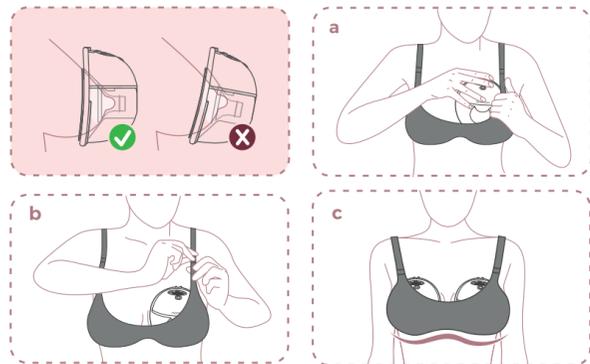

Certifique-se de que a bomba tira-leite se encaixa perfeitamente no peito, sem folgas.

09

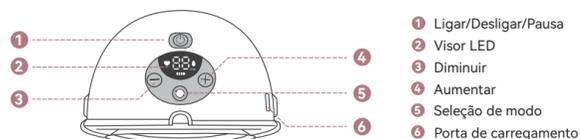


- 1 Ligar/Desligar/Pausa
- 2 Visor LED
- 3 Diminuir
- 4 Aumentar
- 5 Seleção de modo
- 6 Porta de carregamento

- * Prima sem soltar para Ligar/Desligar;
- * Prima brevemente para pausar/continuar a extração de leite.
- * **Estimulação:** Padrão de sucção rápido e curto para que o seu leite comece a fluir.
- * **Extração:** Padrão de sucção lenta para a extração do leite.
- * **Misto:** Padrão de sucção rápido e curto seguido de um padrão de sucção lento e longo.

09



10

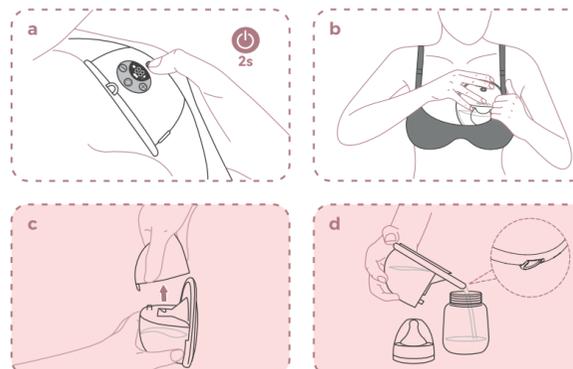

momcozy
www.momcozy.com

momcozy

Bomba tira-leite portátil

M5




Guia de utilização

Guia de funcionamento Guias para medição do mamilo




Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail.
support@momcozy.com

01

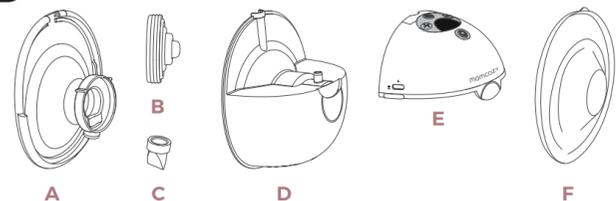


- A Funil de vedação dupla de 24mm
- B Diafragma
- C Válvula
- D Coletor de leite (160 ml)
- E Motor da bomba tira-leite
- F Tampa antipoeiras

02

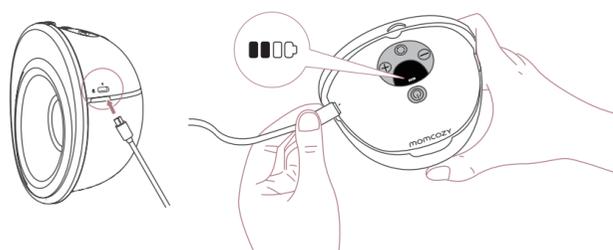

03

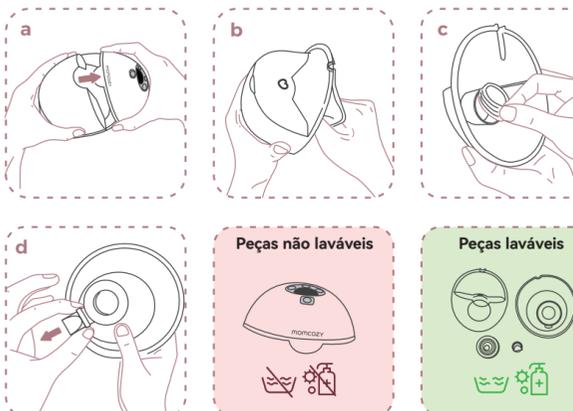

04

Substitua as peças laváveis a cada 1-3 meses




05




06

Medição do mamilo (não salte este passo)

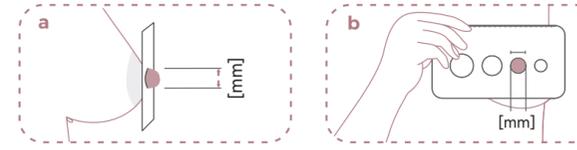

Um funil corretamente ajustado maximiza a produção de leite, evita lesões no mamilo e assegura uma extração eficaz do leite.

06

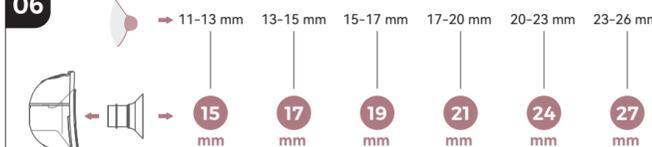

07

