



MANUAL DE USUARIO

Masajeador TENS de doble canal

Relajación,
cualquier lugar,
cualquier momento

Modelo AS8012C

EN ESTE PAQUETE ESTÁNDAR CONTIENEN

- Masajeador AUVON® TENS de doble canal
- Pin almohadillas
- Soporte de almohadillas
- Bolsa
- Juego de cables de plomo (1/2 Wire)
- Cable USB y adaptador USB
- Manual del usuario
- Tarjeta Feliz

CARACTERÍSTICAS

- 2 salidas con 24 modos
- 20 niveles de intensidad
- Temporizador predeterminado de 20 minutos, ajustable de 10 a 90 minutos.
- Batería de litio recargable
- Indicador de la batería para saber cuándo es necesario recargar la batería
- Adaptador de CA 110-240V, cargador USB 5V

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

NO UTILICE EN ESTAS CONDICIONES

Consulte con su médico antes de usar esta unidad.

La unidad puede causar alteraciones letales del ritmo en ciertos individuos susceptibles. Si ha tenido un procedimiento quirúrgico reciente, la estimulación puede interrumpir el proceso de curación.

Antes de usar su unidad, inspeccione estas cosas.

1. El cordón no está roto.
2. El gel de la almohadilla no está dañado.
3. La conexión del cable del electrodo no está rota.
4. La unidad está intacta y funcionando.
5. No hay fuga de la batería.

NO APLICAR EL PRODUCTO EN ESTAS PERSONAS

- Las mujeres embarazadas.
- No lo use en niños o bebés porque el dispositivo no ha sido evaluado para uso pediátrico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños porque el cable del electrodo podría causar estrangulación.
- Personas incapaces de expresar sus pensamientos o intenciones.
- Personas incapaces de operar la

unidad por sí mismas.

- Úselo con precaución si tiene tendencia a sangrar internamente, como después de una lesión o fractura.
- Si sospecha o se le diagnostica una enfermedad cardíaca, debe seguir las precauciones recomendadas por su médico.
- Si tiene una epilepsia sospechosa o digna, debe seguir las precauciones recomendadas por su médico.
- Tenga cuidado si la estimulación se aplica sobre el útero menstrual.

NUNCA APLIQUE LAS ALMOHADILLAS EN ESTAS ÁREAS DEL CUERPO:

- La cabeza, la boca o cualquier área de la cara.
- El cuello o cualquier área de la garganta porque esto podría causar espasmos musculares severos que resulten en el cierre de las vías respiratorias, dificultad para respirar o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión sanguínea.
- No lo use cerca del corazón o en el área genital.
- Ambos lados del tórax simultáneamente (lateral o frontal y posterior), o a través del

pecho porque la introducción de la corriente eléctrica puede causar alteraciones del ritmo que podrían ser letales.

- En las pantorrillas de ambas piernas al mismo tiempo porque esto puede causar una alteración cardíaca.
- En la parte inferior de ambos pies al mismo tiempo porque esto puede causar una alteración cardíaca. Heridas abiertas o sarpullidos o sobre inflamados, zonas rojas, infectadas o inflamadas o erupciones de la piel (como varices, flebitis, tromboflebitis y trombosis), o encima o cerca de lesiones cancerosas, o sobre zonas de la piel que carecen de sensibilidad normal.

NO UTILICE ESTA UNIDAD DURANTE ESTAS ACTIVIDADES

- Cuando está en la bañera o en la ducha;
- Mientras dormía;
- Mientras conduce, opera maquinaria o durante cualquier actividad en la que la estimulación eléctrica pueda ponerle en riesgo de lesión.

ADVERTENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

- Si ha recibido tratamiento médico o

físico para su dolor, consulte con su médico antes de usar esta unidad.

- Si su dolor no mejora, se vuelve crónico o severo, o continúa por más de cinco años, deje de usar la unidad y consulte con su médico.
- La mera existencia del dolor funciona como una advertencia muy importante que nos dice que algo está mal. Por lo tanto, si usted sufre de alguna enfermedad grave, consulte a su médico para confirmar que es aconsejable que utilice esta unidad de potencia de alivio.

PRECAUCIONES SOBRE LAS ALMOHADILLAS

- No mueva las almohadillas a otro lugar mientras la unidad está encendida.
- La terapia no funcionará con una sola almohadilla. Debes usar dos almohadillas al mismo tiempo.
- Asegúrese de que los componentes estén bien conectados y las almohadillas estén fijadas en la parte del cuerpo que desea tratar o la terapia puede no ser eficaz.
- La almohadilla no debe tocar ningún objeto metálico, como la hebilla del cinturón, el collar u otro metal que se lleve debajo de la ropa.
- No superpongas las almohadillas ni pongas

las almohadillas una encima de la otra. Puede debilitar o detener la terapia, o la unidad puede dejar de funcionar. Las almohadillas de gel también pueden pegarse entre sí y hacer que el gel se elimine al separarse.

- No comparta las almohadillas con otra persona. Esto puede causar una irritación o infección de la piel. Almohadillas están destinados a ser utilizados por una persona.
- No deje las almohadillas pegadas a la piel después del tratamiento.
- No se dobla ni se pliega porque el gel puede dañarse y no se pegará o no funcionará correctamente.
- Para evitar que se dañe la superficie adhesiva de las almohadillas, coloque las almohadillas sólo sobre la piel o sobre el soporte de plástico de las almohadillas provisto para evitar que se dañe la superficie adhesiva de las almohadillas.
- Siempre coloque almohadillas limpias de acuerdo con ilustraciones proporcionadas.
- No aplique pomada ni ningún disolvente a las almohadillas o a su piel porque interrumpirá el funcionamiento de las mismas. El auto las almohadillas adhesivas se adherirán a tu piel.

¿CÓMO FUNCIONA?

La teoría científica sugiere que la terapia de estimulación eléctrica puede funcionar de varias maneras:

1. El suave pulso eléctrico se mueve a través de la piel hasta casi los nervios para bloquear o apagar el mensaje de dolor desde la fuente del dolor hasta llegar al cerebro.
2. El suave pulso eléctrico aumenta la producción de los analgésicos naturales del cuerpo, como las endorfinas.
3. Además, se cree que la electricidad La estimulación también mejora la circulación de la sangre. Los músculos se contraen y relajan con el flujo de la estimulación eléctrica. Con el replanteado contrayéndose y relajándose, la sangre fluye hacia adentro y hacia afuera y la circulación sanguínea mejoró.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO UTILIZAR

1. Limpie su piel antes de usarla. Use las almohadillas en áreas limpias y planas, sin sudor, sin grasa.

2. Ata un par o dos pares de almohadillas de electrodos a la zona del masajeador, como el hombro y la pierna.

Nota: Añadiendo unas pocas gotas de agua en las almohadillas y secándolas de forma natural se incrementará su longevidad. Asegúrese de que ambas almohadillas estén en la piel y no se superpongan.

3. Conecte un par de almohadillas de electrodos a un cable conductor enchufándolas; el otro extremo del cable se conecta a la salida izquierda del dispositivo. Del mismo modo, el otro par de almohadillas de electrodos se conecta al extremo del cable restante y a la salida derecha del dispositivo.

4. Encienda el dispositivo deslizando el interruptor de encendido y apagado en la parte superior de la unidad.

5. Presiona "V" o "Λ" de la izquierda para elegir el " canal A, luego la "A" comienza a parpadear. (O Presione la derecha "V" o "Λ" para elegir el canal B, y luego "B" comienza a parpadear.)

6. Presiona el botón "V" o "Λ" para elegir 6 modos maestros, y presiona el botón "V" o "Λ" para elegir submundos. Si " A " están parpadeando, el modo elegido es para el canal

A. (Si " B " están parpadeando, el modo elegido es para el canal B).

7. " Presione "V" o "Λ" izquierda para aumentar o disminuir la fuerza del canal A. Presione "V" o "Λ" derecha para aumentar o disminuir la fuerza del canal B.

Nota: Recuerde que la intensidad se ajustará por defecto al valor más bajo de cada selección de modo.

8. La aplicación recomendada es de 10 a 90 minutos. Aumente 10 minutos por cada ajuste presionando la "T" del dispositivo. El tiempo

El resto se cuenta automáticamente hasta que se apague una vez que el tiempo termine.

9. Mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos para bloquear la pantalla, 3 segundos de nuevo para desbloquearla.

DESPUÉS DEL USO

1. Apague el dispositivo deslizando el botón de encendido/apagado...enciende la parte superior de la unidad.

2. Retire la clavija del cable del conector del electrodo girándolo suavemente y sacándolo.


3. Levanta una esquina del electrodo y lentamente lo despega. Evite tocar el gel tanto

como sea posible.


NO peles el electrodo por el cable.

4. Retire los electrodos de la bolsa de almacenamiento y vuelva a cerrarla bien para evitar que se seque. Almacene a temperatura ambiente o fresca y manténgalo alejado de la luz solar directa.

RECOMIENDAN PUNTOS DE MASAJE

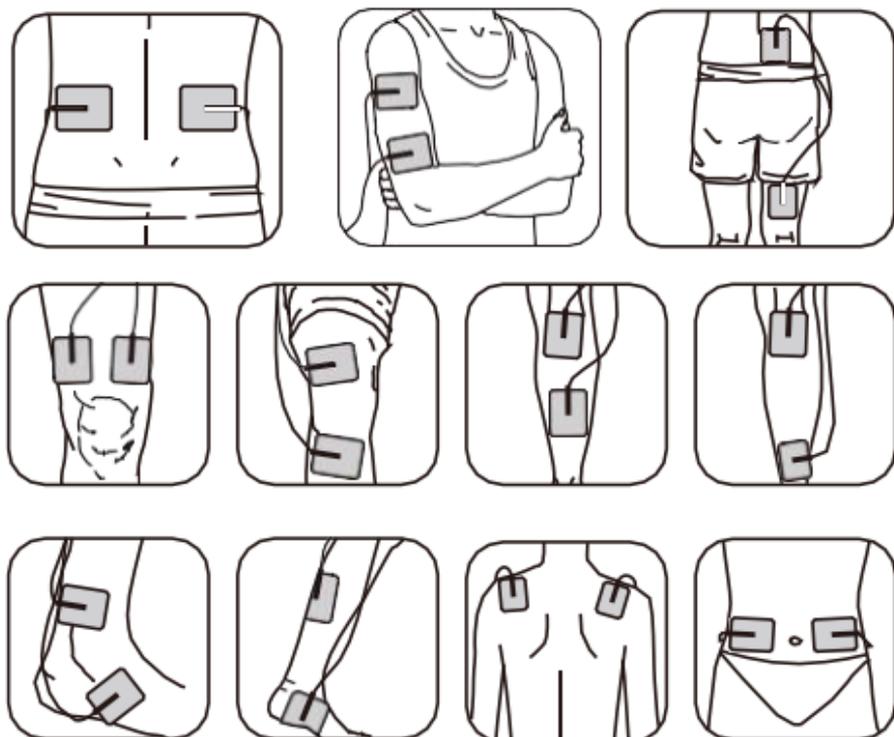

ILUSTRACIONES DEL DISPOSITIVO Y LOS ACCESORIOS

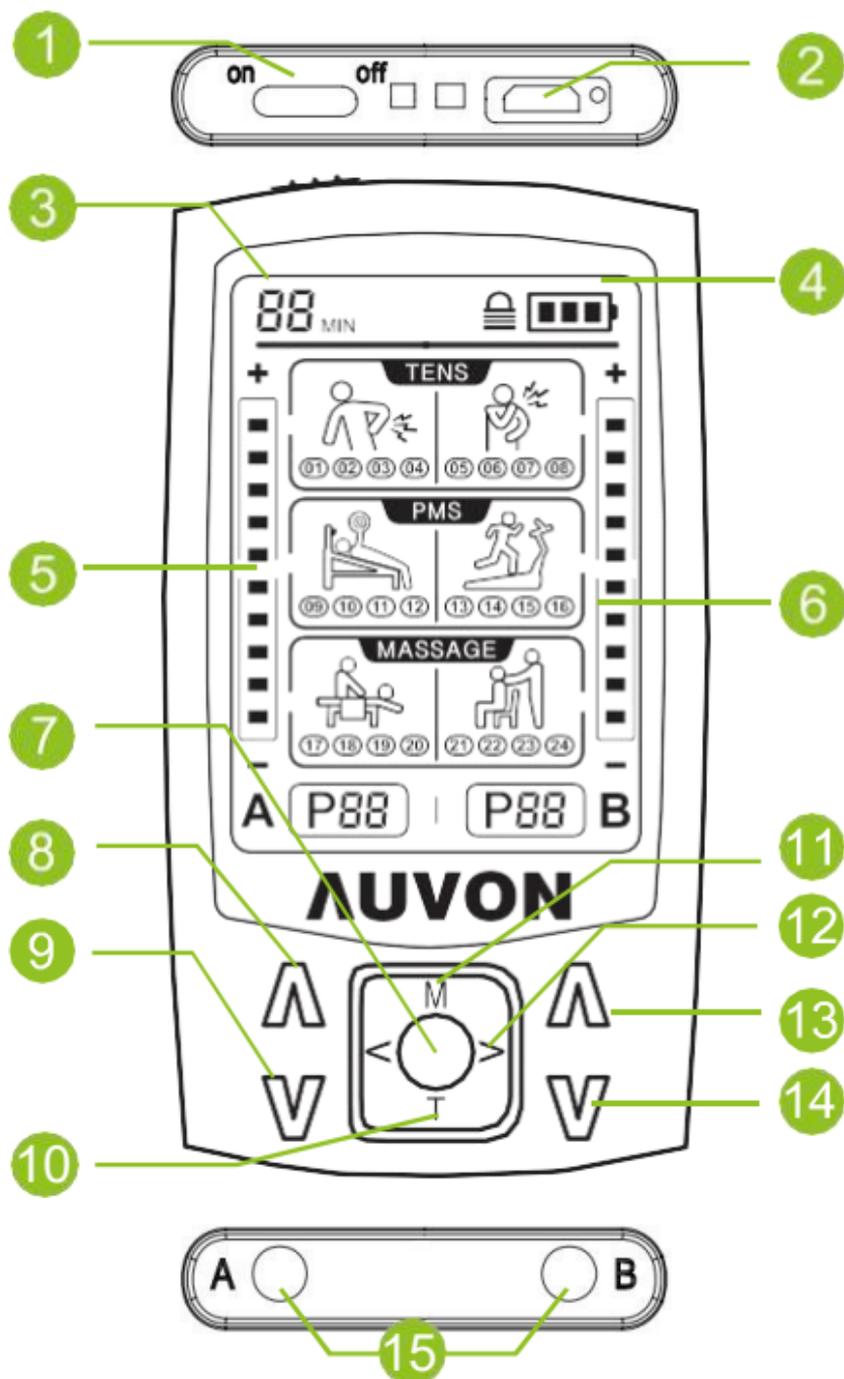

- ① Interruptor de encendido/apagado
- ② Puerto USB
- ③ Tiempo
- ④ Indicador de la batería
- ⑤ Intensidad ajustable (Canal A)
- ⑥ Intensidad ajustable (Canal B)
- ⑦ Bloqueo
- ⑧ Aumento de la intensidad/ Canal A
- ⑨ Disminución de la intensidad/ Canal A
- ⑩ Selección de tiempo
- ⑪ Selección del modo
- ⑫ Selección de sub-modo (“< ” y ” > “)
- ⑬ Aumento de la intensidad/ Canal B
- ⑭ Disminución de la intensidad/ Canal B
- ⑮ Dos conectores de salida

| Programa | Maestro Modo | Sub-Modo | Función |
|---|--------------|----------|--|
|  | TENS | P1 | Para TENS, se utiliza para el alivio temporal del dolor asociado con músculos adoloridos en el hombro, cintura, espalda, cuello, extremidades superiores (brazo) y extremidades inferiores (pierna) debido a la tensión del ejercicio o actividades normales de trabajo doméstico. |
| | | P2 | |
| | | P3 | |
| | | P4 | |
|  | | P5 | |
| | | P6 | |
| | | P7 | |
| | | P8 | |

| Programa | Maestro Modo | Sub-Modo | Función |
|---|--------------|----------|--|
|  | PMS | P9 | En el caso del síndrome premenstrual, está destinado a ser utilizado para estimular los músculos sanos con el fin de mejorar el rendimiento muscular y restaurar la vitalidad de los músculos. |
| | | P10 | |
| P11 | | | |
| P12 | | | |
|  | | P13 | |
| | | P14 | |
| | | P15 | |
| | | P16 | |
|  | MASS -AGE | P17 | Para el masaje, se usa para que tus músculos se relajen en cualquier momento y te traerá la máxima relajación. |
| | | P18 | |
| P19 | | | |
| P20 | | | |
|  | | P21 | |
| | | P22 | |
| | | P23 | |
| | | P24 | |

PROBLEMAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si su dispositivo no funciona correctamente, por favor, compruebe a continuación los problemas comunes y las soluciones sugeridas. Si la acción recomendada no resuelve el problema, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

| Problema | Posible Porque | Solución |
|---|---|---|
| Una almohadilla se siente más fuerte que la otra. | Esto es normal. Diferentes áreas de su cuerpo reaccionarán de manera diferente. | No hay nada que hacer. Asegúrate de que las almohadillas estén húmedas y hagan buen contacto. |
| La piel se pone roja o se siente irritada. | El adhesivo de la superficie de las almohadillas está sucio o seco. | Lave el adhesivo de la superficie de las almohadillas suavemente con la punta de los dedos durante unos 3 segundos bajo agua corriente lenta. |
| | El tiempo de la terapia es demasiado largo o la intensidad es demasiado alto. | Reduzca el tiempo de aplicación o reduzca la intensidad. |
| | La superficie de la almohadilla de electrodos es desgastado. | Cambie la almohadilla de electrodos. |

| Problema | Posible Porque | Solución |
|--|--|---|
| La intensidad no se siente con un nivel de intensidad muy débil. | Las almohadillas no están adheridas al cuerpo firmemente. | Ataca ambas almohadillas firmemente a la piel. |
| | Las películas transparentes todavía están pegadas a la almohadillas. | Despegue la película de la superficie adhesiva de las almohadillas. |
| | Las almohadillas se apilan juntas o se superponen. | No apile las almohadillas ni las superponga. |
| | El cable no está conectado correctamente a la unidad. | Conecta el cable correctamente en el enchufe. |
| | La intensidad de la configuración se está volviendo débil. | Aumenta el nivel de intensidad. |
| | La capacidad de la batería es baja. | Carga la batería. |
| No hay fuente de energía; no hay pantalla en LCD. | La capacidad de la batería está agotada. | Carga la batería. |

| Problema | Posible Porque | Solución |
|---|--|---|
| Es difícil fijar la almohadilla a la piel. | ¿Has quitado la película transparente de la almohadilla? | Despegue la película de la superficie adhesiva de las almohadillas. |
| | ¿Se aplicó la almohadilla inmediatamente después de lavado? | Seca la almohadilla. |
| | ¿Es el adhesivo en la superficie de la almohadilla dañado? | Reemplaza la almohadilla. |
| La energía se corta durante el uso. | La batería es débil. | Carga la batería. |
| | El cordón es roto. | Reemplaza el cordón. |
| Adhesivo en la superficie de una almohadilla no pegajosa. | Las almohadillas se deterioran. | Contacte con el proveedor para que le sustituya. |
| | ¿Se almacenaron las almohadillas bajo alta temperatura, alta humedad, o directamente el sol? | Reemplaza la almohadilla. |

* El masajeador AUVON® TENS tiene 6 modos de masaje y 24 submundos de elección.

SOPORTE DE LAS ALMOHADILLAS TENSORAS

CARACTERÍSTICAS




De alta calidad
Material ABS
para
asegurarnos
de que lo uses
de forma
segura.



Amplia
compatibilidad
ad para
parches de
diferentes
tamaños.


La forma de la punta saliente
diseñada especialmente para
disminuir el daño a los parches.

INSTRUCCIÓN

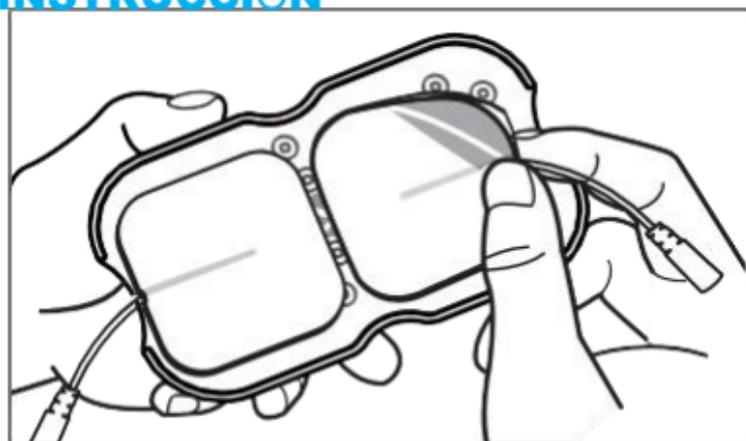

Paso 1

Pega los parches de electrodos en el soporte para evitar que se llene de polvo.

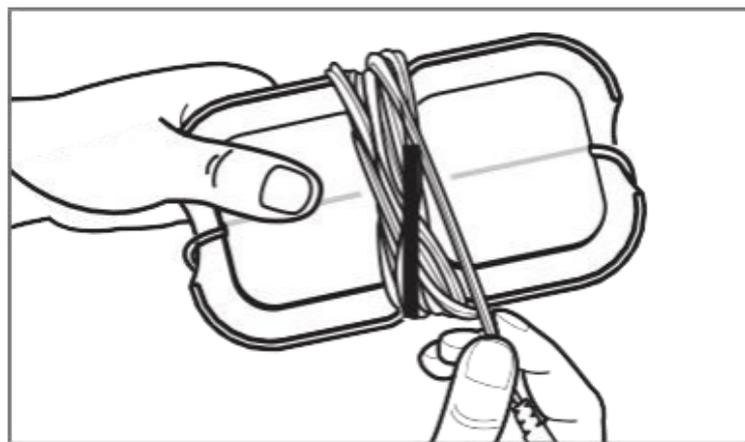

Paso 2

Enrolle el hilo alrededor del soporte para que sea fácil de usar como se muestra en la imagen.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

I. Cuando termine de usar el dispositivo, apáguelo y quítese las almohadillas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco hasta el próximo uso.

- Después de su uso, por favor cubra las almohadillas con la película protectora y póngalas de nuevo en sus bolsas ziploc. Aplicar unas gotas de agua antes y después del uso aumentará la longevidad de las almohadillas. O pegar los parches de electrodos en el soporte y enrollar el hilo alrededor del soporte.
- Cargue la unidad al menos cada 3 meses en caso de que no se utilice con regularidad. También puede utilizar la unidad con un cargador de pared o directamente desde el ordenador mediante el cable USB.

Advertencia

- El estimulador no tiene ninguna salida cuando se está cargando. Debes quitarte las almohadillas de electrodos de tu cuerpo antes de que el estimulador se cargue.
- Cargando sólo con este adaptador AC (Modelo: GDP06AV-0500550-UL, fabricante: Shenzhen Guandexin Technology Co., Ltd.).

Operación ambiental para el adaptador

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente normal de trabajo | 5~40°C |
| Humedad ambiente normal de trabajo y presión atmosférica | ≤80%RH; Presión atmosférica: 700~1060hPa |
| Almacenar y transportar la temperatura ambiente | -20~55°C |
| Almacenar y transportar la humedad ambiental y la presión atmosférica | ≤93%RH; Presión atmosférica: 700~1060hPa |

| | |
|----------|---|
| Cargador | <p>Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.18A Max Salida: DC5V---250mA Clase II, parte no aplicada, no apta para ser usada en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno u óxido nitroso, continua operación.</p> |
|----------|---|

La combinación del estimulador y el adaptador de CA se considera un sistema eléctrico médico. El adaptador CA no se considera parte del sistema de ME del equipo de ME.

Cargando la batería

1. Apaga el controlador.
2. Conecte el controlador y el cargador con el cable de extensión USB. Enchufe el cargador en cualquier toma de corriente, la luz verde muestra la carga. El proceso de carga durará aproximadamente 1 hora.



Nota: Sólo cargue el controlador cuando la batería se haya agotado completamente las 2 primeras veces. Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando la carga esté completa. Cuando la fuerza del masaje disminuye, indica que el dispositivo necesita ser cargado.

Recárgalo y luego sigue usando el dispositivo. No utilice el controlador cuando esté cargando.

