

正面


130 mm

对折线



Hur man förhindrar mjökläckage och pump-tips för att producera mer bröstmjolk.

- Se till att pumpen är välmonterad.
- Luta dig framåt för att se till att din bröstvårta är centrerad i flästsunneln. Bröstpumpen ska sitta stadigt mot ditt bröst.

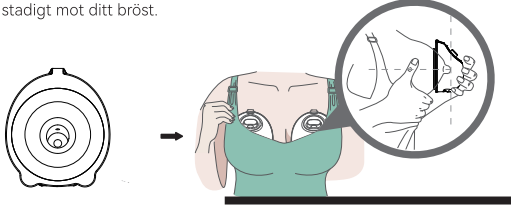

- Vi rekommenderar användare att använda en heltäckande amningsbehå för att bilda en tät tätning mellan bröstet och flänsen.
- Luta dig något framåt för att ta bort pumpen från bröstet efter att du har avslutat pumpningen.

Tips

- Den förväntade livslängden för de tvättbara delarna är en till tre månader. Det rekommenderas att byta ut de tvättbara delarna efter långtidsförvaring eller innan du pumpar till ditt nästa barn.
- Bröstpumpen stängs av automatiskt efter att ha pumpat i 30 minuter.
- I händelse av irritation eller obehag, använd fingret för att bryta förseglingen mellan flänsen och bröstvävnaden, avbryt användningen och kontakta en vårdgivare.

Kontakta oss via email om du har några frågor.
support@momcozy.com


4

momcozy

Bärbar bröstpump

Installationsriktlinjer (se bruksanvisningen för ytterligare detaljer)

*Se till att dina händer är rena innan du påbörjar installationen.

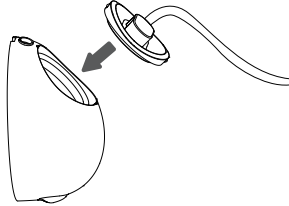

- Fäst mjölkuppsamlaren och fäst locket för att bilda en tät förslutning.



- Tryck försiktigt in ventilen i mjölkuppsamlaren. Se till att det inte finns några luckor.




Se videon med bruksanvisningen för ytterligare lösningar Fföör din bekvämlighet. Skanna QR-koden ovan för att öppna videon med bruksanvisningen.


1

背面


- Rikta först in mjölkuppsamlaren medflästoppen och tryck sedan runt omkring för att säkerställa entät anslutning.

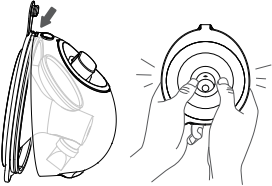

- Anslut den långa änden av slangen till pumpmotorn.

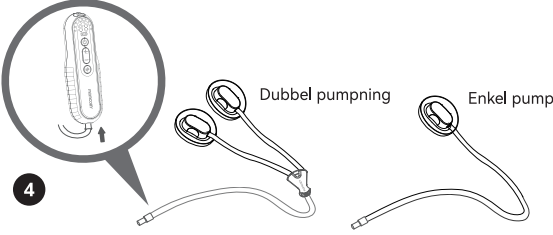

Att hälla mjölk

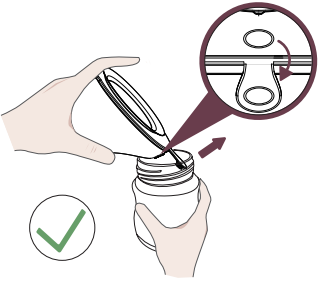

Se till att hålla mjölkuppsamlaren i rätt riktning när du häller mjölk. Håll sedan ut mjölken ur flästsunneln.


Kontakta oss via email om du har några frågor.
support@momcozy.com

2

Rengöring och sterilisering

*** Icke-tvättbara delar**

Slang
Pumpmotor

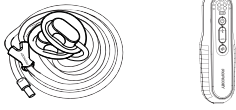

***Tvättbara delar**


Fläns
Ventil
Mjölkuppsamlare

Rengöring och sterilisering av tvättbara delar

- Rengör med tvålatten (40–60°C) i 3–5 minuter.
- Använd kokande vatten/ånga/steriliseringsgryta för sterilisering. 100°C (212 °F) under 5–10 minuter krävs.

* Det rekommenderas att inte sterilisera pumpdelar i en mikrovågsugn eller UV-sterilisator. Hög temperatur (> 110 °C) kommer att förkorta deras livslängd och orsaka säkerhetsrisker.

Kontrollpanel

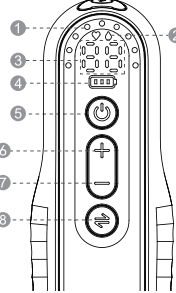

- Sugnivåindikator
- Lägesindikator
- Drifttid - / sugnivådisplay
- Batteridisplay
- På/Av
- Öka
- Minska
- Val av läge

- Tryck långt och håll ned för att slå på/stänga av;
- Tryck kort för att pausa/fortsätta din pumpsession.
- ♥ Stimulering Pumpning Blandat

3

180 mm