


momcozy

Bärbar Bröstpump

S12 Pro

Användarhandbok

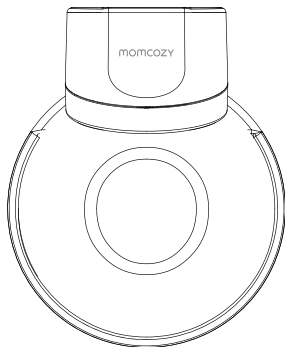

Läs denna användarmanual noggrant innan du använder enheten och förvara manualen för framtida referens.

→ SVENSKA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Produktintroduktion	01
2. Varningar och försiktighetsåtgärder	01
3. Kontraindikationer	02
4. Säkerhetsinformation	02
5. Produktbeskrivning	05
6. Användningsinstruktioner	08
7. Förvaringsvillkor	27
8. Specifikation	27
9. Underhåll och reservdelar	28
10. Försäkran om överensstämmelse	29
11. Felsökning	29
12. Kassering	31
13. Garanti	31
14. Deklaration om resor eller internationell användning	31
15. Tillverkarinformation	32

1. Produktintroduktion

Momcozy Bärbar bröstpump är avsedd att användas av ammande kvinnor för att pumpa och samla mjölk från sina bröst. Momcozy Bärbar bröstpump bildar ett vakuum runt bröstvårtan för att pressa ut bröstmjölk. Mjölken samlas upp i en mjölkuppsamlare.

Enheten inkluderar stimuleringsläge, pumpläge och blandat läge. I stimuleringsläge börjar bröstpumpen med ett snabbt och kort sugmönster för att få din mjölk att börja rinna. I pumpläge börjar bröstpumpen med ett långsamt sugmönster för mjölkpumpning, och suger djupare och långsammare. I blandat läge börjar bröstpumpen med ett snabbt och kort sugmönster och sedan med ett långsamt och långt sugmönster. För att förhindra mjölk från att rinna in i vakuumsystemet, inkluderar mjölkuppsamlingsseten ett silikonmembran som fysiskt separerar den mjölkkontaktande vägen från vakuumsystemet.

Enheten är avsedd för en enskild användare.

2. Varningar och försiktighetsåtgärder

Varningsskyltarna och de grafiska symbolerna i bruksanvisningen är avsedda att göra det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt och för att förhindra skada på dig och andra. Varningsmärken och grafiska symboler beskrivs enligt följande:

Varnings-/försiktighetssymboler	
 Varning	En varning varnar läsaren om en situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Den kan också beskriva potentiella allvarliga biverkningar och säkerhetsrisker.
 Försiktighetsåtgärder	Indikerar en farovarning som varnar läsaren för en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada på användaren eller patienten eller skada på utrustningen eller annan egendom. Den kan också användas för att varna mot osäkra metoder. Detta inkluderar den särskilda omsorg som krävs för en säker och effektiv användning av enheten och den omsorg som krävs för att undvika skador på enheten som kan uppstå till följd av användning eller felaktig användning.
Kontraindikationer	Kontraindikationer är förhållanden under vilka produkten inte ska användas eftersom risken med användning klart överväger alla möjliga fördelar. Det kan finnas personer som inte bör använda enheten på grund av deras hälsotillstånd.
Anteckningar	Anger behovet av uppmärksamhet, om inte uppmärksamhet kan leda till felaktig användning av produkten eller skada på egendomen.

Symbolbeskrivning

	CE LOGOTYP		UKCA LOGOTYP
	Håll torr		Begränsa högen till 5 lager
 MEHRWEG	Återvinning LOGOTYP		Se bruksanvisningen.
	Batchkod		Produkter i kontakt med livsmedel
	FCC LOGOTYP		Serienummer
	Distributionsförpackningar får inte utsättas för solljus		Bäst före-datum
IP22	Första nummer 2: Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm och större. Andra nummer 2: Skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar när höljet lutar upp till 15°		
	Kassering i enlighet med direktiv 2012/19/EU (WEEE)		
	Denna enhet har inte testats för användning i en MR-miljö och bör inte användas exponerad för MR-miljöer medan patienter bär enheten. Håll den utanför MR-skanningsrum.		
	Storbritannien auktoriserad representant		Franska ERP-förpackningar
	EU auktoriserad representant		

3. Kontraindikationer

Använd inte denna pump om du har en aktiv implanterad enhet som skulle påverkas av ett magnetfält (t.ex. pacemaker, implanterbar el-defibrillator).

4. Säkerhetsinformation

Vid användning av elektriska produkter, särskilt om barn är närvarande, bör följande grundläggande säkerhetsinformation alltid upprätthållas.

4.1 Varning

- 1) Använd inte den här enheten om du har en pacemaker, implanterad defibrillator eller annan implanterad metallisk eller elektronisk enhet. Sådan användning kan orsaka elektriska störningar eller dödsfall.
- 2) Denna bröstpump är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. Sådana personer kan endast använda denna bröstpump om de står under uppsikt eller har fått korrekta instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- 3) Fara: För att minska risken för elstöt:
 - Koppla alltid ur elektriska apparater direkt efter laddning.
 - Använd inte när du badar, duschar, kör bil eller simmar.
 - Räck inte ut handen efter elektriska produkter som har fallit i vatten. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget.
- 4) Momcozy Bärbar bröstpump är en personlig hälsoartikel och bör av hygieniska skäl aldrig delas mellan mammor eller säljas vidare från en mamma till en annan. Båda dessa åtgärder upphäver garantin.
- 5) Om du är en mamma som är infekterad med hepatit B, hepatit C eller humant immunbristvirus (HIV), kommer pumpning av bröstmjolk med Momcozy Bärbar bröstpump inte att minska eller ta bort risken för överföring av viruset till ditt barn via din babys bröstmjolk.
- 6) Noggrann uppsikt är nödvändig när produkten används nära barn eller förståndshandikappade personer. Låt inte barn eller husdjur leka med motorenheten, förpackningsmaterial eller tillbehör.
- 7) Använd produkten endast för avsedd användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- 8) Använd inte tillbehör eller andra mjölkuppsamlingskomponenter än de som rekommenderas av tillverkaren.
- 9) Kontrollera nätadaptern innan du laddar, använd aldrig en skadad nätadapter.
- 10) Lämna aldrig produkten utan uppsikt under laddning.
- 11) Håll produkten och alla tillbehör borta från uppvärmda ytor.
- 12) Använd den aldrig när du sover eller är sömnig.

- 13) Använd inte där aerosolsprayprodukter används eller syre administreras.
- 14) Använd inte enheten i närheten av explosiva eller brandfarliga material, i en MRT-miljö, i en hyperbarisk kammare eller nära en öppen spis eller värmestrålare.
- 15) Undvik strypning från laddningskabeln.
- 16) Användare får inte reparera produkten. Om du gör detta blir din garanti ogiltig. Skicka produkten till tillverkaren eller en utsedd franchisedistributör för reparation.
- 17) Stäng alltid av bröstpumpen innan du tar bort pumpkroppen från ditt bröst för att lossa vakuumet.
- 18) Elektriska bröstpumpar som är designade för enstaka användare ska aldrig hyras ut eller delas.
- 19) Använd aldrig bröstpumpen när du är gravid, eftersom pumpning kan framkalla förlossning.
- 20) Temperaturen på den applicerade delen kan nå max.43,9 °C, för hög temperatur kan orsaka brännskador på huden, se till att din brösthud är intakt och frisk före användning. Om du känner dig överhettad, stäng av enheten. För att undvika brännskador vid låg temperatur ska den maximala kontinuerliga användningen inte överstiga 30 minuter varje gång, intervallet mellan två användningar ska vara minst 5 minuter för att enheten ska svalna.
- 21) För produktens livslängd (dvs. arbetslivslängden)
Enheten har ingen hållbarhetstid, produktens livslängd är 500 timmar. Den förväntade livslängden för de tvättbara delarna är en till tre månader. Kontrollera om produkten fungerar normalt före användning. Användning utöver livslängden kan leda till försämring av produktens prestanda. Som till exempel att produkten inte kan kontrollera vakuumet korrekt, överdrivet vakuum kan orsaka skador.
- 22) Denna apparat kan användas personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade;
- 23) Barn får inte leka med apparaten;
- 24) Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt;
- 25) Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, som kan resultera i en explosion;
- 26) Att lämna ett batteri i en extremt hög temperatur som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
- 27) Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

4.2 Försiktighetsåtgärder

- Placera eller förvara inte där produkten kan falla eller dras in i badkar, handfat eller pool.
- Placera eller släpp inte produkten i vatten eller annan vätska.
- Sänk inte ner i någon vätska av någon anledning och utsätt inte enheten för extrema stötar, som att tappa pumpen.
- Fortsätt inte pumpa mer än fem minuter åt gången om du inte lyckas pumpa ut någon mjölk. Försök att pumpa vid en annan tidpunkt under dagen.
- Om du känner obehag kan suget brytas genom att föra in ett finger mellan bröstet och flänsen.
- Om irritation eller obehag uppstår, avbryt användningen och kontakta en sjukvårdsgivare.
- Om nätadaptersns hölje eller kablar lossnar, separeras eller slits, sluta omedelbart att använda nätadaptern och kontakta enhetens tillverkare. Sluta använda enheten omedelbart om du märker rök eller bränning från pumpenheten eller nätadaptern.

Deklaration: Om du känner överdriven värme från den bärbara bröstpumpen när du pumpar, sluta omedelbart att pumpa och ta bort pumpen.

Anteckningar:

Undvik direkt solljus på huvudenheten.

5. Produktbeskrivning

Produkten består huvudsakligen av huvudenhet och mjölkuppsamlingsset.

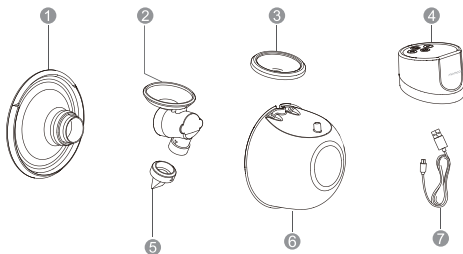


Fig.1 enhetsbeskrivning

Beskrivning av bröstpumpsenheten

NR.	Föremål	Beskrivning
①	Fläns	Alla dessa komponenter utgör mjölkuppsamlingssetet.
②	Länkare	
③	Membran	
④	Huvudenhet	
⑤	Silikonventil	Pumpmotor
⑥	Mjölkuppsamlare (180 ml)	Alla dessa komponenter utgör mjölkuppsamlingssetet.
⑦	USB Typ-C-kabel	Ingångsänden är USB 2.0-gränssnitt, utgångsänden är Type-C-gränssnitt.

Andra tillbehör som ingår:

Flänsskydd
Linjal för flänsstorlek
Snabbstartguide

Bruksanvisning
Silikonventil

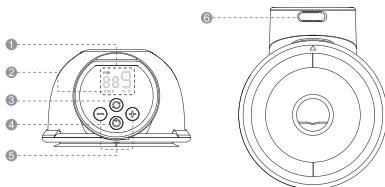


Fig.2 kontrollpanel

- ① LED-display
- ② Batterinivåindikator
- ③ Val av läge
- ④ På / Av / Paus
- ⑤ Minska / Öka
- ⑥ Laddningsport

Beskrivning av kontrollpanelen	
Knappar	Funktioner
	Långt tryck och håll för att slå på/av; Kort tryck för att pausa, tryck sedan på valfri knapp för att fortsätta din pumpsession.
	Val av läge
	Minska sugstyrkan
	Öka sugstyrkan
	Stimuleringsläge: I detta läge börjar bröstpumpen med ett snabbt och kort sugmönster för att få din mjölk att börja rinna.
	Pumpläge: Bröstpumpen börjar med ett långsamt sugmönster för mjölkpumpning, och suger djupare och långsammare.
	Blandat läge: I detta läge börjar bröstpumpen med ett snabbt och kort sugmönster och sedan med ett långsamt och långt sugmönster.
	Sugnivådisplay: Bröstpumpen har 9 sugnivåer att välja mellan.
	Visning av körtid
	Batteridisplay

Beskrivning av batterinivåindikator		
Batteridisplay	Batteristatus	Beskrivningar
	Lågt batteri	Den första batteriindikatorstapeln blinkar.
	Under laddning	Medan pumpen laddas tänds batteriindikatorlamporna en efter en och visar en ökande batteriprocent från 25 %, 50 %, 75 % till 100 %, stängs sedan av och upprepar denna process tills pumpen är fulladdad.

0 0 0 0

Fulladdad

Helvit

6. Användningsinstruktioner

6.1 Ladda batteri

Ladda produkten innan du använder den för första gången. Bröstpumpen drivs av ett internt uppladdningsbart litiumbatteri. Våra produkter är förpackade med en laddningskabel (USB2.0/Type-C linje) men inte med en nätadapter. Köp nätadaptern själv innan du laddar. Se till att köpa en strömadapter som matchar USB 2.0-gränssnittet, och se till att strömadapterns ineffekt är AC 100~240V 50/60 Hz och att uteffekten är DC 5V 1A.

- När den första batteriindikatorn blinkar betyder det att batteriet är lågt och att det är 30 minuters användningstid kvar. Ladda enheten i god tid.
- Efter att den är fulladdad kan den användas under 5–6 pumpnings-sessioner (ca 240 minuter), 30 minuter per session.

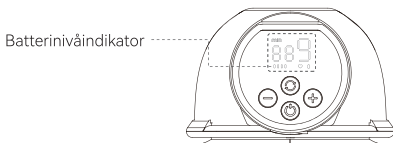


Fig. 3

Ladda batteriet enligt nedan:

- Sätt i USB-ändan av laddningskabeln i USB-gränssnittet på nätadaptern;
- Sätt i nätadapterns kontakt i AC-uttaget;
- Sätt i Type-C-ändan av laddningskabeln i laddningsporten.

Laddningsport

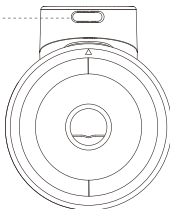


Fig. 4 Laddningsportens läge

Enheten tar cirka 130 minuter att ladda helt, under laddningen tänds batteriindikatorlamporna en efter en och visar en ökande batteriprocent från 25 %, 50 %, 75 % till 100 %, stängs sedan av och upprepar denna process tills pumpen är fulladdad. På detta sätt, när batteriet är fulladdat, lyser de fyra lamporna alltid med fast vitt sken.

Koppla ur nätadaptern från uttaget, koppla bort laddningskabeln från nätadaptern och huvudenheten efter att laddningen är klar.



Varning

- Bröstpumpen kan inte användas under laddning!
- Laddningskabeln används endast för att ansluta mellan nätadaptern och Momcozy Bärbar bröstpump-enheten för laddning, anslut den inte till annan utrustning eftersom detta kan orsaka elektriska stötar!
- Om nätadapterns hölje lossnar, separeras eller slits, sluta omedelbart att använda den och kontakta nätadapterns tillverkare.
- Om laddningskabeln är skadad, trasig eller sprucken, sluta omedelbart att använda den och kontakta tillverkaren för att byta ut en ny (se sista sidan i denna bruksanvisning för kontaktuppgifter).
- Sluta använda enheten omedelbart om du märker rök eller bränning från pumpenheten eller nätadaptern.



Fara:

Att använda fel typ av adapter eller köpa en adapter av dålig kvalitet kan minska enhetens säkerhet och kan skada din egendom och hälsa. Köp en adapter som uppfyller standarderna IEC 60601-1 och IEC 60601-1-2 på professionella marknader och se till att strömadapterns uteffekt är DC 5V 1A.

Anteckningar:

- Normalt kan batteriet laddas upp i cirka 500 cykler.
- Efter att ha laddat batteriet helt, om batteriets arbetstid är kortare än tidigare och du vill byta ut det, försök inte byta ut det uppladdningsbara batteriet själv. Kontakta tillverkaren för att byta ut den. Självdemontering och byte av batteriet kan orsaka skador på huvudenheten och batteriet.
- När produkten inte används under en längre tid laddas batteriet ur långsamt. För att undvika batteriskador på grund av låg spänning under lång tid, ladda enheten var tredje månad.

6.2 Rengöring och desinfektion

6.2.1 Allmän beskrivning/krav

Att amma är en av de bästa sakerna du kan göra för ditt barns hälsa och utveckling. Att pumpa din mjölk är ett sätt att ge ditt barn bröstmjölk. Det är viktigt att hålla pumpens delar rena, eftersom bakterier kan växa snabbt i bröstmjölk eller bröstmjölksrester som finns kvar på pumpens delar. Att följa dessa steg kan hjälpa till att förhindra kontaminering och skydda ditt barn från infektion. Om ditt barn föddes för tidigt eller har andra hälsoproblem, kan ditt barns sjukvårdsgivare ha fler rekommendationer för att pumpa bröstmjölk på ett säkert sätt.

1) FÖRE VARJE ANVÄNDNING

Inspektera och montera en ren pumpsats.
Rengör pumpmotorn med desinfektionsservetter.

2) EFTER VARJE ANVÄNDNING

Förvara mjölk säkert: Använd förvaringspåsar för bröstmjölk eller rena, livsmedelsgodkända behållare för att förvara pumpad bröstmjölk. Se till att behållarna är gjorda av glas eller plast och har tättslutande lock och märk dem med datum och tid och lägg dem omedelbart i kyl, frys eller

kylväska med ispåsar.

Rengör pumpområdet: Rengör pumpmotorn med desinfektionsservetter.



3) Delar som behöver rengöras och desinficeras

Rengör och desinficera alla delar som kommer i kontakt med bröst- och bröstmjolk innan du använder bröstpumpen för första gången och efter varje användning.

- Mjölkkontakt del: delar av mjölkuppsamlingsset, inklusive dubbeltätad fläns, länk, membran, ventil och mjölkuppsamlare.
- Delar som endast kommer i kontakt med bröst huden: Dubbeltätad fläns.

4) Före rengöring/desinfektion:

- Tvätta händerna väl med tvål och vatten i 20 sekunder.
- Ta isär alla delar enligt följande:

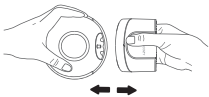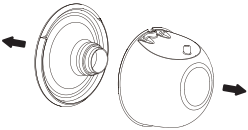 Fig. 5	 Fig. 6
1). Separera pumpmotorn från huvudkroppen.	2). Lossa flänsen från mjölkuppsamlaren.
 Fig. 7	 Fig. 8
3). Separera länkaren från mjölkuppsamlaren.	4). Ta isär membranet och ventilen från länken.



Fara:

Lägg aldrig huvudenheten, laddningskabeln eller adaptern (om du har köpt en adapter) i vatten eller en diskmaskin, eftersom detta orsakar permanent skada på dessa delar.

6.2.2 Rengöring och desinficering av delar som kommer i kontakt med mjölken

Steg 1: Rengöring

Rengör enheten för hand! Säkerheten med att använda en diskmaskin för att rengöra och desinficera denna produkt har inte verifierats.



Varning

Använd inte antibakteriella eller slipande rengöringsmedel för att rengöra bröstpumpens delar eftersom detta kan orsaka skada.

1) Förbered följande föremål:

- Tvål och varmt vatten
- Vatten av drickskvalitet
- Rent tvättställ som endast används för spädbarnsmattillbehör
- Ren diskborste som endast används för spädbarnsmattillbehör
- Oanvänd diskhandduk eller hushållspapper

2) Skölj: Skölj delar av mjölkuppsamlingssetet och alla andra matningsartiklar genom att hålla dem under rinnande vatten för att avlägsna kvarvarande mjölk eller smuts. Vattnet kan vara varmt eller kallt, vilket du än föredrar.



Fig. 9

3) Tvätta mjölkuppsamlingsdelar:

- Placera delarna av mjölkuppsamlingssetet i ett rent tvättställ som endast används för spädbarnsmattillbehör. Tvätta inte direkt i diskhon eftersom det kan innehålla bakterier som kan förorena dessa föremål.
- Blötlägg delar av mjölkuppsamlingssetet i varmt 40–60 °C (104–140 °F), tvålatten i 3–5 minuter.

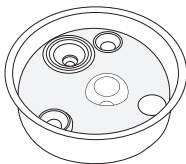


Fig. 10

- Använd en ren diskborste som endast används för spädbarnsmattillbehör.
- 4) Skölj igen: Skölj genom att hålla föremål under rinnande vatten, eller genom att sänka dem i färskt vatten i en separat tvättställ som endast används för rengöring av spädbarnsmattillbehör. Om det fortfarande finns smuts kvar, upprepa steg 3 och skölj igen tills det inte finns någon synlig smuts.
- 5) Lufttorka ordentligt: Placera delar av mjölkuppsamlingssetet, tvättstället och flaskborsten på en ren, oanvänd diskhandduk eller pappershandduk i ett område som är skyddat från smuts och damm. Använd inte en diskhandduk för att gnugga eller torka delar eftersom det kan överföra bakterier till föremålen!



Fig. 11

- 6) Rengör tvättställ och flaskskurborste: Skölj tvättställen och borsta väl och låt dem lufttorka efter varje användning. Tvätta dem med några dagars mellanrum för hand med tvål och varmt vatten. Om ditt barn är mindre än 3 månader gammalt, föddes för tidigt eller har ett försvagat immunförsvar på grund av sjukdom (som HIV) eller behandling (som kemoterapi mot cancer), tvätta tvättställ och flaskskurborste efter varje användning.

Efter rengöring:

För extra borttagning av bakterier, desinficera delarna av mjölkuppsamlingssetet, tvättstället och flaskskurborsten minst en gång dagligen efter att de har rengjorts. Föremål kan desinficeras med kokande vatten med en desinfektionsinställning. Desinfektion är särskilt viktigt om ditt barn är mindre än 3 månader gammalt, föddes för tidigt eller har ett svagt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinsk behandling.

För desinfektion av mjölkkontakttdelar, se steg 2.

Steg 2: Desinfektion

Fara: Sterilisera inte pumpdelar i en mikrovågsugn eller UV-sterilisator. Hög temperatur ($> 110^{\circ}\text{C}$) kommer att förkorta deras livslängd och orsaka säkerhetsrisker.

Innan desinfektion, se till att du har en rengjord mjölkuppsamlingsset, flaskskurborstar och tvättställ med metoderna ovan. Desinficera alla föremål som kommer i kontakt med mjölk (även flaskskurborsten och tvättstället!) genom att använda någon av följande metoder.

1) Förbered följande föremål:

- En kastrull
- Vatten av drickskvalitet
- Ren tång

**Fara:**

Vid desinfektion med kokande vatten, förhindra att flaskan eller andra delar kommer i kontakt med sidorna av kastrullen. Detta kan orsaka irreversibel produktdeformation eller skada.

2) Placera det demonterade mjölkuppsamlingssetet i krukans och fyll krukans med tillräckligt med vatten för att täcka komponenterna som ska desinficeras. Låt vattnet koka i 5-10 minuter, se till att delarna inte rör vid kastrullens sidor.

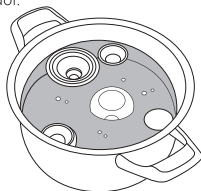


Fig. 12

3) Ta bort föremål med en ren tång.



Fig. 13

4) Lufttorka ordentligt.

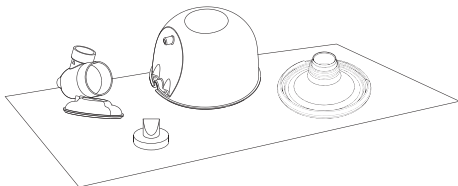


Fig. 14

Steg 3: Förvara säkert

Förvara torra föremål säkert tills de behövs. Se till att de rena pumpdelarna, flaskskurborstarna och tvättställ har lufttorkat ordentligt innan förvaring. Föremål måste vara helt torra för att förhindra att bakterier och mögel växer. Förvara torra föremål på ett rent, skyddat område för att förhindra kontaminering.

1. Tvätta händerna: Tvätta händerna väl med tvål och vatten.
2. Sätt ihop igen: Sätt ihop de rena, torra pumpdelarna.
3. Förvara säkert: Placera återmonterade pumpdelar och andra matningsartiklar, tvättställ och torr flaskskurborste på ett rent, skyddat område, till exempel inuti ett stängt köksskåp som endast används för att förvara ren disk.

6.2.3 Rengör / desinficera övriga delar

Höljet på huvudenheten måste rengöras och desinficeras första gången och efter varje användning. De andra delarna kommer inte i kontakt med människokroppen eller mjölken under pumpning och behöver bara rengöras när de är smutsiga.

Rengöring/desinfektion av föremålen vid rumstemperatur mellan 5 °C~ 40 °C enligt nedan:

Förbered följande föremål:

- Desinfektion
- 70 % isopropylalkoholservetter
- Ren mjuk trasa

Rengöringsmetod:

1. Innan du utför denna rengöringsprocedur, tvätta händerna med handdesinfektion först.
2. Ta bort alla rester från huvudenheten och laddningskabeln med en ren mjuk trasa.
3. Ta en bit 70 % isopropylalkoholservett för att torka av delarna tills inga synliga föroreningar finns kvar.
4. Torka enheten genom att placera den i rumstemperatur i 10 minuter för att förångna den återstående lösningen av rengöringsreagens på produkten.

Desinfektionsmetod:

Rengöring av höljet på huvudenheten enligt ovanstående metod före desinfektion.

1. Desinficera höljet på huvudenheten med en mjuk trasa fuktad med 70 % isopropanol i 3 minuter.
2. Torka den genom att placera huvudenheten i rumstemperatur i 10 minuter för att avdunsta den kvarvarande desinfektionslösningen.

6.3 Användningsanvisning

6.3.1 Förberedelse före användning



Fara:

1. Tvätta händerna med tvål och vatten och inspektera och montera en ren pumpsats.
2. Varaktighet av pumpsession:
Denna produkt drivs av ett uppladdningsbart litiumbatteri, efter att ha laddats fullt kan den användas för 7-8 sessioner (cirka 240 minuter) av pumpning, 30 minuter per session. Ett typiskt pumppass varar cirka 10-15 minuter per bröst, men du bör bara pumpa så länge det är bekvämt och produktivt för dig.

1. Välj flänsstorlek

Denna Momcozy Bärbar bröstpump kommer endast med 24 mm silikonfläns. Om den medföljande flänsen inte passar kan du hitta olika flänsar och flänsinsatser som finns att köpa på Amazon / momcozy.com. Ange "momcozy" i sökfältet och hitta flänsstorlek och flänsinsats som passar dig.



Fig.15 välj rätt storlek

2. Stimulera bröstvårtan

- Stimulera din bröstvårta för att nå en full storlek (hoppa inte över detta steg!).
- Placera bröstvårtan i det minsta hålet som du bekvämt kan passa in i utan att tvinga in den.
- Välj det hål som bekvämt kan passa basen på din bröstvårta.
- Få ditt mått baserat på storlekstabellen.

3. Testa flänspassningen

- För att hitta lämplig storlek på flänsen måste du först se till att du placerar flänsen på rätt plats på ditt bröst.
- Tryck på flänsen på ditt bröst tills det inte finns någon lucka. Se till att din bröstvårta är precis i mitten av flänsen.

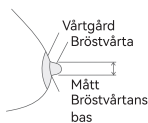


Fig. 16



Fig. 17

För liten

För liten: Om din bröstvårta fortsätter att gnugga mot flänsens innervägg under pumpning, är denna fläns för liten för dig.

Bra passform

Lämplig passform: Om din bröstvårta rör sig smidigt under pumpning, utan att gnugga eller vidröra flänsens innervägg, och nästan ingen vårtgård sugas in, då är denna fläns rätt för dig.

För stor

För stor: Om ett stort område av vårtgården sugas in under pumpning, är denna fläns för stor för dig.

4. SKAFFA RÄTT BEHÅ

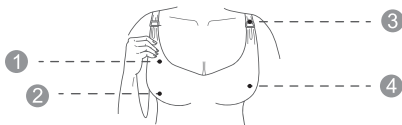


Fig. 18

- ❶ Tillverkad av elastiskt tyg
- ❷ Ingen bygel eller stoppning
- ❸ Har en klaff
- ❹ Full täckning

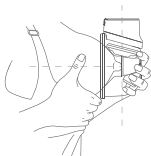


Fig. 19

INGEN LUCKA

När du sätter pumpen inuti din behå, ska silikonflänsen på denna pump pressas hårt mot din hud utan en lucka.



Fig. 20

OM DEN RÖR SIG

Om du känner att pumpen rör sig under användning, spänn din behå-rem för att justera pumpen igen, eller välj en annan behå.

5. REKOMMENDERAD HÅLLNING



Fara:

Sitt eller stå alltid upprätt medan du pumpar för att förhindra att mjölken läcker. Denna pump ska inte användas när du ligger ner eller sover för att säkerställa att rätt orientering bibehålls under användning.

HÅLLNING

Se till att pumpen och mjölkuppsamlaren alltid står i vertikal vinkel. Annars kommer mjölken att rinna ut.



Fig.21 höger hållning

6.3.2 Montering av pumpen



Fara:

Se till att du har rengjort och desinficerat de delar som kommer i kontakt med mjölk eller bröst.



Varning

- Var försiktig eftersom när du har desinficerat bröstpumpens delar genom att koka dem kan de bli väldigt varma. För att förhindra brännskador, börja montera bröstpumpen först när desinficerade delar har svalnat.
- Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du rör vid bröstpumpens delar och bröst för att förhindra kontaminering. Undvik att vidröra insidan av mjölkuppsamlingssetet.

Anteckningar:

- Korrekt placering av den dubbeltätade flänsen, membranet, mjölkuppsamlaren, ventilen etc. är avgörande för att bröstpumpen ska bilda ett korrekt vakuum.
- Inspektera de enskilda komponenterna visuellt före varje användning med avseende på sprickor, spån, revor, missfärgning eller försämring. I händelse av skada på enheten, avbryt användningen tills delarna har bytts ut.

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och montera sedan pumpen enligt följande:




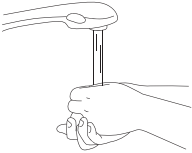
 Fig. 22	 Fig. 23
1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.	2. Placera silikonmembranet i länkaren och tryck lätt runt kanten tills silikonmembranet tätar väl med länkaren.
 Fig. 24	 Fig. 25
3. Anslut silikonventilen till länkens ände och tryck lätt på silikonventilen så att den passar in ordentligt på länken.	4. Sätt den sammansatta länkdelen i mjölkuppsamlaren och rikta in "öron"-skåran på länken med det inre spåret på mjölkuppsamlaren. Tryck fast silikonmembranet på mjölkuppsamlarens runda hål så att de sitter bra.

 Fig. 26	 Fig. 27
5. Anslut flänsen med huvudkroppen. Se till att flänsen passar säkert runt fälgen genom att trycka ner den med tummarna.	6. Sätt in det cylindriska utsprånget på mjölkuppsamlaren i hålet på pumphotorn och rikta sedan in skåran på mjölkuppsamlaren med skåran på pumphotorn.

Bröstpumpen är nu redo att användas.

6.3.3 Pumpningsinstruktioner

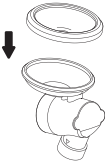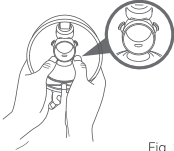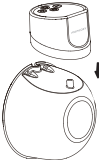

Varning

- Innan du tar bort pumpkroppen från ditt bröst, stäng alltid av bröstpumpen för att släppa vakuemet.
- Fortsätt inte att pumpa i mer än 5 minuter åt gången om du inte lyckas pumpa ut någon mjölk. Försök att pumpa vid en annan tidpunkt under dagen.
- Om processen blir mycket obehaglig eller smärtsam, sluta använda pumpen och kontakta din läkare.



Fara:

- Övervaka mjölknivån under pumpning för att säkerställa att överfyllning inte inträffar.

1. Inriktning

a. Innan du pumpar, se till att pumpen trycks hårt mot ditt bröst utan en lucka (Fig.28).

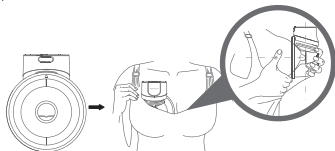


Fig. 28

- b. För att rikta in, håll flänsen mot ditt bröst så att du kan se om din bröstvårta är centrerad i flänstunneln. Du kan behöva böja dig framåt.
- c. När du har justerat, titta igenom flänsen för att bekräfta att din bröstvårta är centrerad innan du pumpar. Toppen av din bröstvårta ska INTE röra toppen, sidorna eller botten av flänstunneln. Om det gör det, försök igen.

Första perspektivet

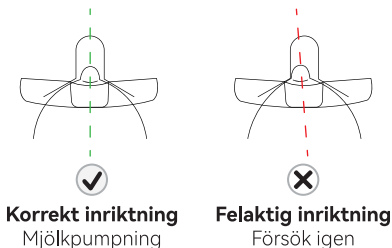


Fig. 29

Anteckningar:

Att rikta in bröstvårtorna korrekt är nyckeln till bekväm pumpning och prestanda.

Bröstvårtan måste placeras korrekt i flänstunneln innan pumpning för att undvika obehag.

Se avsnitt 7.3.1 Förberedelse före användning - Välj flänsstorlek.

2. Säkra pumpen i behå

Säkra pumpen på plats med behå, var noga med att hålla pumpen stadigt pressad mot bröstet. Om det behövs, dra åt behå för att hålla pumpen säkert på plats och börja pumpa.

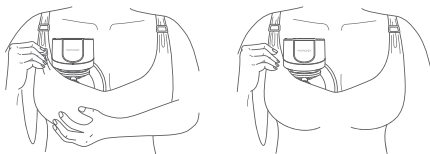


Fig. 30

3. Börja pumpa

Placera inte pumpen direkt i din behå, följ instruktionerna steg för steg. Koppla bort från laddaren före användning.

A. Slå på pumpen

Tryck länge på På/Av/Paus-knappen i 2 s för att slå på pumpen.

- Standardläget är blandat läge när du använder pumpen för första gången.
- Standardvakuumnivån är nivå 1 (för närvarande visar sugnivån LED 1 som nivå 1).

B. Välj läge

Lägen: Stimuleringsläge och pumpläge och blandat läge

När du använder pumpen första gången är standardinställningen nivå 1 sugstyrka i blandat läge.

Minnesfunktion: Pumpen kommer ihåg och startar med den tidigare sugnivån och läge när du använder den nästa gång.

Tryck kort på lägesvalsknappen för att växla från 3 lägen.

C. Välj vakuumnivå.

Momcozy-pumpen har 9 vakuumtrycksinställningar för varje läge, vilket ger dig kontroll över vad som känns bekvämt och fungerar mest effektivt i alla lägen.

När du känner vakuumtrycket på din bröstvårta, använd Öka/Minska-knappen för att justera vakuumtrycket för att hitta din föredragna inställning i alla lägen. LED-displayen kommer att släckas efter ingen användning på 20 sekunder, tryck på valfri knapp för att aktivera LED-displayen igen.

Tips: Ett högre vakuumtryck betyder inte alltid en högre volym mjölk. Att utsätta din bröstvårta under överdriven stress kan minska mjölkproduktionen. Se alltid till att du pumpar på en bekväm nivå. Om du inte känner sug, kontrollera att pumpen är korrekt monterad.



Fara:

- * Momcozy-pumpen stöder inte användning under laddning. Koppla alltid bort från laddaren och stäng laddningslocket före användning.
- * Momcozy-pumpen ska inte användas när du ligger ner, utför ansträngande aktiviteter eller aktiviteter med risk för skada.
- * Att använda en bröstpump ska inte orsaka smärta. Försök inte att pumpa med en vakuumtrycksinställning som är för hög eller obekväm. Om du upplever allvarliga obehag eller smärta under pumpningen, sluta pumpa, bryt förseglingen runt bröstvårtan och avbryt sessionen.

4. Pausa / Börja pumpa

För att pausa under pumpning, tryck kort på På/Av/Paus-knappen så kommer lägesindikatorn att blinka. Tryck på valfri knapp för att fortsätta din pumpsession.

5. Stäng av pumpen

Tryck länge på På/Av/Paus-knappen i 2 sekunder för att stänga av pumpen.

Dessutom kommer produkten automatiskt att stängas av efter 30 minuter av pumptiden.

Anmärkning: Pausa/starta pumpning, läge och vakuumnivå kommer inte att återställa pumptiden.

Obs!

Ett typiskt pumppass varar cirka 10–15 minuter per bröst, men du bör bara pumpa så länge det är bekvämt och produktivt för dig.

6. Ta bort pumpen

Använd fingret för att bryta förseglingen mellan flänsen och bröstvävnaden.

Luta dig något framåt för att ta bort pumpen från bröstet efter din pumpning, håll sedan flänsöppningssidan uppåt för att förhindra att mjölken rinner ut.



Fig. 31

Vi rekommenderar att användaren stoppar pumpningen när mjölkuppsamlarens utställda mjölkvolym närmar sig 120 ml för att undvika översvämning.

Efter avslutad mjölkinsamling, håll den nypumpade mjölken i andra mjölkuppsamlare med lock eller mjölkförvaringspåsar i tid. Skruva fast locket ordentligt på andra mjölkuppsamlare och förvara mjölken.



Varning

- De medföljande mjölkuppsamlarna är till för att samla upp mjölken under pumpning. Om du behöver mata barnet eller förvara den pumpade bröstmjölken, använd en annan mjölkuppsamlare med lock.



Varning

- Kyl eller frys in pumpad mjölk omedelbart eller förvara den vid en temperatur på 16 °C ~ 25 °C i 2-4 timmar innan du ger den till ditt barn.

6.4 Förvaring av bröstmjölk

6.4.1 Förvaring av bröstmjölk

Att följa rekommenderade förvarings- och beredningstekniker kan upprätthålla säkerheten och kvaliteten på pumpad bröstmjölk för barnets hälsa.

Dessa är allmänna riktlinjer för förvaring av bröstmjölk vid olika temperaturer. Olika faktorer påverkar hur länge bröstmjölk kan förvaras säkert. Sådana faktorer inkluderar mjölkvolym, rumstemperatur när mjölk pumpas, temperaturfluktuationer i kyl och frys samt miljörenlighet.

Förvaring av bröstmjölk efter pumpning:

- Kyl eller kyl mjölk direkt efter att den har pumpats, om möjligt. Du kan lägga den i kylskåpet, placera den i en kylare eller isolerad kylförpackning eller frysa den i små (2 till 4 uns) omgångar för senare matning.
- Använd förvaringspåsar för bröstmjölk eller rena, livsmedelsgodkända behållare för att förvara pumpad bröstmjölk. Se till att behållarna är gjorda av glas eller plast och har tättslutande lock.
- Undvik flaskor med återvinningssymbolen nummer 7, vilket indikerar att behållaren kan vara gjord av BPA-innehållande plast.
- Avlägsna luft före tätning.
- Lagg påsarna platt för att frysa in. För att förhindra att de fastnar mellan påsarna, separera påsarna med pappershanddukar.
- Förvara aldrig bröstmjölk i engångsflaskodral eller plastpåsar som inte är avsedda för förvaring av bröstmjölk.
- Snurra försiktigt behållaren för att blanda grädddelen av bröstmjölken som kan stiga till toppen tillbaka med resten av mjölken. Skaka inte mjölken. Detta kan få en del av mjölkens värdefulla delar att skingras.
- Nypumpad mjölk kan förvaras:

Typ av bröstmjölk	Förvaringsplatser och temperaturer		
	Bänkskiva 77 °F (25 °C) eller kallare (rumstemperatur)	Kylskåp 40 °F (4 °C)	Frys 23 °F (-5°C) eller kallare
Nypumpad	Inom 2-4 timmar	Inom 24 timmar	Inom 3 månader
Upptinad, tidigare fryst	Använd inom 2 timmar efter att barnet har ätit klart		

Dessa riktlinjer gäller endast friska fullgångna barn och kan variera för för tidigt födda eller sjuka barn. Kontrollera med din sjukvårdsgivare.

Förvaringstips:

- Märk tydligt på förvaringsbehållaren med datumet den pumpades, ange ditt barns namn om du ger mjölken till en barnomsorgsgivare.
- Förvara inte bröstmjölk i kyl- eller frysdörren. Detta kommer att hjälpa till att skydda bröstmjölken från temperaturförändringar från dörröppning och stängning.
- Om du inte tror att du kommer att använda nypumpad bröstmjölk inom 4 dagar, frys in den direkt. Detta kommer att bidra till att skydda bröstmjölakens kvalitet.
- Vid infrysning av bröstmjölk:
- Förvara små mängder för att undvika att slösa mjölk som kanske inte dricks upp. Förvara i 2 till 4 uns eller den mängd som erbjuds vid en matning.
- Lämna ungefär en tum utrymme överst på behållaren eftersom bröstmjölken expanderar när den fryser.
- Bröstmjölk kan förvaras i en isolerad kylare med frysta isförpackningar i upp till 24 timmar när du är på resa. När du har nått din destination, använd mjölken direkt, förvara den i kylan eller frys in den.

6.4.2 Säker upptining av bröstmjölk

- Tina alltid den äldsta bröstmjölken först. Kom ihåg först in, först ut. Med tiden kan kvaliteten på bröstmjölken minska.
- Det finns flera sätt att tina din bröstmjölk:
- I kylan över natten.
- Lägg i en behållare med varmt eller ljummet vatten.
- Under ljummet rinnande vatten.
- Tina eller varm aldrig bröstmjölk i mikrovågsugn. Att använda en mikrovågsugn kan förstöra näringsämnen i bröstmjölk och skapa heta fläckar, som kan bränna en babys mun.

- Om du tinar bröstmjölk i kylskåp, använd den inom 24 timmar. Börja räkna de 24 timmarna då bröstmjölken är helt tinad, inte från det att du tog ut den ur frysen.
- När bröstmjölken har nått rumstemperatur eller värmts, använd den inom 2 timmar.
- Frys aldrig in bröstmjölken igen efter att den har tinat.

7. Förvaringsskick

Hur man förvarar pumpen

* Korttidsförvaring

* Håll bröstpumpen borta från direkt solljus. Förvara bröstpumpen och dess tillbehör på en säker, ren och torr plats och borta från barn.

* Långtidsförvaring

Ladda först pumpen före långtidsförvaring, så att livslängden för denna pump kan förlängas. För det andra, förvara den på en plats borta från direkt solljus för att undvika missfärgning. För det tredje, rengör och torka de tvättbara delarna innan du förvarar dem.

* Temperatur: -20 till 60 °C / -4 till 140 °F

* Relativ luftfuktighet: 15 % - 90 %

* Omgivningstryck: 90 till 106 kPa

8. Specifikation

Modell nr.	S12 Pro
Namn	Bärbar bröstpump
Effektkrav	Ingång: 5V=1A Strömm: 5 W
Strömförsörjning	DC 3.7 V / 2 * 600mAh rechargeable lithium battery
Pumpalternativ	Enkel pump
Suglägen	Stimuleringsläge, pumpläge och blandat läge
Vakuumintervall	Stimuleringsläge: -65 to -135 (±5) mmHg Pumpläge: -165 to -285 (±5) mmHg Blandläge: -65 to -285 (±5) mmHg

Cykelhastighet	Stimuleringsläge: 73~127(±2) cykel/min Pumpläge: 18~45(±2) cykel/min Blandat läge: 8~17(±2) cykel/min
Pumpmått	135mm X 108mm X 71mm
Vikt (med alla tillbehör)	240 g
Produktens livslängd	500 timmar
Bullernivå	<50dB
Typ av skydd mot elektriska stötar	Internt driven utrustning
Användningsförhållanden	Temperatur: 0°C till 40°C; Fuktighet: 15 % till 90 %, Atmosfäriskt tryck: 70 kPa till 106 kPa
Transport och förvaringsmiljö	Temperatur: -20°C till 60°C; Fuktighet: 15 % till 90 %, Atmosfäriskt tryck: 70 kPa till 106 kPa
Batteriets laddningstid	120 minuter
Batteriets användningstid	150 minuter

9. Underhåll och reservdelar

Enheten innehåller inga delar inuti som användaren kan reparera: Om du öppnar eller manipulerar den här enheten upphävs garantin. Om enheten behöver repareras ska den returneras till utrustningsföretaget eller direkt till återförsäljaren. All modifiering är förbjuden.

TILLVERKAREN kommer på begäran att tillhandahålla kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar, kalibreringsinstruktioner eller annan information som hjälper SERVICEPERSONAL att reparera de enhetsdelar som TILLVERKAREN har utsett som reparerbara av SERVICEPERSONAL. När produkten inte används under en längre tid laddas batteriet ur långsamt. För att undvika batteriskador på grund av låg spänning under lång tid, ladda enheten var tredje månad.



Varning

Varning: byte av litiumbatterier av otillräckligt utbildad personal kan leda till fara.

Rengör eller underhåll inte enheten medan den används eller under laddning.

10. Försäkran om överensstämmelse

EU-efterlevnadsförklaring: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i LVD-direktivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU.

11. Felsökning

Problem	Lösningar
Pumpen fungerar inte	• Om nedsläpp ännu inte har inträffat, överväg att lämna pumpen på bröstet under en längre tid i händelse av eventuellt fördröjt nedsläpp. Obs! Den initiala nedsläppstiden för mjölk är unik för varje person och varierar beroende på många faktorer. • Kontrollera bröstvårtornas inriktning, pausa pumpen och ta bort den från bröstet. Justera om pumpen enligt beskrivningen nedan. • Du kanske inte har rätt flänsstorlek (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning – Välj flänsstorlek).
Mjölk rinner inte	• Pausa pumpen och ta bort den från bröstet. Justera den korrekt. (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning – Inriktning). • Du kan också separera pumpen från flänsen för att justera om. Centrera sedan bröstvårtan i flänstunneln och för pumpen till ditt bröst (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning – Inriktning).
Behöver justeras	• Pausa pumpen och ta bort den från bröstet. Justera den korrekt. (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning – Inriktning). • Du kan också separera pumpen från flänsen för att justera om. Centrera sedan bröstvårtan i flänstunneln och för pumpen till ditt bröst (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning – Inriktning).

Känner obehag när du pumpar	• Om du upplever allvarliga obehag, vänligen prova följande (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning - Inriktning): • Se till att trycka Momcozy-pumpen ordentligt mot bröstet under stimuleringsfasen. • Dra åt behåån för att se till att Momcozy-pumpen hålls stadigt mot bröstet. • Minska sugstyrkan. • Justera Momcozy-pumpen igen. • Du kanske pumpar för länge. Momcozy-pumpen stängs automatiskt av efter 30 minuter. • Du kanske inte har rätt flänsstorlek (se avsnitt 7.3 Användningsanvisning - Välj flänsstorlek). Sluta och kontakta en professionell eller amningsspecialist.
Minskat (lågt) pumsug	• Pumpen har 9 suginställningar. Tryck på ökningsknappen för att öka sugstyrkan. • Kontrollera skicket på dina tvättbara delar. De bör bytas ut efter tre månaders användning. • Om det inte fungerar, prova följande: 1. Kontrollera anslutningarna mellan alla tvättbara delar för att säkerställa att alla är säkra. 2. Inspektera visuellt alla tvättbara delar och byt ut dem om de är skadade. 3. Kontrollera att strömmen är på. - Tryck pumpen ordentligt mot bröstet.
Sluta pumpa	• Pumpen slutar automatiskt att pumpa efter 30 minuter. • Kort tryck på På / Av / Paus-knappen pausar pumpen, tryck igen för att återuppta.
Pumpen slutar inte pumpa	• Tryck på På / Av / Paus-knappen. • Om problemet kvarstår, bryt sedan förseglingen genom att föra in ett finger mellan bröstvävnaden och flänsen. Tryck sedan på På / Av / Paus för att stänga av pumpen.
Pumpen eller laddaren blir blöt (nedsänkt i vatten).	• Torka av pumpen omedelbart. Stötta pumpen upprätt med laddarporten nere och sugreglagen uppe, och låt den lufttorka över natten. Använd inte pumpen eller laddaren inom 24 timmar. • Kontakta kundtjänst.
Pumpen laddas inte.	• Se till att USB Type-C-kabeln med standardladdare (ingår ej) är helt ansluten till pumpens laddningsport.

Anmärkning: Om ovanstående metoder fortfarande inte löser problemet, kontakta tillverkaren, se sista sidan för kontaktuppgifter.

12. Kassering



Vid slutet av produktens livscykel ska du inte slänga denna produkt i det vanliga hushållsavfallet, utan lämna in den till en insamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning och batteri. Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan ha potentiellt skadliga effekter på miljön. Felaktig kassering kan leda till ansamling av skadliga gifter i luft, vatten och mark, vilket är skadligt för människors hälsa. Du är skyldig att kassera enheten på rätt sätt. Kontakta din kommunala myndighet för information om kassering.

13. Garanti

Kontakta tillverkaren vid garantianspråk, kontaktuppgifter finns på sista sidan i denna bruksanvisning. Om du måste skicka enheten, bifoga en kopia av ditt kvitto med tydlig felbeskrivning.

Garantivillkoren anges nedan:

1. Garantiperioden för enheten är ett år från inköpsdatum. Vid garantianspråk måste inköpsdatum styrkas med hjälp av kvitto eller faktura.
2. Reparationer under garantin förlänger inte garantitiden varken för enheten eller för ersättningsdelarna.
3. Följande fall är undantagna från garantin
 - Alla skador som uppkommit på grund av felaktig behandling, t.ex. underlåtenhet att följa bruksanvisningen.
 - Alla skador som uppstår på grund av reparationer eller manipulering av kunden eller obehörig tredje part.
 - Skador som uppstår under transport från tillverkare till konsument eller under transport till servicecenter.
 - Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
 - Skada på enheten på grund av privat demontering av enheter.
 - Ansvar för direkta eller indirekta följdskador orsakade av enheten är uteslutna även om skadan på enheten accepteras som ett garantianspråk.

14. Deklaration om resor eller internationell användning

Eftersom prestandan hos Momcozy Bärbar bröstpump kan påverkas av den yttre miljön, använd inte enheten under resor eller på flygplan med tanke på resemiljöns osäkerhet och instabilitet.

Momcozy Bärbar bröstpump kan användas internationellt, men måste användas och förvaras i den miljö som anges i denna bruksanvisning. Se till att ingångseffekten på din nätadapter är AC 100~240V 50/60 Hz och uteffekten är DC 5V 1A, och att du har en omvandlare att konvertera till rätt spänning för användarlandet. För att säkerställa att Momcozy Bärbar bröstpump inte påverkas under bärandet, kontrollera följande före användning för att säkerställa att den fungerar normalt:

- Kontrollera Momcozy Bärbar bröstpump för att säkerställa att den är fri från skador och ·Före varje användning, kontrollera statusen för din Momcozy Bärbar bröstpump för att säkerställa att den fungerar normalt. Om något onormalt inträffar sluta använda pumpen.

15. Tillverkarinformation

Tillverkare: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Adress: #2-201, våning 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, Kina, 518129

E-post: support@momcozy.com

Om hjälp med att ställa in, använda eller underhålla enheten vid behov eller för att rapportera oväntade operationer eller händelser, vänligen kontakta oss.

图档名称	momcozy S12 Pro吸奶器说明书-瑞典语（减配版）			版本号	C0	日期	2025-02-26
规格尺寸	80*130（h）mm	印刷颜色	CMYK	设计师	高歌		
材质工艺	封面105g铜版纸过油+内页80g 书纸/胶装						
项目负责人	肖莹	文案编写/审核人	肖莹		设计审核人	/	
备注	出血线为3mm；红色线为刀模，请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。						ROOT 路特