

正面

120mm

momcozy

Draagbare borstkolf

Installatierichtlijnen (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie)

*Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn voor de installatie.

1. Sluit het membraan en de klep aan op het verbindingstuk.




2. Sluit het geassembleerde verbindingstuk aan op de melkverzamelaar.




Lijn het "oor" uit met de groef

3. Verbind het borstschild met de melkopvangbak.

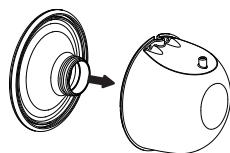


4. Monteer de borstkolf en de melkopvangbak.

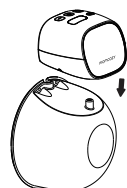

Melk schenken

Houd de opvangbak voor moedermelk in de juiste richting als u melk overgiet.

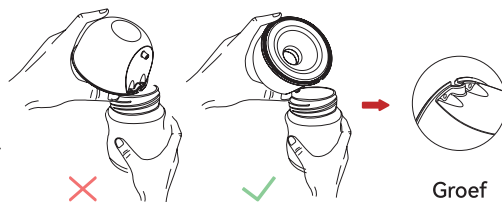

Groef

Raadpleeg de video voor probleemoplossing voor verdere oplossingen, als er zich tijdens de installatie of tijdens het kolven problemen met het product voordoen. Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de video voor probleemoplossing.



反面

Hoe voorkomt u melkverlies en Afkolftips voor meer moedermelk

1. Buig naar voren om ervoor te zorgen dat uw nippel in het midden van de borstschildtunnel zit. De borstkolf moet stevig tegen uw borst aan zitten.



2. We raden gebruikers aan een volledig bedekkende borstvoedingsbeha te dragen om een goede afsluiting te vormen tussen hun borsten en het borstschild.
3. Zorg ervoor dat de borstkolf goed gemonteerd is.
4. Ga tijdens het kolven rechtop zitten of staan, niet liggen.

Reiniging en sterilisatie

***Niet wasbare onderdelen:**

***Wasbare onderdelen:**



Motor kolf



Melkopvangbak



Borstschild



Membraam



Verbindin
gsstuk



Ventiel

We raden aan om afwasbare onderdelen 3-5 minuten met zeepwater (40-60°C) schoon te maken. Gebruik kokend water / stoom / sterilisatiepot voor sterilisatie, met een temperatuur van maximaal 100 °C (212 °F). Kook en steriliseer de onderdelen binnen 5-10 minuten.

*Het is niet aan te raden om uw borstkolfaccessoires in de magnetron te steriliseren, dit verkort de levensduur van de accessoires.

Tips:

- De verwachte levensduur van de wasbare onderdelen is 1-3 maanden. Het wordt aanbevolen om de wasbare onderdelen te vervangen na langdurige bewaring of voordat u gaat kolven voor uw volgend kind.
- De borstkolf schakelt automatisch uit na 30 minuten kolven. Als irritatie of ongemak optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

support@momcozy.com

150mm