

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


ELEGANT 880 4IN1 MICRO +
SKIN SCRUB+ VACUUM+ SPRAY

Model M-880




Importator

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024

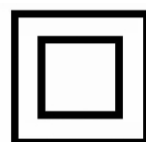

Date tehnice:

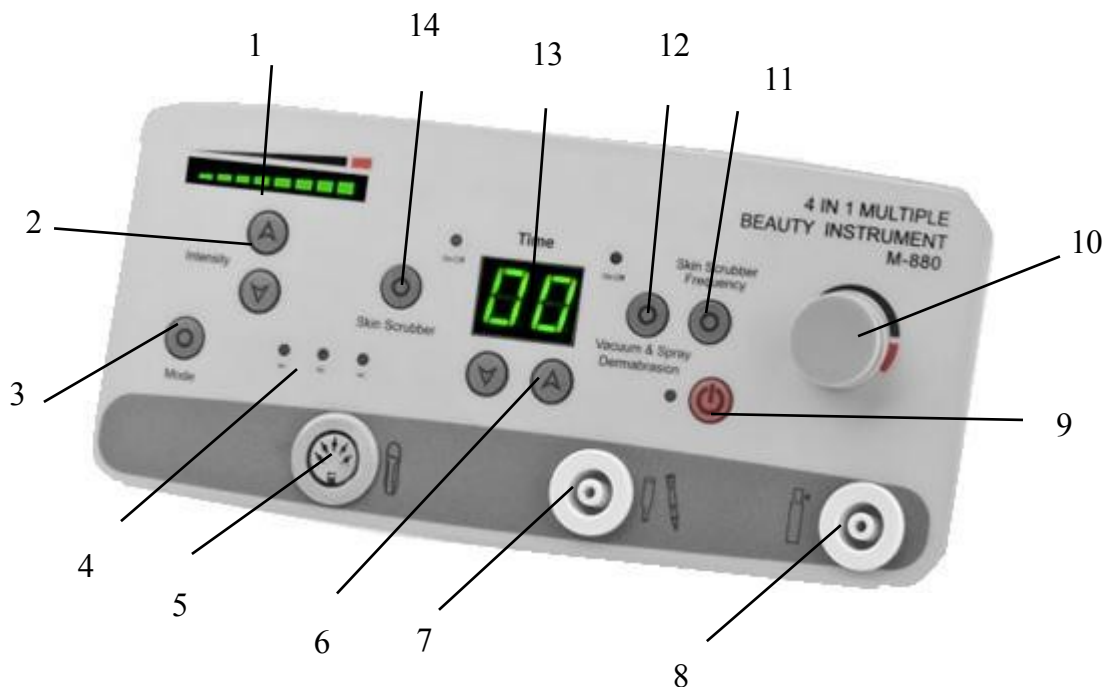

- | | |
|---|--|
| 1. Indicator de intensitate a peelingului prin cavitare, | 7. Conectarea vidului și a microdermoabraziunii |
| 2. Reglarea intensității peelingului prin cavitare, | 8. Conexiunea de pulverizare |
| 3. Selectarea opțiunii de tratament cu peeling prin cavitare, | 9. Dispozitiv On/Off |
| 4. Lumină de funcționare a peelingului prin cavitare, | 10. Reglarea puterii de aspirație |
| 5. Conexiunea de peeling prin cavitare, | 11. Reglarea frecvenței de peeling prin cavitare |
| 6. Setarea timpului | 12. Pornit/oprit vacuum, spray, microdermabraziune |
| | 13. Afișare timp |
| | 14. On/Off peeling prin cavitare. |

Peelingul prin cavitare este în primul rând o curățare nedureroasă a pielii cu ajutorul vibrațiilor cu ultrasunete. Acesta permite îndepărtarea completă a excesului de sebum din pori și foliculii de păr, precum și eliminarea punctelor negre.

Odată cu utilizarea peelingului, are loc fenomenul de cavitare, care apare atunci când ultrasunetele intră în contact cu un lichid, apoi se formează bule de gaz microscopice și o serie de procese chimice care duc la descompunerea celulelor moarte ale stratului cornos.

INDICAȚII

- Ridicarea ovalului facial și a bărbiei,
- Fermitatea structurii pielii,
- Netezirea ridurilor superficiale,
- Reducerea pungilor de sub ochi și a picioarelor de corb,
- Reconstrucția collagenului,
- Terapia anti-îmbătrânire - prevenire,
- Reducerea impurităților, a porilor dilatați,
- Consolidarea structurii pielii.
- Curățarea pielii.

MICRODERMABRAZIUNE

Este un tratament în care straturile superficiale ale epidermei sunt exfoliate cu ajutorul vârfurilor abrazive de diamant și al forței de aspirație.

Microdermabraziunea este un tratament eficient pentru reducerea liniilor fine, a picioarelor de cioară, a decolorării și a cicatricilor de acnee. Stimulează construirea celulelor pielii și a collagenului. Este un tratament cosmetic neinvaziv foarte popular. Atunci când este utilizat în mod regulat, produce rezultate excelente pentru toate tipurile de piele. Rezultatele sunt vizibile imediat.

Indicații

- cicatrici de acnee,
- puncte negre, puncte albe,
- pori dilatați,
- epidermă aspră, calozită,
- flaciditatea pielii,
- întinerirea pielii și eliminarea liniilor fine și a ridurilor din jurul ochilor, gurii și gâtului,
- vergeturi,
- piele uscată,
- hiperpigmentare și decolorare,
- leziuni solare (față, mâini, gât),
- keratoza peri-foliculară,
- Acnee vulgară (comedonală, papulară),
- seboree.

Contraindicații

- infecții virale,
- infecții bacteriene
- infecții fungice,
- acnee pustuloasă și purulentă,
- rozacee,
- pielea pleoapelor,
- întreruperea continuității pielii,
- tumori cutanate și alunițe,
- angioame cavernoase,
- tratament antiacneic cu Roaccutan (se recomandă un interval de cel puțin 3 luni),
- susceptibilitate la cheloide (cicatrici),
- chirurgia facială (este indicat un interval de cel puțin două luni).


Atenție:

Capetele de tratament pentru microdermabraziune trebuie să fie curate și dezinfectate.


Tratamentul se efectuează pe pielea uscată.

Filtrele de bumbac pentru microdermabraziune sunt de unică

folosință. Mișcări ale capului

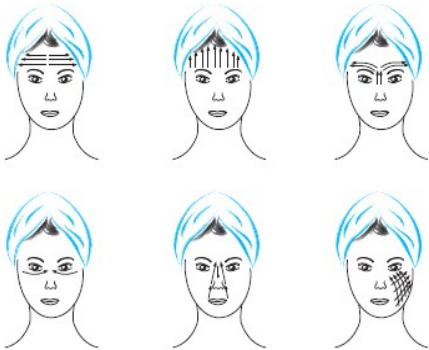

Duză
Filtru bumbac
Cap



VACUUM

Este un tratament care utilizează puterea de aspirație și piesele de mână selectate corespunzător pentru zona de tratament.

INDICAȚII:

- puncte negre,
- pori dilatați,
- epidermă aspră, calcaroasă
- flaciditatea pielii
- vergeturi,



- piele uscată.

Spray

Folosit pentru a efectua o tonifiere delicată a pielii cu ajutorul unui vacuum și al tonicului conținut în recipient.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat aparatul din priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau alte defecțiuni, contactați un service autorizat un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.