

正面

120mm

momcozy

Bärbar bröstpump


Installationsriktlinjer (se bruksanvisningen för ytterligare detaljer)

*Se till att dina händer är rena innan du påbörjar installationen.

1. Anslut diafragman och ventilen till länkaren.




2. Anslut den monterade länkaren till mjölkuppsamlaren.

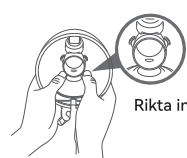


Rikta in "örat" med spåret

3. Anslut flänsen till mjölkuppsamlaren.

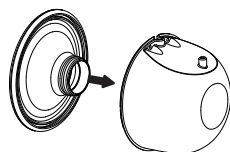


4. Montera pumpen och mjölkuppsamlaren.

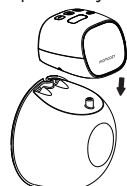

Att hälla mjölk

Håll bröstmjölkuppsamlaren i rätt riktning när du häller mjölk.

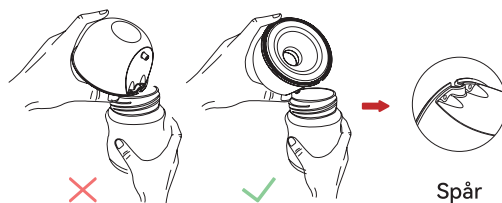

Spår


Om några produktproblem uppstår under installationen eller din pumpsession, se felsökningsvideon för ytterligare lösningar. Öppna felsökningsvideon, skanna QR-koden.



反面

Hur man förhindrar mjölkläckage och pumptips för att producera mer bröstmjölk

1. Luta dig framåt för att se till att din bröstvårta är centrerad i flänsstunneln. Bröstpumpen ska sitta stadigt mot ditt bröst.

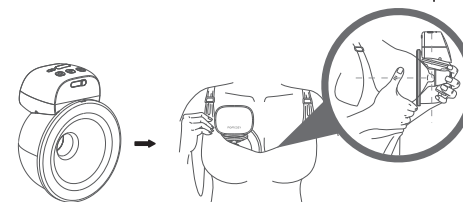

2. Vi rekommenderar användare att använda en heltäckande amningsbehå för att bilda en tät tätning mellan bröstet och flänsen.

3. Se till att pumpen är välmonterad.

4. När du pumpar, sitt eller stå upprätt, ligg inte ner.

Rengöring och sterilisering

***Icke-tvättbara delar:**



Pumpmotor

***Tvättbara delar:**



Mjölkuppsamlare



Fläns



Membran



Länkare



Ventil

Vi rekommenderar att du använder tvålatten (40-60°C) för att rengöra tvättbara delar i 3-5 minuter.

Använd kokande vatten/ånga/steriliseringskstrull för sterilisering, med en temperatur under 100 °C (212 °F). Koka och sterilisera delarna mellan 5-10 minuter.

*Det rekommenderas att inte sterilisera dina bröstpumpstillbehör i en mikrovågsugn, eftersom detta förkortar tillbehörens livslängd.

Tips:

- Den förväntade livslängden för de tvättbara delarna är en till tre månader. Det rekommenderas att byta ut de tvättbara delarna efter långtidsförvaring eller innan du pumpar till ditt nästa barn.
- Bröstpumpen stängs av automatiskt efter att ha pumpat i 30 minuter. Om irritation eller obehag uppstår, avbryt användningen och kontakta en sjukvårdsgivare.

Kontakta oss via email om du har några frågor.

support@momcozy.com

150mm