




momcozy Mobile Flow™ Stručný průvodce

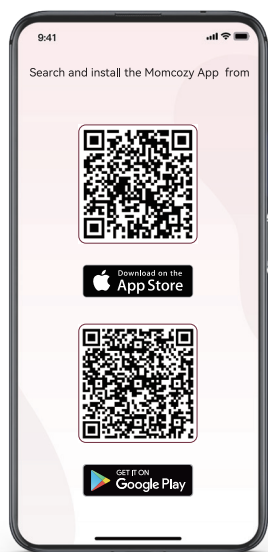



Krok 1:

Pro začátek vyhledejte aplikaci Momcozy v obchodě s aplikacemi svého chytrého telefonu, buď v obchodě Google Play, nebo v App Store. Aplikace je kompatibilní se systémy iOS 13 a Android 8.0 nebo vyššími verzemi. Upozorňujeme, že připojení aplikace přes Bluetooth může záviset na chytrém telefonu připojeném k zařízení.

1

Krok 2:


Po instalaci zaregistrujte svůj účet. Pokud máte účet Momcozy, přihlaste se.

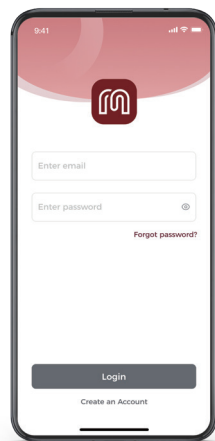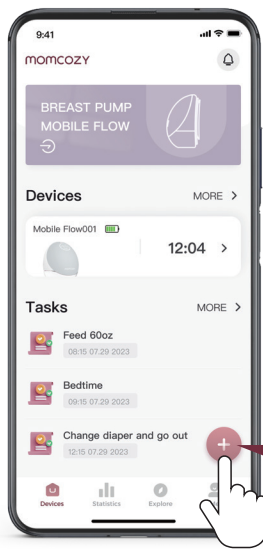

Krok 3:

Ujistěte se, že jste na telefonu zapnuli Bluetooth a odsávačka mateřského mléka by měla zůstat napájena. Přidejte zařízení prostřednictvím tlačítka „+“ a „Zařízení“.

2

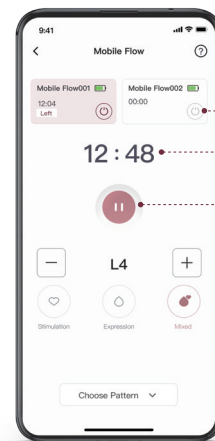

Vyp

Doba provozu


Pauza/Pokračovat

Úroveň odsávání

Volba režimu


Krok 4:

Po připojení použijte aplikaci k ovládání odsávачky mateřského mléka.

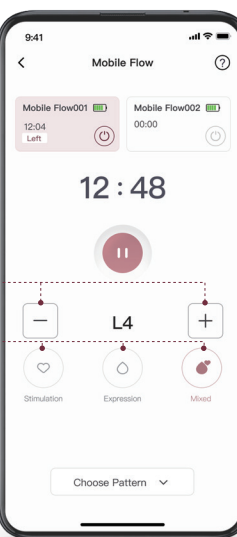


3


Pokyny pro instalaci

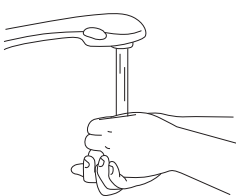


1
Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.

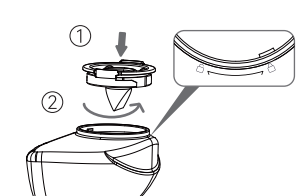

2
Sestavte sběrač na mléko otáčením ve směru ikony zamknutí v ústí láhve.

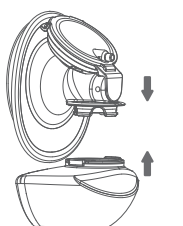

3
Připevněte přírubu k ústí láhve a sestavte ji se sběrnou nádobkou na mléko.

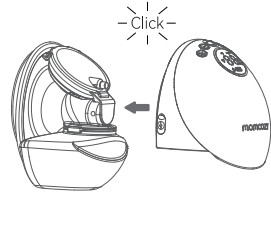

4
Sestavte motor a přírubu.

4


Čištění a sterilizace

*Neomyvatelné díly

Motor odsávačky



*Omyvatelné díly

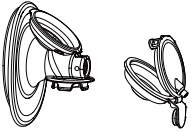

Příruba Membrána



Sběrná nádržka na mléko Ventil

Čištění a sterilizace omyvatelných dílů
1. Čistěte mýdlovou vodou (40–60 °C) po dobu 3–5 minut.
2. Ke sterilizaci použijte vroucí vodu/paru/sterilizační nádobu. Je zapotřebí teplota 100 °C (212 °F) po dobu 5–10 minut.

* Nedoporučuje se části odsávačky sterilizovat v mikrovlnné troubě ani v UV sterilizátoru. Vysoká teplota (> 110 °C) zkrátí jejich životnost a způsobí ohrožení bezpečnosti.

V případě jakýchkoli problémů s produktem se podívejte na video s návodem k obsluze, kde naleznete další řešení. Naskenováním níže uvedeného QR kódu získáte přístup k videu s návodem k obsluze.



5

Indikátor baterie



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Zobrazení baterie | 2 Připomenutí proti přetečení mléka |
| 3 Dlouhé stisknutí: Zapnutí / vypnutí | 4 Volba režimu |
| Krátké stisknutí: Pauza / Pokračovat | |
| 5 Přepínání směru | 6 Indikátor Bluetooth |
| 7 Ukazatel doby provozu / úrovně sání | 8 Indikátor režimu |
| 9 Zvýšení / Snížení | |

Tipy

- 1) Předpokládána životnost omyvatelných dílů je 1–3 měsíce. Doporučujeme vyměnit omyvatelné části po dlouhodobém skladování nebo před odsáváním pro další dítě.
- 2) Po 30 minutách po odsávání se odsávačka automaticky vypne.
- 3) Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemným pocitům, přerušete prstem těsnění mezi přírubou a prsní tkání, přestaňte jej používat a vyhledejte lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem.
support@momcozy.com

6