

ACTIVESHOP®


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Електрически козметичен стол Azzurro 708AS 3 мотора



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

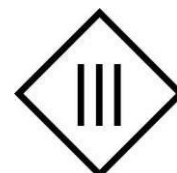


Преди да използвате козметичния стол, прочетете инструкциите и изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени.
2. Уверете се, че столът е в изправност.
3. Поставете козметичния стол в зоната, където ще се използва.
4. Включете щепсела на електрическата мрежа в подходящ контакт.

Забележка! Деца и неопитни лица не трябва да използват този уред. Децата трябва да бъдат под наблюдение и не трябва да играят в близост до козметичния стол.

Размери на уреда:

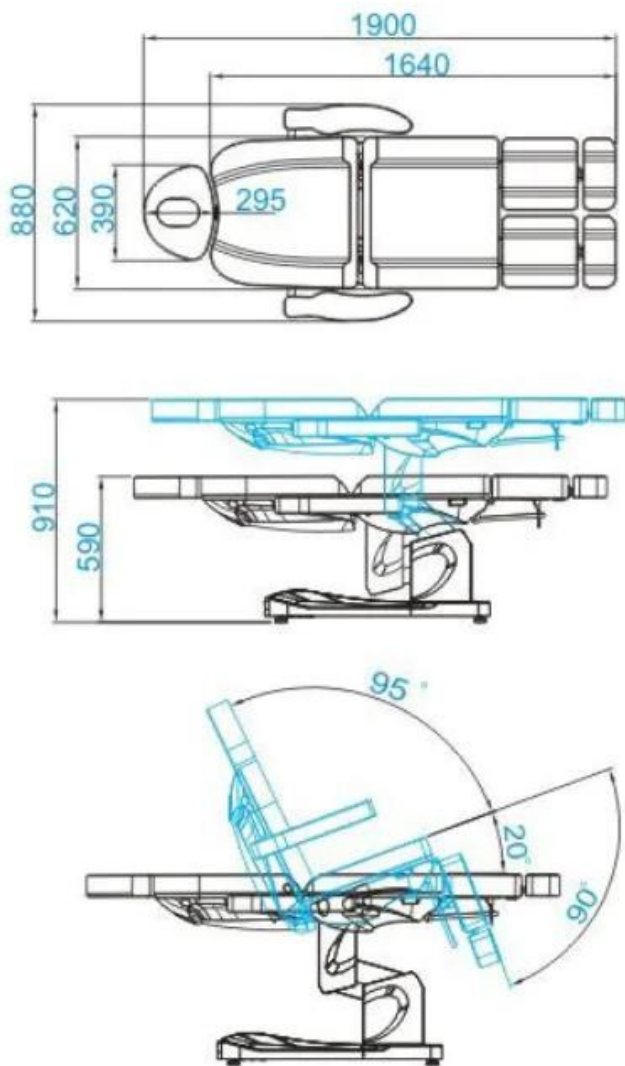

Максимално натоварване на стола: 140 кг.

Употреба на устройството:


Козметичният стол се регулира с помощта на дистанционно управление, с което може да се регулира положението на стола. Всяка поставка за крака се регулира отделно, което улеснява извършването на процедурата за педикюр в правилна позиция. Свържете захранващия кабел към външно захранване с напрежение 110V~240V.

Монтаж на облегалката за глава

За да инсталирате облегалката за глава, плъзнете я в подходящата междина в горната част на облегалката. Когато сте поставили облегалката за глава на правилната височина, затегнете копчето, така че облегалката за глава да се държи здраво. За да свалите облегалката за глава, отвийте леко копчето, спуснете облегалката за глава и затегнете копчето.


Монтаж на подлакътника

Плъзнете подлакътника в отвора, разположен отстрани на облегалката. Подлакътникът трябва да е здраво закрепен. Завъртете я надясно или наляво, така че да влезе правилно на мястото си.

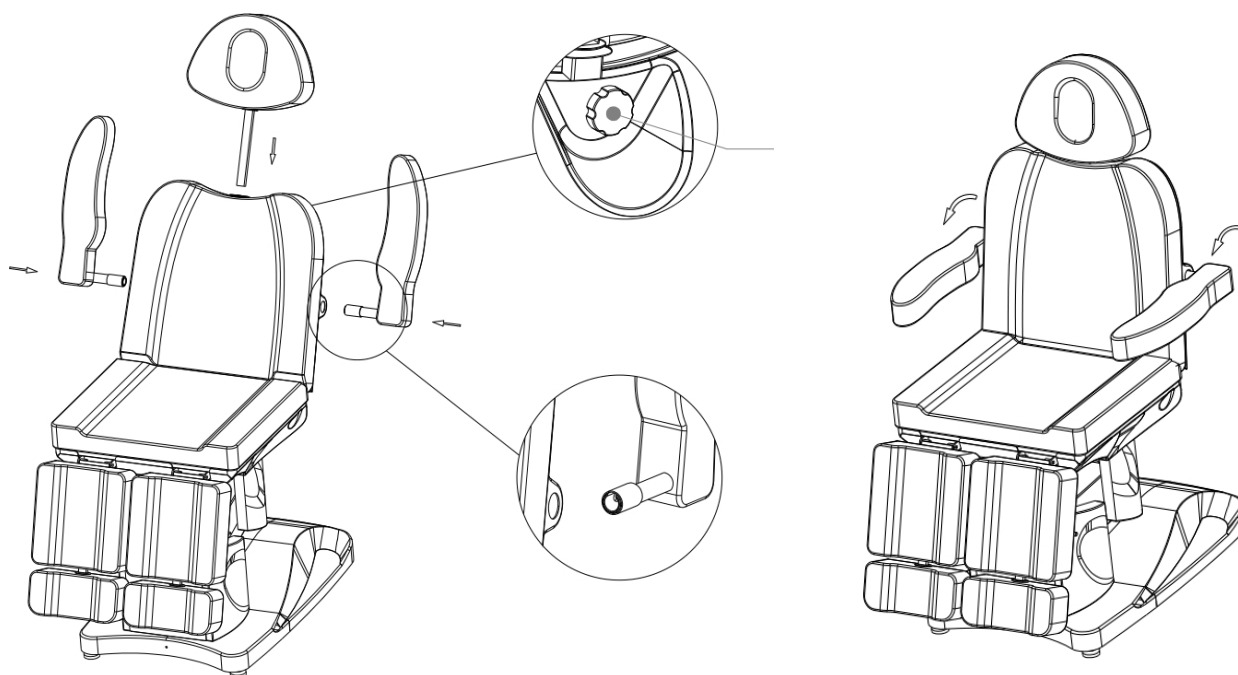


Функции на дистанционното управление:

1. Натиснете  или  за повдигане или спускане на седалката.
2. Натиснете  или  за регулиране на ъгъла на облегалката.
3. Натиснете  или  за регулиране на ъгъла на седалката.

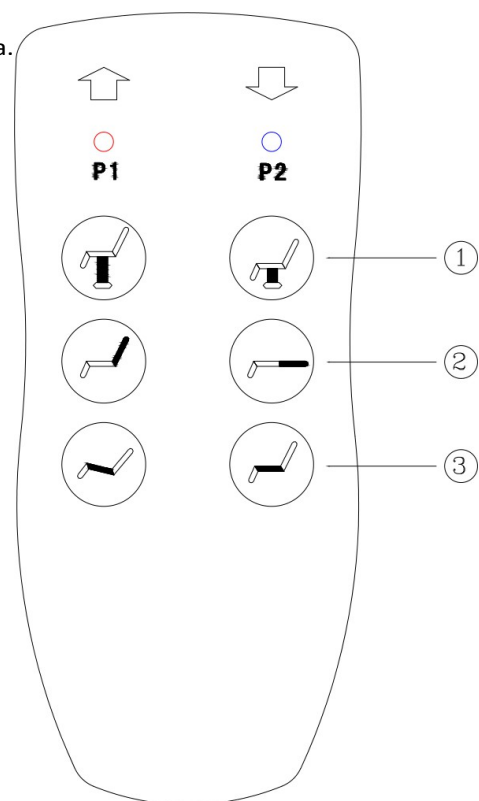


Регулиране на подложката за крака:

Всяка поставка за крака се регулира отделно с помощта на лост от долу. Издърпайте лоста, като по този начин повдигате или спускате опората за крака.

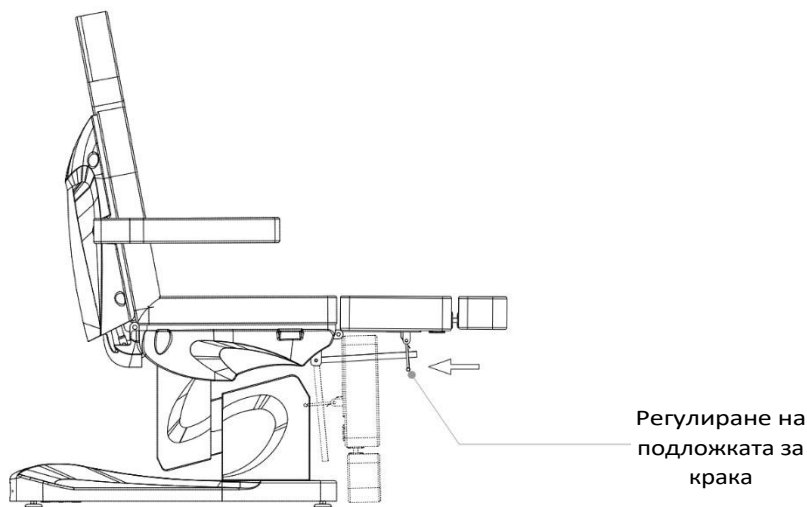

Разхлабете копчето от долната страна на поставката за крака и я удължете до желаната дължина, след което затегнете копчето.

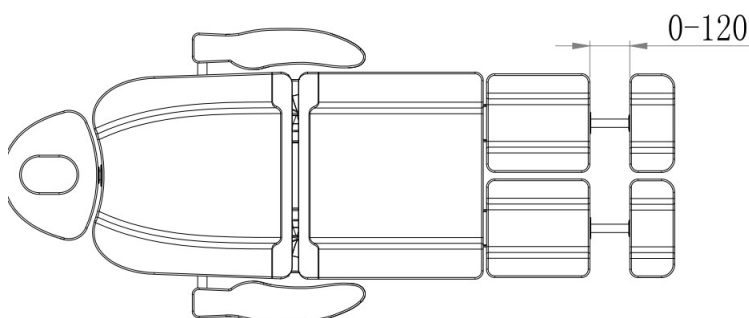

Почистване и дезинфекция на уреда:

- Изключете устройството от електрическата мрежа преди почистване.
- За да поддържате повърхността на стола в добро състояние, почиствайте я редовно. Не забравяйте да почиствате и дезинфекцирате стола след всяка употреба. Препоръчваме да извършвате цялостна дезинфекция веднъж месечно.

I Метални и пластмасови повърхности

- За да почистите металните и пластмасовите повърхности и органите за управление, избършете ги с влажна кърпа. Малка четка ще работи добре за почистване на труднодостъпни места или ъгли. Не използвайте твърде много течност за почистване на уреда. След това дезинфекцирайте уреда с подходяща течност.

II Повърхности от неръждаема стомана

- Почистването с мек разтвор на почистващ препарат е най-подходящо. Амонякът и повечето разтворители могат да се използват за отстраняване на силни петна. Избягвайте разтвори на хлорна основа.

III Боядисани или хромирани метални повърхности

- Не използвайте водни струи (душове, оръдия за вода под високо налягане) за почистване.
- Не почиствайте при високи температури и висока влажност и не излагайте уреда на условия, които могат да доведат до замърсяване с течности.
- Не използвайте разтворители или киселини за почистване.

IV Повърхност на стола

– Избършете равномерно повърхността на стола със специален препарат за почистване на кожа и след това я избършете с чиста, мека кърпа.

Поддръжка

Преди поддръжка уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.

1. Ремонтите трябва да се извършват от опитен и упълномощен от производителя персонал. Извършването на ремонти от неоторизиран персонал може да доведе до нараняване или повреда на уреда, за които производителят не носи отговорност.
2. Използвайте само оригинални резервни части, одобрени от производителя.
3. Не използвайте електрическия козметичен стол или аксесоарите, ако те не работят правилно. Всички дейности по поддръжката и ремонта трябва да се документират.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Метод на решение
Бутоните на дистанционното управление не реагират.	1. Превключвателят за управление Захранването се задейства или не се задейства. 2. Възможно е седалката вече да е в максимално положение. 3. Уредът не е включен към електрическата мрежа.	1. Опитайте да го включите и изключите. 2. Проверете дали другите бутони работят. 3. Проверете дали устройството е включено в мрежата. Ако не е, включете го.
Устройството издава странни звуци при повдигане и спускане.	Разхлабен винт.	Проверете и затегнете всички винтове.
Светлината не се включва, въпреки че превключвателят е включен.	Прегорял предпазител.	Сменете предпазителя.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последствия по време на лечението.
2. Уредът не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тази инструкция за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не монтирайте и не работете с устройството в близост до течности, на мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не попадат течности.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Sp. z o.o., в следните случаи:
а) в уреда е попаднала течност; б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.

9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).

10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.

2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с това рискове.

3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и да се предава в следните събирателни пунктове

пунктове за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и поради това трябва да се изпращат за преработка. Поради това те трябва да се предават на съответните пунктове за събиране, както и на "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.