



QUICK START GUIDE

AUTOMATIC DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

REF MDS5001

Please watch the following User Video on your computer by typing in the link <https://www.medline.com/sku/item/MDPMD5001>



QUICK START GUIDE


AUTOMATIC DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

REF MDS5001

Please watch the following User Video on your computer by typing in the link <https://www.medline.com/sku/item/MDPMD5001>

Step 1 – Install Batteries

- A) Pull battery cover off.
- B) Install four (4) “AA” batteries.

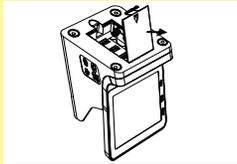


Step 2 – Set Date and Time

- A) Hold down SET until the year starts flashing in the top right corner.
- B) Release the SET button.
- C) Press MEM repeatedly to change the year.
- D) Press SET once to change to month selection. Press MEM repeatedly to change the month while the number is still flashing.
- E) Repeat step D three (3) times for the day, hour, and minute.
- F) Press SET once to change to Talking Language selection. Press MEM repeatedly to switch between SP OF (Off), SP 01 (English), and SP 02 (Spanish).
- G) Press START/STOP once.


Step 3 – Cuff Placement

- A) Place cuff on left arm at heart level (1 in. above elbow joint).
- B) Align tubing with middle finger to ensure placement of Artery Mark (Ø) over the brachial artery.
- C) Plug the air tube connector into the air tube socket on the left side of the monitor.

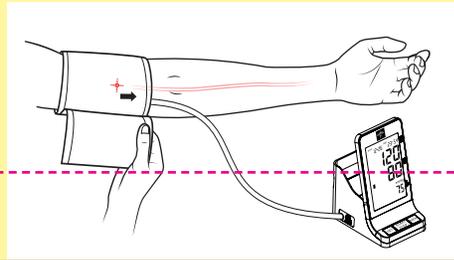


Step 4 – Body Placement

- A) Sit with feet flat on floor.
- B) Place arm, palm-up on flat surface.
- C) Ensure cuff is level with heart.

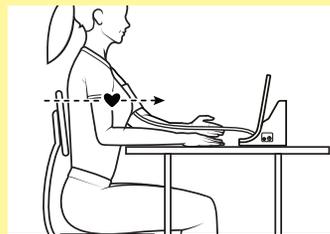

Step 5 - Begin Measurement

- A) Press START/STOP to turn monitor on and automatically begin measurement.

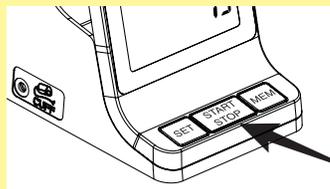

Troubleshooting Guide

1) Does Not Turn On

- Check that batteries are inserted.
- Check that the battery polarities (+ and - symbols) are positioned in the correct direction.
- Try inserting new batteries.

2) Inaccurate Reading*

- Refrain from eating, smoking and drinking (especially alcoholic beverages) before a measurement. These activities can affect your blood pressure.
- Check the cuff for a snug fit that can fit two fingers between the cuff and your upper arm.
- Ensure that you are not moving, speaking or repositioning during measurement.
- If taking multiple measurements, ensure you are waiting at least 5 minutes between readings.

3) Inflation Problem

- Ensure the air tube connector is fully plugged into the air tube socket on the left side of the monitor.
- Ensure that cuff is snug enough to where it will not slide up or down the arm.
- Confirm that you are remaining still during measurements.
- Ensure the cuff is fully deflated before taking a measurement.
- Make sure cuff hose remains straight and unknicked during measurement.

*Other things can affect blood pressure values besides those listed here. **IMPORTANT!**

You can STOP the inflation or deflation of the cuff at any time by pressing the START/STOP button.

Please see User Manual for more details.

If you have any questions or are experiencing difficulties, please call the Medline Service Center at 1-800-MEDLINE (1-800-633-5463). V1 RJ20DGA



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO DIGITAL


REF MDS5001

Mire el siguiente video para el usuario escribiendo el enlace

<https://www.medline.com/sku/item/MDPMD5001> en su computadora

Paso 1 – Instale las baterías

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías.
- Instale cuatro (4) baterías “AA”.

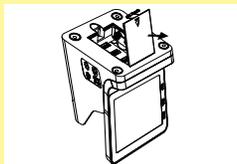


Paso 2 – Ajuste de fecha y hora

- Mantenga pulsado el botón SET hasta que el año comience a destellar en la esquina superior derecha.
- Suelte el botón SET.
- Pulse repetidamente el botón MEM (MEMORIA) para cambiar el año.
- Pulse el botón SET una vez para cambiar la selección de mes. Pulse repetidamente el botón MEM para cambiar el mes mientras el número sigue destellando.
- Repita el paso D tres (3) veces para el día, la hora y el minuto.
- Pulse el botón SET una vez para cambiar la selección de idioma hablado. Pulse repetidamente el botón MEM para cambiar entre SP_0F (Apagado), SP_01 (Inglés) y SP_02 (Español).
- Pulse el botón START/STOP (INICIAR/PARAR) una vez.


Paso 5 - Inicie la medición

- Pulse START/STOP (INICIAR/PARAR) para encender el monitor e iniciar automáticamente la medición.

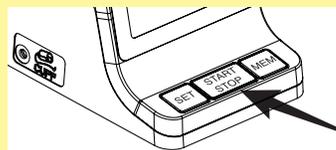


Paso 3 – Colocación del manguito

- Coloque el manguito en el brazo izquierdo a la altura del corazón (1 pulgada por encima de la articulación del codo).
- Alinee el tubo con el dedo medio para asegurarse de que el marcador arterial (Ø) se encuentre sobre la arteria braquial.
- Enchufe el conector del tubo de aire en el orificio de acceso del tubo de aire ubicado en el lado izquierdo del monitor.

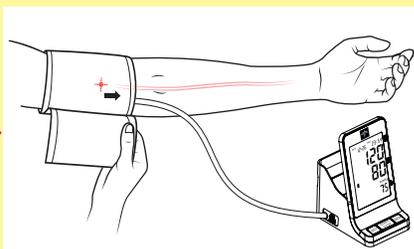

Paso 4 – Ubicación del cuerpo

- Siéntese con los pies planos en el suelo.
- Coloque el brazo con la palma de la mano hacia arriba sobre una superficie plana.
- Cerciórese de que el manguito esté a la altura del corazón.

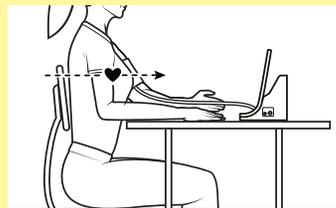

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO DIGITAL

REF MDS5001

Mire el siguiente video para el usuario escribiendo el enlace

<https://www.medline.com/sku/item/MDPMD5001> en su computadora

Guía para la solución de problemas

1) No se enciende

- Verifique que las baterías estén instaladas.
- Verifique que las polaridades de las baterías (símbolos + y -) estén ubicadas en la dirección correcta.
- Intente nuevamente con baterías nuevas.

2) Lecturas inexactas*

- Absténgase de comer, fumar y beber (sobre todo bebidas alcohólicas) antes de una medición, ya que estas actividades pueden afectar su presión arterial.
- Verifique que el manguito calce ajustadamente de modo que quepan dos dedos entre el manguito y la parte superior del brazo.
- Cerciórese de no moverse, hablar ni cambiar de posición durante la medición.
- Si toma varias mediciones, cerciórese de esperar al menos 5 minutos entre las lecturas.

3) Problema de inflado

- Cerciórese de que el conector del tubo de aire esté completamente enchufado en el orificio de acceso del tubo de aire ubicado en el lado izquierdo del monitor.
- Cerciórese de que el manguito esté lo suficientemente ajustado de modo que no se deslice hacia arriba o hacia abajo.
- Asegúrese de permanecer quieto durante las mediciones.
- Cerciórese de que el manguito esté completamente desinflado antes de realizar una medición.
- Cerciórese de que la manguera del manguito permanezca recta y sin doblarse durante la medición.

*Además de lo enumerado aquí hay otras situaciones que pueden afectar los valores de presión arterial.

¡IMPORTANTE!

Puede DETENER el inflado o desinflado del manguito en cualquier momento pulsando el botón START/STOP.

En el manual del usuario encontrará más detalles.

Si tiene alguna pregunta o tiene dificultades, llame al Centro de Servicio Técnico de Medline al 1-800-MEDLINE (1-800-633-5463). V1 RJ20DGA