

正面

120mm

momcozy

Nositelná odsávačka mateřského mléka


Pokyny pro instalaci (další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce)

*Před instalací se ujistěte, že máte čisté ruce.

1. Připojte membránu a ventil k propojce.




2. Připojte sestavený propojku ke sběrné nádobce na mléko.

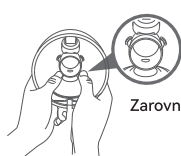


Zarovnejte „ucho“ s drážkou

3. Připojte přírubu ke sběrné nádobce na mléko.

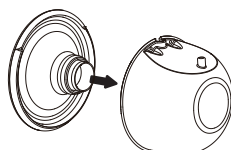


4. Sestavte odsávačku a sběrnou nádobku na mléko.

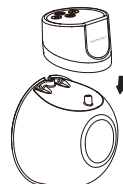

Nalévání mléka

Při nalévání mléka držte sběrnou nádobu na mléko ve správném směru.

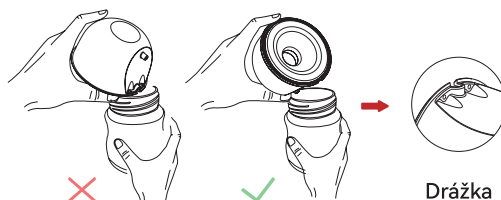

Drážka


Pokud se během instalace nebo odsávání objeví problémy s výrobkem, podívejte se na video s řešením problémů. Přístup k videu s řešením potíží získáte naskenováním QR kódu.



反面

Jak zabránit úniku mléka a tipy pro odsávání většího množství mateřského mléka

1. Předkloňte se dopředu, abyste se ujistili, že je bradavka vycentrovaná v tunelu příruby. Odsávačka by měla být pevně přiložena k vašemu prsu.

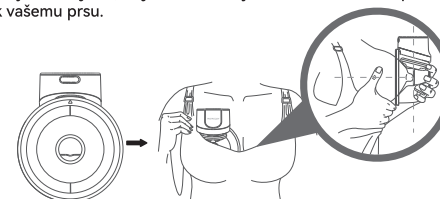

2. Doporučujeme uživatelkám nosit plně zakrývající kojící podprsenku, aby se vytvořilo těsné spojení mezi prsy a přírubou.
3. Ujistěte se, že je odsávačka dobře sestavena.
4. Při odsávání sedněte nebo stůjte rovně, neležte.

Čištění a sterilizace

***Neomyvatelné díly:**



Motor odsávačky

***Omyvatelné díly:**



Sběrná nádržka na mléko



Příruba



Membrána



Propojka



Ventil

K čištění omyvatelných dílů doporučujeme používat mýdlovou vodu (40–60 °C) po dobu 3–5 minut. Ke sterilizaci používejte vroucí vodu / páru / sterilizační nádobu, přičemž teplota nesmí překročit 100 °C (212 °F). Díly převařte a sterilizujte během 5–10 minut.

*Nedoporučuje se sterilizovat příslušenství odsávačky mateřského mléka v mikrovlnné troubě, což zkrátí životnost příslušenství.

Tipy:

- Předpokládaná životnost omyvatelných dílů je 1–3 měsíce. Doporučujeme vyměnit omyvatelné části po dlouhodobém skladování nebo před odsáváním pro další dítě.
- Po 30 minutách po odsávání se odsávačka automaticky vypne. Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemným pocitům, přestaňte odsávačku používat a vyhledejte lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem.

support@momcozy.com

150mm