

正面

120mm

momcozy

Draagbare borstkolf

Installatierichtlijnen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor nadere informatie)

*Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn alvorens de kolf te installeren.

1. Verbind het membraan en de klep met het verbindingstuk.




2. Verbind het gemonteerde verbindingstuk met de melkverzamelaar.




Laat het "oortje" overeenkomen met de groef

3. Verbind de flens met de melkverzamelaar.

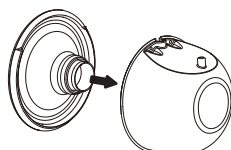


4. Monteer de kolf en de melkverzamelaar.

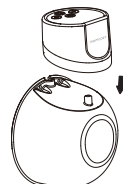

Melk schenken

Houd de moedermelkcollector in de juiste richting als u melk schenkt.

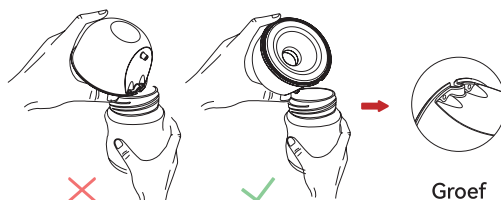

Groef


Raadpleeg bij problemen met het product tijdens de installatie of kolfsessie de video voor probleemoplossing. Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de video voor probleemoplossing.



反面

Tips om melkverlies te voorkomen en meer moedermelk af te kolven

1. Buig naar voren om ervoor te zorgen dat uw tepel zich in het midden van het flenskanaal bevindt. De borstkolf moet stevig aan uw borst liggen.

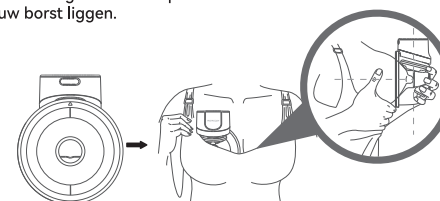

2. We raden gebruikers aan een volledig dekkende borstvoedingsbeha te dragen die een goede afsluiting vormt tussen de borsten en de flens.
3. Zorg ervoor dat de kolf goed gemonteerd is.
4. Tijdens het afkolven dient u rechtop te zitten of te staan, en niet te liggen.

Reiniging en sterilisatie

***Niet-afwasbare onderdelen:**

***Afwasbare onderdelen:**



Kolfmotor



Melkverzamelaar



Flens



Membraan



Verbindingsstuk



Klep

Wij bevelen aan zeepwater (40-60°C) te gebruiken om de afwasbare onderdelen gedurende 3-5 minuten te reinigen.

Gebruik om te steriliseren kokend water/stoom/sterilisatiepan, bij een temperatuur hoger dan 100 °C (212 °F). Kook en steriliseer de onderdelen binnen 5-10 minuten.

*Het wordt aanbevolen dat u kolfonderdelen niet in een microgolfoven of UV-sterilisator steriliseert. Dit zal de gebruiksduur van de accessoires verkorten.

Tips:

- De verwachte gebruiksduur van de afwasbare onderdelen is 1 tot 3 maanden. Het wordt aanbevolen om de afwasbare onderdelen te vervangen als u de kolf gedurende een lange periode hebt bewaard, of voordat u gaat kolven voor uw volgende kind.
- De borstkolf schakelt automatisch uit na het afkolven gedurende 30 minuten. Als irritatie of ongemak optreedt, dient u met het gebruik van het apparaat te stoppen en een zorgverlener te raadplegen.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

support@momcozy.com

150mm