

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Giovanni D-21 vapofoon koos luubilambiga



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine



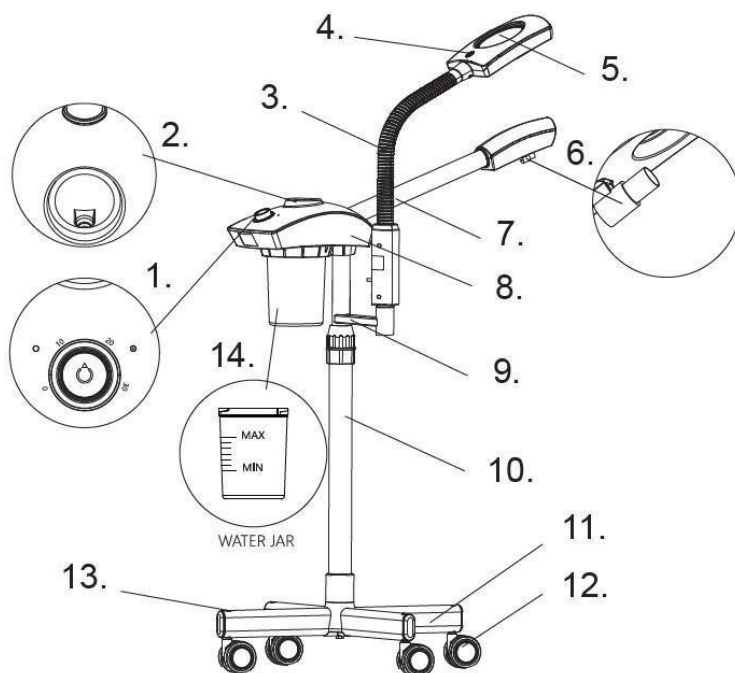
Giovanni D-20 vaposoon. Multifunktsionaalne vaposoon sooja auru ja osooniga. Seda iseloomustab kvaliteetne töötlus. Intuiitiivne kasutada, pakub suurepärase võimaluse töötada igas ilusalongis. Kerge, funktsionaalne ja stabiilse stendiga. Teleskoopvarras võimaldab kiiret reguleerimist. Vapozoon on seatud reguleeritava kõrgusega statiivile.

SEADME FUNKTSIOON:

1. Desinfitseerib nahka
2. Laiendab poore
3. Lihtsustab mustpeade ja surnud naha eemaldamist tänu auru tungimisele sügavale naha sisse
4. Lihtsustab toksiinide eritumist
5. Niisutab ja värskendab nahka.
6. Stimuleerib naha vereringet
7. Parandab oluliselt massaažitulemusi

SPETSIFIKATSIOONID:

1. Sisse/välja lüliti ja lüliti
2. Taimer
3. Auk/täitematerjal
4. Liblikkaelatoru
5. Valguse sisse/välja lüliti
6. Suurendusläätis x3
7. Kuuma auru eraldav otsik
8. Pihustustoru
9. Põhikorpus
9. Teleskoopjalg (ülemine post; 2in1)
10. Teleskoopjalg (alumine post)
9. Alus
10. Rattad
13. Kaaned
14. Veemahuti



KASUTUSJUHE:

1. Asetage seade stabiilsele, tasasele pinnale.
2. Kontrollige, et kuuma vee tihend oleks pinguldatud. Täitke veetaset, kuni see läheneb MAX-tasemele.
3. Seadke taimer nupu abil seadme soovitud tööaeg (0 kuni 30 minutit).
4. Lülitage seade sisse, vajutades sisse/välja nuppu. Seade hakkab vett soojendama, samal ajal süttib UV-valgus. Aur hakkab pihustama umbes 5 minutit pärast vee keetmist. Aeg võib varieeruda sõltuvalt veekogusest.
5. UV-valgustust saab reguleerida individuaalselt. Vajutage sisse/välja nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all, UV-valgus lülitub sisse või välja.
6. Kui aur hakkab väljuma, tooge seade kliendi näole lähemale. Ideaalne kaugus pihusti ja kliendi näo vahel on vähemalt 20 cm.
7. Kui seadet ei kasutata pikka aega, valage vesi välja ja kuivatage mahuti.

TÄHELEPANU!!!

Ärge viige seadet kliendi näole või kehale liiga lähedale. On oht tõsiste nahapõletuste tekkeks.

HOIATUS!

Ärge kallutage ega kallutage seadet selle töötamise ajal. Ärge kasutage seadet, kui selles ei ole vett.

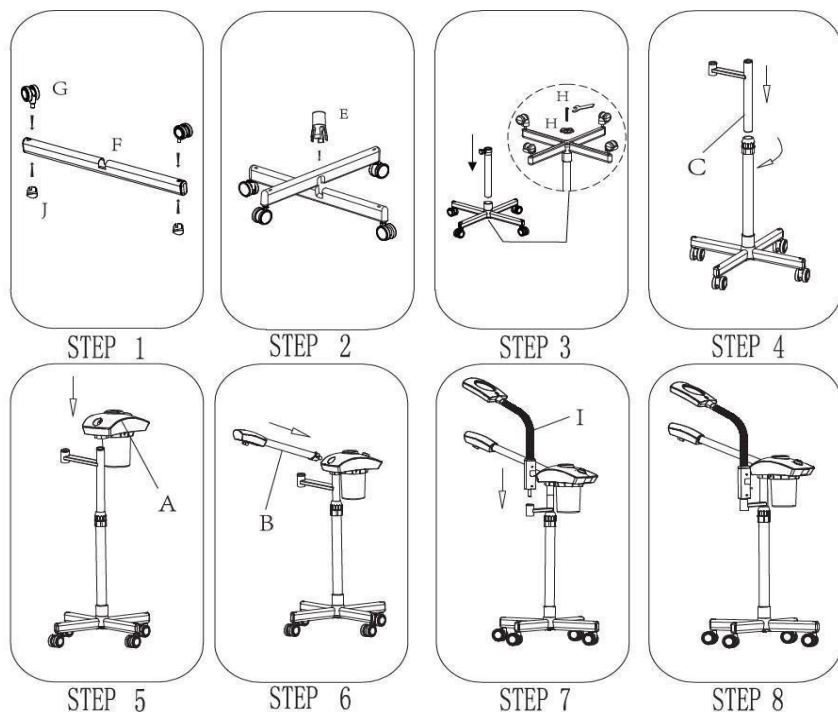
HOIATUS!!!

Ärge valage veepaaki eeterlikke õlisid ega muid vedelikke peale vee. See võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

SOOVIKUTUSED:

1. Ärge kunagi jätke ühendatud seadet järelvalveta. Tihe järelvalve on vajalik, kui see seadet kasutavad lapsed või puuetega inimesed, nende peal või läheduses.
2. Kasutage seadet kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
3. Ärge kunagi kasutage seda seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud.
4. Ärge kunagi kasutage seadet magamise ajal.
5. Kasutage seadet ainult tasasel pinnal.
6. Ärge kunagi kasutage seadet liiga lähedal nahale, esineb põletusoht.
7. Ärge lisage mahutis olevale veele eeterlikke õlisid ega muid lisandeid. Vastasel juhul võib see kahjustada.
8. Ärge kasutage seadet, kui selles ei ole vett.
9. Ärge valage veemahutisse mingeid lisandeid.
10. Puhastage veepaaki regulaarselt. Ärge unustage enne puhastamist seadet välja lülitada ja vooluvõrgust välja tõmmata.
11. Ärge puudutage kuuma vee mahutit.
12. Ärge puudutage veepaaki, kui seade on sisse lülitatud.
13. Kui olete lõpetanud, valage vesi välja ja kuivatage paak.

SEADME PAIGALDAMINE (järgige alltoodud skeemi):



ETTEVAATUST!!!

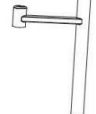
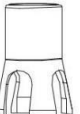
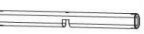
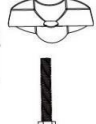
Ärge kasutage läätse puhastamiseks jämedat lappi. Seda tehes tegemine võib läätse kriimustada ja vähendada selle selgust.

HOIATUS!!!

Ärge pange kaitsmata silmi otsese LED-valguse kätte, see võib põhjustada ebamugavustunnet või kahjustada nägemist

HOIATUS!!!

Veemahutit tuleb regulaarselt puhastada. Enne veepaagi eemaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

A:	B:	C:	D:	E:
1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
				
F:	G:	H:	I:	J:
2PCS	4PCS	1PCS	1PCS	4PCS
				

Seadme kõrgust saab reguleerida vahemikus 78-95 cm, mis võimaldab seadme paigutamist õigele kõrgusele, et saavutada maksimaalne mugavus nii praktiseerijale kui ka kliendile. LED-luuppi ja vapofoonipihustit saab keerata, et suurendada ravitoime ulatust ja ravivälja.

Tehnilised andmed

Pinge	120-220V 50/60Hz
Võimsus	750W
Lampide heledus	1000-1600 Lx
Lambi võimsus	9.5W

Seadme mõõtmed:



TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kahjustada, kui see kukub kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) hoida üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult või võib isegi läbi põleda.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud asutuse poole. teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõista sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel ei ole piisavalt teadmisi kasutavad seadet selle läheduses.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ

elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kohta Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-)20°C kuni (+)50°C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskuse ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+)10°C kuni (+)40°C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

