


Išmanioji rankovė

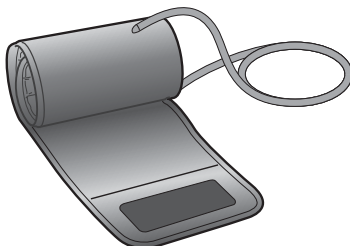

## HEM-FL31


„OMRON“ kraujospūdžio matuoklio rankovė

• *Naudojimo instrukcija*

2

LT

Išleidimo data: 2022-12-14

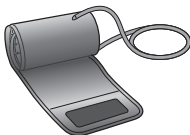



Ačiū, kad perkate „OMRON“ rankovę „HEM-FL31“. Ši rankovė yra skirta rankai, kurios apimtis 22–42 cm. Vadovaukitės kraujospūdžio matuoklio originalia naudojimo instrukcija.

**Dėl savo saugumo kruopščiai laikykitės šios naudojimo instrukcijos nurodymų. Šią naudojimo instrukciją išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ir ateityje. Dėl išsamesnės informacijos apie savo kraujospūdį KREIPKITĖS Į GYDYTOJĄ.**

**⚠ Atsargiai :** Nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios nevengiant naudotojui arba pacientui galima sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo sužeidimą, taip pat galima sugadinti prietaisą, kitą turtą.

- šią „OMRON“ rankovę galima prijungti prie įvairių „OMRON“ kraujospūdžio matuoklių. Ši rankovė veikia tik su „OMRON“ kraujospūdžio matuokliais, kurie suderinami su HEM-FL31, kaip nurodyta rankovės etiketėje, esančioje šalia oro tiekimo vamzdelio lizdo.
- Patikrinkite savo turimą gaminį, kokį kištuką turite naudoti. Prijungus netinkamą kištuką, gali atsirasti oro nuotėkis, o rodmenys būti neteisingi.
- Neplaukite ir nesušlapinkite rankovės.

## Naudojimo instrukcija

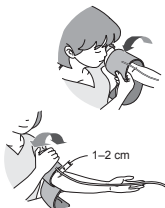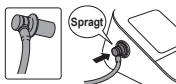

Nusivilkite prigludusius drabužius arba atraitokite prigludusią rankovę nuo kairiojo žasto. Nedėkite rankovės ant storų drabužių.

1. Tvirtai įkiškite oro tiekimo vamzdelio kištuką į lizdą.

Pastaba. Jei naudojate oro tiekimo vamzdelio kištuką, kaip kairėje pateiktame vaizde, būtinai įkiškite jį į oro tiekimo vamzdelio lizdą, kol spragtelės.

2. Uždėkite rankovę ant kairiojo žasto.

Apatinis rankovės kraštas turi būti 1–2 cm atstumu virš alkūnės lankio. Rankovę reikia užmaiti ant žasto taip, kad oro vamzdelis liestų jūsų ranką vidinėje pusėje.



### 3. Uždėję pritvirtinkite rankovės lipduku.

#### **Kraujospūdžio matavimas, rankovę uždėjus ant dešinės rankos**

Oro tiekimo vamzdelis bus jūsų alkūnės šone. Pasistenkite nedėti rankos ant oro tiekimo vamzdelio.

Pastaba: dešinės ir kairės rankos kraujospūdis gali skirtis, todėl kraujospūdžio reikšmės, išmatuotos rankovę uždėjus ant dešinės arba kairės rankos, taip pat gali skirtis. „OMRON“ rekomenduoja matuoti kraujospūdį, kiekvieną kartą rankovę dedant ant tos pačios rankos. Jei kraujospūdžio reikšmės, išmatuotos rankovę uždėjus ant abiejų rankų, labai skiriasi, pasitarkite su savo gydytoju, kurios rankos kraujospūdį matuoti.

## **Priežiūra**

- Rankovę valykite minkšta sausa šluoste arba minkšta šluoste, suvilgyta neutraliu plovikliu.
- Rankovei valyti nenaudokite benzino, skiediklių ar panašių tirpiklių.
- Nelaikykite rankovės vietose, kuriose yra aukšta temperatūra, didelis drėgnumas, tiesioginė saulės šviesa, dulkių arba korozinių medžiagų garų.
- Nesulenkite ar nespauskite oro tiekimo vamzdelio per stipriai.

LT



Apie visus rimtus su šiuo prietaisu susijusius incidentus praneškite gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kuriose esate įsikūrę, tarnybai.

Šis „OMRON“ gaminys pagamintas vadovaujantis griežta kokybės sistema, kurią parengė „OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.“, JAPONIJOJE.

## Specifikacija:

|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gaminio pavadinimas                                              | „OMRON“ kraujospūdžio matuoklio rankovė                                    |
| Modelis                                                          | HEM-FL31                                                                   |
| Rankos apimtis                                                   | 22–42 cm                                                                   |
| Rankovės matmenys                                                | Ne daugiau kaip 585 x 160 mm (nesulankstytas)                              |
| Rankovės spaudimo intervalas                                     | Spaudimas: nuo 0 iki 299 mmHg                                              |
| Tikslumas                                                        | Spaudimas: $\pm 3$ mmHg                                                    |
| Klasifikacija                                                    | I klasė                                                                    |
| Naudojimo sąlygos                                                | +10–+40 °C (50–104 °F)<br>15–90 % SD (nesikondensuojantis)<br>700–1060 hPa |
| Laikymo / transportavimo sąlygos                                 | -20–+60 °C (-4–140 °F)<br>10–95 % SD (nesikondensuojantis)<br>700–1060 hPa |
| Svoris                                                           | Ne daugiau nei 179 g                                                       |
| Pakuotės turinys                                                 | Rankovė, naudojimo instrukcija, oro tiekimo vamzdelio kištukai             |
| Patvarumo laikotarpis (tinkamumo naudoti laikotarpis), garantija | 1 metai                                                                    |

| Simbolių aprašai                                                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | CE žymėjimas                          |
|   | UKCA ženklėjimas                      |
|  | PARTIJOS numeris                      |
|  | Unikalasis prietaiso identifikatorius |
|  | Medicinos prietaisas                  |
|  | Temperatūros apribojimas              |
|  | Drėgnio apribojimas                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | Atmosferos slėgio apribojimas                                                     |
|                                                                                                                                                               | Su prietaisu suderintų rankovių identifikatorius                                  |
|                                                                                                                                                               | Kairės rankos rankovės uždėjimo indikatorius                                      |
|                                                                                                                                                               | Diapazono rodiklio ir žasto arterijos sulgiavimo vieta                            |
|                                                                                                                                                               | Arterijos žymė                                                                    |
|                                                                                                                                                               | Pagaminta nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso                                 |
|                                                                                                                                                               | Žasto apimtys diapazono indikatorius, padedantis išsirinkti tinkamą rankovės dydį |
|                                                                                                                                                               | Pagrindinio katalogo numeris:                                                     |
|                                                                                                                                                               | „Easy Cuff“                                                                       |
|                                                                                                                                                               | Išmanioji rankovė                                                                 |
|                                                                                                                                                               | Padidinta rankovė                                                                 |
|                                                                                                                                                                | „OMRON Healthcare“ Japonijoje technologija                                        |
|                                                                                                                                                               | Pagaminimo data                                                                   |
|                                                                                                                                                               | Naudotojas turi žiūrėti naudojimo instrukciją                                     |
|                                                                                                                                                              | Rankos apimtis                                                                    |
| Gaminio pagaminimo data yra įtraukta į partijos numerį, kurį rasite ant gaminio ir (arba) ant pardavimo pakuotės: pirmieji 4 skaitmenys reiškia pagaminimo metus, kiti du – pagaminimo mėnesį, o paskutiniai du skaitmenys – pagaminimo dieną. |                                                                                   |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamintojas</b><br> | <b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,<br>617-0002 JAPONIJA                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Atstovybė ES šalyse</b><br><div data-bbox="63 205 177 241"> <div>EC</div> <div>REP</div> </div>   | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,<br>NYDERLANDAI<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                            |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importuotojas ES</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gamybos įmonė</b>                                                                                 | <b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b><br>No.3 Song Jiang Road,<br>Economic and Technical Development Zone,<br>Dalian 116600 Liaoning, Kinijos Liaudies Respublika                                  |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dukterinės bendrovės</b>                                                                          | Importuotojas į<br>Jungtinę Karalystę<br>ir JK atsakingas<br>asmuo                                                                                                                         | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,<br>MK15 0DG, UK<br><a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a> |
|                                                                                                      | <b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /</b><br><b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br><a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a> |                                                                                                                                                                                              |

Pagaminta Kinijoje