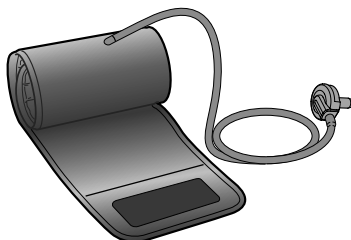


OMRON**Intelli Wrap-manchet****HEM-FL31**

• Brugervejledning

2**DA****All for Healthcare**

IM-HEM-FL31-E-01-08/2018

OMRON

HEM-FL31



Tak, fordi du har købt OMRON-manchet HEM-FL31. Armomkredsen for denne manchete er 22 til 42 cm. Se den originale brugsanvisning til dit blodtryksapparat.

Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din sikkerhed.

Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.

⚠ Forsigtig: Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller moderat tilskadekomst for brugeren eller patienten eller beskadige udstyret.

- Anvend kun det godkendte OMRON-blodtryksapparat til denne manchete.
- Brug den armmanchete, der er angivet på siden af produktet ved udtaget. Brug ikke en armmanchete af en anden type.
- Vask ikke manchetten, og gør den ikke våd.

Brugsanvisning



Fjern tætsiddende tøj eller oprullede ærmer fra venstre overarm.


Anbring ikke manchetten uden på tykt tøj.

1. Sæt luftstikket forsvarligt i udtaget.

2. Placer armmanchetten på venstre overarm.

Armmanchettens nederste kant skal sidde 1 til 2 cm over albuen. Manchetten skal placeres på overarmen med luftslangen nedad mod din hånd.

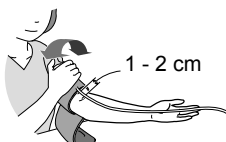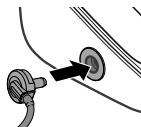

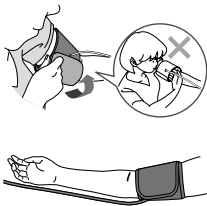

3. Sikker lukning med stofspænder.

Sådan foretager du målinger på højre arm

Luftslangen skal være på siden af albuen.

Pas på ikke at hvile armen på luftslangen.

Bemærk: Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de målte blodtryksværdier være forskellige. OMRON anbefaler, at du altid foretager målinger på samme arm. Hvis værdierne mellem armene afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingen.

Vedligeholdelse

- Brug en blød, tør klud eller en blød, fugtig klud og neutral sæbe til rengøring af armmanchetten.
- Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af armmanchetten.
- Opbevar ikke armmanchetten på steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv eller korrosive dampe.
- Luftslangen må ikke bøjes eller foldes for kraftigt.

DA



Denne manchette opfylder kravene i EF-direktiv 93/42/EØF (Direktiv om medicinsk udstyr) samt EN1060 Ikke-invasive blodtryksmålere Del 1: Generelle krav og Del 3: Tillægsbestemmelser for elektromekaniske blodtryksmålesystemer.

Dette OMRON-produkt er fremstillet i henhold til det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Specifikationer:

Produktbeskrivelse	Manchet til OMRON-blodtryksapparat
Model	HEM-FL31
Armomkreds	22 til 42 cm
Manchetmål	Højst 585 x 160 mm (ufoldet)
Manchettens trykområde	Tryk: 0 til 299 mmHg
Nøjagtighed	Tryk: ± 3 mmHg
Klassifikation	Klasse I
Anvendelsesforhold	+10 til +40°C 15 til 90% RH (ikke-kondenserende) 700 til 1060 hPa
Opbevarings-/transportforhold	-20 til +60°C 10 til 95% RH (ikke-kondenserende) 700 til 1060 hPa
Vægt	Højst 179 g
Pakkens indhold	Manchet, brugervejledning
Levetid, garanti	1 år

Symbolbeskrivelse	
	CE-mærke
	GOST-R-symbol
	Partnr.
	Temperaturbegrænsning
	Fugtighedsbegrænsning
	Begrænsning for atmosfærisk tryk
	Identifikator for manchetter, der er kompatible med apparatet
	Manchetplaceringsindikator for venstre arm
	Områdemærke og justeringsposition for arteria brachialis
	Arteriemærke

LATEX FREE	Indeholder ikke naturlig gummilatex
	Områdeindikator for armomkreds som hjælp til valg af korrekt manchettørrelse
	Referencekatalognummer
	Easy Cuff
	Intelli Wrap-manchet
	Comfort-manchet
	Teknologi og design, JAPAN
	Teknologi og kvalitet, JAPAN
	Produktionsdato
	Læs brugervejledningen
	Armomkreds
Produktionsdatoen på manchetten er indikeret i de første otte cifre i partinummeret, som er trykt på manchettens mærkat – "LOT YYYYMMDD*", hvor Y = produktionsår, M= produktionsmåned og D = produktionsdag.	

Producent 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-repræsentant EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com
Produktionsanlæg	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kina
Datterselskaber	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, TYSKLAND www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIG www.omron-healthcare.com
Distribueres af	MEDIQ DANMARK A/S Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby tlf. 36 37 92 00 www.mediqdanmark.dk

Fremstillet i Kina