

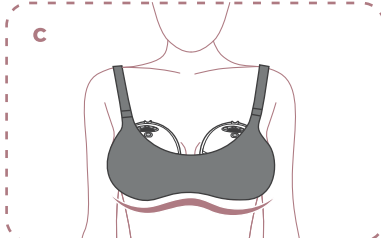
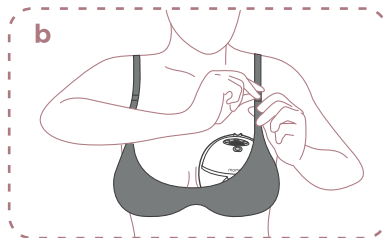
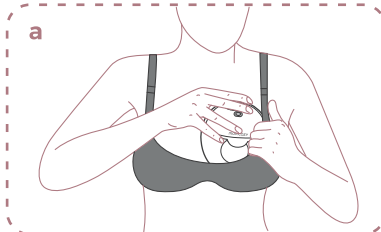


08

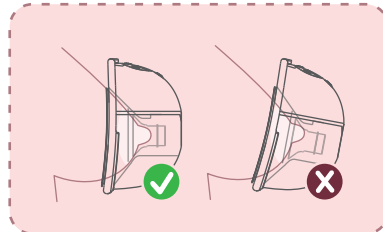

Należy upewnić się, że laktator ściśle przylega do piersi i nie ma żadnych szczelin.

09

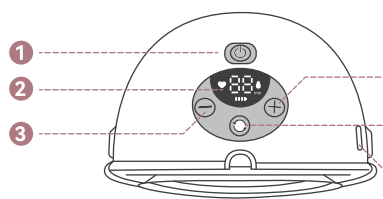

- 1 Włącz / Wyłącz / Wstrzymaj
- 2 Wyświetlacz LED
- 3 Zmniejsz
- 4 Zwiększ
- 5 Wybór trybu
- 6 Port ładowania

* Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć/wyłączyć.

* Naciśnij krótko , aby zatrzymać/kontynuować odciąganie pokarmu.

* Stymulacja: Krótkie i szybkie ssanie, aby mleko zaczęło płynąć.

* Odciąganie: Wolne ssanie w celu odciągnięcia mleka.

* Mieszane: Szybkie i krótkie ssanie, po którym następuje powolne i długie ssanie.

09


Niski poziom baterii
miga







Ładuje się
świeci pojedynczo



W pełni naładowany
świeci światłem ciągłym

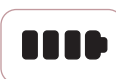

10

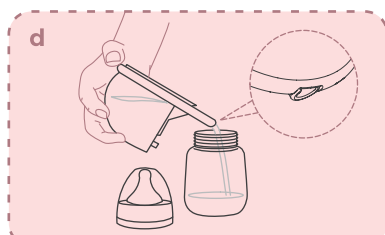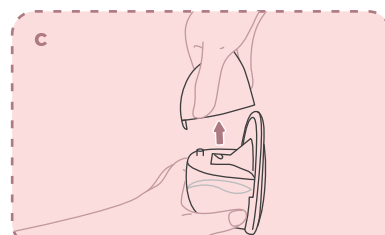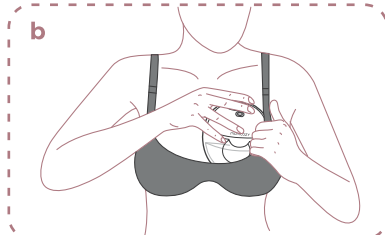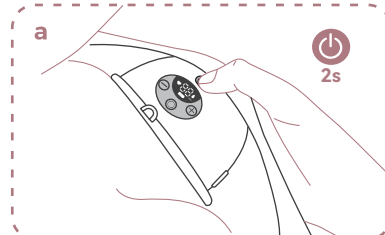

momcozy

www.momcozy.com

momcozy

Przenośny laktator

M5



Podręcznik użytkownika

Instrukcja postępowania




Wskazówki dotyczące pomiaru sutków



W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy.
support@momcozy.com

01

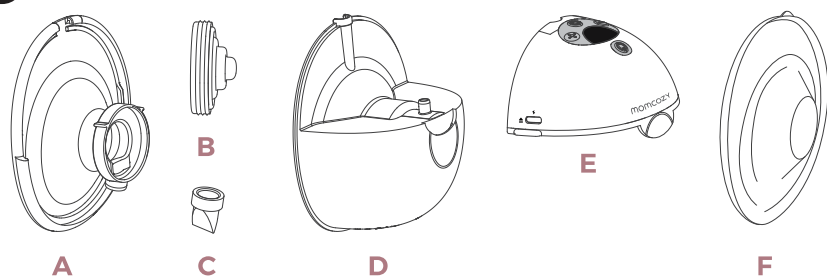

A Podwójnie uszczelniony kołnierz 24 mm

B Membrana


C Zawór

D Zbiornik na mleko (160 ml)


E Silnik pompy

F Osłona przeciwpływowa

02

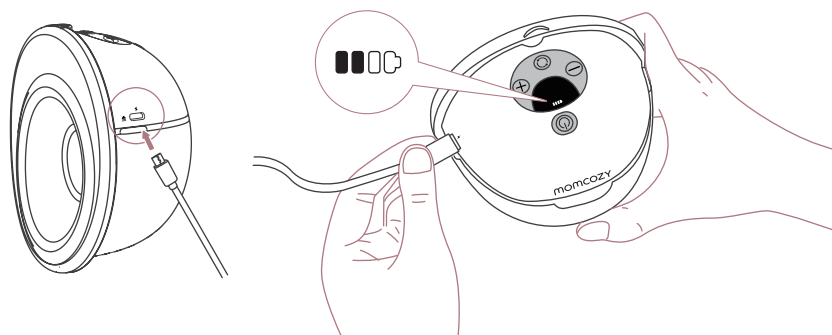


03

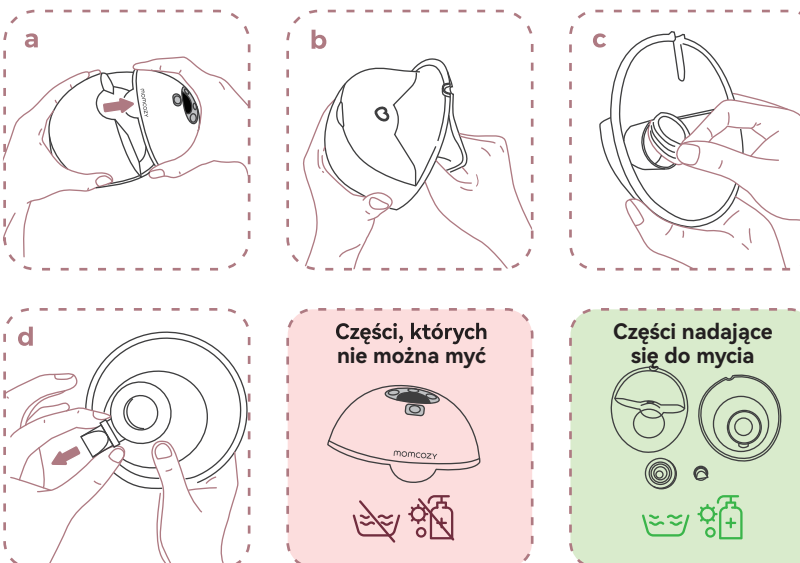


04

Części nadające się do mycia należy wymieniać co 1-3 miesiące

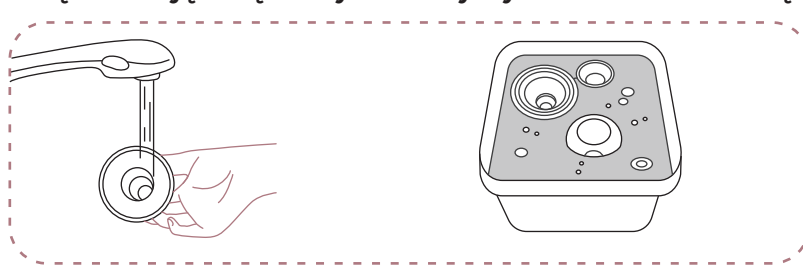

05

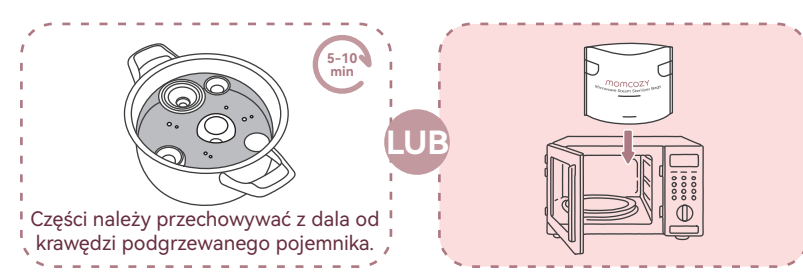


06

Pomiar sutka (nie należy pomijać tego kroku)



06

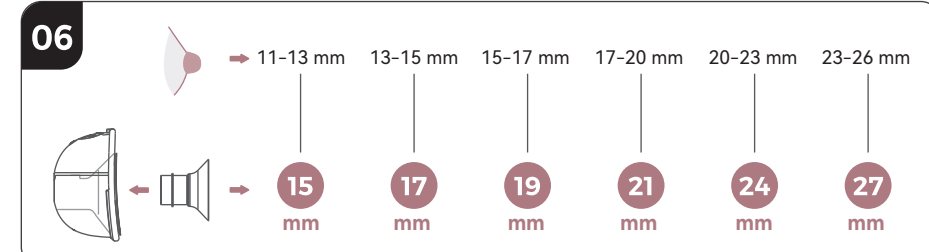

07

