




User Guide

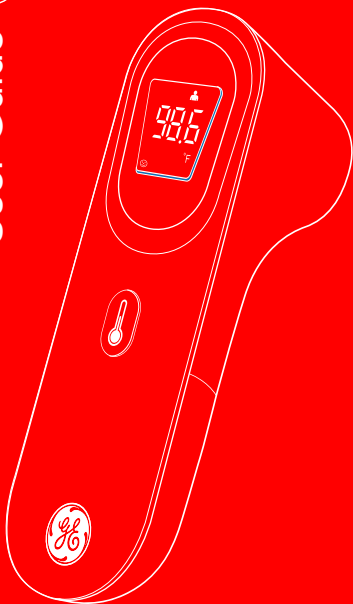

TM3000

TruVitals

Non-Touch 2-in-1 Thermometer

PDF



Thermomètre sans contact 2 en 1

Table of Contents

Introduction.....	1
Warnings / Safety Precautions.....	2
Intended Use.....	3
Features.....	3
Package Contents.....	3
Product Overview.....	4
Operation Instructions.....	6
Maintenance and Cleaning.....	12
Error Codes.....	13
Specifications.....	14
Warranty.....	15
Contact Us.....	16

FR

Introduction.....	17
Avertissement / Précautions de sécurité.....	18
Utilisation prévue.....	19
Caractéristiques.....	19
Contenu du pack.....	19
Présentation du produit.....	20
Instructions d'utilisation.....	22
Entretien et nettoyage.....	28
Codes d'erreur.....	29
Fiche technique.....	30
Garantie.....	31
Nous contacter.....	32

Truvitals

Non-Touch 2-in-1 Thermometer

User Guide

Thank you for purchasing the Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer. This User Guide is intended to provide you with guidelines to ensure that operation of this product is safe and does not pose risk to the user. Any use that does not conform to the guidelines described in this User Guide may void the limited warranty.

Please read all directions before using the product and retain this guide for reference. This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.

This product is covered by a limited one-year warranty. Coverage is subject to limits and exclusions. See warranty for details.



Safety Precautions

- **WARNING:** This device is not intended to be used in children under the age of 2.
- This thermometer is not meant to diagnose illness or take the place of your doctor. If you are experiencing symptoms of illness, contact your physician for further guidance.
- This thermometer is designed to measure your temperature and should not replace consulting your physician.
- Dispose of this thermometer responsibly and in accordance with local regulations.
- Remove the batteries from the thermometer if it will not be used for three (3) months or longer.
- Dispose of old batteries responsibly and in accordance with local regulations.
- When replacing the batteries, change all of the batteries at the same time.
- Do not mix types or brands of batteries.
- Batteries may leak harmful liquids, ignitable materials, or may explode potentially causing personal injury or product damage.
- Do not use this thermometer where flammable gases are present.
- Inspect the thermometer before each use to make sure parts are not broken or missing.
- Do not use the thermometer outside of the proper temperature conditions to ensure accurate readings.
- Handle the thermometer with care and avoid dropping the thermometer to prevent inaccurate readings.
- Clean the thermometer sensor before each use to ensure accurate readings.
- Do not put any protective sleeves on the thermometer as this may impact the accuracy of temperature readings.
- Wait at least 30 seconds between readings to ensure accuracy.
- Keep young children in the same environment for a few minutes before taking their temperature as their bodies react slowly to environment changes.
- For the most accurate reading on children ages 3 and under,

it is recommended to take three (3) temperature readings and use the highest measurement.

- There are no user-serviceable parts inside the thermometer. Do not attempt to repair the thermometer on your own.
- Do not attempt to disassemble, overhaul, or modify this thermometer.
- Keep this thermometer out of reach of children.
- Do not dip or submerge the thermometer in water or other liquids.
- Clean the thermometer using a soft, dry cloth only. Do not use harsh detergents or liquids.
- Keep the thermometer out of direct sunlight in a dry, dust-free environment.

Intended Use

The TruVitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer is a battery-operated electronic device with intended use of measuring body temperature through touchless contact by means of an infrared sensor coupled with electronic signal. The device is reusable and intended for home use on people aged 2 years and older.

Features

- Accurate temperature readings in just 1 second
- No contact readings to avoid the risk of contamination
- Distance sensing feature ensures accurate, consistent readings
- Visual and audio fever alerts help you identify potential health risks
- Surface mode provides temperature readings of objects like baby bottles
- Easy-to-read LCD display
- Memory feature records up to 9 measurements
- Pre-calibrated thermometer is ready to use out of the box
- 60-second auto shutoff to preserve battery life


Package Contents

- ① Non-Touch 2-in-1 Thermometer
- ② AAA 1.5 V Batteries (x2)
- ③ User Guide

Product Overview


Thermometer Overview

1. Memory Button
2. Mode Button
3. Battery Cover
4. LCD Screen
5. Measure Button
6. Measurement Sensor
7. Distance Detection Sensor

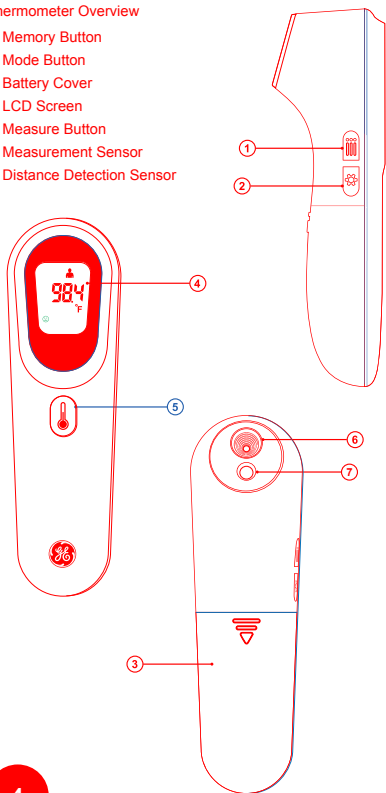

Screen Overview



1. Temperature measurement
2. Measurement in progress
3. Mute mode
4. Body mode
5. Surface mode
6. Recorded temperature in memory mode
7. Fahrenheit or Celsius mode
8. Low battery indicator
9. Temperature is equal to or greater than 100.4 °F (38 °C)
10. Temperature is less than 100.4 °F (38 °C)

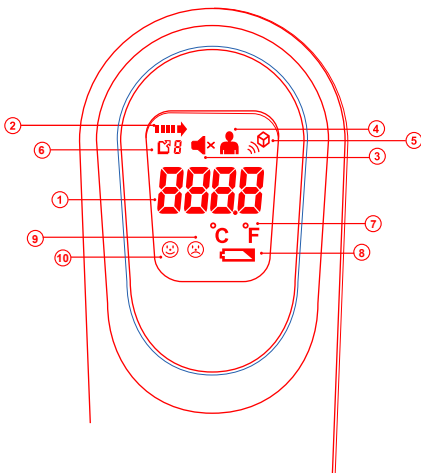

Operation Instructions

Body Mode Temperature Readings

1. Power on the thermometer by pressing the measure button. Check that the body mode indicator is lit on the screen to confirm the thermometer is in body mode. The thermometer is ready and in standby mode when two (2) blinking dashes appear on the LCD screen.

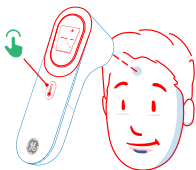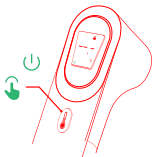


2. Hold the thermometer around 1 inch (2-3 cm) from the forehead and press the measure button.

3. Hold the thermometer still during reading. A beep will indicate that the measurement is complete (unless you are in mute mode).



4. If the thermometer is not close enough, a flashing arrow icon will appear on screen. Move the thermometer closer until the flashing arrow icon disappears, the LCD display lights up, and a temperature result appears on screen. If thermometer is not repositioned, the arrow icon will flash for 20 seconds before the device automatically turns off.

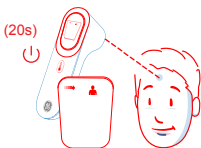

5. Once a temperature is taken, the temperature will remain on screen for five (5) seconds before going back to standby mode. Simply press the measure button again to take a new temperature.



6. To power off the thermometer, wait 60 seconds for the auto shutoff feature to power off the thermometer.

NOTES: Environment changes can affect the accuracy of temperature readings. Before use, allow the thermometer to remain in one location without significant air temperature changes for 30 minutes.

Wait at least 30 seconds between readings to ensure accuracy.

In case of error code, refer to the chart on page 13.


Wait at least 30 minutes after strenuous exercise before taking a temperature reading.

Do not wear a hat and make sure there is no hair, sweat, or makeup on your forehead while taking temperature readings. To avoid human error, take multiple measurements and use the average temperature.

The flashing arrow icon lets the user know that the thermometer is currently not in range of the forehead. The flashing arrow will disappear and the thermometer will take temperatures like normal when within optimal range. If the thermometer is out of range and not repositioned, the auto shutoff will activate after 20 seconds.

Fever Alerts

If a temperature reading is above the normal range, the thermometer will give you a fever alert. A frowning face will light up and the LCD display will turn red to indicate that the temperature is equal to or greater than 100.4 °F (38 °C). A smiling face will light up on the LCD display to indicate that the temperature is less than 100.4 °F (38 °C).

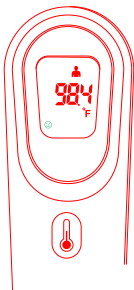

Smiling Face
Less than
100.4 °F (38.0 °C)




Frowning Face
Equal to or greater than
100.4 °F (38.0 °C)

Memory Feature


1. This thermometer automatically stores the last 9 body temperature measurements.
2. To view previous readings, press the memory button. The body or surface indicator will light up to indicate the kind of measurement you are viewing.
3. Press the memory button to scroll to the next stored measurement. While viewing the measurement, a number between 1 and 9 will display in the top-left corner of the screen to indicate which measurement you are viewing.
4. Remove the batteries from the thermometer to clear the memory.

NOTE: If the measure button is pressed while in the memory mode, the thermometer will go back to standby mode instead of immediately taking the temperature.

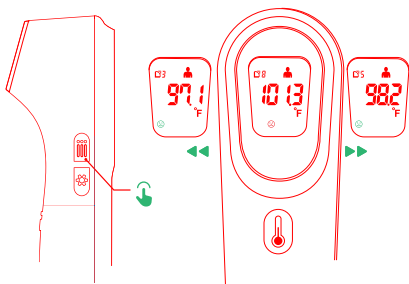

Switching Between Fahrenheit and Celsius


This thermometer can display temperatures in either degrees of Fahrenheit (°F) or degrees of Celsius (°C). To switch the units of temperature for future measurements, press the mode button. A beep will be heard (when not in mute mode) and the desired temperature unit will appear on screen. The new temperature unit will then be applied for temperatures you take in the future.

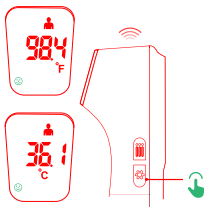

Mute Feature

To activate mute mode, press and hold the mode button for two (2) seconds. This will silence all alerts from the thermometer. To unmute the thermometer, simply repeat the process. An audio alert will indicate that the thermometer is unmuted.


NOTE: When the thermometer is powered on, the thermometer will always default to unmuted in body mode.

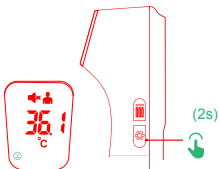

Surface Mode Temperature Readings



1. Power on the thermometer by pressing the measure button. Set the thermometer to surface mode by pressing the memory and mode at the same time. The thermometer is ready when the surface mode indicator is lit and two (2) blinking dashes appear on the LCD screen.



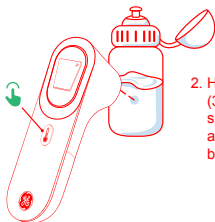

2. Hold the thermometer 1-2 in. (3-5 cm) from the object's surface you wish to measure and press the measure button.

3. Hold the thermometer still during reading. A beep will indicate that the measurement is complete (unless you are in mute mode).

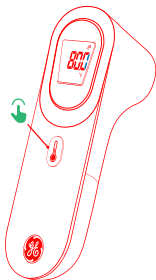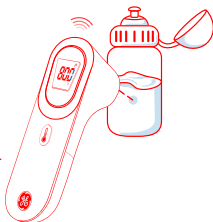

4. Once a temperature is taken, the temperature will remain on screen for five (5) seconds before going back to standby mode. Simply press the measure button again to take a new temperature. Make sure to hold the thermometer close to the object you want to measure because in surface mode, the thermometer will always pick up and read a temperature.



5. Hold the thermometer 1-2 in. (3-5 cm) from the object's surface you wish to measure and press the measure button.

NOTE: In case of error code, refer to the chart on page 13.



Maintenance & Cleaning

Battery Replacement

When the batteries need to be replaced, a blinking low battery icon will display on the screen. To change the batteries, follow the steps below.

1. Slide the battery cover down to open the battery compartment.
2. Remove the old batteries and dispose of them properly.
3. Insert two (2) new batteries aligning them with the polarities shown in the battery compartment.
4. Slide the battery cover back into place before powering on the thermometer.

NOTE: Remove the batteries if the thermometer will not be in use for more than three (3) months.

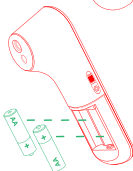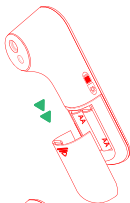

Cleaning

To clean the thermometer, wipe it with a dry, soft cloth. If the thermometer may be contaminated, use a cloth moistened with water and a mild detergent or clean it with 75% alcohol.

Take care not to use an excessive amount of liquid when cleaning the thermometer as liquids can seep into the electronic parts and cause damage to the thermometer.

Storage

Store in a safe, dry place free from dust and direct sunlight. Keep this thermometer out of reach of children.

If you are storing the thermometer for more than three (3) months, remove the batteries and keep the thermometer in the original packaging.

Error Codes

Error Code	Code Meaning	Resolution
HI	The temperature measured is higher than the following: Body Mode: 109.4 °F (43 °C) Surface Mode: 212 °F (100 °C)	Operate the thermometer in appropriate conditions. If necessary, clean the sensor tip. Should the error persist, contact customer service.
LO	The temperature measured is lower than the following: Body Mode: 93.2 °F (34 °C) Surface Mode: 32 °F (0 °C)	Operate the thermometer in appropriate conditions. If necessary, clean the sensor tip. Should the error persist, contact customer service.
Err	The ambient temperature is outside of the usable range of 59 °F - 104 °F (15 °C - 40 °C).	Operate the thermometer in appropriate conditions. If necessary, clean the sensor tip. Should the error persist, contact customer service.

Specifications

Operating Specifications

Body Mode Range: 93.2 °F - 109.4 °F (34 °C - 43 °C)

Surface Mode Range: 0 °F – 212 °F (0 °C - 100 °C)

Body Mode Calibration Accuracy: ± 0.4 °F (± 0.2 °C) between 93.2 °F - 109.4 °F (34 °C – 43 °C)

Surface Mode Calibration Accuracy: ≤ 68 °F (20 °C) ± 2 °F (1 °C); > 68 °F (20 °C) $\pm 5\%$

Operating Temperature: 59 °F - 104 °F (15 °C - 40 °C)

Operating Humidity: $< 95\%$ RH

Operating Atmospheric Pressure: 70 kPa ~ 106 kPa

Storage Temperature: -13 °F - 131 °F (-25 °C - 55 °C)

Storage Humidity: $< 95\%$ RH

Storage Atmospheric Pressure: 70 kPa ~ 106 kPa

Memory Capacity: 9 readings

Thermometer Specifications

Dimensions (L x W x D): 5.5" x 1.7" x 1.7" (140 x 42 x 42 mm)

Weight (with batteries): 4.2 oz. (120 g)

Power Supply: 2x AAA 1.5 V batteries

Display Type: LCD

Warranty

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER

This Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer ("Product"), including any accessories included in the original packaging, as supplied and distributed new by an authorized retailer is warranted by C&A Marketing, Inc. (the "Company") to the original consumer purchaser only, against certain defects in material and workmanship ("Warranty") as follows:

To receive Warranty service, the original consumer purchaser must contact the Company or its authorized service provider for problem determination and service procedures. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the Product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented to the Company or its authorized service provider in order to obtain the requested service.

Service options, parts availability, and response times may vary and may change at any time. In accordance with applicable law, the Company may require that you furnish additional documents and/or comply with registration requirements before receiving warranty service. Please contact our customer service for details on obtaining warranty service:

866-883-0022

info@truvitals.com

Shipping expenses to the Company's Return Facility are not covered by this warranty, and must be paid by the consumer. The consumer likewise bears all risk of loss or further damage to the Product until delivery to said facility.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS The Company warrants the Product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period"). If a hardware defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, the Company, at its sole option and to the extent permitted by law, will either (1) repair the Product defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, (2) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original device, or (3) refund the purchase price of the Product.

A replacement Product or part thereof shall enjoy the warranty of the original Product for the remainder of the Warranty Period, or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides you longer protection. When a Product or part is exchanged, any replacement item becomes your property, while the replaced item becomes the Company's property. Refunds can only be given if the original Product is returned.

This Warranty does not apply to:

- (a) Any non-Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer product, hardware or software, even if packaged or sold with the Product;
- (b) Damage caused by use with non-Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer products;
- (c) Damage caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake, or other external causes;
- (d) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by the Company;
- (e) Damage caused by third party services;
- (f) A Product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of the Company;
- (g) Consumable parts, such as batteries, fuses, and bulbs;

Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer

- (h) Cosmetic damage; or
- (i) If any Truvitals Non-Touch 2-in-1 Thermometer serial number has been removed or defaced.

This Warranty is valid only in the country where the consumer purchased the Product, and only applies to Products purchased and serviced in that country.

The Company does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free. The Company is not responsible for damage arising from your failure to follow instructions relating to its use.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE COMPANY PROVIDES THE PRODUCT "AS-IS" AND "AS-AVAILABLE" FOR YOUR CONVENIENCE AND THE COMPANY AND ITS LICENSORS AND SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, QUIET ENJOYMENT, ACCURACY, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. THE COMPANY DOES NOT GUARANTEE ANY SPECIFIC RESULTS FROM THE USE OF THE PRODUCT, OR THAT THE COMPANY WILL CONTINUE TO OFFER OR MAKE AVAILABLE THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR LENGTH OF TIME. THE COMPANY FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE.

YOU USE THE PRODUCT AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR (AND THE COMPANY DISCLAIMS) ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, OR DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF THE PRODUCT.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM THE COMPANY OR THROUGH ITS AUTHORIZED SERVICE PROVIDERS SHALL CREATE ANY WARRANTY.

IN NO EVENT WILL THE COMPANY'S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY ARISING FROM OR RELATED TO THE PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE EXCEED THE FEES ACTUALLY PAID BY YOU TO THE COMPANY OR ANY OF ITS AUTHORIZED RESELLERS FOR THE PRODUCT AT ISSUE IN THE LAST YEAR FROM YOUR PURCHASE. THIS LIMITATION IS CUMULATIVE AND WILL NOT BE INCREASED BY THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE INCIDENT OR CLAIM. THE COMPANY DISCLAIMS ALL LIABILITY OF ANY KIND OF ITS LICENSORS AND SUPPLIERS. IN NO EVENT WILL THE COMPANY OR ITS LICENSORS, MANUFACTURERS AND SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA, OR RECORDS) CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT.

Nothing in these terms shall attempt to exclude liability that cannot be excluded under applicable law. Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on warranties, so certain limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or province to province. Contact your authorized retailer to determine if another warranty applies.

Contact Us

truvitals.com

866-883-0022

info@truvitals.com

TruVitals

Thermomètre sans contact 2 en 1

Guide de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir acheté le Thermomètre sans contact 2 en 1. Ce guide de l'utilisateur a pour but de vous donner des directives pour assurer une utilisation sécuritaire de ce produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme aux directives décrites dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce guide pour référence. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Cette garantie est soumise à des limites et à des exclusions. Voir la garantie pour plus de précisions.



Safety Precautions

- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé chez les enfants moins de 2 ans.
- Ce thermomètre n'est pas destiné à diagnostiquer une maladie ou à prendre la place de votre médecin. Si vous ressentez des symptômes de maladie, contactez votre médecin pour plus de conseils.
- Ce thermomètre est conçu pour mesurer votre température et ne devrait pas remplacer la consultation de votre médecin.
- Jetez ce thermomètre de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Retirez les piles du thermomètre s'il n'est pas utilisé pendant trois (3) mois ou plus.
- Jetez les piles usagées de façon responsable et conformément à la réglementation locale.
- Lorsque vous remplacez les piles, changez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas les types ou les marques de piles.
- Les piles peuvent laisser s'échapper des liquides nocifs, des matières inflammables ou exploser, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- N'utilisez pas ce thermomètre en présence de gaz inflammables.
- Inspecter le thermomètre avant chaque utilisation pour s'assurer que des pièces ne sont pas brisées ou manquantes.
- N'utilisez pas le thermomètre en dehors des conditions de température appropriées pour assurer des lectures précises.
- Manipulez le thermomètre avec soin et évitez de le laisser tomber pour éviter des lectures inexactes.
- Nettoyez le capteur du thermomètre avant chaque utilisation pour garantir des lectures précises.
- Ne mettez pas de manchon de protection sur le thermomètre, car cela pourrait avoir un impact sur la précision des lectures de température.
- Attendez au moins 30 secondes entre les lectures pour garantir la précision.
- Laissez les jeunes enfants dans le même environnement pendant quelques minutes avant de prendre leur température, car leur corps réagit lentement aux changements d'environnement.
- Pour obtenir la lecture la plus précise sur les enfants de 3 ans et moins, il est recommandé de prendre trois (3) lectures de température et d'utiliser la mesure la plus élevée.

- Le thermomètre ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer le thermomètre vous-même.
- N'essayez pas de démonter, de réviser ou de modifier ce thermomètre.
- Gardez ce thermomètre hors de la portée des enfants.
- Ne pas plonger ou immerger le thermomètre dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Nettoyer le thermomètre en utilisant uniquement un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents ou de liquides agressifs.
- Conservez le thermomètre à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un environnement sec et sans poussière.

Utilisation Prévue

Le thermomètre Truvitals sans contact 2-in-1 est un appareil électronique fonctionnant sur piles et destiné à mesurer la température corporelle par contact sans contact au moyen d'un capteur infrarouge couplé à une amplification et un conditionnement électroniques du signal. L'appareil est réutilisable et destiné à un usage domestique sur des personnes âgés de 2 ans et plus.

Caractéristiques

- Mesures de température précises en seulement 1 seconde.
- Mesures sans contact pour éviter tout risque de contamination.
- La fonction de détection de distance garantit des mesures précises et constantes.
- Les alertes de fièvre visuelles et sonores vous aident à identifier les risques potentiels pour votre santé.
- Le mode Surface permet de prendre la température d'objets tels que les biberons.
- Ecran LCD facile à lire.
- La fonction mémoire permet d'enregistrer jusqu'à 10 mesures.
- Thermomètre pré-calibré prêt à l'emploi dès sa sortie de son emballage.
- Arrêt automatique après 60 secondes pour préserver la charge des piles.


Contenu du pack

- ① Thermomètre sans contact 2 en 1
- ② Piles AAA 1,5 V (x2)
- ③ Guide de l'utilisateur

Présentation du produit


Présentation du thermomètre

1. Bouton Mémoire
2. Bouton Mode
3. Couvercle de la batterie
4. Écran LCD
5. Bouton de mesure
6. Capteur de mesure
7. Capteur de détection de distance

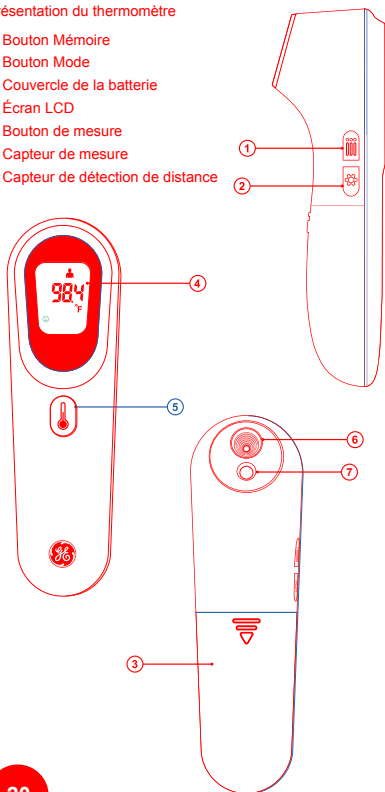

Présentation de l'écran



1. Mesure de la température
2. Mesure en cours
3. Mode silencieux
4. Mode corps
5. Mode surface
6. Température enregistrée dans le mode mémoire
7. Mode Fahrenheit ou Celsius
8. Indicateur de batterie faible
9. Température égale ou supérieure à 100,4 °F (38 °C)
10. Température inférieure à 100,4 °F (38 °C)

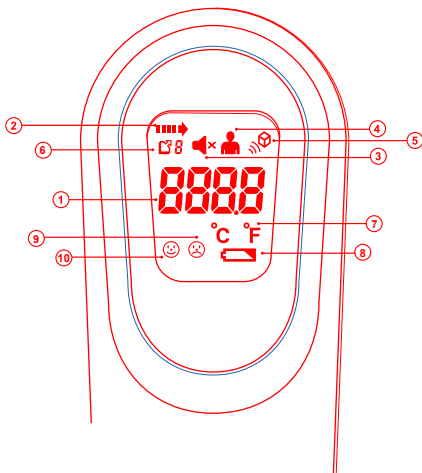

Instructions d'utilisation

Mesures de température en mode corps


1. Mettez le thermomètre sous tension en appuyant sur le bouton de mesure. Vérifiez que l'indicateur de mode corporel est allumé à l'écran pour confirmer que le thermomètre est en mode corporel. Le thermomètre est prêt et en mode veille lorsque deux (2) tirets clignotants apparaissent sur l'écran LCD.

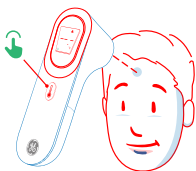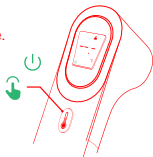

2. Tenez le thermomètre à environ 2 à 3 cm (1 pouce) du front et appuyez sur le bouton de mesure.

3. Tenez le thermomètre immobile pendant la lecture. Un bip indique que la mesure est terminée (sauf si vous êtes en mode silencieux).



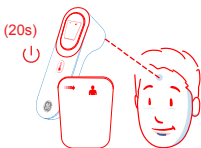

4. Si le thermomètre n'est pas assez près, une icône de flèche clignotante apparaîtra à l'écran. Rapprochez le thermomètre jusqu'à ce que l'icône de flèche clignotante disparaisse, que l'écran LCD s'allume et qu'un résultat de température apparaisse à l'écran. Si le thermomètre n'est pas repositionné, l'icône de flèche clignote pendant 20 secondes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

5. Une fois la température prise, elle reste affichée à l'écran pendant cinq (5) secondes avant de revenir en mode veille. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de mesure pour prendre une nouvelle température.



6. Pour éteindre le thermomètre, attendez 60 secondes que la fonction d'arrêt automatique mette le thermomètre hors tension.

REMARQUES: Les changements d'environnement peuvent affecter la précision des relevés de température. Avant de l'utiliser, laissez le thermomètre dans un endroit sans changement significatif de la température de l'air pendant 30 minutes.

Attendez au moins 30 secondes entre les relevés pour garantir la précision.

En cas de code d'erreur, reportez-vous au tableau de la page 29.

Attendez au moins 30 minutes après un exercice intense avant de prendre la température.

Ne portez pas de chapeau et assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux, de sueur ou de maquillage sur votre front pendant la prise de température.

Pour éviter toute erreur humaine, prenez plusieurs mesures et utilisez la température moyenne.

L'icône de la flèche clignotante indique à l'utilisateur que le thermomètre n'est actuellement pas à portée du front. La flèche clignotante disparaîtra et le thermomètre prendra des températures comme d'habitude lorsqu'il sera dans la portée optimale. Si le thermomètre est hors de portée et n'est pas repositionné, l'arrêt automatique s'activera après 20 secondes.

Alertes de fièvre

Si la température mesurée est supérieure à la normale, le thermomètre vous donnera une alerte de fièvre. Un visage renfrogné apparaîtra et l'écran LCD passera au rouge pour indiquer que la température est égale ou supérieure à 100,4 °F (38 °C). Un visage souriant s'allume sur l'écran LCD pour indiquer que la température est inférieure à 100,4 °F (38 °C).



Visage Souriant
Moins de
38,0 °C (100,4 °F)




Visage Triste
Égal ou supérieur à
38,0 °C (100,4 °F)

Fonction mémoire


1. Ce thermomètre mémorise automatiquement les 9 dernières mesures de température corporelle.
2. Pour consulter les relevés précédents, appuyez sur le bouton de mémoire. L'indicateur de corps ou de surface s'allume pour indiquer le type de mesure que vous visualisez.
3. Appuyez sur le bouton de mémoire pour passer à la mesure mémorisée suivante. Pendant la visualisation de la mesure, un chiffre entre 1 et 9 s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour indiquer la mesure que vous visualisez.
4. Retirez les piles du thermomètre pour effacer la mémoire.

REMARQUE: Si vous appuyez sur le bouton de mesure alors que vous êtes en mode mémoire, le thermomètre retourne en mode veille au lieu de prendre immédiatement la température.

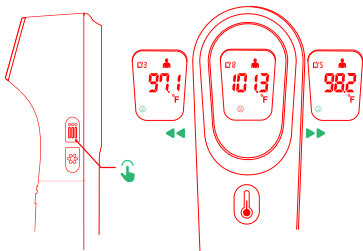

Passage du mode Fahrenheit au mode Celsius

Ce thermomètre peut afficher les températures en degrés Fahrenheit (°F) ou en degrés Celsius (°C). Pour changer d'unité de température pour les mesures futures, appuyez sur le bouton mode. Un bip se fera entendre (lorsqu'il n'est pas en mode silencieux) et l'unité de température souhaitée apparaîtra à l'écran. La nouvelle unité de température sera alors appliquée pour les températures que vous prendrez à l'avenir.

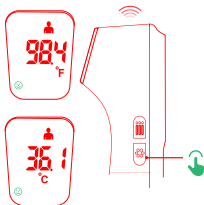


Fonction de sourdine

Pour activer le mode silencieux, appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant deux (2) secondes. Cela aura pour effet de faire taire toutes les alertes du thermomètre.


Pour rétablir le mode silencieux du thermomètre, il suffit de répéter le processus. Une alerte sonore indiquera que le thermomètre est désactivé.

REMARQUE: Lorsque le thermomètre est mis sous tension, il est toujours désactivé par défaut en mode corps.

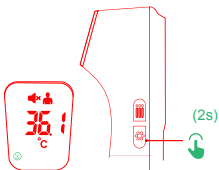



Mesures de température en mode Surface

1. Mettez le thermomètre sous tension en appuyant sur le bouton de mesure. Réglez le thermomètre en mode surface en appuyant simultanément sur les touches mémoire et mode. Le thermomètre est prêt lorsque le voyant du mode surface est allumé et que deux (2) tirets clignotants apparaissent sur l'écran LCD.

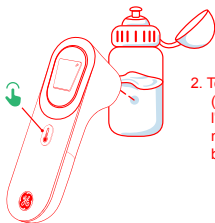

2. Tenez le thermomètre à 1-2 in. (3-5 cm) de la surface de l'objet que vous souhaitez mesurer et appuyez sur le bouton de mesure.

3. Tenez le thermomètre immobile pendant la lecture. Un bip indique que la mesure est terminée (sauf si vous êtes en mode silencieux).

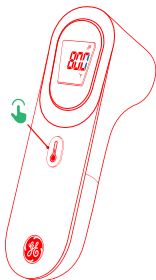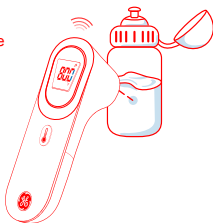

4. Une fois la température prise, elle reste à l'écran pendant cinq (5) secondes avant de revenir en mode veille. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de mesure pour prendre une nouvelle température. Veillez à tenir le thermomètre près de l'objet que vous voulez mesurer, car en mode surface, le thermomètre capte et lit toujours une température.

5. Tenez le thermomètre à 1 à 2 po (3 à 5 cm) de la surface de l'objet que vous souhaitez mesurer et appuyez sur le bouton de mesure.



REMARQUE: En cas de code d'erreur, reportez-vous au tableau de la page 29.



Entretien et nettoyage

Remplacement des piles

Quand les piles doivent être remplacées, une icône de batterie faible s'affiche à l'écran. Pour changer les piles, suivez les étapes ci-dessous.

1. Faites glisser le couvercle des piles vers le bas pour ouvrir le compartiment des piles.
2. Retirez les piles anciennes et éliminez-les correctement.
3. Insérez deux (2) nouvelles piles en respectant les polarités indiquées dans le compartiment des piles.
4. Remettez le couvercle des piles en place avant d'allumer le thermomètre.

NOTE: Retirez les piles si le thermomètre n'est pas utilisé pendant plus de trois (3) mois.

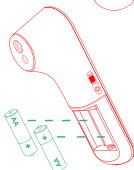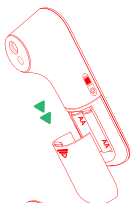

Nettoyage

Pour nettoyer le thermomètre, essuyez-le avec un chiffon sec et doux. Si le thermomètre est contaminé, utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent doux ou nettoyez-le avec de l'alcool à 75 %.

Veillez à ne pas utiliser une quantité excessive de liquide lors du nettoyage du thermomètre puisque les liquides peuvent s'infiltrer dans les parties électroniques et endommager le thermomètre.

Rangement

Rangez le thermomètre dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil. Gardez ce thermomètre hors de portée des enfants.

Si vous rangez le thermomètre pendant plus de trois (3) mois, retirez les piles et conservez le thermomètre dans son emballage d'origine.

Codes d'erreur

Code d'erreur	Description du code	Résolution
HI	La température mesurée est supérieure aux valeurs suivantes: Mode Corps: 43 °C (109.4 °F) Mode Surface: 100 °C (212 °F)	Utilisez le thermomètre dans des conditions appropriées. Au besoin, nettoyez l'extrémité du capteur. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
LO	La température mesurée est inférieure aux valeurs suivantes: Mode corps: 34 °C (93,2 °F) Mode Surface: 0 °C (32 °F)	Utilisez le thermomètre dans des conditions appropriées. Au besoin, nettoyez l'extrémité du capteur. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
Err	La température ambiante est en dehors de l'intervalle applicable de 15 °C - 40 °C (59 °F - 104 °F).	Utilisez le thermomètre dans des conditions appropriées. Au besoin, nettoyez l'extrémité du capteur. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Spécifications

Spécifications de fonctionnement

Plage du mode corps : 34 °C - 43 °C (93.2 °F - 109.4 °F)

Plage du mode surface : 0 °C - 100 °C (0 °F - 212 °F)

Précision de l'étalonnage du mode Corps : ± 0.4 °F (± 0.2 °C) - 93.2 °F - 109.4 °F (34 °C - 43 °C)

Précision de l'étalonnage du mode Surface : ≤ 68 °F (20 °C) ± 2 °F (1 °C); > 68 °F (20 °C) $\pm 5\%$

Température de fonctionnement : 59 °F - 104 °F (15 °C - 40 °C)

Humidité de fonctionnement : $< 95\%$ RH

Pression atmosphérique de fonctionnement : 70 kPa ~ 106 kPa

Température de stockage : -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)

Humidité de stockage : $< 95\%$ RH

Pression atmosphérique de stockage : 70 kPa ~ 106 kPa

Capacité de la mémoire : 9 relevés

Spécifications du thermomètre

Dimensions (L x l x P) : 140 x 42 x 42 mm (5.5" x 1.7" x 1.7")

Poids (avec piles) : 120 g (4.2 oz)

Alimentation électrique : 2 piles AAA 1.5 V

Type d'affichage : LCD

Garantie

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER

Ce Truvitals Thermomètre sans contact 2 en 1 ("Produit"), y compris tous les accessoires inclus dans la boîte d'origine, tel que livré et distribué neuf par un revendeur agréé, est garanti par C&A Marketing, Inc. (la "Société") à l'acheteur consommateur initial uniquement, contre certains défauts de matériaux et de fabrication ("Garantie") comme suit:

Pour bénéficier du service de Garantie, l'acheteur consommateur initial doit contacter la Société ou son prestataire de services agréé pour déterminer le problème et les procédures de service. Une preuve d'achat sous la forme d'un ticket de caisse ou d'une facture acquittée, attestant que le Produit relève de la (des) période(s) de Garantie applicable(s), DOIT être présentée à la Société ou à son prestataire de services agréé afin d'obtenir le service demandé.

Les options de service, la disponibilité des pièces et les délais de réponse peuvent varier et peuvent être révisés à tout moment. Conformément à la loi applicable, la Société peut exiger la présentation de documents supplémentaires et/ou le respect de conditions d'enregistrement avant de bénéficier du service de garantie. Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir plus d'informations sur l'obtention du service de garantie:

866-883-0022

info@truvitals.com

Les frais d'expédition vers le centre de retour de la Société ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par le consommateur. De même, le consommateur assume tous les risques de perte ou de dommages supplémentaires au produit jusqu'à la livraison audit centre.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS La Société garantit le Produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de UN (1) AN à compter de la date d'achat par le premier consommateur final (Période de garantie "). Si un défaut matériel survient et qu'une réclamation valide est reçue au cours de la Période de garantie, la Société, à son entière discrétion et conformément à la loi, (1) procédera gratuitement à la réparation du défaut du Produit, en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, (2) échangera le Produit avec un Produit neuf ou fabriqué à partir de pièces neuves ou d'occasion en état de marche et qui est équivalent au dispositif d'origine sur le plan fonctionnel, ou (3) remboursera le prix d'achat du Produit.

Un produit de remplacement ou une partie de celui-ci bénéficie de la garantie du produit d'origine pour le reste de la Période de garantie, ou pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement ou de réparation, selon ce qui vous assure une protection plus longue. Lorsqu'un Produit ou une pièce est échangé(e), tout article de remplacement devient votre propriété, tandis que l'article remplacé devient la propriété de la Société. Les remboursements ne peuvent être effectués que si le Produit original est retourné.

Cette garantie ne s'applique pas à:

- (a) Tout produit, matériel ou logiciel autre que le Truvitals Thermomètre sans contact 2 en 1, même s'il est livré ou vendu avec le produit;
- (b) aux dommages causés par l'utilisation de produits autres que le Thermomètre sans contact 2 en 1;
- (c) Les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une inondation, un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause externe;
- (d) Les dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des utilisations autorisées ou prévues et définies par la société;
- (e) Les dommages causés par les services de tiers;
- (f) Un Produit ou une pièce qui a été modifié(e) pour en altérer la fonctionnalité ou la capacité sans l'autorisation écrite de la Société;
- (g) Les pièces consommables, telles que les batteries, les fusibles et les ampoules;
- (h) Dommages esthétiques; ou
- (i) Si un numéro de série du Truvitals Thermomètre sans contact 2 en 1 a été retiré ou effacé.

Cette garantie n'est valable que dans le pays où le consommateur a acheté le Produit, et ne s'applique qu'aux Produits achetés et entretenus dans ce pays.

La Société ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du Produit.

Truvitals Thermomètre Sans Contact 2 en 1

La Société n'est pas responsable des dommages résultant de votre non respect des instructions relatives à son utilisation.

NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ET DANS LA MESURE POSSIBLE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIÉTÉ FOURNIT LE PRODUIT "TEL QUEL" ET "TEL QUE DISPONIBLE" POUR LES BESOINS DE L'UTILISATEUR. LA SOCIÉTÉ ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS REJETENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D'EXACTITUDE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. LA SOCIÉTÉ NE GARANTIT PAS DE RESULTATS SPECIFIQUES DE L'UTILISATION DU PRODUIT, NI QUE LA SOCIÉTÉ CONTINUERA A OFFRIR OU A RENDRE DISPONIBLE LE PRODUIT PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS SPECIFIQUE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPLICITE INDIQUÉE CI-DESSUS.

VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE (ET LA SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ) DE TOUTE PERTE, RESPONSABILITÉ OU DOMMAGE RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT.

AUCUN CONSEIL NI AUCUNE INFORMATION, QU'ILS SOIENT VERBAUX OU ÉCRITS, OBTENUS PAR VOUS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SES PRESTATAIRES DE SERVICES AGRÉÉS NE SAURAIENT CRÉER UNE QUELCONQUE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE DE LA SOCIÉTÉ DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT, QUE CE SOIT PAR CONTRAT, DÉLIT OU AUTRE, NE DÉPASSERA LES FRAIS QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉS À LA SOCIÉTÉ OU À L'UN DE SES REVENDEURS AGRÉÉS POUR LE PRODUIT EN QUESTION AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE SUIVANT VOTRE ACHAT. CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS MAJORÉE PAR L'EXISTENCE DE PLUS D'UN INCIDENT OU DE RÉCLAMATION. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE SES CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ OU SES CONCÉDANTS, FABRICANTS ET FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIF OU CONSECUTIF (TEL QUE, MAIS SANS SE LIMITER, AUX DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'AFFAIRES, D'ECONOMIES, DE DONNEES OU D'ENREGISTREMENTS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT.

Aucune disposition des présentes conditions ne peut permettre d'exclure la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable. Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ou autorisent les limitations de garantie, de sorte que certaines limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Contactez votre détaillant autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Contactez-nous

truvitals.com

866-883-0022

info@truvitals.com

AVITA Corporation

Model No.: NT2


Distributed by: AVITA (WuJiang) Co. LTD.

Tel: +86-512-8207-8288

9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Road, San-Chung District,
New Taipei City, 24158, Taiwan, R.O.C.

Registration Certificate(s): SXZZ20182200808

China Manufacturing License(s): SSYJXSCX20040018

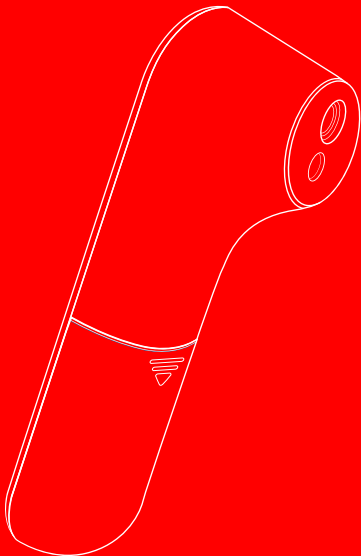

Truvitals is a trademark of C&A IP Holdings LLC in the US.

GE is a trademark of General Electric Company. Used under license.

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement, or approval.

Distributed by C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East Edison, NJ 08837.

Made in China.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. All Rights Reserved.