

Instruction Manual 2

Automatic Blood Pressure Monitor Model JPN610T

All for Healthcare

Read Instruction manual ① and ② before use.

繁體中文 使用前請閱讀使用說明書 ① 和 ②。

한국어 사용하기 전에 사용 설명서 ① 과 ② 를 읽어 주세요.

မြန်မာ အသုံးပြုခင်တွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ ① နှင့် ② ကို ဖတ်ရှုပါ။

हिन्दी उपयोग से पहले निर्देश मनुअल ① और ② पढ़ें।

ภาษาไทย อ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน ① และ ② ก่อนใช้งานอุปกรณ์

Bahasa Indonesia Baca buku petunjuk ① dan ② sebelum penggunaan.

Tiếng Việt Đọc hướng dẫn sử dụng ① và ② trước khi sử dụng.


Bahasa Melayu Baca Manual arahan ① dan ② sebelum guna.

Intellisense

5613036-0A

1 Package Contents

ZH-TW 包裝內容物	TH อุปกรณ์ที่หามาในกล่อง
KO 구성품	ID Isi Kemasan
MY လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများ	VI Các chi tiết trong bao bì
HI पैकेज में सामग्री	MS Kandungan Bungkus

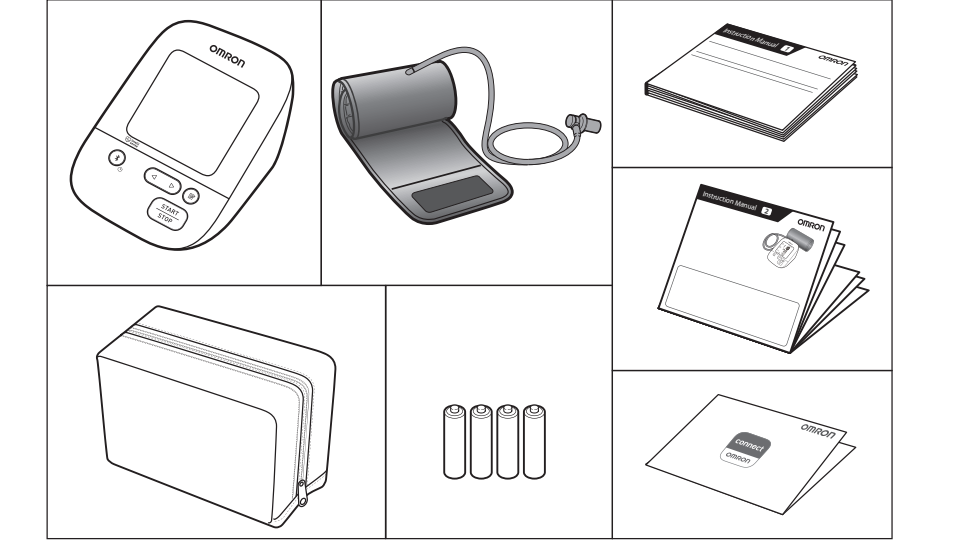

2 Preparing for a Measurement

ZH-TW 準備測量	TH การเตรียมความพร้อมในการวัด
KO 측정 준비	ID Persiapan untuk Pengukuran
MY တိုင်းတာမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း	VI Chuẩn bị tiến hành đo
HI मापन लेने की तैयारी	MS Persediaan untuk Membuat Ukuran

30 minutes before

ZH-TW 測量前 30 分鐘

KO 측정 30 분 전 주의 사항

MY အသုံးပြုခင် 30 မိနစ်

HI 30 मिनट पहले

TH 30 นาทีก่อนการวัด

ID 30 menit sebelum

VI 30 phút trước khi đo

MS 30 mi nit sebelum

Icons: No alcohol, No smoking, No exercise, No hot food/drink, No eating/drinking, No stress.

5 minutes before: Relax and rest.

ZH-TW 測量前 5 分鐘：放鬆和休息。

KO 측정 5 분 전 : 안정된 상태를 취합니다.

MY အသုံးပြုခင် 5 မိနစ် - စိတ်အေးအေးထားကာ အနားယူပါ။

HI 5 मिनट पहले: निश्चित रहें और आराम करें।

TH ผ่อนคลายและนั่งในท่าที่สบาย

ID 5 menit sebelum: Rileks dan istirahat.

VI 5 phút trước khi đo: Thư giãn và nghỉ ngơi.

MS 5 minit sebelum: Bertenang dan rehat.

Illustration of a person sitting and relaxing.

3 Downloading the "OMRON connect" App

ZH-TW 下載「OMRON connect」應用程式

TH การดาวน์โหลดแอป "OMRON connect"

KO "OMRON connect" 앱 다운로드

ID Mengunduh Aplikasi "OMRON connect"

MY "OMRON connect" အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်ခြင်း

VI Đăng tải xuống ứng dụng "OMRON connect"

HI "OMRON connect" ऐप को डाउनलोड करना

MS Memuat turun Aplikasi "OMRON connect"

Illustration of downloading the app from the App Store and Google Play.

Illustration of connecting the monitor to a smartphone via Bluetooth.

Bluetooth ON

connect omron

The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.

ZH-TW 若血壓計與應用程式配對，將自動設定日期與時間。

KO 연동(페어링) 되면 날짜와 시간은 자동으로 설정됩니다.

MY သင့်နဲ့တစ်ခုတည်းသော အသုံးပြုသူအတွက် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သွားပါမည်။

HI मॉनीटर को ऐप के साथ पेयर किए जाने पर तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाएंगे।

TH วันที่และเวลาจะถูกระบุโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องวัดของคุณจับคู่กับแอปพลิเคชัน

ID Tanggal dan waktu secara otomatis akan diatur saat monitor dipasang dengan aplikasi.

VI Ngày và giờ sẽ tự động được cài đặt khi máy đo huyết áp được kết nối với ứng dụng.

MS Tarikh dan masa akan ditetapkan secara automatik apabila pemantau anda berpasangan dengan aplikasi ini.

4 Installing Batteries

ZH-TW 安裝電池

TH การใส่แบตเตอรี่

KO 전전지 삽입

ID Memasang Baterai

MY မှန်ကန်အချိုးအား မရှိမည်သတိပြုခြင်း

VI Lắp pin

MS Memasang Bateri

1 2 3

AA, 1.5V x 4

Illustration of inserting batteries into the monitor.

5 Pairing Your Smart Device

ZH-TW 與您的智慧裝置配對

TH การจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์

KO 스마트폰과 연동(페어링)

ID Memasangkan Perangkat Cerdas Anda

MY သင်၏စမาร์ทစက်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်ပါ။

VI Kết nối thiết bị thông minh của bạn

HI स्मार्ट डिवाइस पेयर करना

MS Memastikan Perangkat Pintar Anda Berpasangan

1 2 3 Follow the instructions.

TH 遵守指示。

KO 순서에 맞게 진행하여 주십시오.

MY လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

HI निर्देशों का पालन करें।

TH ทำตามคำแนะนำ

ID Ikuti petunjuk.

VI Làm theo chỉ dẫn.

MS Ikuti arahan.

6 Setting Date and Time Manually

ZH-TW 手動設定日期與時間

TH การตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง

KO 날짜와 시간 수동 설정

ID Mengatur Tanggal dan Waktu secara Manual

MY ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်ပတ်ကိုပတ်ခြင်း

VI Thiết lập ngày và giờ thủ công

MS Menetapkan Tarikh dan Masa Secara Manual

If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

ZH-TW 若血壓計與您的智慧裝置配對，將自動設定日期與時間。若您需要手動設定它們，請設定年 > 月 > 日 > 小時 > 分鐘。

KO 스마트폰과 연동(페어링)되면 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. 수동으로 설정하는 경우에는 년 > 월 > 일 > 시간 > 분 순으로 설정합니다.

MY မော်နီတာအား သင်၏စမတ်စက်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်လိုက်ပါက မှန်ကန်အချိုးအား အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သွားပါမည်။ ၎င်းတို့အား မှန်ကန်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ နှစ် > လ > ရက် > နာရီ > မိနစ် ကို သတ်မှတ်ပါ။

HI यदि आपका मॉनीटर आपके स्मार्ट डिवाइस के साथ पेयर किया जाता है, तो तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाता है। जब आपको उन्हें मैन्युअल ढंग से सेट करने की आवश्यकता हो, तो वर्ष > महीना > दिन > घंटे > मिनट सेट करें।

TH หากเครื่องวัดของคุณจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของคุณ วันที่และเวลาจะถูกระบุโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง ตั้งค่าปี > เดือน > วันที่ > ชั่วโมง > นาที

ID Jika monitor Anda dipasangkan dengan perangkat cerdas, tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Saat Anda perlu mengaturnya secara manual, atur tahun > bulan > hari > jam > menit.

VI Nếu máy đo huyết áp được kết nối với thiết bị thông minh, ngày và giờ sẽ được cài đặt tự động. Khi bạn cần cài đặt thủ công, hãy cài đặt năm > tháng > ngày > giờ > phút.

MS Jika pemantau anda berpasangan dengan peranti pintar anda, tarikh dan masa ditetapkan secara automatik. Apabila anda perlu menetapkannya secara manual, tetapkan tahun > bulan > hari > jam > minit.

Illustration of the manual date and time setting interface.

7 Applying the Cuff on the Left Arm

ZH-TW 在左臂上捲綁壓脈帶

TH การใช้ผ้าพันแขนกับแขนข้างซ้าย

KO 올바른 자세 확인

ID Memasang Manset di Lengan Kiri

MY ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်ပတ်ကိုပတ်ခြင်း

VI Quấn vòng bít trên cánh tay trái

MS Memakai Kaf pada Lengan Kiri

1 2 3 4

Click

1-2 cm

Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

ZH-TW 壓脈帶的空氣管一側應在肘部內側上方 1 ~ 2 公分處。

KO 팔꿈치 안 쪽의 겹히는 부분에서 1~2cm 간격을 두고 감아줍니다.

MY လက်ပတ်၏မြှောက်ခြင်းသည့် အတွင်းဘက်ပေါ်တွင်စွဲနေသော 1-2 cm တွင် ရှိသင့်ပါသည်။

HI कफ का ट्यूब वाला हिस्सा कोहनी के भीतरी हिस्से से 1-2 cm ऊपर होना चाहिए।

TH ด้านสายยางของผ้าพันแขนควรอยู่สูงกว่าด้านในข้อศอก 1 - 2 ซม.

ID Sisi tabung manset harus berada 1 - 2 cm di atas siku bagian dalam.

VI Ống dẫn khí trên vòng bít phải cao hơn mặt trong khuỷu tay 1 - 2 cm.

MS Bahagian tiub kaf hendaklah 1 - 2 cm di atas bahagian dalam siku.

Illustration of applying the cuff to the left arm.

Back / Forward

ZH-TW 後退 / 前進

KO 뒤로/앞으로

MY မှောက်သို့/ရှေ့သို့

HI अगे / पीछे

TH ย้อนกลับ / ไปข้างหน้า

ID Mundur / Maju

VI Quay lại / Tiếp theo

MS Undur / Maju

Illustration of the date and time setting interface.

8 Sitting Correctly

ZH-TW 正確坐姿

TH การนั่งในท่าที่ถูกต้อง

KO 올바른 자세 확인

ID Duduk dengan Benar

MY မှန်ကန်စွာ ထိုင်ခြင်း

VI Ngồi đúng tư thế

MS Meletak dengan Betul

Illustration of a person sitting correctly at a desk.

9 Taking a Measurement

ZH-TW 測量

TH การทำการวัด

KO 측정하기

ID Melakukan Pengukuran

MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း

VI Tiến hành đo

MS Mengambil Ukuran

START STOP

0

78

120

78

70

Illustration of the measurement process and the resulting reading.

1 Sit comfortably with your back and arm supported.

ZH-TW 舒適地坐著，並讓背部和手臂有穩定支撐。

KO 등을 바르게 펴고 앉아서 테이블에 팔꿈치를 올려놓습니다.

MY မှောက်ကျောနှင့် လက်မောင်းကို ထောက်ထားပြီး သင်တင်သည့်သောက်သုံး ထိုင်ပါ။

HI अपनी पीठ और बांह को सहारा देते हुए आराम से बैठें।

TH นั่งในท่าที่สบาย เก้าอี้มีพนักพิง และมื้อมีที่วางแขน

ID Duduklah dengan punggung dan lengan disangga.

VI Ngồi thoải mái với lưng và cánh tay của bạn được đỡ.

MS Duduk dengan selesa dengan belakang dan lengan anda disokong.

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.

ZH-TW 將手臂壓脈帶放在與心臟同高的位置。

KO 커프는 심장과 같은 높이에 위치하도록 합니다.

MY လက်မောင်းပတ်သည့်လက်ပတ်ကို သင့်လုံးနှင့် အမြင့်အတူထားရှိပါ။

HI आर्म कफ को अपने हृदय के स्तर पर रखें।

TH วางผ้าพันแขนในระดับเดียวกับหัวใจของคุณ

ID Letakkan manset lengan dengan posisi yang sama sesuai level jantung Anda.

VI Đặt vòng bít bấp tay ngang tim.

MS Letakkan kaf lengan pada paras yang sama dengan jantung anda.

3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

ZH-TW 雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止，不要說話。

KO 다리를 꼬지 않은 상태에서 발바닥에 대고, 움직이거나 말을 하지 않습니다.

MY ခြေဖဝါးတူထားကာ ခြေထောက်ချိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထိုင်ကာ ခြေမပြောင်းလဲခြင်း၊ စကားမပြောပါနှင့်။

HI पैर सपाट रखें, पैर मुड़े न हों, स्थिर रहें और बात नहीं करें।

TH วางเท้าราบกับพื้น ไม่ไขว้ขา นั่งนิ่ง และห้ามพูดคุย

ID Jaga agar telapak kaki rata, jangan silangkan kaki, tetap diam, dan jangan berbicara.

VI Giữ bàn chân phẳng, chân không bắt chéo, không cử động và không nói chuyện.

MS Pastikan kaki anda rata, kaki disilangkan, jangan bergerak dan jangan bercakap.

If taking measurements on the right arm, refer to: ZH-TW 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 ①之2.3。 KO 오른쪽팔로 측정할 경우, 사용 설명서 ①의 2.3을 참조하십시오. MY သဘာဝလက်မောင်းမပါဘဲ တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ပါက မော်နီတာအား ကိုက်ညီစေပါ။ HI बाईं भुजा पर मापन करते समय, ध्यान दें: TH หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดูที่: ID Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat: VI Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo: MS Jika mengambil ukuran pada lengan kanan, rujuk: Instruction Manual ① 2.3

10 Taking a Measurement

ZH-TW 測量

TH การทำการวัด

KO 측정하기

ID Melakukan Pengukuran

MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း

VI Tiến hành đo

MS Mengambil Ukuran

START STOP

0

78

120

78

70

Illustration of the measurement process and the resulting reading.

11 Taking a Measurement

ZH-TW 測量

TH การทำการวัด

KO 측정하기

ID Melakukan Pengukuran

MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း

VI Tiến hành đo

MS Mengambil Ukuran

When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

ZH-TW 按下 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵時，將自動進行測量並儲存。打開應用程式以傳輸數值。

KO [START/STOP] (시작 / 정지) 버튼을 누르면 측정이 이루어지고 자동으로 저장됩니다. 앱을 열어서 측정값을 전송합니다.

MY [START/STOP] (စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန်) ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ရှုမှုကိုလွှဲပြောင်းရန် အက်ပ်ကိုဒ်ပါ။

HI [START/STOP] (शुरू/रुकें) बटन को दबाने पर मापन स्वचालित ढंग से लेकर सहेज दिया जाता है। रीडिंग को स्थानांतरित करने के लिए ऐप खोलें।

TH เมื่อกดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) การวัดค่าจะเริ่มต้นและค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เปิดแอปเพื่อโอนข้อมูลค่าที่วัดได้

ID Saat tombol [START/STOP] (mula/berhenti) ditekan, pengukuran diambil dan disimpan secara otomatis. Buka aplikasi untuk mentransfer pembacaan.

VI Khi nhấn nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại), quá trình đo được thực hiện và lưu lại kết quả tự động. Mở ứng dụng để truyền kết quả đo.

MS Apabila butang [START/STOP] (Mula / berhenti) ditekan, ukuran diambil dan disimpan secara automatik. Buka aplikasi untuk memindahkan bacaan.

If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

ZH-TW 如果您的收縮壓超過 210 mmHg：手臂壓脈帶開始加壓後，按住 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵，直到血壓計加壓使壓力比預期收縮壓高 30 ~ 40 mmHg。

KO 최고혈압이 210mmHg 이상인 경우: 가압이 시작되면 예상되는 최고혈압보다 30~40mmHg 더 가압될 때까지 [START/STOP] (시작/정지) 버튼을 누른 상태를 유지합니다.

MY သင့်၏ သွေးကြောအားသည့် 210 mmHg ထက် ပိုများနေပါက လက်မောင်းတွင်ပတ်သည့်လက်ပတ်အား စတင်ကာ လေသွင်းပြီးနောက်၊ သင့်မျှော်လင့်ထားသည့် စွတ်လစ်ဖိအားထက် 30 မှ 40 mmHg အထိ မော်နီတာမှ လေသွင်းမခြင်း [START/STOP] (စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန်) ခလုတ်ကို ဖိကာနိပ်ထားပါ။

HI यदि आपका सिस्टोलिक दाब 210 mmHg से अधिक है: जब आर्म कफ भरना शुरू हो जाए, [START/STOP] (शुरू/रुकें) बटन को दबाएं और तब तक दबाकर रखें जब तक मॉनीटर आपके अपेक्षित सिस्टोलिक दाब से 30 से 40 mmHg अधिक भर नहीं जाता।

TH หากความดันโลหิตด้านบนของคุณสูงกว่า 210 mmHg: หลังจากผ้าพันแขนเริ่มพองตัว กดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) ค้างไว้จนกว่าเครื่องวัดจะปล่อยลมเข้าสูงกว่าความดันโลหิตด้านบนของคุณที่คาดไว้ 30 ถึง 40 mmHg

ID Jika tekanan sistolik Anda lebih dari 210 mmHg: Setelah manset lengan mulai mengembang, tekan dan tahan tombol [START/STOP] (mula/berhenti) hingga monitor mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi dari tekanan sistolik yang diharapkan.

VI Nếu huyết áp tâm thu của bạn cao hơn 210 mmHg: Sau khi vòng bít bắt đầu căng lên, nhấn và giữ nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại) cho đến khi vòng bít tăng lên cao hơn từ 30 - 40 mmHg so với huyết áp tâm thu dự kiến của bạn.

MS Jika tekanan sistolik anda lebih dari 210 mmHg: Selepas kaf lengan mula mengembang, tekan dan tahan butang [START/STOP] (Mula / berhenti) sehingga pemantau mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi daripada tekanan sistolik yang anda jangka.

9 Taking a Measurement	
ZH-TW 測量	TH การทำการวัด
KO 측정하기	ID Melakukan Pengukuran
MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း	VI Tiến hành đo
HI माप लेना	MS Mengambil Ukuran

Taking a measurement in guest mode

ZH-TW 在訪客模式中取得測量值

KO 게스트 모드에서 측정

MY ဧည့်သည်မှတ်တိုင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခြင်း

HI गेस्ट मोड में एक मापन लेना

TH การวัดในโหมดผู้มาเยือน

ID Melakukan pengukuran dalam mode tamu

VI Đo ở chế độ khách

MS Mengambil ukuran dalam mod tetamu

The guest mode can be used to take a single measurement for another user. No readings are stored in the memory.

ZH-TW 可使用訪客模式，為另一個使用者測量一次血壓。不會將任何數值儲存到記憶體。

KO 게스트 모드는 다른 사용자가 단일(일회성) 측정을 할 수 있으며, 측정값은 저장되지 않습니다.

MY အခြား အသုံးပြုသူအတွက် တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ရန် ဧည့်သည်မှတ်တိုင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖတ်ပြမှုများကို မှတ်တိုင်တွင် မသိမ်းဆည်းပါ။


HI गेस्ट मोड का उपयोग किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए एकल माप लेने के लिए किया जा सकता है। कोई भी रीडिंग मेमोरी में संग्रहित नहीं की जाती है।

TH โหมดผู้มาเยือนใช้สำหรับวัดค่าให้ผู้ใช้คนอื่นเพียงครั้งเดียว ค่าที่อ่านได้จะไม่จัดเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำ

ID Modetamu dapat digunakan untuk melakukan satu pengukuran bagi pengguna lain. Tidak ada hasil pengukuran yang disimpan dalam memori.


VI Có thể dùng chế độ khách để đo một lần cho một người khác. Không có kết quả đo nào được lưu trữ trong bộ nhớ.

MS Mod tetamu boleh digunakan untuk mengambil satu ukuran untuk pengguna lain. Tida bacaan disimpan dalam memori.

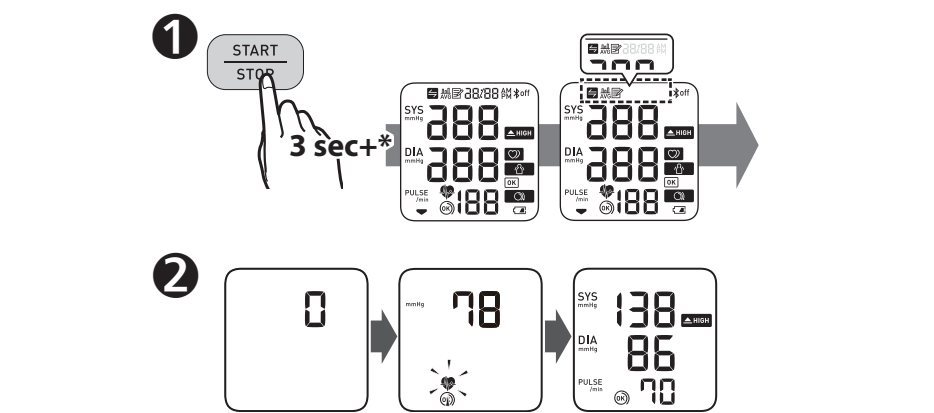

* sec+: press the button at least the specified number of seconds. / 按壓住按鈕的時間需達到指定秒數。 / 최소 몇 초 동안 버튼을 누릅니다. / အနည်းဆုံး သတ်မှတ် ထောင့်ကြာသည့်အထိ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ / कम से कम निदिष्ट सेकंड के लिए बटन दबाएं। / กดปุ่มค้างไว้ตามเวลาที่ระบุเป็นอย่างน้อย / tekan tombol sedikitnya selama waktu yang ditentukan dalam detik. / nhấn nút trong thời gian ít nhất bằng số giây được chỉ định. / tekan butang sekurang-kurangnya bilangan detik yang ditentukan.

10 Checking Readings	
ZH-TW 檢查數值	
KO 측정값 확인	
MY ဖတ်ရှုမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း	
HI रीडिंग की जांच करना	

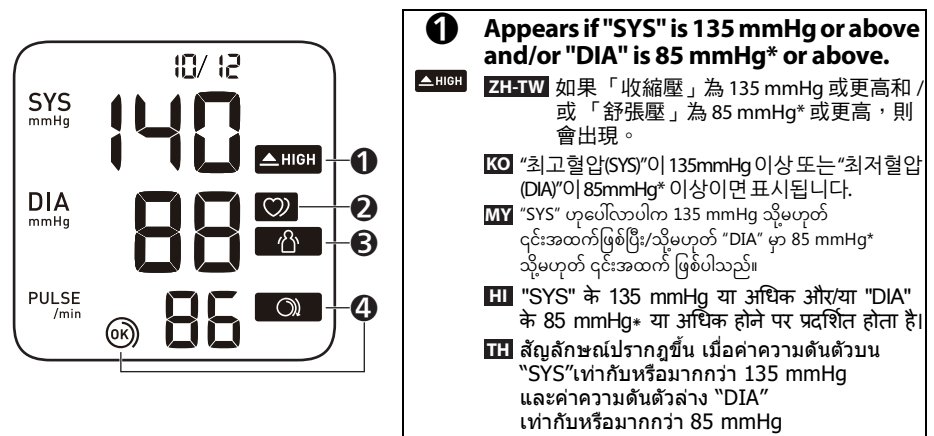

ID Muncul jika "SYS" sebesar 135 mmHg ke atas dan/atau "DIA" sebesar 85 mmHg* ke atas.

VI Hiện lên nếu "SYS" (huyết áp tâm thu) có giá trị 135 mmHg trở lên và/hoặc "DIA" (huyết áp tâm trương) có giá trị 85 mmHg* trở lên.

MS Muncul jika bacaan "SYS" 135 mmHg atau lebih tinggi dan/atau "DIA" 85 mmHg* atau lebih tinggi.

2 Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

TH 測量期間偵測到不規則脈波 ** 時出現。如果反覆出現，OMRON 建議諮詢您的醫師。

KO 측정 중에 불규칙 맥파**가 감지되는 경우에 표시됩니다. 빈번하게 표시되는 경우에는 의사와 상담하는 것을 권장합니다.

MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ဧည့်သည်အသုံးပြုမှုကို ထောက်လှမ်းသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းထက်ကာထပ်ကာပေါ်လာပါက သင့်၏သမားတော်နှင့် ဆွေးနွေးရန် OMRON မှ အကြံပြုပါသည်။

HI एक मापन के दौरान एक अनियमित लय** की पहचान होने पर प्रदर्शित होता है। यदि यह बार-बार प्रदर्शित होता है, तब OMRON आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह देता है।

TH สัญลักษณะปรากฏเมื่อตรวจจนได้ว่า จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ** ขณะทำการวัด หากปรากฏสัญญาณนี้ซ้ำบ่อยครั้ง OMRON แนะนำให้ปรึกษาแพทย์

ID Muncul saat irama tak beraturan** terdeteksi selama pengukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter.

VI Hiện lên khi phát hiện nhịp không đều** trong quá trình đo. Nếu biểu tượng hiện lên nhiều lần, OMRON khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.

MS Muncul apabila rentak tidak sekata** dikesan semasa membuat ukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON mengesyorkan supaya anda merujuk pada doktor anda.

3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.

ZH-TW 測量過程中身體移動時出現。取下手臂壓脈帶，等待 2 ～ 3 分鐘再試一次。

KO 측정중에몸을움직인경우에표시됩니다. 커프를팔에서벗리하고 2~3 분후에다시측정하여주세요.

MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း သင့်အာကိုယ် လှုပ်ရှားသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ လက်မောင်းတွင်တည်သည့်လက်တံကို ဖယ်ရှားကာ 2-3 မိနစ်စောင့်ပြီး ထပ်မံတိုင်းတာပါ။

HI मापन के दौरान आपके शरीर के हिलने पर प्रदर्शित होता है। आर्म कफ निकालें, 2-3 मिनट तक प्रतीक्षा करें और दोबारा कोशिश करें।


TH สัญลักษณะปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับร่างกายขณะทำการวัด ถอดผ้าพันแขนออก รอ 2-3 นาทีแล้วลองอีกครั้ง

ID Muncul saat tubuh Anda bergerak saat pengukuran. Lepas manset lengan, tunggu 2-3 menit lalu coba lagi.

VI Hiện lên khi cơ thể bạn cử động trong quá trình đo. Tháo vòng bít, đợi 2-3 phút và thử lại.

MS Muncul apabila badan anda bergerak semasa membuat ukuran. Tanggalkan kaf lengan, tunggu 2-3 minit dan cuba lagi.

TH การตรวจสอบค่าที่วัดได้	
ID Memeriksa Pembacaan	
VI Kiểm tra kết quả đo	
MS Memeriksa Bacaan	

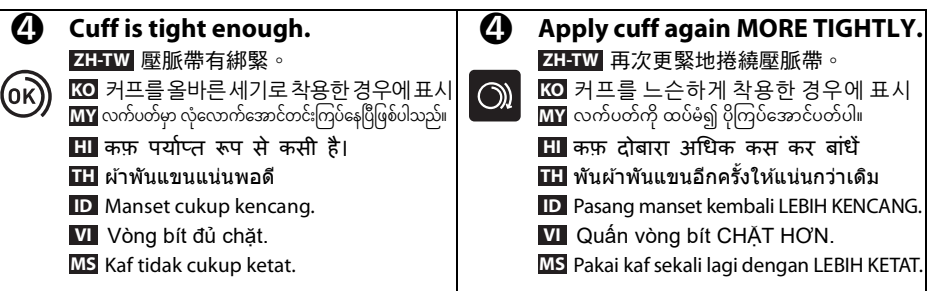

***The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.**

ZH-TW * 高血壓定義基於 2018 ESH/ESC 指引。

KO * 고혈압의 정의는 2018 ESH/ESC 지침을 토대로 합니다.

MY * သွေးဖိအားမြင့်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြချက်မှာ 2018 ESH/ESC လမ်းညွှန်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။

HI * उच्च रक्त चाप की परिभाषा 2018 ESH/ESC के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

TH * ค่าจำกัดความความดันโลหิตสูงยึดตามแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ESH/ESC 2018

ID *Definisi tekanan darah tinggi didasarkan pada Pedoman 2018 ESH/ESC.

VI *Định nghĩa về huyết áp cao dựa trên Hướng dẫn về ESH/ESC 2018.

MS *Definisi Tekanan darah tinggi adalah berdasarkan Garis Panduan 2018 ESH/ESC.

**An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected during a measurement.

ZH-TW ** 不規則脈波的定義是，測量期間偵測到低於或高出平均數值 25% 的脈搏。

KO ** 불규칙 맥파는 혈압을 측정하는 동안 감지되는 평균 맥파보다 25% 미만이거나 25%를 초과하는 맥파으로 정의됩니다.

MY ** ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ဧည့်သည်အသုံးပြုမှုအား တိုင်းတာစဉ်အတွင်း သိရှိသည့်ပုံစံမျိုးစုံနှုန်းထက် 25% လျော့နည်းသို့မဟုတ် 25% ပိုနေသောနှုန်းနှုန်းအဖြစ် အမှီပြုနိုင်ပါသည်။


HI **हृदय धड़कने की अनियमित लय को एक मापन के दौरान पहचानी गई औसत लय से 25 % कम या 25 % अधिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

TH **จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หมายถึง จังหวะการเต้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 25% หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 25% ที่ตรวจจนได้ขณะทำการวัด


ID **Irama detak jantung tak beraturan didefinisikan sebagai irama yang 25% kurang dari atau 25% lebih dari irama rata-rata yang terdeteksi saat pengukuran.

VI **Nhịp tim bất thường được định nghĩa là nhịp ít hơn 25% hoặc lớn hơn 25% so với nhịp trung bình phát hiện thấy trong quá trình đo.

MS **Rentak jantung tidak sekata ditakrifkan sebagai rentak yang 25% kurang atau 25% lebih daripada rentak purata yang dikesan semasa ukuran.

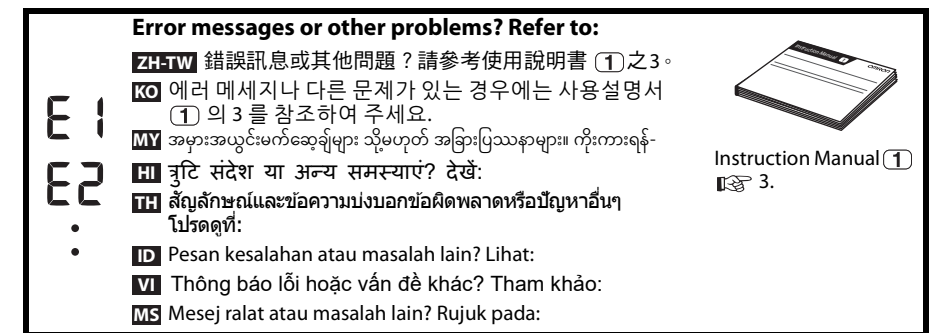

11 Using Memory Functions	
ZH-TW 使用記憶功能	TH การใช้ฟังก์ชันหน่วยความจำ
KO 메모리 기능 사용	ID Menggunakan Fungsi Memori
MY မှတ်တိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း	VI Sử dụng chức năng bộ nhớ
HI मेमोरी फंक्शन का उपयोग करना	MS Menggunakan Fungsi Memori

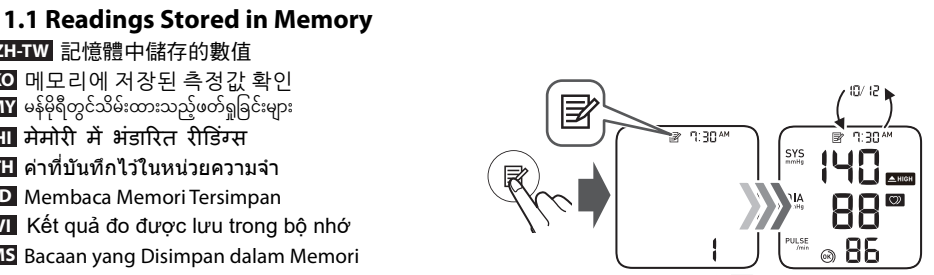

Up to 100 readings are stored. **HI** 100 रीडिंग्स तक संग्रहित करता है।

ZH-TW 最多可儲存 100 組數值。

KO 100 회의 측정값을 저장합니다.

MY မှတ်တိုင်ချက် 100 အထိ သိမ်းထားသည်


TH จัดเก็บการอ่านสูงสุด 100 รายการ

ID Hingga 100 bacaan disimpan.

VI Lưu trữ được lên đến 100 kết quả đo.

MS Sehingga 100 bacaan disimpan.

11.1 Readings Stored in Memory

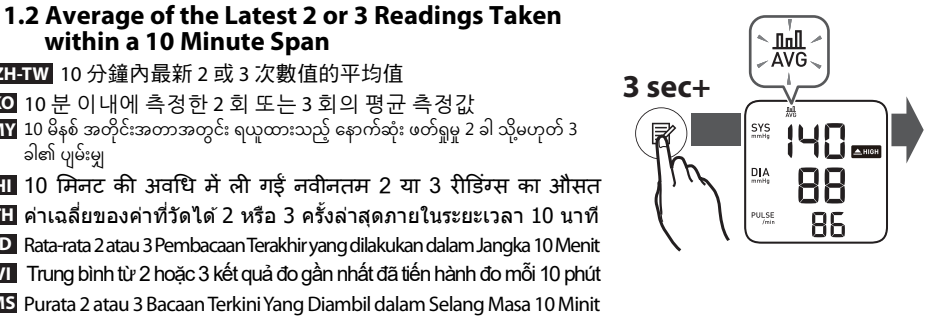

HI 10 मिनट की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 मिनट की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 मिनट की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 मिनट की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút

MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

HI सभी रीडिंग्स को हटाना

TH การลบค่าทั้งหมด

ID Menghapus Semua Pembacaan

VI Xóa tất cả kết quả đo

MS Memadamkan Semua Bacaan

HI 10 มินิต की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत

TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit

VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút