


Comment connecter NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus à mon smartphone Android ou iOS ?

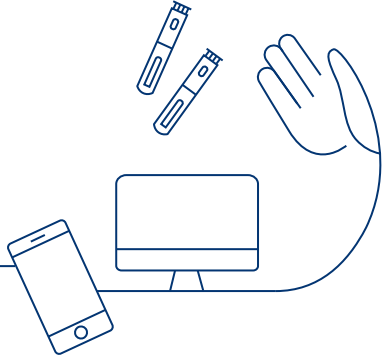



De quoi votre smartphone a-t-il besoin pour se connecter ?

Votre smartphone doit être compatible avec NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus.

Vous avez des problèmes ? Vérification :

- ✓ Votre smartphone est-il pourvu de la technologie NFC (Near Field Communication) ?
- ✓ Le fabricant de l'application prend-il en charge votre smartphone et votre système d'exploitation ? Consultez leur liste de compatibilité.
- ✓ Avez-vous effectué la mise à jour vers la dernière version de l'application ?

L'emplacement du point NFC varie en fonction du modèle de smartphone. Il est important que vous teniez votre stylo dans la bonne façon à côté de votre téléphone. Voici quelques exemples :

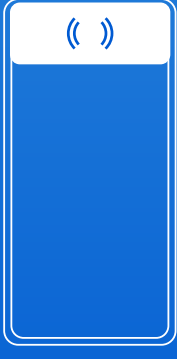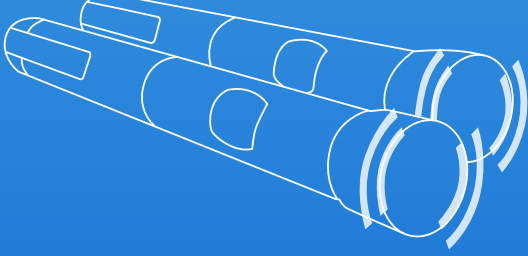

iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12, 13, 14



Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S21



Huawei P10 Lite, P20, P30 Pro, P40 Pro

En cas de doute, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation de votre smartphone ou contacter votre fournisseur pour confirmer l'emplacement du point NFC.

Conseils pour vous aider à vous connecter :

- Maintenez le téléphone sur une surface plane et placez le stylo dessus (pour les téléphones iOS).
- Placez le stylo au milieu du point NFC.
- Vérifiez si le compteur de doses est à 0. Il n'est pas possible de transférer le journal des doses lorsqu'une injection est en cours.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils NFC, comme des cartes de crédit ou de voyage, à proximité lorsque vous scannez le stylo.
- Si votre journal des doses est plein, le transfert de toutes les données peut prendre plus de 10 secondes. Déplacer le NovoPen® en dehors de la plage du point NFC pourrait rendre le transfert du journal des doses incomplet, alors gardez le stylo au milieu du point NFC tout au long de l'opération.
- Si le stylo est à court de batterie (affiche « Fin » ou un écran vierge), il n'est pas possible de transférer le journal des doses, et le stylo devra peut-être être remplacé. Vous pouvez toujours utiliser le stylo pour effectuer des injections.

Systèmes d'exploitation et applications actuellement pris en charge :

Certains smartphones compatibles avec NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus peuvent ne pas être compatibles avec les applications de certains fabricants. Vérifiez la liste de compatibilité du fabricant de votre application :

- Les modèles de smartphones indiqués ici ne constituent pas une liste exhaustive ; ils ne sont présentés qu'à titre de référence. NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus sont compatibles avec la plupart des smartphones Android version 8 et ultérieure et iOS version 13 et ultérieure.
- NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus ne sont pas toujours compatibles avec l'iPhone 7 et le Samsung Galaxy S6. Il est recommandé d'utiliser d'autres smartphones.

	Modèles	Systèmes d'exploitation
Apple	iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Pro, SE, 12, 12 Mini, 12 Pro, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max , SE 2, iPhone 14, iPhone 14Pro	iOS 13: 1.1, .2, .2.3, .3, .3.1, .4, .4.1, .5, .6, .6.1, .7 iOS 14: 0.1, 0.2, 2.1, .3, .4.1, .4.2, .5.1, .6, .7, 7.1, .8 iOS 15: 0, .0.2, .1, .2 iOS 16: 0, .6 iOS 17: 0
ASUS	ROG Phone 5	Android: 11
AXON	Axon 20	Android: 10
Google	Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7a, Pixel 7	Android: 8.1.0, 10, 13, 14
Huawei	P: P10 Lite, P20, P30, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50, P50 Pro, P Smart 2019, P8 Lite, P40 Pro Mate: 20, 20X, 40, 40E, 40 Pro, 30, 10 Lite Honor: 10, X10 Max, 20, 20 Pro, V20, V30, 30, 30 Pro, 30 Pro+ Nova: 5 Pro, 6, 7, 7 Pro, 9s, Y70	Android: 8, 9, 10 , 13, 14 HarmonyOS: 2.0.0, 2.0.1
iQOO	iQOO 3, iQOO 5, Neo5, 5 Pro, Neo 5 Vitality, Z1	Android: 10, 11
Lenovo	K12 Pro	Android: 10
LG	Nexus 5X	Android: 8
Meizu	Meizu 17, Meizu 17 Pro, Meizu 18, Meizu 18 Pro	Android: 10, 11
Mi	Mi: 8, 9, 10, 10 Lite, 10X Pro, Zoom 11 Lite, 11 Pro, 11 Ultra, Civi Redmi: 10 Pro, Note 8 Pro, K30i, K30s, K30 Pro Mix 4	Android: 10, 11, 12
Motorola	Edge s	Android: 11
ONEPLUS	9, 7T Pro, 8, 8T , 8 Pro, 9 Pro, 9 R, 10T 5G, 11 5G, Nord 3 5G	Android: 10, 11, 13, 14
OPPO	Reno3 Pro, Reno4, Reno4 Pro, Find X3 Pro, Ace 2, Reno Ace , Reno, Find X2 pro	Android: 9, 10, 11, 13, 14
realme	GT Neo, X50, X2 Pro, Find X3	Android: 10, 11
Samsung	Galaxy S7 Edge, S8, S8+ , S9, S10, S10+, S20, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S23, Galaxy A41, Galaxy A50s , Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A53, Galaxy A 54, Galaxy A2 Core, Galaxy A7, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A90, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 8, Galaxy A20, Galaxy Grand Prime Plus, Galaxy A10, Galaxy Z Flip 5	Android: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Smartisan OS	R2	Android: 10
Sony	Xperia 10 II	Android: 10
vivo	X: 27 Pro, 50, 50 Pro Plus, 50 Pro, 60, 60 Pro, 70, 70 Pro, 70 Pro+ S: 9	Android: 9, 10, 11

Nos tests de compatibilité garantissent que tous les smartphones et systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus fonctionnent avec NovoPen Echo® Plus et NovoPen® 6. Toutefois, des problèmes de compatibilité peuvent survenir en raison de limites de test ou de spécification.

Quelles applications puis-je utiliser ?

Pour connaître les différentes applications pour le diabète compatibles dans votre pays, veuillez contacter votre service client Novo Nordisk local.