



momcozy

Mobile Flow™

Guia de início rápido



Search and install the Momcozy App from

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Passo 1:

Para começar, procure a aplicação Momcozy na loja de aplicações do seu smartphone, seja na App Store ou na Google Play Store. A aplicação é compatível com as versões iOS 13 e Android 8.0 ou superior. Tenha em atenção que a ligação Bluetooth da aplicação pode depender do smartphone ligado ao dispositivo.


Passo 2:


Após a instalação, registe a sua conta. Se já tiver uma conta Momcozy, inicie sessão.

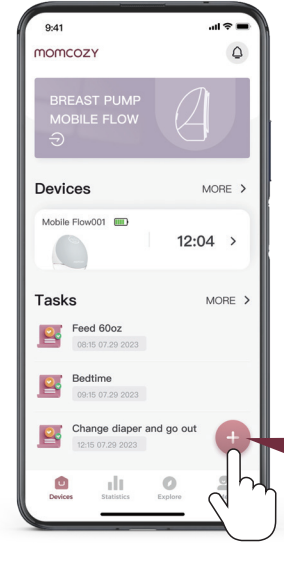

Passo 3:

Certifique-se de que tem o Bluetooth ativado no seu telemóvel e que a bomba tira-leite está ligada. Adicione dispositivos através dos botões "+" e "Dispositivos".

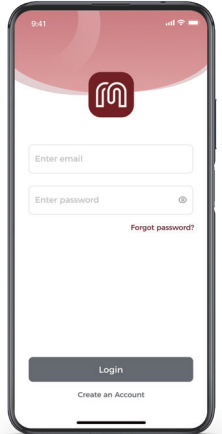

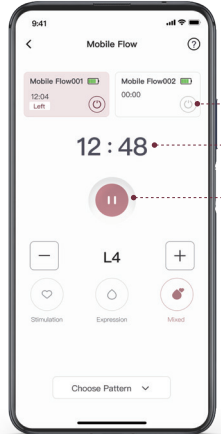

Desligar

Tempo de utilização


Pausar/Continuar

Nível de Sucção

Seleção de modo

Passo 4:

Após a associação do dispositivo à aplicação, utilize a aplicação para controlar a bomba tira-leite.

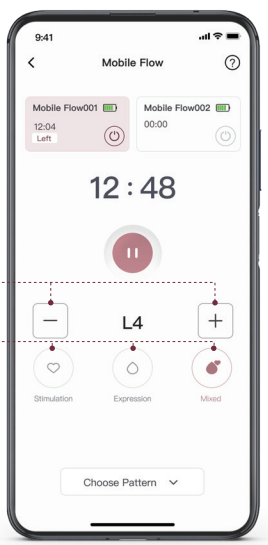


1

2

3

Diretrizes de instalação

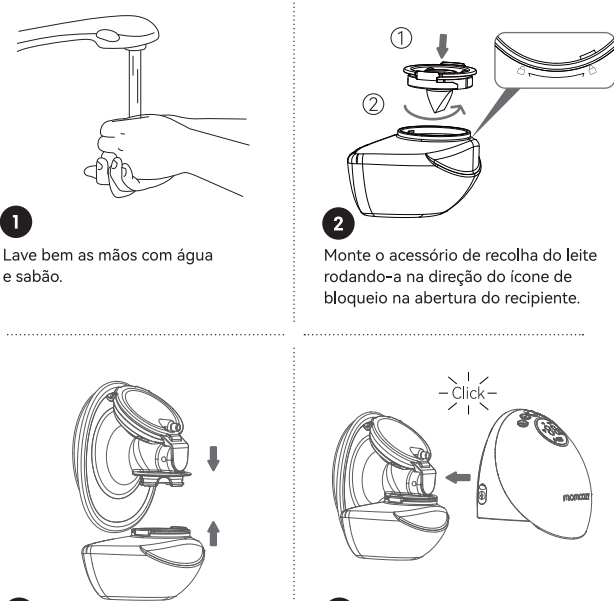

- Lave bem as mãos com água e sabão.
- Monte o acessório de recolha do leite rodando-a na direção do ícone de bloqueio na abertura do recipiente.
- Fixe o funil à abertura do recipiente e monte-o com o coletor de leite.
- Monte a unidade do motor e o funil.

Limpeza e esterilização

***Peças não laváveis**

Motor da bomba tira-leite

***Peças laváveis**

Funil, Diafragma, Coletor de leite, Válvula

Limpeza e esterilização das peças laváveis

1. Lave com água e sabão (40-60 °C) durante 3-5 minutos.


2. Utilize água a ferver/vapor/panela de esterilização para esterilização. São necessários 100 °C (212 °F) durante 5-10 minutos.

* Não se recomenda a esterilização das peças da bomba num micro-ondas nem num esterilizador UV. As temperaturas elevadas (> 110 °C) reduzirão a sua vida útil e causarão riscos de segurança.

Caso tenha algum problema com o produto, consulte o vídeo do guia de funcionamento para obter soluções adicionais. Leia o código QR abaixo para aceder ao vídeo do guia de funcionamento.



Luz indicadora da bateria

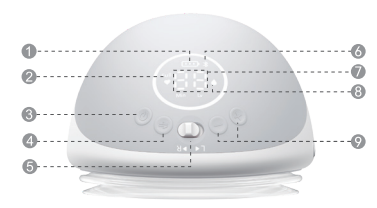

- Nível de bateria
- Lembrete de transbordo do leite
- Premir sem soltar: Ligar/Desligar
- Seleção de modo
- Alternar direção
- Indicador de Bluetooth
- Tempo de utilização/Nível de sucção
- Indicador de modo
- Aumentar/Diminuir

Sugestões

1) A vida útil prevista para as peças laváveis é de 1 a 3 meses. Recomenda-se que substitua as peças laváveis após um longo período de armazenamento ou antes de extrair leite para outra criança.

2) A bomba tira-leite desliga-se automaticamente após utilizá-la durante 30 minutos.

3) Se sentir irritação ou desconforto, utilize o dedo para parar a sucção entre o funil e o tecido mamário. Interrompa a utilização do dispositivo e consulte um/uma profissional de saúde.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail: support@momcozy.com

4

5

6