

正面

120mm

momcozy

Wearable brystpumpe


Veiledning for montering (se brukerhåndboken for ytterligere detaljer)

*Sørg for at hendene dine er rene før montering.


1. Koble membranen og ventilen til koblingsdelen.




2. Koble montert koblingsdel til melkeoppsamleren.

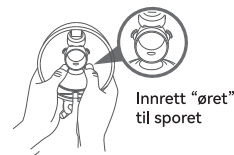

3. Koble brysttrakten til melkeoppsamleren.

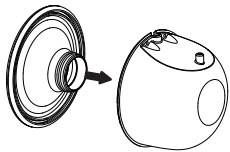


4. Sett sammen pumpen og melkeoppsamleren.

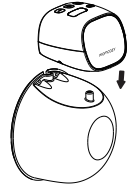

Helling av melk

Hold morsmelkoppsamleren i korrekt retning når du heller melk.

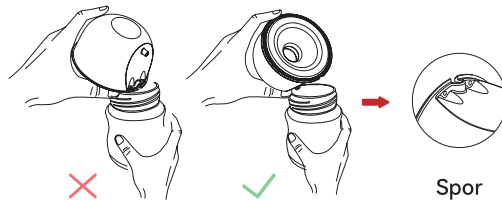


Se feilsøkningsvideoen for flere løsninger, hvis det dukker opp noen problemer under monteringen eller pumpeøkten. Skann QR-koden for å åpne feilsøkningsvideoen.



反面

Slik unngår du melkelekkasje og Pumpetips for mer morsmelk

1. Bøy deg fremover for å sørge for at brystvorten er midt i brysttrakttunnelen. Brystpumpen skal sitte fast most brystet.

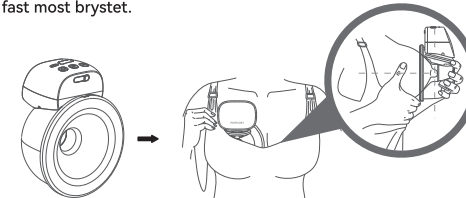

2. Vi anbefaler brukere å bruke en amme-BH med full dekning for å danne en tett forsegling mellom bryst og brysttrakt.
3. Sørg for at pumpen er riktig montert.
4. Pumping må gjøres sittende eller stående, ikke liggende.

Vasking og sterilisering

***Ikke-vaskbare deler:**



Pumpemotor

***Vaskbare deler:**



Melkeoppsamler



Brysttrakt



Membran



Koblingsdel



Ventil

Vi anbefaler bruk av såpevann (40-60 °C) for å rengjøre vaskbare deler i 3-5 minutter. Bruk kokende vann/damp/steriliseringskar for sterilisering, med en temperatur som ikke overskrider 100 °C (212 °F). Kok og steriliser delene innen 5-10 minutter.

*Det anbefales ikke å sterilisere brystpumpen i mikrobølgeovnen, da dette vil forkorte levetiden til tilbehøret.

Tips:

- Den forventede levetiden til de vaskbare delene er 1-3 måneder. Det anbefales å skifte ut de vaskbare delene etter langtidsoppbevaring eller før du skal bruke pumpen til ditt neste barn.
- Brystpumpen slår seg automatisk av etter 30 minutters pumping. Avslutt bruken hvis det oppstår irritasjon eller ubehag og søk hjelp hos helsepersonell.

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål.

support@momcozy.com

150mm