


正面

130 mm

对折线

Jak zabránit úniku mléka a tipy pro odsávání většího množství mateřského mléka.

- 1 Ujistěte se, že je odsávačka dobře sestavena.
- 2 Předkloněte se dopředu, abyste se ujistili, že je bradavka vycentrována v tunelu příruby. Odsávačka by měla být pevně přiložena k vašemu prsu.

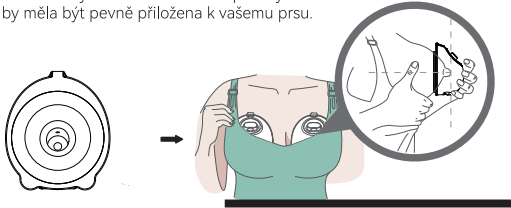

- 3 Doporučujeme uživatelkám nosit plně zakrývající kojící podprsenku, aby se vytvořilo těsné spojení mezi prsy a přírubou.
- 4 Po odsávání se mírně předkloněte, abyste mohli odsávačku z prsu vyjmout.

Tipy

- 1) Předpokládaná životnost omyvatelných dílů je 1–3 měsíce. Doporučujeme vyměnit omyvatelné části po dlouhodobém skladování nebo před odsáváním pro další dítě.
- 2) Po 30 minutách po odsávání se odsávačka automaticky vypne.
- 3) Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemným pocitům, přerušte prstem těsnění mezi přírubou a prsní tkání, přestaňte jej používat a vyhledejte lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem.
support@momcozy.com


4

momcozy

Nositelná odsávačka mateřského mléka

Pokyny pro instalaci (další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce)


*Před instalací se ujistěte, že máte čisté ruce.

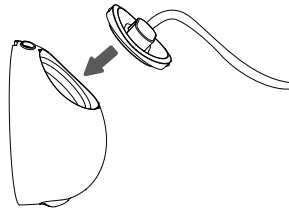

- 1 Připevňte sběrnou nádobku na mléko a zajistěte víko tak, aby těsnilo.



- 2 Opatrně zatlačte ventil do sběrné nádobky na mléko. Ujistěte se, že nevznikají žádné mezery.


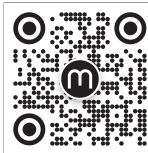


Další řešení naleznete ve videu s návodem k obsluze. Naskenováním nahoře uvedeného QR kódu získáte přístup k videu s návodem k obsluze.


1

背面

- 3 Nejprve vyrovnejte sběrnou nádobku na mléko s horní částí příruby a poté ji přitlačte, abyste zajistili těsné spojení.

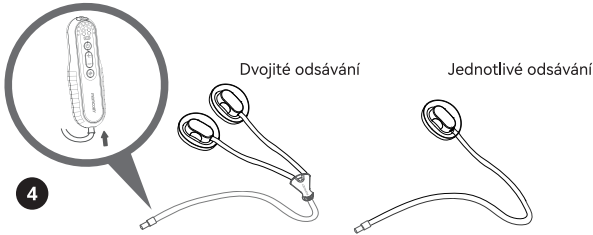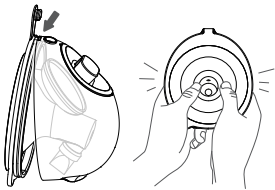

Připojte dlouhý konec hadičky k motoru odsávačky.

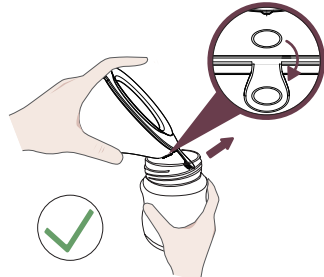

Nalévání mléka

Při nalévání mléka dbejte na to, abyste sběrnou nádobu drželi ve správném směru. Poté vylijte mléko z přírubového tunelu.


V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem.
support@momcozy.com

2

Čištění a sterilizace

*Neomyvatelné díly

Hadice
Motor odsávačky

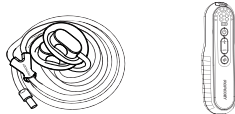

* Omyvatelné díly



Příruba



Ventil




Sběrná nádržka na mléko

Čištění a sterilizace omyvatelných dílů
1. Čistěte mýdlovou vodou (40–60°C) po dobu 3–5 minut.
2. Ke sterilizaci použijte vroucí vodu/paru/sterilizační nádobu. Je zapotřebí teplota 100°C (212°F) po dobu 5–10 minut.

* Nedoporučuje se části odsávačky sterilizovat v mikrovlnné troubě ani v UV sterilizátoru. Vysoká teplota (>110 °C) zkrátí jejich životnost a způsobí ohrožení bezpečnosti.

Ovládací panel

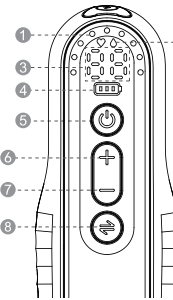

- 1 Indikátor úrovně sání
- 2 Indikátor režimu
- 3 Ukazatel doby provozu / úrovně sání
- 4 Zobrazení baterie
- 5 Zap/Vyp
- 6 Zvýšení
- 7 Snižení
- 8 Volba režimu

• Dlouhým stisknutím a podržením zapnete/vypnete;
• Krátkým stisknutím pozastavíte / pokračujete v odsávání.
• Stimulace Odšťikávání Směšený

3

180 mm