

配對你的Accu-Chek® 逸智血糖機 至mySugr應用程式

Pairing your Accu-Chek® Instant meter with mySugr



1 從 App Store 或 Google Play 下載 mySugr 應用程式

Download mySugr from
App Store or Google Play



mySugr - Diabetes Tracker Log 
Master Your Blood Sugar Levels!
[mySugr GmbH](#)
#43 in Medical
4.2 / 5.7k Ratings
Free - Offers In-App Purchases




2 開啟手提電話內藍牙功能

Enable Bluetooth in your
smartphone settings




3 打開 mySugr 應用程式，完成 帳戶登記後，從左上方選單 (Android 用戶) 或版面下方 (iPhone 用戶) 中選擇 “Connections”

Open mySugr and go to
“Connections” in the side
menu (Android) or at the
bottom of front page (iPhone)

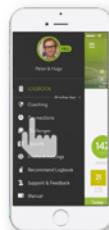

4 選擇 “Accu-Chek Instant” Select “Accu-Chek Instant” from the list

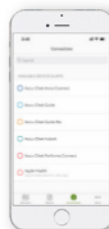

5 按 “Connect now”
Tap “Connect now”




6 在逸智血糖機關閉的狀態下，按住
血糖機機身右側的▼按鈕直至顯示
藍牙符號。配對符號和無線符號將
同時顯示並閃爍

於mySugr中，選擇所顯示的血糖機

With the meter off, press and hold the
▼ button until the Bluetooth symbol
appears. The pairing symbol and
wireless symbol both appear and flash

Select the meter displayed on mySugr

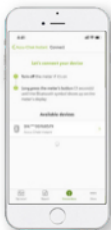

7 按 “Next: enter PIN code”
Tap “Next: enter PIN code”



8 請輸入逸智血糖機背面的
6位PIN碼
Enter the 6-digit pin number
located on the back of your meter



9 配對完成
Done



References:

1. Hompesch M, Kalcher K, Debono F, Morrow L. Significant Improvement of Blood Glucose Control in a High Risk Population of Type 1 Diabetes Using a Mobile Health App – A Retrospective Observational Study (https://www.mysugr.com/static/assets/downloads/science_and_research/attd-2017-poster.pdf).
2. The mySugr Pro is available in Hong Kong and free for all Accu-Chek Guide and Instant blood glucose meter users
3. Latest data (2021) from mySugr (www.mysugr.com/en/diabetes-app/).
4. Kahn R, Fonseca V. Translating the A1C assay. Diabetes Care, 2008;3(8):1704-1707

免責聲明：mySugr 應用程式不提供任何形式的治療或醫學建議。
如你對自己的健康狀況有任何疑問，請向你的醫生查詢。

Accu-Chek 客戶服務熱線 Customer Service Hotline: 2485 7512

ACCUCHEK、ACCUCHEK INSTANT 及 mySugr 為羅氏擁有之商標。

©2021 Roche Diabetes Care

羅氏診斷(香港)有限公司