

HALO
bassinest®

HOSPITAL SERIES

**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION**

Model/Modèle : 3957



Please read manual carefully before use.
For additional information, please scan or visit
<https://www.halosleep.com/pages/bassinest-hospital>

Lire attentivement le manuel avant de l'utiliser. Pour
plus de renseignements, balayer le code ou visiter
<https://www.halosleep.com/pages/bassinest-hospital>

ANY PROBLEMS/QUESTIONS? Contact HALO Customer Service at 1-888-999-HALO or hospitalcustomerservice@halodream.com.
For technical support or complaints, please contact hospitalsupport@halodream.com.

DES PROBLÈMES/QUESTIONS? Communiquer avec le service à la clientèle de HALO au 1 888 999-HALO
ou à l'adresse hospitalcustomerservice@halodream.com.

Pour obtenir du soutien technique ou faire une réclamation, contacter hospitalsupport@halodream.com.



Rev. 2025.06.06

WARNING/CAUTION/NOTE DEFINITION

The words WARNING, CAUTION, and NOTE carry special meanings and should be carefully reviewed.

WARNING

Alerts the reader about a situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. It may also describe potential serious adverse reactions and safety hazards.

CAUTION

Alerts the reader of a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the product or other property. This includes special care necessary for the safe and effective use of the device and the care necessary to avoid damage to a device that may occur as a result of use or misuse.

Note: Provides special information to make maintenance easier or important instructions clearer.

SUMMARY OF SAFETY PRECAUTIONS

Carefully read and strictly follow the warnings and cautions listed on this page. Service only by qualified personnel.

WARNING

- Do not add extra padding or bedding to the sleep area to avoid the risk of infant/newborn injury.
- Only use the mattress provided by the manufacturer. Never add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- Do not exceed the safe working load of the BassiNest Tub, Side Storage Caddies, Removable Basin Storage Bin, or Work Surface.
- Always disinfect the mattress between infant/newborns to avoid the risk of cross-contamination and infection.
- Do not immerse the mattress in cleaning or disinfectant solutions.
- Do not allow liquids to pool on the mattress.
- Always completely dry the mattress, basket, and bassinet before storing, adding linens, or placing a infant/newborn in the basket. Drying the product helps to avoid product damage.

CAUTION

- Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this manual.
- Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.
- Do not use this product to perform medical procedures.
- Do not apply the caster locks to stop the bassinet while in transport or attempt to transport with caster locks applied.
- Do not operate the product on soft or unstable surfaces, such as sand, grass, or gravel, to avoid instability or difficult mobility.
- Only apply the name card to the outside of the basket to avoid risk of access by infant.
- Do not clean, service, or perform maintenance while the product is in use.
- Do not use cleaners that are ether-based as they may damage the product.
- Do not over expose the product to higher concentration disinfectant solutions as these may degrade the product.

INTRODUCTION

Read this manual before operating or maintaining this product. Set methods and procedures to educate and train your staff on the safe operation or maintenance of this product.

NOTES

- This manual is a permanent part of the product and should remain with the product.
- Halo continually seeks advancements in product design and quality. This manual contains the most current product information available at the time of printing. There may be minor discrepancies between your product and this manual. If you have any questions, contact HALO for information.

PRODUCT DESCRIPTION

The HALO Bassinest® Hospital Series swivel sleeper includes a removable basin storage bin and work surface, two side-storage caddies, locking caster wheels, a clear BassiNest tub, and a mattress.

INTENDED USE


The HALO Hospital Bassinest is designed to be a sleeping surface for infant/newborn patients. The device raises and lowers to allow easier access to the infant/newborn. The bassinet tub allows for easy access to the infant/newborn patient by rotating and swiveling for easy positioning and by its ergonomically-friendly retractable front wall. The HALO Hospital Bassinest was also designed for in-hospital transport.

This product is **NOT INTENDED** for patients that can crawl or reposition themselves independently.

CONTRAINDICATIONS None known.

SETUP

1. Remove all shipping and packaging materials from the product prior to use.

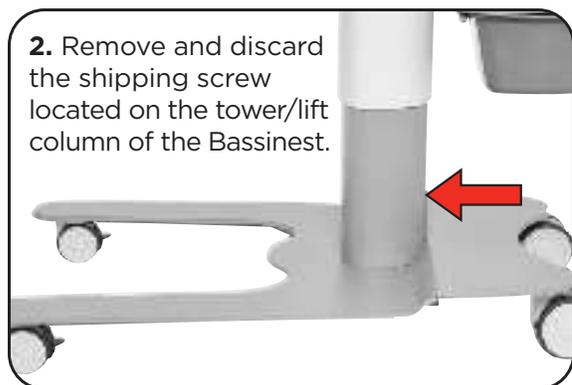


3. Remove wrap from the work surface and removable basin storage bin.
4. Unpack and Install two side storage caddies on each end of clear bassinet tub.
5. Remove mattress from packaging. Clean and disinfect the mattress.
6. Clean and disinfect the entire unit.
7. Place mattress in a tight fitting sheet or pillowcase.
8. Run through operation steps to ensure unit is in working order upon delivery.

SERIAL NUMBER LOCATION

You can find the serial number on the vertical pole below the BassiNest Tub (formatted as “XX-XXXX”).



INTRODUCTION

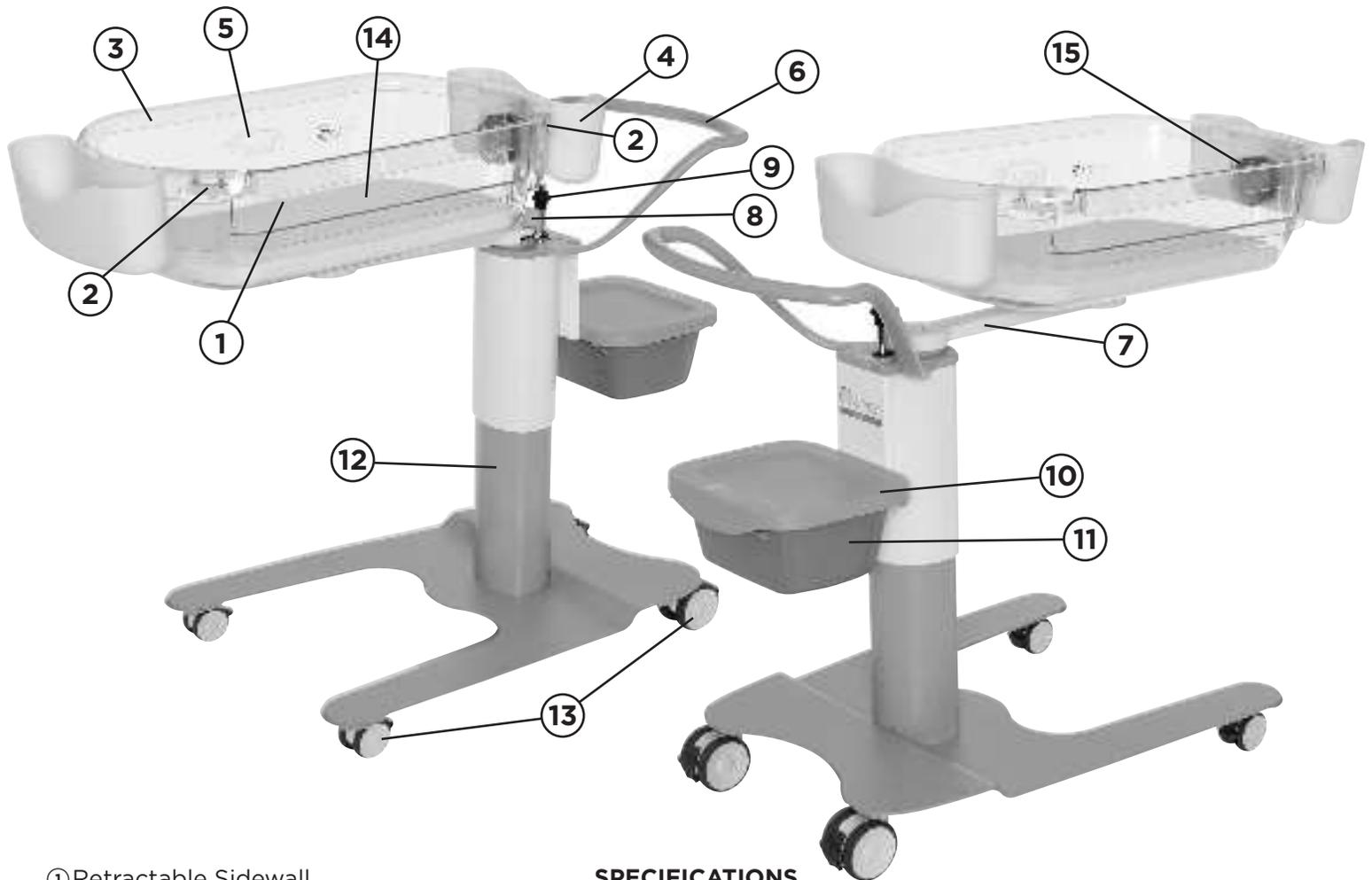

- ① Retractable Sidewall
- ② Sidewall Locks
- ③ BassiNest Tub
- ④ Side Storage Caddy
- ⑤ Information Holder
- ⑥ Mobility Handle
- ⑦ Swivel Arm
- ⑧ Transport Lock
- ⑨ Height Adjustment Knob
- ⑩ Work Surface
- ⑪ Removable Basin Storage Bin
- ⑫ Tower/Lift Column
- ⑬ Locking Caster Wheels
- ⑭ Mattress
- ⑮ Removable Pivot Knobs

ACCESSORIES

Accessories and replacement parts may be available for this product. Call HALO Customer Service: 888-999-HALO (4256).

SPECIFICATIONS


Model Number	3957
Overall Length	49" (124.5 cm)
Overall Width	27.1" (68.8 cm)
BassiNest Tub Dimensions	
Length	34.25" (87 cm)
Width	22" (59.9 cm)
Depth	8.9" (20.1 cm)
Overall Mattress	
Length	25.8" (65.5 cm)
Width	14.2" (36 cm)
Depth	1" (2.5 cm)
Weight Capacity	
BassiNest Tub	20 lb (9.0 kg)
Shelf	25 lb (11.3 kg)
Side Storage Caddy	3.5 lb (1.6 kg) each
Height Range	
High	30.88" (78.4 cm)
Low	20.25" (51.4 cm)
Caster Diameter	4" (10.2 cm) x 2 Rear 3" (7.6 cm) x 2 Front
Bed Clearance Required	4" (10.2 cm)

HALO reserves the right to change specifications without notice.

SYMBOLS

	Do Not Climb/Do Not Exceed 11 kg		Caution
	Proper Positioning for Transport		Serial Number
	Transportation Lock, Rotation Arm Should Be in Locked Position Before Transport		Lot Number
	While squeezing knob, pull up/push down on it to adjust height		Manufacture Date
			Part Number

OPERATION

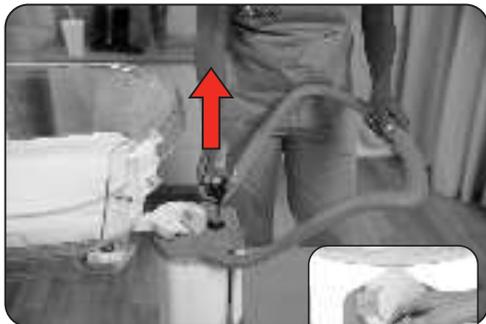

1. To raise the BassiNest, pull upwards on the black height adjustment knob to unlock it and then continue to pull upwards until the desired height is reached. Release the knob to automatically lock the height setting. Roll the front wheels of the BassiNest under the mother's bed.



2. To lower the BassiNest, place your thumb on the top of the metal pole, and use your index and middle fingers to gently pull up on the black height adjustment knob to unlock it. While squeezing the knob up in the unlocked position, push down on the pole to lower to the desired height. Never apply more than 30 lb (13,6 kg) of downwards force.



3. Engaging and disengaging the caster locks

- A.** To engage the caster lock, push down on the pedal with your foot.
B. To disengage the caster lock, lift up on the pedal with your foot.



4. To Lock the retractable sidewall in the raised position, slide the two yellow locks such that they fully engage under the top edges of the retractable side wall.



5. To unlock the retractable sidewall, slide the two yellow locks away from the retractable side wall and under the stationary sidewalls.



6. To lower the retractable side wall, first make sure the yellow sidewall locks are in the unlocked position. To lower the wall, put gentle downward pressure from your hand or forearm in the center of the wall. When you release the pressure, the wall will automatically return to the raised position.

OPERATION



7. To remove the retractable sidewall for cleaning, locate the two removable pivot knobs on either end of the tub. Rotate the knobs counter-clockwise to loosen. Pull the knobs off the BassiNest and remove the retractable sidewall. Reverse these steps to reassemble. Only use the product with the sidewall assembled.



8. Two storage caddies can be placed on the ends of the bassinet tub. To remove, simply lift up. Use the storage caddies to store items mother will need easy access to such as diapers, wipes, feeding supplies, etc.



9. There is an additional covered storage located on the tower of the bassinet. Simply slide a standard basin into the track to attach to the bassinet.

TRANSPORTING THE BASSINET



⚠ CAUTION

- Always engage the transport lock, rotate the swivel arm to the forward position, and orient the BassiNest tub parallel to the base before transporting the unit.
- Do not engage the caster locks to stop the bassinet while in transport.
- Do not operate the product on soft or unstable surfaces, such as sand, grass, or gravel, to avoid instability or difficult mobility.
- Do not attempt to transport with caster locks engaged.
- Once positioned, engage the caster locks before unlocking and using the rotational arm.

REPROCESSING

⚠ WARNING

- Always disinfect the mattress between patients to minimize the risk of cross-contamination and infection.
- Do not immerse the mattress in cleaning or disinfectant solutions.
- Do not allow liquids to pool on the mattress.
- Always completely dry the unit before storing, adding linens, or placing a patient in it.

⚠ CAUTION

- Do not clean, service, or perform maintenance while the product is in use.
- Do not use cleaners that are ether-based as they may damage the product.

CLEANING

Tools Required:

- Mild anti-bacterial soap
 - Soft, lint free cloth (2 or more)
1. Apply the caster locks.
 2. Prepare a mild soap and warm water solution.
 3. Wipe the inside and outside of the basket and mattress with a soft, lint-free cloth moistened with soap and water solution.
 4. Wipe all the bassinet surfaces, with a soft, lint-free cloth moistened with soap and water solution.
 5. Wipe off excess moisture from all surfaces with a dry, soft, lint-free cloth.
 6. Allow the surfaces of the basket and bassinet to dry thoroughly.

⚠️ WARNING

- Always disinfect the mattress between infant / newborns to avoid the risk of cross-contamination and infection.
- Do not immerse the mattress in cleaning or disinfectant solutions.
- Do not allow liquids to pool on the mattress.
- Always completely dry the mattress, basket, and bassinet before storing, adding linens, or placing a infant/newborn in the basket. Drying the product helps to prevent the performance of the product from being impaired.

⚠️ CAUTION

- Do not over expose the product to higher concentration disinfectant solutions as these may degrade the product.
- Do not use cleaners that are ether-based as they may damage the product.

DISINFECTING

Recommended disinfectants:

- Quaternary cleaners (ammonium chloride)
- Phenolic cleaners
- Chlorinated bleach solution (1 part bleach to 100 parts water)
- 70% isopropyl alcohol
- Diluted hydrogen peroxide cleaners <10%

1. Apply recommended disinfectant solution by spray or pre-soaked wipes. Do not soak the product.

Note: Make sure that you follow the disinfectant's instructions for appropriate contact time and rinsing requirements.

2. Wipe all the bassinet surfaces, with a dry soft, lint free cloth, to remove any excess liquid or disinfectant.

3. Allow the surfaces to dry thoroughly.

PREVENTIVE MAINTENANCE INSPECTION

Remove product from service before you perform the preventive maintenance inspection, at minimum once per year and check all items listed. You may need to perform checks more often based on your level of product usage. Service only by qualified personnel.

Inspect the following items:

- All fasteners are secure
- All mechanisms operate freely
- All four casters are free of debris and swivel properly
- Swivel arm is securely fastened to lift column
- Height adjustment and mobility handle is securely fastened to lift column
- Bassinet tub is not sloped. Measured vertically from the bottom of tub, the distances of any two points from the floor should vary by no more than 1.2 in. (3 cm)
- Swivel arm pivots freely when unlocked
- Swivel arm locks in the forward position for transport
- Transport lock unlocks properly
- Work surface is level and parallel to the ground
- BassiNest tub is free of cracks
- Retractable sidewall automatically returns to full upward position without pressure
- Retractable sidewall lowers when unlocked and pressure is applied
- Retractable sidewall is free of cracks or other visible damage
- Retractable sidewall is intact and secure, with pivot knobs assembled
- BassiNest raises and lowers
- Mattress has no rips, tear, punctures, or other damage
- Labels are properly adhered and legible
- BassiNest height locks in place when downward force is applied to handle or sleep area
- BassiNest tub rotates freely 360 degrees

Serial number: _____

Completed by: _____

Date: _____

WARRANTY

Halo Dream, Inc. warrants to the original purchaser the HALO Hospital Bassinet, Model 3957, to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years after date of delivery. HALO's obligation under this warranty is expressly limited to supplying replacement parts for, and/or replacing, at its option, any product which is, at the sole discretion of HALO, found to be defective. If requested by HALO, products or parts for which a warranty claim is made shall be returned prepaid to the factory. Any improper use or any alteration or repair by others in such manner that, in HALO's judgment, affects the product materially and adversely shall void this warranty. Any repair of HALO products using parts not provided or authorized by HALO shall void this warranty. No employee or representative of HALO is authorized to change this warranty in any way.

Warranty exclusion and damage limitations

The express warranty set forth herein is the only warranty applicable to the product. Any and all other warranties, whether express or implied, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose are expressly excluded by HALO. In no event shall HALO be liable for incidental or consequential damages.

To obtain parts and service

Simply call HALO Customer Service a 1-888-999-HALO (4256).

Return authorization

Product cannot be returned without prior approval from the HALO Customer Service Department. HALO reserves the right to charge shipping and restocking fees on returned product. Special, modified, or discontinued products are not subject to return.

Damaged product

ICC Regulations require that claims for damaged product must be made within fifteen (15) days of receipt of the product. Do not accept damaged shipments unless such damage is noted on the delivery receipt at the time of receipt. Upon prompt notification, HALO will file a freight claim with the appropriate carrier for damages incurred. Claims will be limited in amount to the actual replacement cost. In the event that this information is not received by HALO within the fifteen (15) day period following the delivery of the product, or the damage was not noted on the delivery receipt at the time of receipt, the customer will be responsible for payment of the original invoice in full within thirty (30) days of receipt. Claims for any incomplete shipments must be made within thirty (30) days of invoice.

Expected device life

The HALO BassiNest swivel sleeper has a three year minimum expected service life under normal use conditions and with appropriate periodic maintenance.

DÉFINITION D'AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE/REMARQUE

Les mots AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et REMARQUE ont une signification particulière et doivent être examinés attentivement.

AVERTISSEMENT

Avise le lecteur d'une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Un avertissement peut également indiquer de graves réactions indésirables et des risques pour la sécurité.

MISE EN GARDE

Avise le lecteur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée à l'utilisateur ou au patient, ou causer des dommages au produit ou à d'autres équipements. Cela comprend le fait d'apporter le soin particulier nécessaire pour l'utilisation sécuritaire et efficace de l'appareil et le soin nécessaire pour éviter les dommages à un appareil qui pourraient découler de l'utilisation normale ou d'une mauvaise utilisation.

Remarque : Donne de l'information particulière pour faciliter l'entretien ou clarifier les instructions importantes.

RÉSUMÉ DES MESURES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement et suivre à la lettre les avertissements et les mises en garde figurant sur cette page. Le service doit uniquement être effectué par du personnel de service qualifié.

AVERTISSEMENT

- Ne pas ajouter de rembourrage supplémentaire ou de literie supplémentaire dans la couchette afin d'éviter le risque de blessure au nourrisson ou au nouveau-né.
- N'utiliser que le matelas fourni par le fabricant. Ne jamais ajouter d'oreiller, d'édredon ou un autre matelas en guise de rembourrage.
- Ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du bac BassiNest, des pochettes de rangement latérales, du bac de rangement amovible ou de la surface de travail.
- Toujours désinfecter le matelas entre les nourrissons ou nouveau-nés afin d'éviter le risque de contamination croisée et d'infection.
- Ne pas immerger le matelas dans une solution de nettoyage ou désinfectante.
- Ne pas laisser de liquide s'accumuler sur le matelas.
- Toujours sécher entièrement le matelas, le panier et le berceau avant l'entreposage, ou avant d'ajouter des draps ou de placer un nourrisson ou nouveau-né dans le panier. Sécher le produit permet d'éviter de l'endommager.

MISE EN GARDE

- Une utilisation inappropriée du produit peut causer des blessures au patient ou à l'opérateur. Utiliser le produit uniquement selon les instructions du présent manuel.
- Ne pas modifier le produit ou toute composante de celui-ci. Le fait de modifier le produit peut entraîner un fonctionnement imprévisible pouvant causer des blessures au patient ou à l'opérateur. De plus, la modification du produit annule sa garantie.
- Ne pas utiliser ce produit pour effectuer des procédures médicales.
- Ne pas appliquer les freins des roues pour arrêter le berceau pendant le transport ou essayer de le transporter avec les freins appliqués.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces molles ou instables, comme du sable, du gazon ou du gravier, qui peuvent rendre le produit instable ou entraver sa mobilité.
- Toujours apposer la plaque nominative sur l'extérieur du panier afin d'éviter tout risque d'accès par le nourrisson.
- Ne pas nettoyer, réparer ou effectuer l'entretien pendant que le produit est utilisé.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'éther, car ils peuvent endommager le produit.
- Ne pas surexposer le produit à des concentrations élevées de solutions désinfectantes, car elles peuvent entraîner une détérioration du produit.

INTRODUCTION

Veuillez lire le présent manuel avant l'utilisation ou l'entretien du produit. Consultez les méthodes et les procédures pour éduquer et former votre personnel sur l'utilisation ou l'entretien sécuritaires de ce produit.

REMARQUES

- Le présent manuel fait partie intégrante du produit et doit l'accompagner en tout temps.
- Halo cherche toujours à améliorer la conception et la qualité de ses produits. Le présent manuel renferme les renseignements sur le produit les plus récents disponibles au moment de l'impression. Il pourrait y avoir de légères différences entre votre produit et celui décrit dans ce manuel. Pour toute question, communiquer avec HALO pour obtenir des renseignements.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le berceau pivotant HALO BassiNestMD Hospital Series comprend une tour de base, un bac de rangement pour bassine et une surface de travail amovibles, deux pochettes de rangement latérales, des roues avec frein, un bac BassiNest transparent et un matelas.

UTILISATION PRÉVUE

Le HALO Hospital BassiNest est conçu comme une surface de sommeil pour les patients nourrissons ou nouveau-nés. La surface supérieure de l'appareil peut être soulevée et abaissée afin de faciliter l'accès au nourrisson ou nouveau-né. Le bac de berceau offre un accès facile au nourrisson ou nouveau-né grâce à la paroi latérale escamotable ergonomique; de plus, il tourne et pivote, ce qui facilite le positionnement. Le HALO Hospital BassiNest a également été conçu pour le transport à l'hôpital.

Ce produit **N'EST PAS PRÉVU** pour les patients qui peuvent ramper ou se repositionner de façon autonome.

CONTRE-INDICATIONS Aucune connue.

INSTALLATION

1. Retirer tous les matériaux d'expédition et d'emballage du produit avant l'utilisation.

2. Enlever et jeter la vis d'expédition située sur la tour ou colonne de levage du Bassinest.




3. Retirer l'emballage de la surface de travail et du bac de rangement pour bassine amovible.
4. Déballez et installez les deux pochettes de rangements latérales sur chaque extrémité du bac de berceau transparent.
5. Retirer le matelas de l'emballage. Nettoyer et désinfecter le matelas.
6. Nettoyer et désinfecter tout l'appareil.
7. Placer le matelas dans un drap ou une taie d'oreiller bien ajusté.
8. Parcourir les étapes d'utilisation pour s'assurer que l'appareil est en état de marche lors de la livraison.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série se trouve sur la tige verticale sous le bac BassiNest (format « XX-XXXX »).



INTRODUCTION

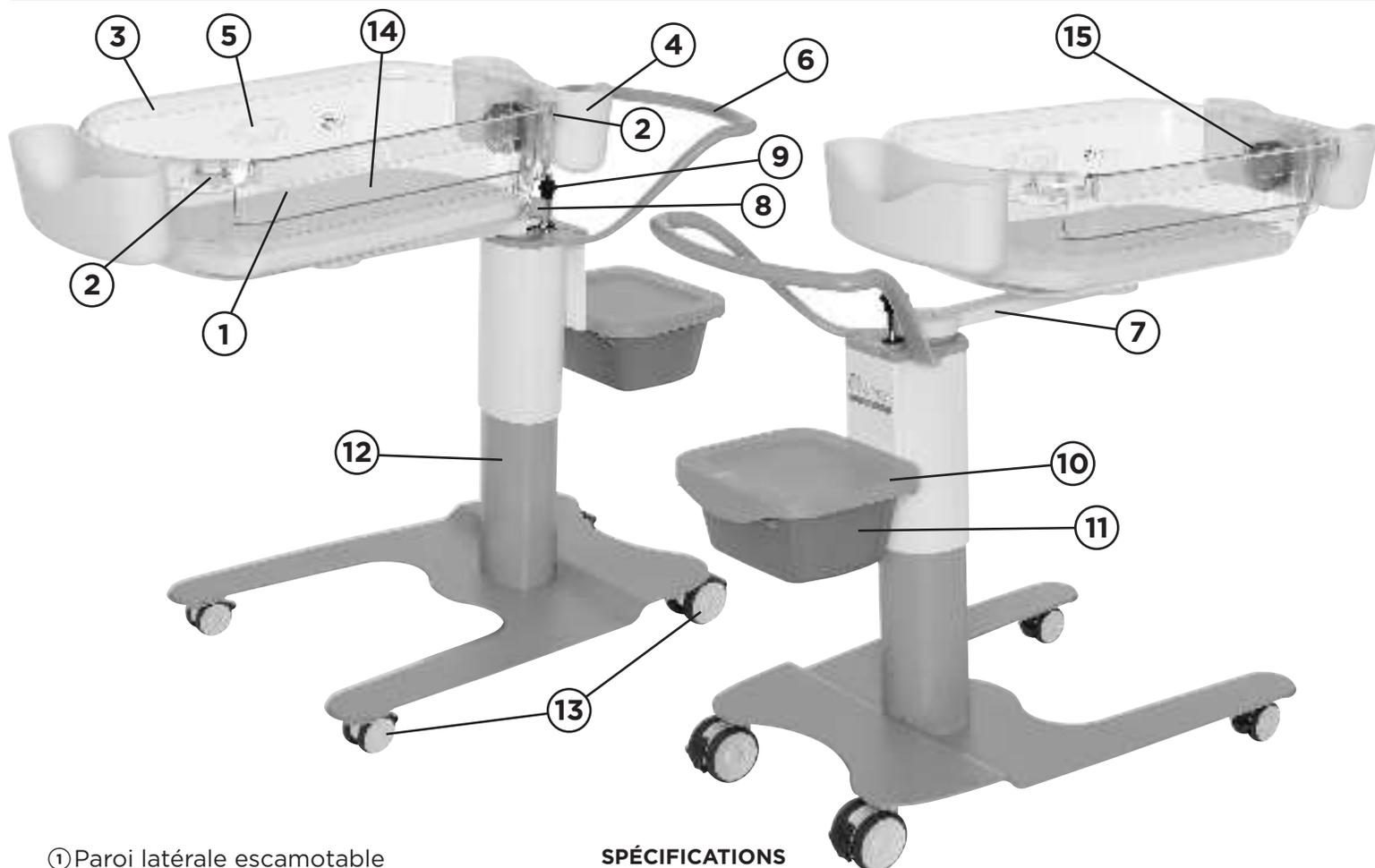

- ① Paroi latérale escamotable
- ② Verrous de la paroi latérale
- ③ Bac BassiNest
- ④ Pochette de rangement latérale
- ⑤ Étui pour les renseignements
- ⑥ Poignée de mobilité
- ⑦ Bras pivotant
- ⑧ Verrou de transport
- ⑨ Molette de réglage de la hauteur
- ⑩ Surface de travail
- ⑪ Bac de rangement pour bassine amovible
- ⑫ Tour/colonne de levage
- ⑬ Roues avec frein
- ⑭ Matelas
- ⑮ Molettes de pivot amovibles

ACCESSOIRES

Des accessoires et des pièces de rechange peuvent être utilisés avec ce produit. Communiquer avec le service à la clientèle de HALO au 1 888 999-HALO (4256).

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	3957
Longueur totale	124,5 cm (49 po)
Largeur totale	68,8 cm (27,1 po)
Dimensions du bac BassiNest	
Longueur	87 cm (34,25 po)
Largeur	59,9 cm (22 po)
Profondeur	20,1 cm (8,9 po)
Matelas total	
Longueur	65,5 cm (25,8 po)
Largeur	36 cm (14,2 po)
Profondeur	2,5 cm (1 po)
Poids maximal	
Bac BassiNest	9,0 kg (20 lb)
Tablette	11,3 kg (25 lb)
Pochette de rangement latérale	1,6 kg (3,5 lb) chacune
Intervalle de hauteur	
Haut	78,4 cm (30,88 po)
Bas	51,4 cm (20,25 po)
Diamètre des roues	2 roues de 10,2 cm (4 po) à l'arrière 2 roues de 7,6 cm (3 po) à l'avant
Dégagement nécessaire pour de lit	10,2 cm (4 po)

HALO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.


SYMBOLES

	Ne pas grimper. Poids limite de 11 kg		Mise en garde
	Position appropriée pour le transport		Numéro de série
	Frein de transport, le bras rotatif doit être verrouillé en position avant le transport		Numéro de lot
	Tout en serrant le bouton, tirez-le vers le haut ou vers le bas pour régler la hauteur.		Date de fabrication
			Numéro de pièce

UTILISATION



1. Pour relever le BassiNest, tirer vers le haut la molette noire de réglage de la hauteur pour la déverrouiller, puis continuer à tirer vers le haut jusqu'à la hauteur désirée. Relâcher la molette pour verrouiller automatiquement le réglage de la hauteur. Faire rouler les roues avant du BassiNest sous le lit de la mère.

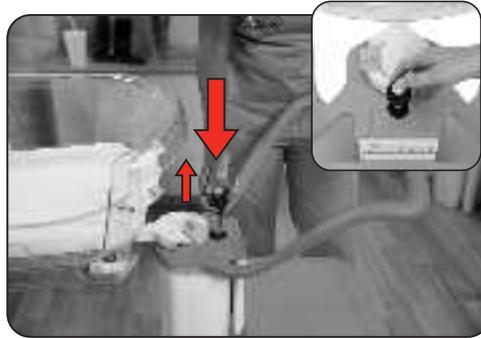

2. Pour abaisser le BassiNest, placer le pouce sur le dessus de la tige en métal et avec l'index et le majeur, tirer délicatement sur la molette noire de réglage de la hauteur afin de la déverrouiller. Tout en tirant la molette vers le haut en position déverrouillée, pousser la tige vers le bas à la hauteur désirée. Ne jamais appliquer plus de 13,6 kg (30 lb) de force vers le bas.



3. Engager et désengager les freins des roues
A. Pour engager le frein de la roue, appuyer sur la pédale avec le pied.
B. Pour dégager le frein de roue, soulever la pédale avec le pied.



4. Pour verrouiller la paroi latérale escamotable en position relevée, faire glisser les deux verrous jaunes de façon à ce qu'ils s'engagent complètement engagés sous les bords supérieurs de la paroi latérale escamotable.



5. Pour déverrouiller la paroi latérale escamotable, glisser les deux verrous jaunes hors de la paroi latérale escamotable et sous les parois latérales fixes.



6. Pour abaisser la paroi latérale escamotable, il faut d'abord s'assurer que les verrous jaunes de la paroi latérale sont en position déverrouillée. Pour abaisser la paroi, appliquer une pression délicate vers le bas avec la main ou l'avant-bras dans le centre de la paroi. Lors du relâchement de la pression, la paroi retourne automatiquement à la position relevée.

UTILISATION



7. Pour retirer la paroi latérale escamotable pour le nettoyage, repérer les deux molettes de pivot amovibles à chaque extrémité du bac. Tourner les molettes dans le sens antihoraire pour desserrer. Tirer les molettes hors du BassiNest et retirer la paroi latérale escamotable. Inverser ces étapes pour réassembler. Utiliser le produit uniquement lorsque la paroi latérale est assemblée.



8. Les deux pochettes de rangement peuvent être placées aux extrémités du bac du berceau. Pour les retirer, il suffit de les soulever. Utiliser les deux pochettes de rangement pour ranger les articles auxquels la mère devra accéder facilement comme les couches, les lingettes, les articles d'allaitement, etc.



9. Un autre espace de rangement couvert est situé sur la tour du berceau. Il suffit de glisser une baignoire standard dans la glissière pour la fixer au berceau.

TRANSPORT DU BERCEAU



⚠ MISE EN GARDE

- Toujours engager le verrou de transport, tourner le bras pivotant en position avant et orienter le bac du BassiNest parallèlement à la base avant de transporter l'appareil.
- Ne pas appliquer les freins des roulettes pour arrêter le berceau pendant le transport.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces molles ou instables, comme du sable, du gazon ou du gravier, qui peuvent rendre le produit instable ou entraver sa mobilité.
- Ne pas tenter de transporter le produit lorsque les freins des roues sont appliqués.
- Une fois en place, engager les freins des roues avant de déverrouiller et d'utiliser le bras de rotation.

RECONDITIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Toujours désinfecter le matelas entre les nourrissons ou nouveau-nés afin de minimiser le risque de contamination croisée et d'infection.
- Ne pas immerger le matelas dans une solution de nettoyage ou désinfectante.
- Ne pas laisser de liquide s'accumuler sur le matelas.
- Toujours sécher complètement le berceau avant de le ranger, d'ajouter de la literie ou d'y placer un nourrisson ou nouveau-né.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne pas nettoyer, réparer ou effectuer l'entretien pendant que le produit est utilisé.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'éther, car ils peuvent endommager le produit.

NETTOYAGE

Matériel nécessaire :

- Savon antibactérien doux • Linges doux non pelucheux (2 ou plus)

1. Appliquer les freins des roues.
2. Préparer une solution de savon doux et d'eau chaude.
3. Essuyer l'intérieur et l'extérieur du panier et le matelas avec un linge doux non pelucheux humidifié avec la solution de savon et d'eau.
4. Essuyer toutes les surfaces du berceau avec un linge doux non pelucheux humidifié avec la solution de savon et d'eau.
5. Essuyer l'excédent d'humidité de toutes les surfaces avec un linge doux non pelucheux sec.
6. Bien laisser sécher les surfaces du panier et du berceau.

⚠ AVERTISSEMENT

- Toujours désinfecter le matelas entre les nourrissons ou nouveau-nés afin d'éviter le risque de contamination croisée et d'infection.
- Ne pas immerger le matelas dans une solution de nettoyage ou désinfectante.
- Ne pas laisser de liquide s'accumuler sur le matelas.
- Toujours sécher entièrement le matelas, le panier et le berceau avant l'entreposage, ou avant d'ajouter des draps ou de placer un nourrisson ou nouveau-né dans le panier. Le fait de sécher le produit aide à prévenir la détérioration du rendement du produit.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne pas surexposer le produit à des concentrations élevées de solutions désinfectantes, car elles peuvent entraîner une détérioration du produit.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'éther, car ils peuvent endommager le produit.

DÉSINFECTION

Désinfectants recommandés :

- Nettoyants quaternaires (chlorure d'ammonium)
- Nettoyants phénoliques
- Solution d'eau de Javel chlorée (1 partie d'eau de Javel pour 100 parties d'eau)
- Alcool isopropylique à 70 %
- Nettoyants au peroxyde d'hydrogène dilués <10 %

1. Appliquer la solution désinfectante recommandée par vaporisation ou avec des lingettes préalablement trempées. Ne pas tremper le produit.

Remarque : S'assurer de suivre les instructions du désinfectant en ce qui concerne le temps de contact et les exigences de rinçage.

2. Essuyer toutes les surfaces du berceau, avec un linge doux non pelucheux sec pour enlever l'excédent de liquide ou de désinfectant.
3. Laisser sécher complètement les surfaces.

INSPECTION D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Mettre le produit hors service avant d'effectuer l'inspection dans le cadre de l'entretien préventif, au moins une fois par an, et vérifier tous les éléments répertoriés. Il pourrait être nécessaire d'effectuer les vérifications plus souvent en fonction de la fréquence d'utilisation du produit. Le service doit uniquement être effectué par du personnel de service qualifié.

Inspecter les éléments suivants :

- _____ Toutes les bandes de fixation sont bien fixées
- _____ Tous les mécanismes fonctionnent librement
- _____ Les quatre roues sont exemptes de débris et pivotent correctement
- _____ Le bras pivotant est solidement fixé à la colonne de levage
- _____ La poignée de réglage de la hauteur et de mobilité est bien fixée à la colonne de levage
- _____ Le bac du BassiNest n'est pas incliné. Mesurée verticalement à partir du fond du bac, la distance entre deux points quelconques par rapport au sol ne doit pas varier de plus de 3 cm (1,2 po).
- _____ Le bras pivotant pivote librement lorsqu'il est déverrouillé
- _____ Le bras pivotant se bloque en position avant pour le transport
- _____ Le frein de transport se dégage correctement
- _____ La surface de travail est au niveau et parallèle au sol
- _____ Le bac BassiNest est exempt de fissures
- _____ La paroi latérale escamotable retourne automatiquement en position verticale complète sans pression
- _____ La paroi latérale escamotable s'abaisse lorsqu'elle est déverrouillée et qu'une pression est appliquée
- _____ La paroi latérale escamotable est exempte de fissures ou d'autres dommages visibles
- _____ La paroi latérale escamotable est intacte et sécurisée, et les molettes de pivot sont assemblées
- _____ Le BassiNest s'abaisse et se soulève
- _____ Le matelas ne présente aucune déchirure, perforation ou autre dommage
- _____ Les étiquettes sont correctement collées et lisibles
- _____ Le BassiNest se bloque en hauteur lorsqu'une force descendante est appliquée à la poignée ou à la couchette
- _____ Le bac BassiNest pivote librement à 360 degrés

Numéro de série : _____

Rempli par : _____

Date : _____

GARANTIE

Halo Dream, Inc. garantit à l'acheteur original que le HALO Hospital Bassinet, modèle 3957, est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux (2) ans suivant la date de livraison. L'obligation de HALO en vertu de cette garantie se limite expressément à fournir les pièces de rechange et/ou le remplacement, à son choix, de tout produit qui, à la seule discrétion de HALO, est jugé défectueux. Si HALO le demande, les produits ou les pièces concernés par la réclamation au titre de la garantie doivent lui être retournés, port payé, à l'usine. Toute utilisation inappropriée, ou modification ou réparation effectuée par d'autres personnes d'une façon qui, selon le jugement de HALO, affecte le produit de façon importante et négative, annulera la garantie. Toute réparation des produits de HALO à l'aide de pièces qui ne sont pas fournies ou autorisées par HALO annulera la présente garantie. Aucun employé ou représentant de HALO n'est autorisé à modifier la présente garantie de quelque façon que ce soit.

Exclusion de la garantie et limitations des dommages

La garantie expresse établie dans le présent document est la seule garantie applicable au produit. Toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, sont expressément rejetées par HALO. En aucun cas HALO ne sera tenue responsable des dommages accessoires ou indirects.

Pour obtenir pièces et service

Appeler simplement le service à la clientèle de HALO au 1 888 999-HALO (4256).

Autorisation de retour

Un produit ne peut pas être retourné sans l'approbation préalable du département du service à la clientèle de HALO. HALO se réserve le droit de facturer des frais d'expédition et de restockage pour un produit retourné. Les produits spéciaux, modifiés ou abandonnés ne peuvent pas être retournés.

Produit endommagé

La réglementation de l'ICC exige que les réclamations pour un produit endommagé soient présentées dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du produit. Vous ne devez pas accepter les envois endommagés à moins que de tels dommages soient notés sur le reçu de livraison au moment de la réception. À la réception d'un avis rapide, HALO présentera une réclamation de transport au transporteur pour les dommages subis. Les réclamations se limiteront au montant du coût réel de remplacement. Dans l'éventualité où HALO ne reçoit pas cette information dans les quinze (15) jours qui suivent la livraison du produit, ou si les dommages n'ont pas été notés sur le reçu de livraison au moment de la livraison, le client sera responsable du paiement complet de la facture originale dans les trente (30) jours qui suivent la réception. Les réclamations pour les envois incomplets doivent être présentées dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture.

Durée de vie prévue de l'appareil

Le berceau pivotant HALO BassiNest a une durée de service prévue d'un minimum de trois ans dans des conditions d'utilisation normales et avec l'entretien périodique approprié.

CUSTOMER SERVICE/SERVICE À LA CLIENTÈLE

FOR QUESTIONS OR OTHER SERVICE ISSUES: Please contact HALO. Our friendly, specially trained support team will be happy to assist you.

POUR TOUTE QUESTION OU TOUT AUTRE PROBLÈME DE SERVICE : Veuillez communiquer avec HALO. Notre équipe de soutien formée et amicale se fera un plaisir de vous aider.

1-888-999-HALO (4256)
EMAIL/COURRIEL : hospitalsupport@halodream.com



Halo Dream, Inc.
213 West 35th Street
Suite 12W
New York, NY 10001
1-888-999-HALO

© 2024 HALO Dream, Inc. All rights reserved.

"HALO," the HALO logo, "BassiNest" and HALO BassiNest® logo design are trademarks or registered trademarks of Halo Dream, Inc. in the U.S. and other countries. HALO products comply with government regulations applicable in the country of sale. Patent: www.halosleep.com/patents. Made in China.

© Halo Dream Inc, 2024. Tous droits réservés.

« HALO », le logo HALO, « BassiNest » et le design du logo HALO BassiNestMD sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Halo Dream, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits HALO sont conformes aux règlements gouvernementaux applicables dans le pays de vente.

Brevet : www.halosleep.com/patents. Fabriqué en Chine.