

[Manuals.plus](#) /

> [YUNCHI](#) /

> YUNCHI C2 Electric Sonic Toothbrush User Manual

YUNCHI C2

YUNCHI C2 Electric Sonic Toothbrush User Manual

Model: C2
Brand: YUNCHI

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the YUNCHI C2 Electric Sonic Toothbrush. This manual provides essential information for the safe and effective use of your new toothbrush. The YUNCHI C2 is designed to deliver a powerful and gentle cleaning experience with its advanced sonic technology, promoting excellent oral hygiene for both adults and children.

2. PACKAGE CONTENTS

Please check the box for the following items:

- YUNCHI C2 Electric Toothbrush Handle
- 8 x Replacement Brush Heads
- USB-C Charging Cable (Charger not included)
- Travel Case
- Protective Cover
- User Manual (this document)

3. PRODUCT OVERVIEW

Familiarize yourself with the components of your YUNCHI C2 Electric Sonic Toothbrush.



The YUNCHI C2 toothbrush features an intelligent mode memory, a 2-minute timer, and 30-second interval reminders for effective brushing.

Key Components:

- **Brush Head:** Detachable, with W-shaped bristles and fading blue indicator bristles.
- **Power Button:** Turns the toothbrush on/off and cycles through modes.
- **Mode Indicator Lights:** Display the currently selected cleaning mode.
- **Charging Port:** USB-C port located at the bottom of the handle.

4. SETUP

4.1 Initial Charging

Before first use, fully charge your toothbrush. A full charge takes approximately 3 hours and provides 30-60 days of use

(based on 2 minutes of brushing, twice daily).

1. Locate the USB-C charging port at the bottom of the toothbrush handle.
2. Gently remove the protective cover from the charging port.
3. Connect the provided USB-C cable to the toothbrush and plug the other end into a compatible USB power adapter (not included).
4. The indicator light will show charging status. Once fully charged, disconnect the cable and replace the protective cover to maintain water resistance.

**Wochenlange Leistung
Schnellladung**

3 Stunden = 55 Tage

3-Stunden-Ladung 55 Tage Laufzeit

**Bei 2 x täglicher Anwendung à 2 Minuten.*

The toothbrush offers weeks of power with fast charging: 3 hours of charging provides approximately 55 days of runtime.

4.2 Attaching the Brush Head

Align the brush head with the metal shaft on the toothbrush handle and push it down firmly until it clicks into place. Ensure it is securely attached before use.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 Power On/Off and Mode Selection

1. Press the power button once to turn on the toothbrush. It will start in the last used mode (Intelligent Mode Memory).
2. Press the power button repeatedly to cycle through the 5 cleaning modes: White, Clean, Soft, Polish, Gum Care.
3. To turn off the toothbrush, press and hold the power button for 2 seconds, or cycle through all modes until it turns off.

5 Putzmodi



-  **White Modus**
Hilft, oberflächliche Verfärbungen zu entfernen
-  **Clean Modus**
Für die tägliche gründliche Reinigung
-  **Soft Modus**
Schonende Reinigung für empfindliche Zähne
-  **Polish Modus**
Verleiht Ihren Zähnen mehr Glanz
-  **Gum Care Modus**
Sorgt für ein beruhigendes Massagegefühl

Choose from 5 cleaning modes: White (removes surface stains), Clean (daily thorough cleaning), Soft (gentle for sensitive teeth), Polish (adds shine), and Gum Care (soothing massage).

5.2 Brushing Technique and Smart Timer

The YUNCHI C2 features a built-in 2-minute timer and 30-second interval reminders to guide you through a complete brushing cycle.

1. Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
2. Place the brush head against your teeth at a slight angle towards the gumline.
3. Press the power button to start. Gently move the brush head slowly across your teeth, allowing the sonic vibrations to do the work. Do not scrub vigorously.
4. The toothbrush will pause briefly every 30 seconds to indicate it's time to move to a different quadrant of your mouth.

5. After 2 minutes, the toothbrush will automatically turn off, signaling the completion of the recommended brushing time.



Intelligiver Modus-Speicher

2-Minuten-Timer

30-Sekunden-Intervall

30s 30s

2 Mins

30s 30s

The intelligent mode memory, 2-minute timer, and 30-second interval ensure a comprehensive and balanced cleaning of all areas of your mouth.

6. MAINTENANCE

6.1 Cleaning

After each use:

- Rinse the brush head thoroughly under running water.
- Wipe the toothbrush handle with a damp cloth. The YUNCHI C2 is IPX7 waterproof, making it safe for use in the shower and easy to clean.

- Do not immerse the charging base in water.



The IPX7 waterproof design ensures the toothbrush is safe for shower use and easy to clean under running water.

6.2 Replacing Brush Heads

For optimal cleaning performance and hygiene, it is recommended to replace the brush head every 3 months, or sooner if the bristles become frayed. The blue indicator bristles on your brush head will fade over time, providing a visual signal when it's time for a replacement.

8 Bürstenköpfe = Vorrat für bis zu **24** Monate



Kompaktes Reiseetui

Für hygienisch saubere Bürstenköpfe unterwegs

**Wir empfehlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln, um die Reinigungsleistung optimal zu erhalten. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach individuellem Putzverhalten variieren.*

The package includes 8 brush heads, providing a supply for up to 24 months. A compact travel case is also included for hygienic storage on the go.

Weiche, W-förmige Bürstenköpfe

Mit verblassenden Borsten




W-förmige Bürstenköpfe

Passen sich den meisten Zahnkonturen an



Verblassende blaue Borsten

Ihr visuelles Signal zum Wechsel des Bürstenkopfes

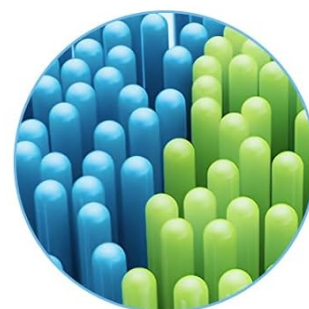

Abgerundete Borstenspitzen

Für eine schonende Erfahrung an Zähnen und Zahnfleisch

The soft, W-shaped brush heads adapt to most tooth contours. Fading blue bristles provide a visual signal to change the brush head. Rounded bristle tips ensure a gentle experience on teeth and gums.

7. TROUBLESHOOTING

| Problem | Possible Cause | Solution |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Toothbrush does not turn on. | Battery is depleted. | Charge the toothbrush for at least 3 hours. |
| Vibration is weak. | Low battery. | Charge the toothbrush. |
| Brush head feels loose. | Brush head not properly attached. | Remove and reattach the brush head, ensuring it clicks into place. |

| Problem | Possible Cause | Solution |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Charging indicator not working. | Charging cable or adapter issue. | Try a different USB-C cable or power adapter. Ensure the charging port cover is fully open. |

8. SPECIFICATIONS

Model Name: C2

Vibration Frequency: 40,000 VPM (Vibrations Per Minute)

Cleaning Modes: 5 (White, Clean, Soft, Polish, Gum Care)

Battery Type: 1 Lithium Ion (included)

Charging Time: Approximately 3 hours (USB-C)

Battery Life: 30-60 days (based on 2x daily use for 2 minutes)

Waterproof Rating: IPX7

Timer: 2-minute auto-timer with 30-second interval reminders

Bristle Material: Soft Nylon

Handle Material: Plastic

Target Audience: 12 years of age and older

Product Dimensions: 23.4 x 11.8 x 3.4 cm; 230 g

9. WARRANTY INFORMATION

Please refer to the product packaging or contact the seller for specific warranty details. Generally, electronic products come with a limited warranty against manufacturing defects. Keep your purchase receipt as proof of purchase.

10. CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions, concerns, or require assistance with your YUNCHI C2 Electric Sonic Toothbrush, please contact the seller or manufacturer directly. Their contact information can typically be found on the product packaging or the retailer's website where you made your purchase.