

life is on.

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

フォナック保証制度

| | | 内容 | (お買い上げ日より) 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
|------------------------|----------|---------------------------|---|-----|-----|-----|
| フォナック パート インフィニオ | 90 | 修理サポート*1 | フォナック「プレミアム保証」4年間無償  | | | |
| | | 紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2 | 2年間1台のみ100%保証*3 | | | |
| | 70 | 修理サポート*1 | 2年間無償 | | | |
| | | 紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2 | 2年間1台のみ100%保証*3 | | | |
| | 50/30 | 修理サポート*1 | 2年間無償 | | | |
| | | 紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2 | 1年間1台のみ 100%保証*3 | | | |
| ロジャー | 修理サポート*1 | 2年間無償 | | | | |
| ワイヤレスアクセサリ | 修理サポート*1 | 1年間無償 | | | | |
| 耳あな型補聴器 | 再作サポート | 120日以内 再作無料*4 | | | | |

※積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。

*1：修理サポートは、自然故障が生じた場合、無償にて対応いたします。

*2：紛失・盗難・全損時リニューアルサポートには、保証書のほか、遺失届/盗難届等の証明書類が必要です。

*3：両耳の補聴器をご購入いただいた場合も片耳1台のみ100%保証となります。

*4：お買い上げの日より120日以内に、耳あな型補聴器の形、大きさが耳に合わない場合、無料で調整いたします。

製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8
天王洲パークサイドビル
フォナック カスタマーサービス
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080
許可番号 13B2X10021

フォナック製品のご相談・ご用命は…



フォナックの最新情報はSNSでチェック!



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。

しかし、装着者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

本カタログの内容は2025年9月現在のものです。




028-2804-17

2025095-60000

PHONAK
life is on

A Sonova brand

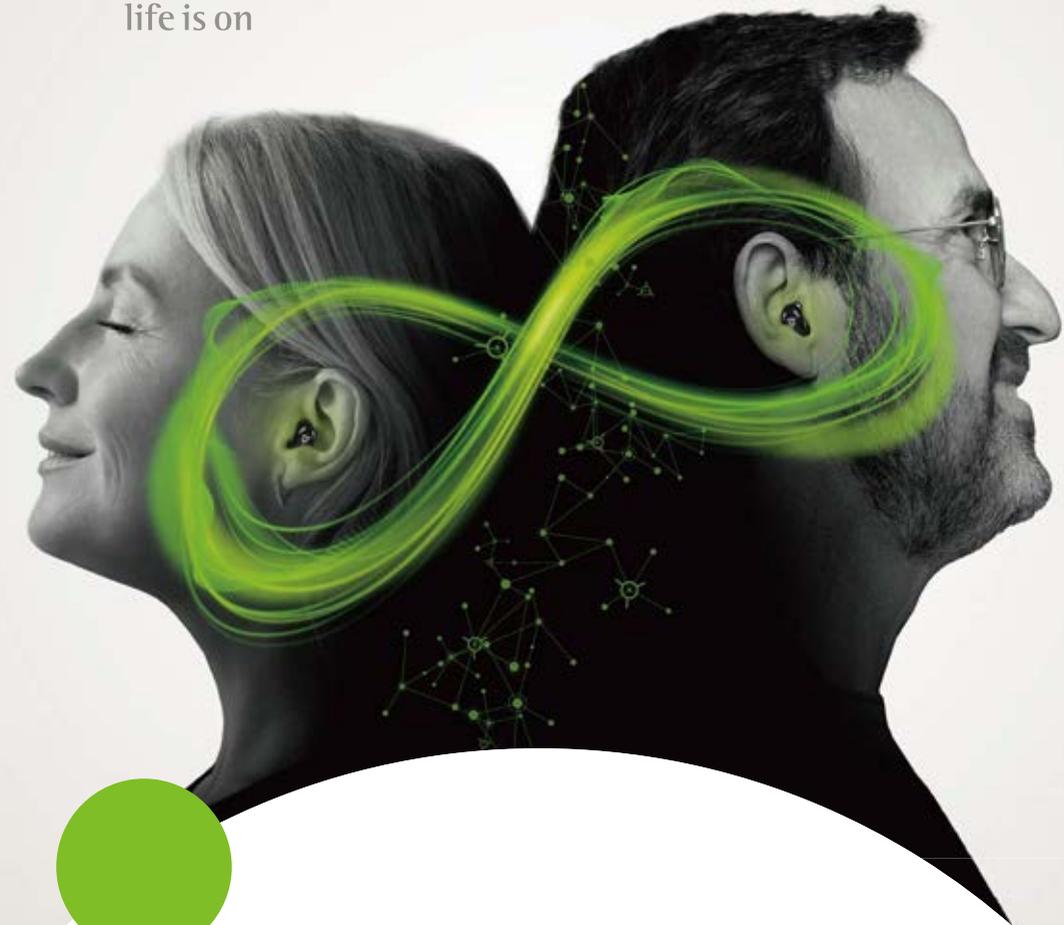

いい音を着こなす。
精緻を極めたモダンをあなたに。

フォナック初の「充電式」フルオーダーメイド補聴器
フォナック パート I-R登場



AIがデザインする あなただけの音と形。



フォナック初の充電式フルオーダーメイド補聴器が
インフィニオ シリーズから登場。

きわめてパワフル&高速なERA^{エラ}™チップを搭載した
「インフィニオ プラットフォーム」は、
音質と接続性を大幅にアップ。

さらに長年にわたるAIの機械学習の成果を生かした
独自のモデリングシステム「ライトフィット」が
一人ひとりの耳に合った
音響効果と形状を導きだします。

高性能なのにコンパクト。

音も、形も、心地よくフィット。

新しいスタイルの耳あな型補聴器が、

あなたの毎日をアクティブに変えていきます。

フォナック バート I-R 新登場

オーダーメイドのきこえ × フォナックのサウンド・クオリティ

- 18倍*の音響サンプルで精度を向上させた「オートセンス OS 7.0」
- その人に合った音質/形状/フィット感を実現する「ライトフィット」
- 途切れない安定したコネクティビティ&ワンステップペアリング
- シンプルで使いやすい充電システム「スナップ チャージ」

*: 従来のオートセンス OS と比較して。



エラ ERA™チップで、 もっとパワフルに。

フォナック パート I-Rは、
パワフル&高速なERA™チップを
耳あな型補聴器として初めて搭載。
サウンド・クオリティとコネクティビティを
飛躍的に進化させました。



サウンド・クオリティ

オートセンス OS 7.0*1

周囲の音環境を1秒間に700回スキャンし、その場に適した音を設定する自動環境適応機能プログラム。7.0は6.0に比べ24%高い精度で音環境を分類。シーンに合わせた“いい音”をブレンドします。

APD 3.0

新しいフィッティング処方方式APD 3.0は、初回装着から93%のユーザーが満足するフィッティング*2を実現しています。

フォナック スマートスピーチ テクノロジー

耳あな型補聴器では初めて、会話をラクに楽しめるフォナック スマートスピーチ テクノロジーの全機能に対応*3。ステレオズーム 2.0、モーションセンサーヒアリング、スピーチセンサーなどにより会話がさらに聞き取りやすくなりました。



コネクティビティ*3

タップコントロール

耳あな型補聴器で初めてモーションセンサーを搭載。これによりタップコントロールが使えるようになりました。ハンズフリー通話の操作は耳または補聴器をダブルタップするだけでOK。音楽ストリーミングの一時停止、再生もタップ操作で行えます。

安定した接続性

ルミティシリーズに比べ最大6倍の送信パワーによって、ストリーミングの距離は最大2倍に拡大。ハンズフリー通話や音声ストリーミングも今まで以上に途切れることなく快適に楽しめます。

ワンステップペアリング

マイフォナック アプリで補聴器とBluetooth®対応機器を簡単に接続することができます。

*1：フォナック パートI-チタン、フォナック パートI-10 NW Oは6.0となります。

*2：Stewart, E., Adler, M., Seitz-Paquette, K. (2024) "Adaptive Phonak Digital (APD) 3.0 is the preferred first fit compared to a leading competitor device". Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence

*3：フォナック パートI-Rのみとなります。

着けた瞬間、“ライトフィット”。



「ライトフィット」は、着用者の耳の形状と聴力に合わせて、AIがベントサイズ、レシーバを選定し、より適切な音質/形状/フィット感を実現する、新しいオーダーメイドアプローチです。初めての装用時から満足いただける“いい音”と可能な限り“小さなサイズ”を、一度の製作プロセスで実現します。さらに、バイオメトリックキャリブレーション、AOV(音響最適化ベント)、AOR(音響最適化レシーバ)などを駆使し、それぞれの耳にあった音響効果も作り出します。



ライトフィット

バイオメトリックキャリブレーション

1600の耳のポイントをもとに耳の形を精密に解析し、あなた専用の音響効果を生み出します。

AOV(音響最適化ベント)

聴力や耳の形に合わせてベント(空気孔)サイズを最適化し、装着感と自然なきこえを向上させます。

AOR(音響最適化レシーバ)

聴力に基づいて適切なパワーレベルを選択する新しいアルゴリズムです。

Made in Japan

パート I-Rは、国内で、熟練の技術者が一つひとつオーダーメイドで制作。すべてのプロセスは、スイス本社が定める世界基準に則って行われています。



先進の機能が、あなたの毎日をスマートに。



フォナック チャージャー パート I 「スナップ チャージ」

パート I-Rの充電器は、シンプルで直感的な使いやすさを追求しています。補聴器を充電器に入れるだけで、磁石で充電ポートにしっかりと固定され簡単かつ安全に充電できます。また、光るLEDランプで充電状況を確認できるので、安心。本体は、とてもコンパクトなので持ち運びも便利です。



roger

ロジャー

ロジャーは騒音下や離れた場所で音声を拾い、ロジャーダイレクト対応のパート I-Rに直接届けてくれます。補聴器とロジャーを一緒に使うと、ことばの理解が最大61%*改善します。



マイフォナック アプリ

アプリをダウンロードすると携帯電話が補聴器用のリモコンになる他、補聴器の音声を自分好みにカスタマイズしたり、リモートサポートなどの機能も活用できます。アプリを使えばBluetooth®対応機器とワンステップペアリングできるので便利です。



詳細情報とダウンロードはこちら



* : Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411. <https://doi.org/10.3766/jaaa.19060>.

「充電式」を加えて、 バート インフィニオはさらに充実。

NEW フォナック バート I-R (M/P/SP/UP)

軽 中 高 重

モダンなデザインの「充電式」。
きこえの機能やコネクティビティも
ワンランク上をお求めの方へ。



指向性

ワイヤレス通信

使用電池：リチウムイオン(充電式)
期待動作時間：24時間*1
(最大動作時間：30時間*2)
ロジャードイレクト対応



充電器

磁石でカチッと固定。
便利な「スナップ チャージ」システム。

フォナック チャージャー
バート I
11,000円(税込)

※バート I-Rを3時間でフル充電できます。



**最大
30
時間**
フル充電で
最大30時間*2使えるから、
出張や旅行でも安心。

カラーバリエーション

<フェイスプレート> ブラック ベージュ ブルー(左耳のみ)
(シェル) ● ブラック ● ベージュ ● ブルー(左耳のみ)
● レッド(右耳のみ) ● クリア

| | | | 補聴器(非課税) | フォナック チャージャー バート I (税込) | 合計 |
|--------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------|
| 190(プレミアム) | 修理保証 4年間 | 紛失等 サポート 2年間 | 20ch 片耳 697,000円 | 11,000円 | 708,000円 |
| 170(アドバンス) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 2年間 | 20ch 片耳 503,000円 | 11,000円 | 514,000円 |
| 150(スタンダード) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 1年間 | 16ch 片耳 362,000円 | 11,000円 | 373,000円 |
| 130(エッセンシャル) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 1年間 | 12ch 片耳 249,000円 | 11,000円 | 260,000円 |

*1：フル充電時。使用状況によって異なります。*2：オートセンス OSで「静かな環境」プログラムのみを使用した場合。



水や汗に強いから安心。

バート インフィニオは、IP68の防塵・防水補聴器です。IP68は、防塵・防水の国際保護等級で、水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています。

NEW フォナック バート I-チタン (M/P/SP)


軽 中 高

「見せたくない」あなたには、強く、薄く、小さい、
フォナックだけのチタン製。



無指向性

使用電池：PR536(10)
電池寿命：55~75時間
シェルタイプ：IIC/CIC

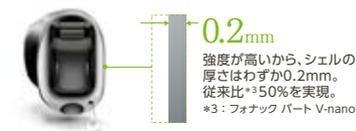

NEW フォナック バート I-10 NW O (M/P/SP)

軽 中 高

シンプル操作で扱いやすく、
目立たないものがないという方に。



無指向性

使用電池：PR536(10)
電池寿命：55~75時間
シェルタイプ：IIC/CIC



カラーバリエーション

<フェイスプレート> ● ブラック(I-チタン、ミニコントロール対応のI-10 NW Oのみ) ● ブラウン
(シェル) ● ブルー(左耳のみ) ● レッド(右耳のみ) ● ベージュ ● クリア ● チタニウムグレー(I-チタンのみ)

| | | | バート I-10 NW O 補聴器(非課税) | バート I-チタン 補聴器(非課税) |
|--------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 190(プレミアム) | 修理保証 4年間 | 紛失等 サポート 2年間 | 20ch 片耳 667,000円 | 片耳 690,000円 |
| 170(アドバンス) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 2年間 | 20ch 片耳 463,000円 | 片耳 486,000円 |
| 150(スタンダード) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 1年間 | 16ch 片耳 354,000円 | |
| 130(エッセンシャル) | 修理保証 2年間 | 紛失等 サポート 1年間 | 12ch 片耳 238,000円 | |

●補聴器は両耳装用をおすすめします。●耳あな型は、耳あなの形状や聴力によって大きさが多少異なります。●I-チタン、I-10 NW Oには通信機能がありません。ワイヤレスアクセサリは使用できません。●Tコイルは無償オプションです。●プログラムスイッチはI-R/I-10 NW Oに標準装備、I-チタンは無償オプションです。●防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。●補聴器は非課税です。
販売名：フォナック バート インフィニオ 管理医療機器認証番号：307ALBZX00008000

主な機能一覧

| 機能名 | フォナック バート I (耳あな型) | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | I90 | | | I70 | | | I50 | | I30 | | |
| | R | チタン | 10NWO | R | チタン | 10NWO | R | 10NWO | R | 10NWO | |
| フォナック スマートスピーチテクノロジー | オートセンス OS | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| | スピーチセンサー*1 | ● | | | | | | | | | |
| | スピーチエンハンサー | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | ステレオズーム2.0*1 | ● | | | ● | | | | | | |
| | ダイナミックノイズキャンセル | ● | | | ● | | | | | | |
| | モーションセンサーヒアリング | ● | | | ● | | | ● | | | |
| | ロジャーダイレクト | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| | ウルトラズーム (33ch) | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| その他 | ノイズブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ホイッスルブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ウインドブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | サウンドリカバリー2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | タップコントロール | ● | | | ● | | | | | | |
| | Bluetooth® | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| | 防塵・防水 (IP68) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | リチウムイオン充電池 | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| | リモートサポート | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| | マイフォナック アプリ | ● | | | ● | | | ● | | ● | |

性能一覧

| 製品名 | 最大音響利得 (50dB入力) | | 90dB入力最大出力 音圧レベル | | 誘導コイル 感度 | 使用 電池 | 期待動作 時間/ 電池寿命 (時間) | |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | 最大値(ピーク値) (+ 3dB以下) | HFA-FOG (± 5dB以内) | 最大OSPL90 (+ 3dB以下) | HFA-OSPL90 (± 4dB以内) | HFA MASL (± 6dB以内) | | | |
| フォナック バート I (耳あな型) | R M | 40 | 35 | 109 | 103 | — | リチウムイオン (充電式) | 24*2 |
| | R P | 50 | 46 | 115 | 111 | — | リチウムイオン (充電式) | 24*2 |
| | R SP | 60 | 54 | 119 | 114 | — | リチウムイオン (充電式) | 24*2 |
| | R UP | 70 | 62 | 127 | 120 | — | リチウムイオン (充電式) | 24*2 |
| | チタン M | 40 | 35 | 109 | 103 | 60 | PR536(10) | 55~75 |
| | チタン P | 50 | 46 | 115 | 111 | 71 | PR536(10) | 55~75 |
| | チタン SP | 60 | 54 | 119 | 114 | 79 | PR536(10) | 55~75 |
| | 10 NWO M | 40 | 35 | 109 | 103 | 60 | PR536(10) | 55~75 |
| | 10 NWO P | 50 | 46 | 115 | 111 | 71 | PR536(10) | 55~75 |
| | 10 NWO SP | 60 | 54 | 119 | 114 | 79 | PR536(10) | 55~75 |

*1：両耳装着時の機能です。

*2：フル充電時。使用状況によって異なります。

●本データはJIS C 5512:2015の2cm³カブラにより測定、表示してあります。

●フィッティングソフトウェアは、Phonak Target 11.0以上です。

●詳しくは当社ホームページを
ご覧ください。
www.phonak.com/ja-jp

